



Электрическая зубная щетка

paru

Инструкция к применению

Правила пользования


Смочите головку щетки и нанесите на нее зубную пасту. Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите головку зубной щетки к зубам, затем включите ее. Сначала очистите внешние поверхности зубов, затем внутренние и завершите чисткой жевательных поверхностей зубов.



Уход за зубной щеткой

После использования необходимо тщательно промыть головку щетки. Стряхнуть остатки воды и оставить в вертикальном положении. Рекомендуется менять насадку каждые 2-3 месяца по мере изнашивания.

Круглая головка обеспечивает 3D чистку каждого зуба, удаляет налет между зубами; Мягкие щетинки для бережной чистки зубов и десен; Облегченная ручка для комфортного использования.

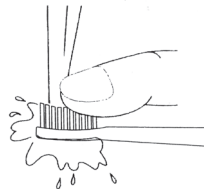

Комплектация

- Электрическая зубная щетка
- 3 сменные насадки
- Инструкция
- USB кабель
- Чехол для хранения



Зубная щетка автоматически отключится через 2 минуты работы.

Зубная щетка запоминает последний режим чистки и воспроизводит его при следующем включении.

Долгим нажатием на кнопку включения, будут переключаться режимы и мощность. Когда режим будет выбран, удерживая кнопку включения, будет переключаться интенсивность режима.

Световой индикатор Intensity/charge будет менять цвета при переключении по мощностям.

Красный цвет – слабая мощность, оранжевый цвет – средняя мощность, зеленый цвет – сильная мощность.

Зарядка



Вставьте один конец USB-кабеля в зарядное устройство для телефона или компьютера. Подключите другой конец к нижней части зубной щетки, для полной зарядки необходимо 6 часов. Чтобы узнать разряжена щетка

Параметры продукта

Название продукта:

Электрическая зубная щетка PARU

Напряжение: 1,5 В

Мощность: 1 Вт

Условия хранения: хранить при температуре от -5°C до 25°C, относительной влажности воздуха 75%.

Меры предосторожности

- Держите зубную щетку в недоступном для детей месте
- Не извлекайте элементы питания влажными руками
- Замените сменную насадку зубной щетки, если крепление ее головки ослабло в результате повреждения
- Использовать по назначению

Режимы

Устройство имеет 5 режимов работы и 3 режима мощности:

Clean	глубокое очищение, комплексная чистка зубов
Polish	удаление налета с зубов
White	устранение пятен и бактерий
Gumcare	цикл вибрации от сильной до слабой для мягкой стимуляции десен
Sensitive	бережная чистка чувствительных зубов и десен