

Данный прибор предназначен для проведения разминающего роликового массажа разных частей тела человека (массаж типа «Шиаци»). Массаж осуществляется при помощи 4-х массажных роликов в 3-х режимах.

Механизм прибора производит интенсивные разминающие движения внутрь и наружу, массирует проблемный участок и воздействует на важные точки тела, благодаря чему – устраняется общая усталость организма, снижается напряжение в массируемом участке тела, происходит облегчение болевых ощущений в мышцах. Прогревание массируемого участка позволяет улучшить состояние человека при различных острых и хронических заболеваниях, болях, а также получить максимальное удовольствие от массажа.

Используя массажную подушку, вы сможете самостоятельно проводить эффективные массажные процедуры не только в домашних условиях, но и в условиях офиса, а с помощью автомобильного адаптера вы сможете использовать прибор во время поездок и путешествий на автомобиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:


Характеристики: Материал: пенополиуретан, полиэстер, АВС пластик, металл.
 Размер: 32x19x10 см
 Работает от сети 220В или от автомобильного прикуривателя 12В (адаптеры в комплекте).
 Входное напряжение: АС 12В, 100-240В, 55 Гц.
 Выходное напряжение: DC 14В
 Мощность: 24 Вт
 Количество массажных роликов: 4
 Количество режимов: 3
 Направление вращения массажных роликов: 2 (с прогревом и без)
 Тип управления: Электронный, одной кнопкой
 Комплектация: Массажная подушка, адаптер для сети 220 В, адаптер для работы от автомобильного прикуривателя, инструкция
 Срок службы: 1 год

Дата покупки	
Гарантия	6 месяцев
Дата обращения	
Номер телефона	8(800)234-62-43



Отсканируйте QR-код и свяжитесь с нами, если остались вопросы по использованию массажера!

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА

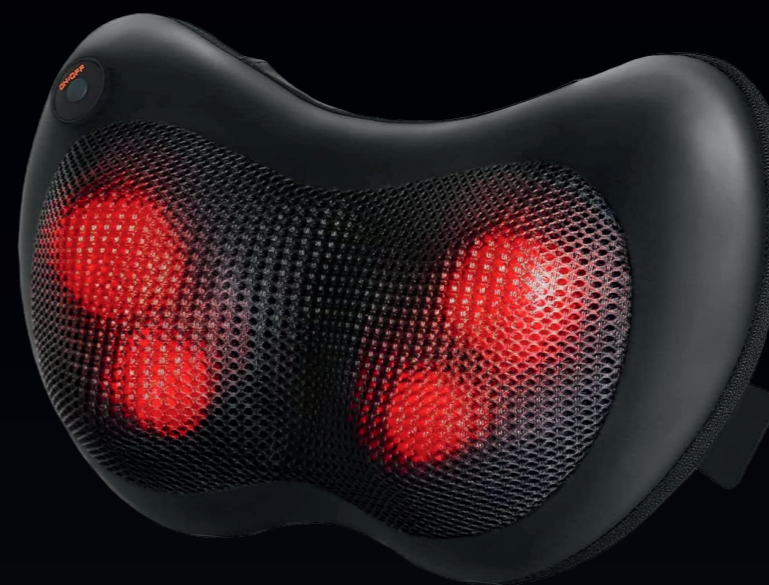

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- | | |
|--|---|
| 1. Корпус подушки; | 6. Широкая резинка для фиксации на спинке стула или кресла; |
| 2. Чехол на молнии; | 7. Кнопка «Вкл/выкл»; |
| 3. 4 массажные ролика; | 7.1. Вращение роликов внутрь, прогрев; |
| 4. Адаптер для сети 220В; | 7.2. Вращение роликов наружу, прогрев; |
| 5. Адаптер для работы от автомобильного прикуривателя; | 7.3. Вращение без подогрева; |
| | 7.4. Выключение. |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Подключите штекер выбранного адаптера к разъему питания прибора;
- 2) Включите сетевой адаптер массажной подушки в электросеть;
- 3) Закрепите массажер на спинке стула или кресла, расположите его на шее (или других частях тела);
- 4) Нажмите кнопку «ON/OFF». Массажные ролики будут вращаться внутрь, функция подогрева включена;
- 5) Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз. Массажные ролики будут вращаться наружу, функция подогрева включена;
- 6) Нажмите кнопку «ON/OFF» в третий раз. Массажные ролики будут также вращаться наружу, функция подогрева выключена;
- 7) Длительность массажа – 15 мин., но не более 30 мин.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой массажной подушки извлеките штекер питания из розетки. Протирайте и очищайте прибор только мягкой чуть влажной тканью;

- После очистки протрите прибор насухо;
- Не используйте для ухода абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства;
- Прибор лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом месте.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Методы устранения
Прибор не включается	Адаптер питания не вставлен в электрическую розетку / автомобильный адаптер не вставлен в гнездо питания прикуривателя. Не плотный контакт адаптера с электрической розеткой / гнездом питания прикуривателя. Нет питания в электрической розетке / в прикуривателе.	Удостоверьтесь, что адаптер питания прибора вставлен в электрическую розетку / гнездо питания прикуривателя. В случае необходимости извлеките адаптер и вставьте его снова. Убедитесь, обеспечивается плотный контакт адаптера с электрической розеткой / гнездом питания прикуривателя. Удостоверьтесь, что обеспечивается плотное соединение разъема питания прибора со шнуром адаптера.
Появление покраснений на коже	Процедура продолжалась слишком долго. Ваша кожа слишком чувствительна к прогреву.	Продолжительность массажа каждого участка не должна превышать 5 минут, а общая продолжительность массажа не более 15 минут при каждом использовании. Используйте прибор в режиме массажа без функции подогрева. Сократите время использования функции подогрева за сеанс.
Массажер слишком горячий	Долгое применение прибора	Отключение массажной подушки от сети на 30 мин.