



Детская электрическая зубная щетка



Инструкция к применению




Правила пользования

Смочите головку щетки и нанесите на нее зубную пасту. Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите головку зубной щетки к зубам, затем включите ее. Сначала очистите внешние поверхности зубов, затем внутренние и завершите чисткой жевательных поверхностей зубов.



Круглая головка обеспечивает 3D чистку каждого зуба, удаляет налет между зубами; Мягкие щетинки для бережной чистки зубов и десен; Облегченная ручка для комфортного использования.

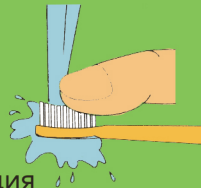

Комплектация

-  Детская электрическая зубная щетка
-  4 сменные насадки
-  Инструкция
-  USB кабель
-  Раскраска



Режимы

Устройство имеет 5 режимов работы:

Clean	глубокое очищение, комплексная чистка зубов
White	устранение пятен и бактерий
Comfy	бережная чистка чувствительных зубов и десен
Milder	цикл вибрации от сильной до слабой для мягкой стимуляции десен
Solid	интенсивная чистка зубов

Зубная щетка автоматически отключится через 2 минуты работы.

Зубная щетка запоминает последний режим чистки и воспроизводит его при следующем включении.

Когда индикатор зряда мигает, значит в щетке мало мощности и ее необходимо зарядить.

Зарядка



Вставьте один конец USB-кабеля в зарядное устройство для телефона или компьютера. Подключите другой конец к нижней части зубной щетки, для полной зарядки необходимо 6 часов.

Параметры продукта

Название продукта:

Детская электрическая зубная щетка PARU

Напряжение: 1,5 В

Мощность: 1 Вт

Условия хранения: хранить при температуре от -5°C до 25°C, относительной влажности воздуха 75%.



Меры предосторожности

- Детям младше 3-х лет пользоваться щеткой запрещено
- Дети от 4-6 лет нуждаются в родительском контроле
- Не извлекайте элементы питания влажными руками
- Замените сменную насадку зубной щетки, если крепление ее головки ослабнов результате повреждения
- Использовать по назначению

