

REVYLINE

RL 045

SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Effective daily oral hygiene

Ежедневный эффективный
уход за полостью рта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая зубная щетка Модель: RL 045

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 3 режима работы – Sensitive, White, Polish
- 3 уровня интенсивности
- Частота колебаний щетинок – 32 000–36 000 в мин.
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита IPX7
- Питание – литиево-ионный аккумулятор (1200 mAh)
- Потребляемая мощность – 2,1 Вт
- Номинальное напряжение – 3,7 В
- Время полной зарядки – 6 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 90 дней.
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

Более подробная информация о мерах предосторожности, предупреждениях медицинского характера, зарядке аккумулятора, процессе чистки, уходе за зубной щеткой, гарантийных случаях – на сайте.


www.revyline.ru

СОБЕРИ СВОЮ ЛУЧШУЮ

ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

Ирригаторы

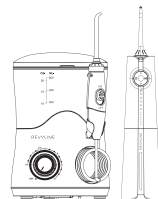


Ирригатор генерирует пульсирующую водную струю под давлением, которая вымывает зубной налет и микрочастицы пищи из самых труднодоступных мест ротовой полости, включая зубодесневую борозду и межзубные промежутки. При этом происходит гидромассаж десен.

Мануальные щетки



При выборе мануальной щетки важно обращать внимание на следующее: у вашей щетки должна быть высокая плотность щетины (не менее 5000–6000 щетинок), кончики щетинок должны быть скругленными, а головка – компактной.

Монопучковые щетки

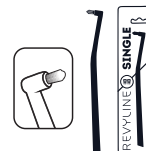

Монопучковая щетка используется для точечного очищения зубов, особенно дальних, межзубных промежутков, а также придесневой линии. Она незаменима при уходе за брекетами и другими ортодонтическими конструкциями.

Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное средство ухода за полостью рта. К ее выбору нужно подходить индивидуально, учитывая состав, предназначение, уровень абразивности и прочее.

Зубные нити



Нить эффективно очищает пространства между зубами. В ассортименте Revyline – плоские и круглые, вощеные и невоощеные нити.

Скребки для языка



Скребок удаляет бактериальный налет с поверхности языка, что предотвращает развитие целого ряда стоматологических заболеваний.

Межзубные ершики



Ершик эффективен при очищении межзубных промежутков и боковых поверхностей зубов, незаменим при уходе за несъемными ортодонтическими конструкциями, имплантатами и оголенными шейками зубов.

Бальзамы и ополаскиватели



Бальзамы и ополаскиватели предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний. Используются как средства для ополаскивания полости рта и для приготовления растворов для процедур ирригации.

REVYLINE

Спасибо, что выбираете Revyline!

Благодаря вам мы не просто развиваем наш бренд – мы делаем гигиену полости рта эффективной, осознанной и доступной каждому, мы получаем возможность поддерживать школы и детские сады, больницы и детские дома, а также – самые разные благотворительные и учебные проекты.



Вместе с вами мы дарим улыбку тем, кому она особенно необходима!

Максим Обушенков,
врач-стоматолог,
руководитель компании
Revyline (основана в 2013 году)



Каждый товар Revyline имеет сертификат качества.



Гарантия на все электрические приборы бренда Revyline – 2 года.



Сервисные центры Revyline есть на всей территории России.

Напишите о Ваших впечатлениях о купленном приборе на той площадке, где Вы приобрели его, пришлите ссылку на опубликованный отзыв в WhatsApp +7 969 010 30 87

и получите **200 руб.**
на Ваш телефон за отзыв!

Если вдруг что-то пойдет не так, просто позвоните:

+7 969 010 30 87

Всегда с Вами, Ваш Revyline

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru



Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

ИНСТРУКЦИЯ

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем на корпусе щетки.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.

Во время зарядки аккумулятора происходит мигание индикаторов уровней интенсивности. При неполной зарядке мигают один, два или три индикатора (в зависимости от уровня заряда). Если аккумулятор полностью заряжен, горят, не мигая, все три индикатора.

Щетка работает до 90 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.)

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации зубной щетки RL 045 1 стандартная насадка.

Внимание! Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

Включение/выключение прибора и выбор режима работы

Нажмите кнопку управления, чтобы включить щетку.


Выбор необходимого режима работы осуществляется с помощью кнопки управления.

Любой последний выбранный режим сохраняется в памяти и при последующем использовании щетки включается в первую очередь.

Во всех режимах есть три уровня интенсивности: низкий, средний, высокий. Выбор интенсивности осуществляется длительным нажатием кнопки управления в каждом из режимов.

Чтобы выключить щетку, нажмите кнопку управления еще раз.

В щетку встроен таймер, благодаря которому автоматическое отключение питания происходит через 2 минуты работы прибора. Каждые 30 секунд щетка делает небольшую паузу, позволяя сменить зону чистки.

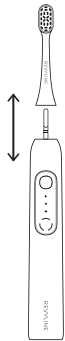

Электрическая зубная щетка RL 045 позволяет использовать 3 режима работы:

SENSITIVE

Бережный режим чистки. Подходит для чувствительных зубов. Рекомендован для использования в период привыкания к электрической модели.

WHITE

Режим отбеливания. Возвращает зубам естественную белизну. Предотвращает образование пигментных пятен на эмали.

POLISH


Режим полировки эмали. Придает зубам блеск и красоту. Борется с образованием зубного налета и развитием кариеса.

Процесс чистки

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.

Наночите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив ее параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко.

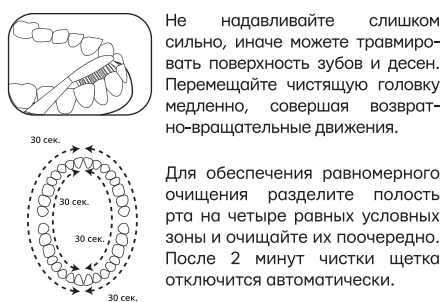

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

Предупреждения медицинского характера

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования щетки являются нормой. Если они сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили имплантаты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

Уход за зубной щеткой

- Регулярно очищайте зубную щетку RL 045.
- Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе.
- Не трите щетину, чтобы не деформировать ее.
- Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше +40°C.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
- Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °C до +20 °C.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок щетки

1 сменная насадка

Кабель USB Type-C

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 www.revylines.ru

Импортер/ Importer: ООО "МГАДЖЕТ", 140002, г.Люберцы, Октябрьский проспект 20, корп. 2 / MGADGET LLC, 140002, Lyubertsy city, Otkyabrski prospect 20, bld. 2

Импортер в Казахстане / Kazakhstan Importer: TOO "МГАДЖЕТ КЗ", г. Республика Казахстан, г. Алматы, ул., Чаплина 71/66 / LLP MGADJET KZ, Republic of Kazakhstan, Almaty, st., Chaplina 71/66

Дата производства/Manufacturing date: Август 2024 / August 2024

Manufacturer/Производитель: Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd., Room 202, Building 1, No.36 Caixin Road, Daojiao Town, Guangdong Province, China/Китай Сделано в Китае