



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF RESTED



Универсальная
массажная подушка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- Всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- Не используйте во время купания или душа;
- Не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- Не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- Не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду. Немедленно отключите его;
- На массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- Убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- Тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. Не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- Храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- Не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- Следите, чтобы шнур питания не заземлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- При хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;
- Если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- Отключайте массажер от электросети во время грозы;

- Не накрывайте устройство во время его работы;
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для профессионального лечения;
- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не используется;
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем;
- Массажер предназначен для взрослых;
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера;
- Не используйте продукт, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо;
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа, чтобы успокоить уставшие и ноющие мышцы. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваше недомогание не проходит или ухудшается после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу;
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме;
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера;
- Не используйте это устройство более 20 минут подряд;
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями. Не используйте при наличии недиагностированной боли в спине;
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять массажером;
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Для того, чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер;
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли;
- Не используйте на улице;
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть;
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство;
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер универсальный	1 шт.
Адаптер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

3. УСТРОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОРТАТИВНОГО МАССАЖЕРА

1. Кнопка управления;
2. Массажные ролики (8 роликов);
3. Застежка;
4. Ручка;
5. Кабель питания;
6. Адаптер;
7. Кабель питания (вид сзади);
8. Эластичная застежка.

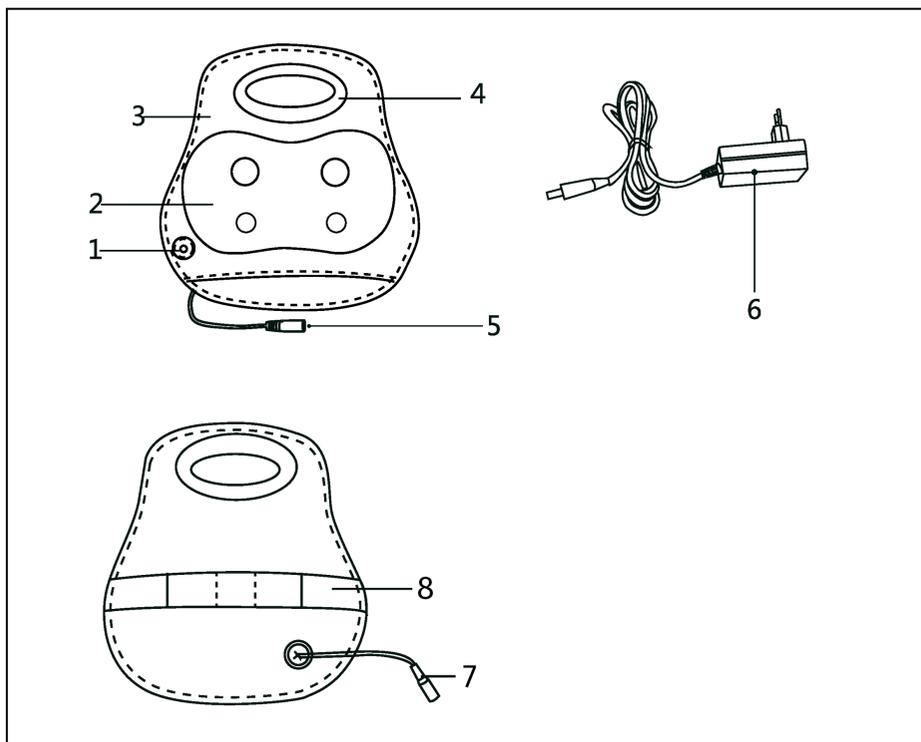


Рисунок 1 – Устройство универсального портативного массажера

4. ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

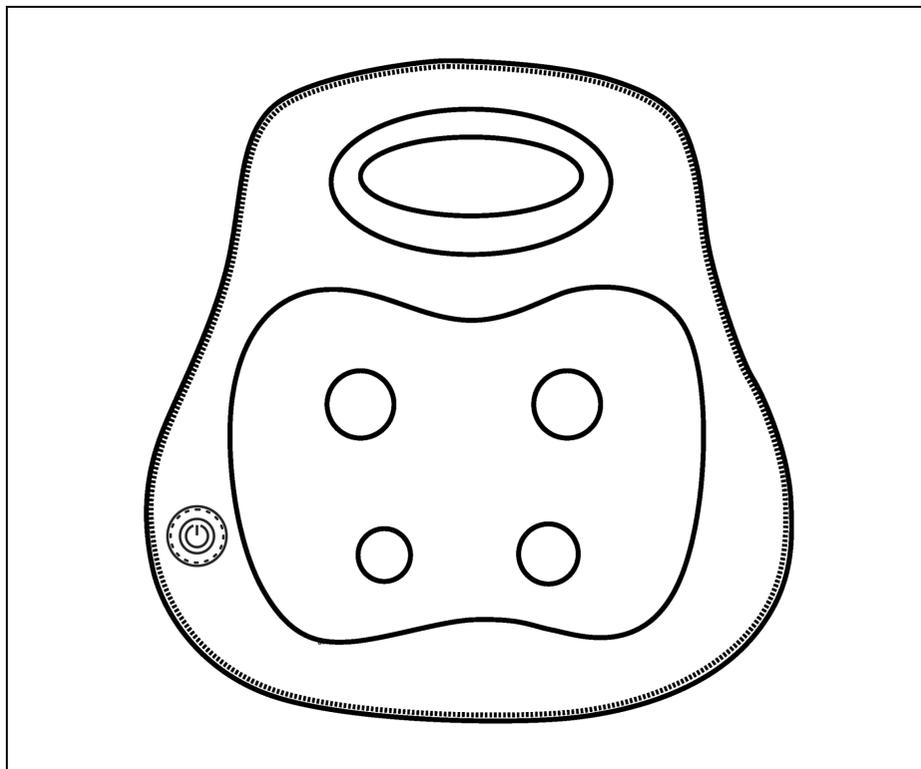


Рисунок 2 — Вид массажера

- Два вида роликового массажа — разминающий и шиацу;
- Ролики автоматически изменяют направление вращения;
- Функция прогрева;
- Таймер на 15 минут.

5. УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕРОМ

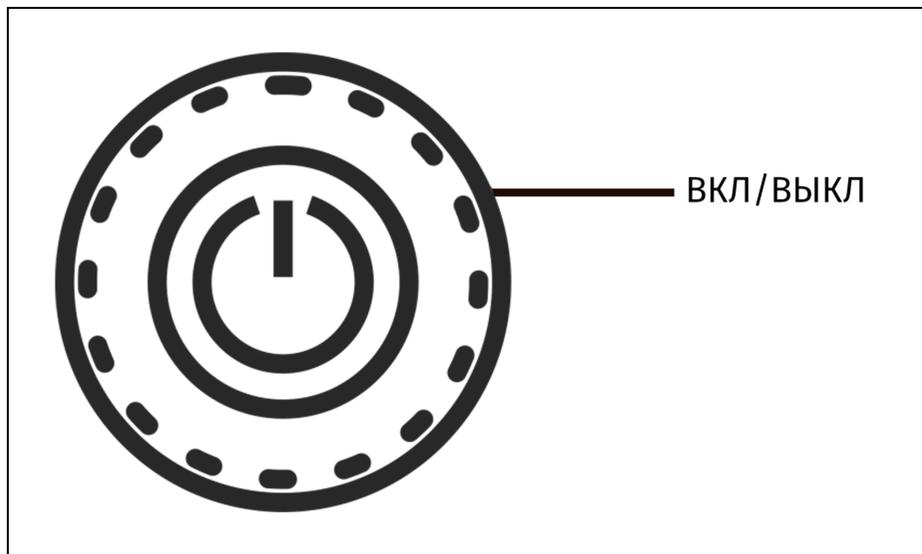


Рисунок 3 — Кнопка запуска массажера

Для управления массажером предусмотрена одна кнопка:

- Нажмите кнопку для запуска массажера. Включится режим разминающего и шиацу массажа;
- Нажмите кнопку повторно для включения прогрева;
- Нажмите третий раз для выключения прогрева;
- Нажмите и удерживайте кнопку для выключения массажера.

6. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖЕРА

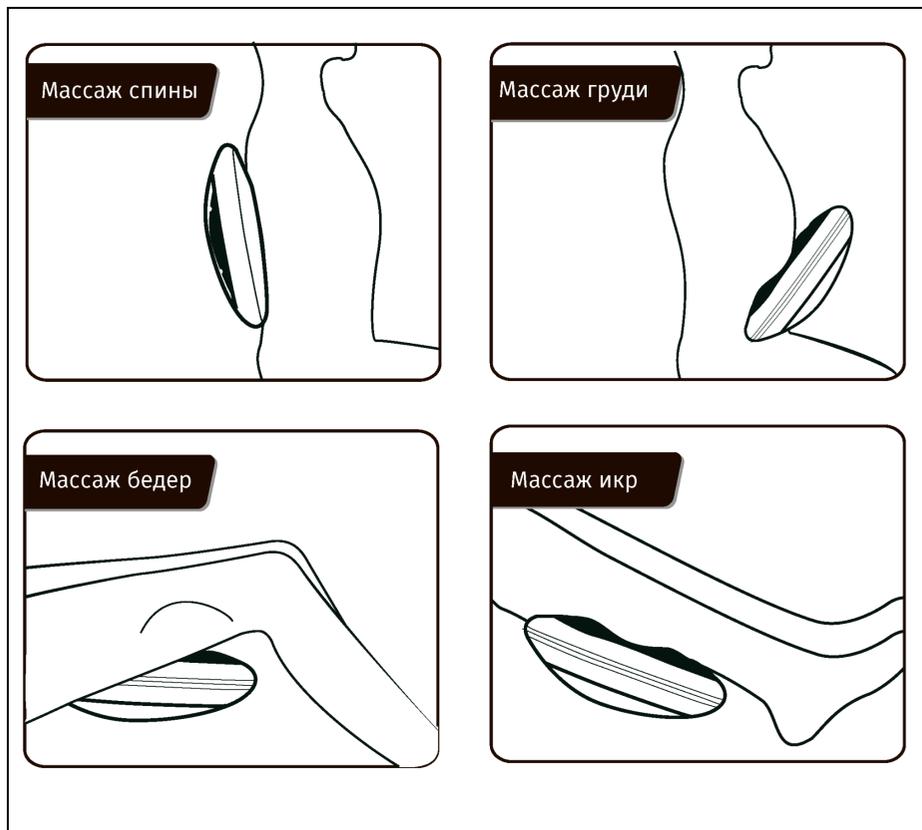


Рисунок 4 — Способы использования массажера

7. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте;
- Достаньте массажер из коробки;
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖЕРА

8.1 Подготовка к использованию

- Разместите массажер в удобном для вас положении;
- Соедините кабель питания с адаптером. При этом должен раздаваться характерный щелчок;
- Вставьте вилку адаптера в розетку (АС 220В, 50 Гц);
- Нажмите на кнопку для включения устройства.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает.	Кабель питания не подключен.	Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.
	Не нажата кнопка питания.	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
	Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Массажер перегревается.	Массажер перегружен. Такое может случиться, если на него встать или положить на него тяжелый предмет.	Отсоедините кабель питания и уберите лишний вес. Подсоедините кабель питания и запустите массажер.
	Было выполнено несколько циклов по 15 минут.	Отсоедините кабель питания и дайте массажеру остыть. Отсоединяйте кабель питания после каждого использования массажера.

10. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Массажные ролики	8 роликов
Функция прогрева	Да
Роликовый массаж	Да
Массаж шиацу	Да
Таймер	Автоотключение через 15 минут
Размер (Д*Ш*В), см	36х35х11
Вес нетто, кг	1,8
Вес брутто, кг	2,3
Размер упаковки, см	37х35х11
Напряжение питания	220В/12В 2А
Мощность, Вт	24

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	Orlauf
Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	24 месяца
Срок службы	До 10 лет

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orkauf.com

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



