



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

# ORLAUF ELECT HAND



Массажер для рук

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



*Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного массажера. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.*

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### 1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- Всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- Не используйте во время купания или душа;
- Не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- Не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- На массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- Убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- Тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. Не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- Храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- Отключайте массажер от электросети во время грозы;
- Не накрывайте устройство во время его работы;
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

### 1.2 Правила использования массажера

- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не заряжается;
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем;
- Массажер предназначен для взрослых;

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера;
- Массажер не предназначен для лечения, так как не является медицинским прибором;
- Не используйте массажер, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствовали себя плохо;
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваши недомогания и симптомы не проходят или ухудшаются после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу;
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта массажа или травме;
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера;
- Не используйте устройство более 20 минут подряд;
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями;
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять массажером;
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром;

### 1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Для того, чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер;
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли;
- Не используйте на улице;
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть;
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство;
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для рук	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.



Рисунок 1 — Комплектация

### 3. ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА

- Интеллектуальное давление;
- Функция прогрева;
- Три программы массажа — Обновление, Оздоровление и Расслабление;
- 3 уровня интенсивности массажа;
- Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор;
- Кнопочная панель управления.

## 4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА



Рисунок 2 — Управление



**Кнопка питания.** Нажмите для включения массажера. Автоматически запустится программа «Обновление». Повторно нажмите для выключения массажера;



**Таймер.** Предустановленное время массажа — 15 минут. Нажмите на кнопку таймера и задайте время выключения прибора (5/10/15 минут);



**Прогрев.** Нажмите для включения или выключения прогрева;



**Интенсивность.** Нажмите для выбора между низкой (L), средней (M) и высокой (H) интенсивностью лимфодренажного массажа. На дисплее загорится соответствующий индикатор;



**Режим.** Нажмите для переключения между режимами массажа:

- **M1:** Обновление. Массаж рук и запястий;
- **M2:** Оздоровление. Упор на массаж кистей рук, массаж с высокой интенсивностью;
- **M3:** Расслабление. Упор на массаж запястий.

## 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПУСКУ ВОЗДУХА ИЗ ПОДУШЕК

1. Режим по умолчанию — OFF. Это обеспечивает раскрытие подушек и сжатие воздуха;
2. Клапан выпуска воздуха установлен только для аварийного использования. Включите ON, чтобы быстро сдуть подушки;
3. Если подушки не работают, проверьте клапан и убедитесь, что он в положении OFF.



Рисунок 3 — Выпуск воздуха



**Внимание!** Массажер не должен использоваться во время зарядки.

- Проверьте, достаточно ли заряда, до начала работы с массажером.
- Полностью зарядите массажер перед первым применением.

## 6. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте;
- Достаньте массажер из коробки;
- Полностью зарядите массажер перед первым применением, как показано в инструкции ниже;
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

## 7. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

- Подключите разъем зарядного кабеля к порту Type-C, а другой конец — к порту USB;
- Включите питание. Индикатор питания начнет мигать белым цветом, а когда батарея будет полностью заряжена, индикатор питания будет гореть постоянно;
- Разъем немного нагревается во время зарядки;
- Полностью зарядите массажер перед использованием. Время зарядки составляет 3-4 часа. Вовремя отсоедините зарядный кабель после полной зарядки.

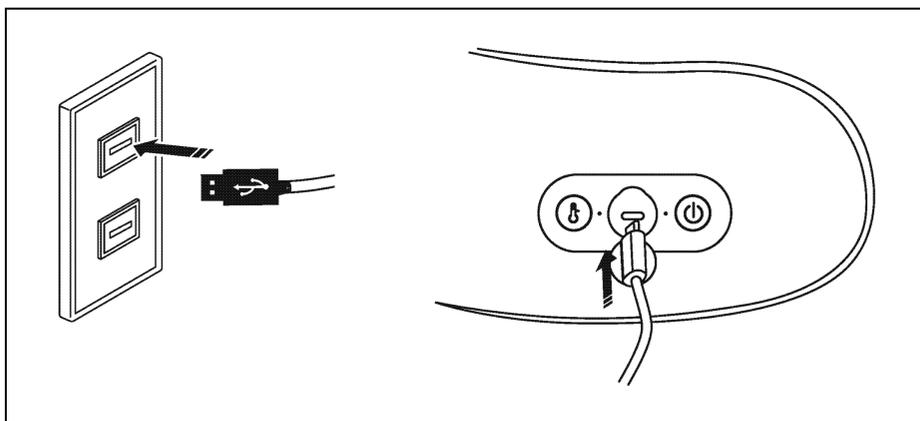


Рисунок 4 — Зарядка массажера



**Важно!**

Когда зарядка завершена, отсоедините зарядный кабель.  
Не используйте массажер, пока он заряжается.

## 8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумуляторов.

### **Обращение с аккумуляторами:**

- При контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью;
- Взрывоопасно! Никогда не бросайте аккумуляторы в огонь;
- Не разбирайте, не открывайте и не ломайте аккумуляторы;
- Используйте только входящее в комплект зарядное устройство;
- Перед первым использованием аккумуляторы должны быть полностью заряжены;
- Необходимо постоянно следить за правильной зарядкой;
- Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажера. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает	Низкий уровень заряда устройства.	Зарядите устройство.
	Массажер только что завершил работу (прошло 15 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Нажмите кнопку питания
Массажер перегревается	Было выполнено несколько циклов по 15 минут. Слишком долго работает режим прогрева.	Выключите массажер и дайте ему остыть.
Не надуваются подушки воздушно-компрессионного массажа	Проверьте, что положение клапана аварийного сброса воздуха находится в положении OFF.	

## 10. СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Функция прогрева</b>	Да
<b>Таймер</b>	Время массажа 5, 10, 15 минут
<b>Размер (Д*Ш*В), см</b>	17x28x12
<b>Вес нетто, кг</b>	0,9
<b>Вес брутто, кг</b>	1,2
<b>Размер упаковки, см</b>	19x30x14
<b>Батарея</b>	2600 мАч
<b>Питание</b>	5В 2А
<b>Мощность</b>	10 Вт

<b>Производитель</b>	Orlauf
<b>Поставщик/Импортер</b>	Orlauf
<b>Импортер</b>	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
<b>Завод-изготовитель</b>	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
<b>Страна изготовления</b>	КНР
<b>Дата изготовления</b>	Указана на этикетке
<b>Гарантия</b>	24 месяца
<b>Срок службы</b>	До 10 лет

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте [www.orkauf.com](http://www.orkauf.com)

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



