


ИНСТРУКЦИЯ К ПОРТАТИВНОМУ ИРРИГАТОРУ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

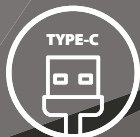

TYPE-C



x2



6 РЕЖИМОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА - 1

НАСАДКИ - 8

ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ TYPE-C - 1

ИНСТРУКЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКТА И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН - 1

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ - 1

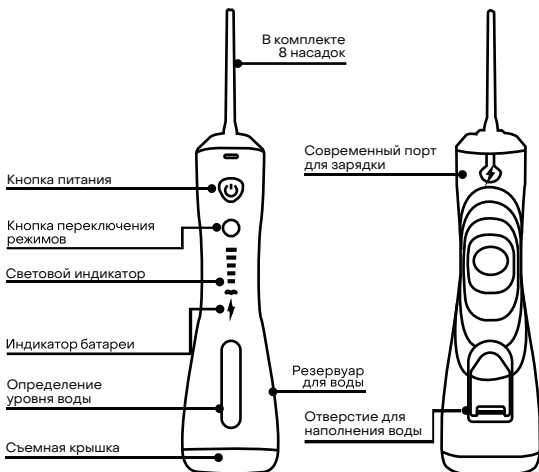

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При использовании ирригатора в первый раз, десна могут кровоточить, так как получают эффект стимуляции. При первом применении рекомендуем использовать режим Soft.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не разбирайте и не меняйте детали, чтобы избежать повреждения ирригатора.
2. Не заливайте горячую воду свыше 50 ° C в резервуар для воды для дальнейшей чистки полости рта, чтобы избежать ожогов.
3. Не повреждайте и не модифицируйте кабель питания, а также не растягивайте и не перекручивайте. Держите устройство и кабель подальше от горячих предметов.
4. Храните ирригатор в сухом месте при комнатной температуре.
5. Если устройство не используется в течении длительного времени, отсоедините его от зарядного устройства.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Использовать по назначению.
8. Если у вас имеются заболевания полости рта, проконсультируйтесь с врачом перед применением.
9. Избегайте попадания струи в глаза.
10. Не используйте без насадки.

НАСАДКИ



Стандартная насадка – 2 шт.
для ежедневной чистки



Пародонтальная насадка – 2 шт.
для глубокой чистки



Ортодонтическая насадка – 2 шт.
для чистки брекетов



Насадка – 2 шт.
для чистки языка



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

🌐 PARU.PRO

✉ MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU

☎ + 7 938 313 15 69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Наименование	Портативный ирригатор	Модель	PARU ML 16
Диаметр насадки	0.6mm	Частота импульсов	1600пульс/мин
Давление воды	40—140PSI	Емкость резервуара	250 ml
Емкость батареи	1100mA	Шум	72db
Входные параметры	5V—0,5A	Номинальная мощность	8W
Зарядный порт	Type-c	Время зарядки	Около 4 часов
Уровень влагозащиты	IPX7	Кол-во режимов	6 режимов
Размер продукта (Высота*ширина*толщина)	218*76*64мм	Вес нетто	262 г

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Проблема	Возможные причины	Решение
Не работает	Продукт только куплен и не был в использовании более 3 месяцев	Поставьте устройство на зарядку на 4 часа
Низкое давление воды во время работы	Внутри насадки заблокировало канал и привело к деформации	Замените насадку
Аккумулятор можно использовать только в течение короткого времени при полной зарядке	Срок службы батареи подходит к концу	Обратитесь к продавцу
	Недостаточное время зарядки	Заряжайте более 4 часов перед использованием
Индикатор зарядного устройства не загорается при подключении в розетку	Вилка питания вставлена неправильно	Вставьте вилку питания правильно
	Неисправна схема зарядки устройства	Обратитесь к продавцу

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


1. Установите насадку

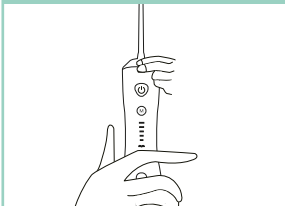


2. Откройте крышку резервуара, чтобы наполнить его водой. Наиболее безопасный метод – заливание в бак кипяченной воды

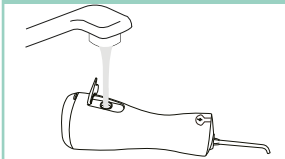

3. Выберите необходимый режим

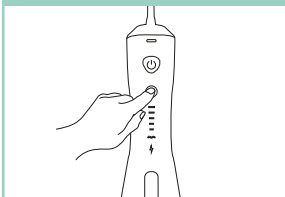


4. Вставьте насадку в рот и нажмите кнопку питания, чтобы включить напор воды, рекомендовано использовать изделие при закрытом рте

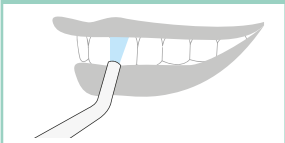

5. Откройте заднюю крышку водоспуска для очистки. (Рекомендуем очищать ирригатор каждые 20 дней)



6. Чтобы открыть крышку водоспуска: 1. Нажмите на кнопку 2. Сдвиньте крышку резервуара для воды

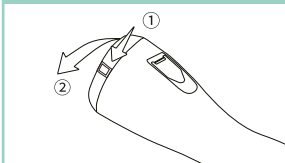

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА

Режим	Направление использования	Давление воды
Деликатный	Для начинающих пользователей	40–60 PSI
Защитный	Подходит для чувствительных зубов	60– 80 PSI
Мягкий	Мягкий напор воды для бережного очищения	80–100 PSI
Стандартный	Сильный напор воды для глубокой чистки зубов	100–120 PSI
Сильный	Сильный напор воды, эффективная очистка, удовлетворяющая требованиям ежедневной чистки для большинства людей	100–140 PSI
Импульсный	Переменная частота импульсного давления, чередование сильного и слабого режима, позволяет глубоко очищать и массировать десны	80–100 PSI
Индикатор батареи	1. Индикатор загорается красным при отключении питания 2. Индикатор мигает красным во время зарядки 3. Индикатор загорается голубым при зарядке 20–80% 4. При полной зарядке индикатор загорается зеленым	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИРРИГАТОРА

1. НАСАДКА

Нажмите кнопку насадки, снимите её, промойте водой, а затем вытрите насухо тканью.

Рекомендуем менять насадку каждые 6 месяцев.

Если верхняя часть сопла деформирована, замените ее новой, чтобы избежать неисправность.

2. КОРПУС ПРОДУКТА

Удалите грязь тканью, смоченную жидким мылом, затем протрите насухо.

Если корпус изделия загрязнен, промойте его водой.

3. ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВОДЫ

Протрите отверстие, иначе это может привести к протечке воды.

4. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

Откройте резервуар и очистите его.

Вымойте внутреннюю поверхность щеткой или другим предметом и протрите сухой тканью.

Если изделие не используется в течение длительного времени, держите резервуар для воды сухим.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ИЗДЕЛИЕ

Наименование продукта	PARU Стандартный
Период гарантии	1 год
Сертификация продукции	Декларация соответствия TP TC
Результат проверки	Квалифицированный