




## Электрическая зубная щетка

**paro**

## Инструкция к применению

### Правила пользования


Смочите головку щетки и нанесите на нее зубную пасту. Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите головку зубной щетки к зубам, затем включите ее. Сначала очистите внешние поверхности зубов, затем внутренние и завершите чисткой жевательных поверхностей зубов.

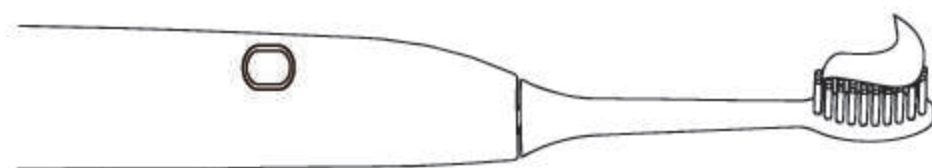

### Уход за зубной щеткой

После использования необходимо тщательно промыть головку щетки. Стряхнуть остатки воды и оставить в вертикальном положении. Рекомендуется менять насадку каждые 2-3 месяца по мере изнашивания.

Круглая головка обеспечивает 3D чистку каждого зуба, удаляет налет между зубами;  
Мягкие щетинки для бережной чистки зубов и десен;  
Облегченная ручка для комфортного использования.

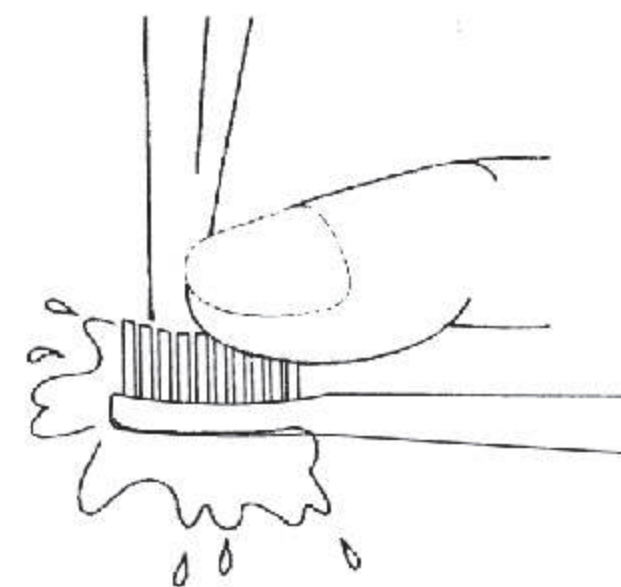

### Комплектация

- Электрическая зубная щетка
- 3 сменные насадки
- Инструкция
- USB кабель
- Чехол для хранения



Зубная щетка автоматически отключится через 2 минуты работы.


Зубная щетка запоминает последний режим чистки и воспроизводит его при следующем включении.

Долгим нажатием на кнопку включения, будут переключаться режимы и мощность. Когда режим будет выбран, удерживая кнопку включения, будет переключаться интенсивность режима.

Световой индикатор Intensity/charge будет менять цвета при переключении по мощностям.

Красный цвет – слабая мощность, оранжевый цвет – средняя мощность, зеленый цвет – сильная мощность.

## Зарядка

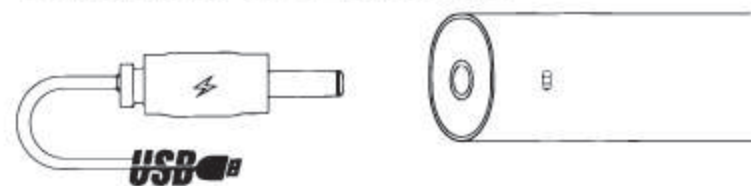

Вставьте один конец USB-кабеля в зарядное устройство для телефона или компьютера. Подключите другой конец к нижней части зубной щетки, для полной зарядки необходимо 6 часов.

## Параметры продукта

Название продукта:

Электрическая зубная щетка PARU

Напряжение: 1,5 В

Мощность: 1 Вт

Условия хранения: хранить при температуре от -5°C до 25°C, относительной влажности воздуха 75%.

## Меры предосторожности

- Держите зубную щетку в недоступном для детей месте
- Не извлекайте элементы питания влажными руками
- Замените сменную насадку зубной щетки, если крепление ее головки ослабло в результате повреждения
- Использовать по назначению

## Режимы

Устройство имеет 5 режимов работы и 3 режима мощности:

<b>Clean</b>	глубокое очищение, комплексная чистка зубов
<b>Polish</b>	удаление налета с зубов
<b>White</b>	устранение пятен и бактерий
<b>Gumcare</b>	цикл вибрации от сильной до слабой для мягкой стимуляции десен
<b>Sensitive</b>	бережная чистка чувствительных зубов и десен