

wau



MIGA BLACK

ORAL CARE IRRIGATOR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	3
Назначение	3
Детали устройства	4
Порядок работы	5
Способ применения	6
Чистка	7
Хранение	8
Зарядка	8
Неисправности и способы их устранения.....	9
Меры предосторожности	10
Утилизация.....	11
Гарантия.....	11


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	RM-MINIO18
Диаметр сопла	0.6 мм
Кол-во пульсаций	1600 пульсаций в минуту
Давление воды	60-140 PSI
Объем резервуара для воды	140 мл
Емкость аккумулятора	1100мА
Уровень шума	≤ 72 Дб
Входное напряжение	5В = 1А
Номинальное рабочее напряжение	8 Вт
Тип разъема для зарядки	Type-C
Время зарядки	4 часа
Время работы	90 минут
Степень защиты от воды	IPX7
Режимы	3

Назначение

Ирригатор MIGA Black от бренда WAU - это портативное устройство для ухода за полостью рта. 3 режима воздействия и 4 насадки в комплекте обеспечат эффективное удаление остатков пищи, зубного налета, очищение межзубных промежутков и десневых карманов. Устройство имеет компактные размеры, его удобно брать в путешествия или использовать для ухода за ортодонтическими конструкциями. Ирригатор долго держит заряд и соответствует стандартам FDA.

Детали устройства

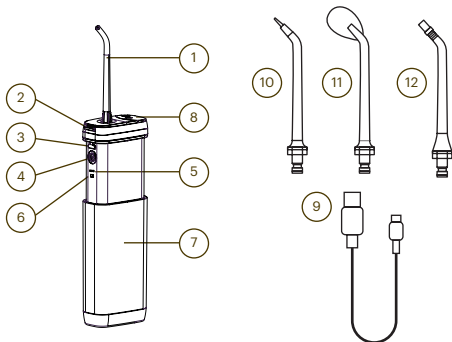

- 1. Многофункциональное сопло
- 2. Кнопка для снятия сопла
- 3. Разъем для зарядки
- 4. Кнопка вкл/выкл/переключения режима
- 5. Индикатор режимов
- 6. Индикатор батареи

- 7. Резервуар для воды
- 8. Отсек для хранения сопла и налива воды
- 9. Кабель для зарядки
- 10. Пародонтологическая насадка
- 11. Насадка для чистки языка
- 12. Ортодонтическая насадка

Комплектация

Ирригатор x1
Мешочек для хранения ирригатора x1
Сопла x4
Кабель для зарядки x1
Инструкция x1

Порядок работы


1. Установите сопло до щелчка.



2. Откройте резервуар и наполните его водой.



3. Поместите сопло в ротовую полость и кратко нажмите на кнопку включения для того, чтобы включить устройство.

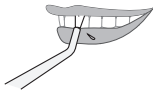

4. Длительное нажатие на кнопку включения устройства используется для переключения между режимами. После использования выключите устройство кратким нажатием. При выключении устройство запомнит режим, который использовался в последний раз и при следующем включении автоматически начнет работу в этом режиме.



5. Зажмите кнопку для снятия сопла и аккуратно удалите его, откройте отсек для хранения насадок и поместите в него сопло.



6. Не забывайте о регулярной чистке: отделите резервуар и помойте его.

[Примечание]: Используйте деликатный режим на начальном этапе использования ирригатора. Легкая кровоточивость при первых чистках является нормой, она пропадет в течение недели. Если кровоточивость не прекращается более 2-х недель, прекратите пользоваться устройством и проконсультируйтесь со стоматологом.

Способ применения

а. Используйте стандартное многофункциональное сопло. Нажмите на кнопку включения, выберите желаемый режим. Затем расположите сопло напротив зубов так, чтобы струя воды была перпендикулярно обрабатываемой области.

[Примечание]: чувствительные десны легко начинают кровоточить. Не направляйте струю непосредственно на десны!

б. Начинайте чистку с задних зубов и перемещайтесь к передним зубам. Пройдите таким образом весь зубной ряд, задерживаясь ненадолго у каждого зуба до тех пор, пока десна и пространство между зубами не будет очищено. Если вы начинали с внешней стороны зубного ряда, повторите процедуру для обратной стороны. Данный алгоритм нужно провести и для верхнего, и для нижнего ряда зубов.

[Примечание]: людям с чувствительными зубами рекомендуется выбирать деликатный режим.

с. Для очистки десневых карманов используйте пародонтологическую насадку. Нажмите на кнопку включения, выберите нужный режим. Расположите сопло под углом, так чтобы наконечник сопла был направлен на десневой край и в зубодесневой карман.

Проведите чистку в соответствии с рекомендациями указанными выше.

д. Для чистки языка воспользуйтесь насадкой в форме ложечки. Установите насадку, нажмите на кнопку включения, выберите необходимый режим. Двигайте насадку по языку подметающими движениями в одном направлении от корня к кончику языка. Чистка языка должна занимать 30 секунд - это приблизительно 5 подходов.

е. Ортодонтическая насадка разработана для очищения брекет-систем. Ортодонтическая насадка, помимо отверстия для прохождения струи воды, имеет на конце кисточку с жесткой щетиной, благодаря чему хорошо очищает замки брекет-систем, смывая с них налет и остатки пищи. Проведите чистку в соответствии с рекомендациями, указанными в пункте б




Индикация и режимы

Режим	Переключение режима	Цвет индикатора	Кому подходит	Давление воды
Деликатный	Нажатие кнопки включения	Зеленый	Слабое давление, подходит для чувствительных зубов и начинающих пользователей	40-60 PSI
Импульсный	Долгое нажатие на кнопку включения	Синий	Переменная частота пульсирующего давления, чередование сильного и слабого режима для глубокой чистки и массажа десен	60-110 PSI
Мощный	Долгое нажатие на кнопку включения	Белый	Сильное давление, эффективная чистка, отвечающая ежедневным нуждам большинства людей	120-140 PSI

Чистка

- После применения выключите ирригатор и удалите сопло.
- Тщательно вымойте, высушите и храните в сухом месте.
- Конструкция данного изделия обладает защитой от воды IPX7, изделие можно мыть непосредственно под краном.

Хранение

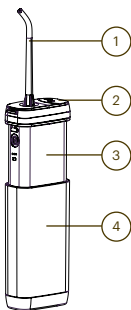

1. Сопло

Нажмите на кнопку для снятия сопла и вытащите его, промойте водой, а затем вытрите насухо тканью.

Рекомендуется заменять сопло каждые 6 месяцев.

При деформации верхнего кончика сопла незамедлительно замените его.

2. Отсек для налива воды

Необходима очистка от загрязнений для недопущения протечек.

3. Корпус

Удалите загрязнения тканью, смоченной жидким моющим средством, затем протрите сухой тканью. Если корпус устройства загрязнен, промойте его водой. Не протирайте его растворителем, бензином, спиртом и т.д. Не мойте в горячей воде выше 50°C. После чистки корпус необходимо вытереть насухо.

4. Съемный резервуар для воды

Регулярно открывайте съемный резервуар и промывайте его.

Вымойте внутреннюю часть резервуара щеткой или другим предметом и протрите сухой тканью. Когда устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, не оставляйте в резервуаре воду.

Зарядка

[Примечание]: при низком уровне зарядки индикатор батареи становится красным.

Для зарядки:

- Выключите устройство и втяните резервуар
- Вставьте разъем кабеля для зарядки Type-C в разъем для зарядки
- Вставьте вилку в розетку и убедитесь, что зарядка началась - во время зарядки индикатор батареи должен мигать красным
- Когда батарея заряжена полностью, индикатор загорается зеленым
- Для полной зарядки необходимо 4 часа, от полной батареи устройство может работать около 90 минут

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Не работает	Приобретено новое устройство или им не пользовались более 3 месяцев	Заряжайте непрерывно более 4 часов
Низкое давление воды	a. Сопло забилося грязью b. Сопло деформировано	Замените сопло
После зарядки работает только несколько минут	a. Недостаточное время зарядки, низкий уровень заряда b. Истек срок службы аккумулятора	a. Заряжайте непрерывно в течение более 4 часов b. Свяжитесь с клиентской службой
Индикатор батареи не загорается, когда идет зарядка	a. Неверно вставлен кабель для зарядки b. Поврежден контур питания	a. Проверьте корректность подключения кабеля b. Свяжитесь с клиентской службой

Меры предосторожности

1. Не используйте устройство до ознакомления с правилами эксплуатации и техники безопасности, чтобы избежать травм, вызванных неправильной эксплуатацией.
2. Не разбирайте устройство и не заменяйте его детали во избежание повреждений, которые могут привести к снятию устройства с гарантии.
3. Не используйте горячую воду температурой выше 50°C в резервуаре для чистки ротовой полости во избежание появления ожогов.
4. Если кабель питания или вилка повреждены, пожалуйста, замените их перед использованием.
5. Держите устройство подальше от источников открытого огня и нагревательных приборов, не заряжайте, не используйте и не оставляйте его при высокой температуре окружающей среды.
6. Используйте устройство только по назначению: для чистки полости рта.
7. Не давите насадкой на зубы и десны, чтобы не повредить их.
8. Не погружайте прибор в воду на длительное время во избежание поломок или возникновения пожара, поражения электрическим током и других опасностей.
9. Не нарушайте целостность кабеля питания: не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте его. Не допускайте передавливания кабеля питания тяжелыми предметами или его зажатия между предметами, а также держите устройство и кабель вдали от источников тепла.
10. Не храните устройство в жарких или влажных помещениях и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
11. Не заряжайте устройство в горячих или влажных местах, например в ванной или туалете.
12. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите вилку питания и зарядный штекер во избежание пожара или возникновения иной опасности.
13. Данный товар не подлежит замене или ремонту. Если требуется ремонт, пожалуйста, верните его продавцу.
14. Не используйте без насадки.
15. Данное устройство не предназначено для детей. Использование возможно только под присмотром взрослых. Храните в недоступном для детей месте. Не используйте его в качестве игрушки.
16. Если у вас есть заболевания десен или вы перенесли операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства.

17. Не добавляйте ополаскиватель для полости рта в резервуар для воды, это приведет к коррозии и прилипанию резервуара к корпусу устройства, что может повлечь за собой проблемы с открыванием резервуара в дальнейшем.

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

[Обращение с аккумулятором]:

Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. При утилизации ирригатора обязательно извлеките аккумулятор и утилизируйте его в центре переработки.

Не разбирайте аккумулятор ирригатора, только извлекайте его перед утилизацией. Прежде, чем извлечь аккумулятор убедитесь, что он полностью разряжен.

[Извлечение аккумулятора]:

1. Отключите ирригатор от источника питания.
2. Выключите ирригатор.
3. Откройте корпус и удалите все детали.
4. Отрежьте плюсовой и минусовой клеммы аккумулятора.
5. Извлеките аккумулятор.

Гарантия

На ирригатор для полости рта MIGA Black от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

MIGA BLACK

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Артикул: **RM-MINIO18**
Материал: **ABS пластик**
Размер: (ВхШхГ) **124х62х42 мм**
Вес: **183 гр**
Напряжение: **5 В**
Мощность: **8 Вт**
Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-18.
8-800-600-33-61.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

