

wau



AI

EYE MASSAGER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	6
Меры предосторожности	8
Чистка	10
Хранение	10
Зарядка	11
Утилизация.....	11
Гарантия.....	11


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	B-016
Материалы	Пластик ABS + сплав цинка
Размер (ВхШхГ)	Устройство - 155x26x28мм; Зарядная станция - 62x55x59мм
Вес	Устройство - 94г; Зарядная станция - 67г
Встроенный источник питания	литиевый аккумулятор
Напряжение питания	3,7 В
Напряжение рабочее	11 В
Время зарядки	2 часа
Емкость аккумулятора	450 мАч
Максимальное время непрерывного использования устройства	до 40 минут
Режимы	EMS + красный свет/ RF + красный свет

Назначение

Благодарим Вас за покупку нашего массажера для кожи вокруг глаз AI. Используемые в нем технологии RF и EMS в сочетании с технологией красного света (620нм - 630нм) помогают бороться с морщинами вокруг глаз, темными кругами и мешками под глазами. Массажер подтягивает кожу вокруг глаз, успокаивает ее и осветляет, а также позволяет ей лучше впитывать питательные вещества из уходовых средств и в полной мере получать от них пользу.

Детали устройства

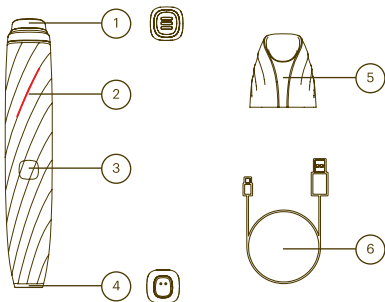

- 1 - рабочая поверхность
- 2 - индикатор режима и батареи
- 3 - кнопка вкл/выкл/переключение режима

- 4 - контактная точка зарядки
- 5 - зарядная станция
- 6 - кабель для зарядки USB - Type-C

Комплектация

- Устройство x1
- Мешочек для хранения x1
- Зарядная станция x1
- Кабель для зарядки x1
- Инструкция x1

Порядок работы

1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.
2. Устройство имеет 2 режима работы: режим "RF + красный свет" и режим "EMS + красный свет". Выбор режима осуществляется нажатием на кнопку вкл/выкл.



3. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.
4. Устройство оснащено функцией автоматического выключения (спустя 10 минут непрерывного использования)

Способ применения

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства.

Режим RF + красный свет

Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить прибор, затем выберите режим RF + красный свет (индикатор должен загореться красным)

Шаг 2: После нанесения массажного геля-проводника прикоснитесь к коже рабочей поверхностью устройства и начните массаж, медленно двигаясь по массажным линиям по орбитальной косточке от внутренней части глаза к внешней и лучами от внешнего уголка глаза, как показано на рисунке. Производить смену глаза необходимо каждые 2 минуты.



[Примечание]: проводить процедуру на данном режиме рекомендуется в вечернее время не более 4-х раз в неделю. Радиоволны, генерируемые устройством, нагревают дерму кожи. Пожалуйста, пере-

мещайте рабочую поверхность устройства во время использования. Не задерживайтесь на одном участке кожи, чтобы избежать ожогов. В устройстве предусмотрен специальный звуковой сигнал, который напоминает о необходимости перемещения устройства каждые 10 секунд.

Радиоволны, генерируемые устройством, проникают в подкожные ткани, где, благодаря естественному сопротивлению, высвобождается тепловая энергия. Действие устройства основано на принципе, согласно которому коллагеновые волокна дермы сокращаются при температуре 55-70°C, тем самым подтягивая кожу и способствуя регенерации коллагена. Мгновенные сокращения волокон коллагена способствуют обновлению кожи, увеличению толщины и плотности дермы и заполнению морщин.

Использование красного света с определенной длиной волны способствует циркуляции крови, оказывает противовоспалительный эффект, снимает припухлость, боль, осветляет пигментацию, подходит для всех типов кожи. Красный свет проникает в кожу глубже остальных. Он воздействует на фибробласты (клетки, которые синтезируют коллаген), за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

Режим EMS + красный свет

Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить прибор, затем выберите режим EMS + красный свет (индикатор должен загореться синим)

Шаг 2: После нанесения массажного геля-проводника прикоснитесь к коже рабочей поверхностью устройства и начните массаж, медленно двигаясь по массажным линиям по орбитальной косточке или нижней части надбровной дуги от внутренней части глаза к внешней, как показано на рисунке. Производить смену глаза необходимо каждые 2 минуты.



[Примечание]: проводить процедуру на данном режиме рекомендуется утром не более 2-3х раз в неделю.

Микроток EMS активизирует мышцы лица и двигательные нервы. Таким образом, улучшается кровообращение, активизируется работа клеток, что уменьшает отечность, подтягивает кожу и делает ее более упругой.

Использование красного света с определенной длиной волны способствует циркуляции крови, оказывает противовоспалительный эффект, снимает припухлость, боль, осветляет пигментацию, подходит для всех типов кожи. Красный свет проникает в кожу глубже остальных. Он воздействует на фибробласты (клетки, которые синтезируют коллаген), за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

Меры предосторожности

- 1) Не мочите зарядный кабель. Не погружайте устройство в воду.
- 2) Не заряжайте устройство в местах, где есть риск его намокания. Например, в ванной, душе или рядом с бассейном.
- 3) Не бросайте устройство в огонь.
- 4) Устройство следует заряжать только кабелем для зарядки, который идет в комплекте.
- 5) Во избежание травм прекратите использование прибора, если аксессуары или кабель для зарядки повреждены.
- 6) Если кабель для зарядки поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций, его следует заменить оригинальным кабелем.
- 7) Заряжайте прибор полностью не реже одного раза в 2 месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- 8) Данное устройство не предназначено для детей младше 12 лет, а также лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом и знаниями. Использование устройства этой группой лиц возможно только под наблюдением.
- 9) Не рекомендуется использовать прибор беременным и кормящим женщинам.
- 10) Не используйте прибор, если он визуально имеет повреждения. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать его самостоятельно, это может привести к серьезным травмам глаз или кожи, а также стать причиной поражения электрическим током и смерти.
- 11) Используйте прибор только по назначению в соответствии с настоящей инструкцией.
- 12) Заряжать, использовать и хранить прибор рекомендуется при температуре 5-35°C.
- 13) Не используйте прибор, если в течение последних 2-х недель вы делали косметологические процедуры (например, химический или механический пилинг, лазерную шлифовку, фракционное лазерное лечение, мезотерапию, процедуры с филлерами или любые другие процедуры для скульптурирования лица).

Общие рекомендации

- 1) Регулярная чистка устройства обеспечивает более высокую производительность и долгий срок службы.
- 2) Не используйте прибор во время сна или в состоянии сонливости.

Противопоказания

- 1) Если у вас есть медицинские противопоказания, перед использованием проконсультируйтесь с дерматологом.
- 2) Не используйте прибор, если вы чувствительны к свету.
- 3) Не используйте прибор, если у вас имеются: трещины или открытые раны на коже, кожные заболевания или сильная угревая сыпь, солнечные ожоги, кожные инфекции и т.д.
- 4) Не используйте прибор на верхнем и нижнем веке, глазном яблоке и слизистой оболочке.
- 5) Не используйте прибор на родинках, бородавках, вросших волосах или раздраженной коже.
- 6) Не используйте прибор совместно с другими людьми, так как это может привести к перекрестному заражению бактериями и развитию опасных инфекций.

Чистка

Выполнение следующих инструкций важно для обеспечения надлежащего функционирования Вашего устройства.

Их несоблюдение может привести к тому, что массажер станет менее эффективным или перестанет работать.

Перед началом чистки убедитесь, что прибор выключен.

- Тщательно очищайте корпус устройства и рабочую поверхность после каждого использования, чтобы продлить срок его службы.
- Никогда не мойте само устройство и зарядную станцию под краном и не замачивайте их в воде.
- При чистке прибора используйте только сухую ткань.
- Не используйте для чистки прибора металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как спирт или уксус.



[Примечание]: Протирайте детали чистой сухой тканью.

[Совет]: Для удаления остатков уходовых средств с рабочей поверхности можно использовать влажные салфетки.

Хранение

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

1) Зарядка через подключение к компьютеру: включите компьютер, подключите зарядный кабель к USB-порту компьютера и Type-C разъему зарядной станции, установите прибор на станцию и начните зарядку.

2) Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB для зарядки к порту USB адаптера и Type-C разъему зарядной станции, установите прибор на станцию и начните зарядку. Технические характеристики адаптера: 5V 1A

3) Индикация: Во время зарядки индикатор мигает, при полной зарядке индикатор горит непрерывно.

[Примечание]: Перед зарядкой убедитесь, что контактная точка зарядки и зарядный кабель сухие и на них нет следов влаги и средств по уходу за кожей. Не заряжайте прибор в местах, где он может упасть в воду. Пожалуйста, не используйте прибор во время зарядки. Прибор не должен стоять на зарядке более 24 часов.



Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

Гарантия

На массажер для кожи вокруг глаз AI от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

AI

МАССАЖЕР ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Артикул: **B-016**

Материал: **ABS пластик, цинковый сплав**

Размер: (ВхШхГ) **155х26х28 мм**

Вес: **94 гр**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **1,5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-18.

8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

