

L&L SKIN

MIO

Designed by L&L SKIN in Japan
Assembled in China



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MIO1

Благодарим Вас за покупку массажёра микротокового лифтинга MIO от L&L SKIN. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.


ОПИСАНИЕ

V-образный массажёр микротокового лифтинга MIO предназначен для процедур в домашних условиях. Уникальный беспроводной аппарат, действие которого направлено против признаков старения кожи: великолепно уменьшает глубину морщин, заметно повышает упругость и тонус кожи, омолаживая и подтягивая её изнутри, обладает прекрасным лимфодренажным эффектом, улучшает кровообращение и микроциркуляцию, так же является прекрасным проводником в кожу питательных компонентов вашей ухаживающей косметики, которую вы будете наносить на кожу перед массажем.

ФУНКЦИИ

- Для полной зарядки устройства необходимо 2 часа. Полная зарядка обеспечит 10 часов работы в режиме с LED индикатором синего цвета, и 30 минут работы в режиме с LED индикатором красного цвета.
- При низком заряде батареи LED индикатор начнет мигать красным цветом. Подключите USB-кабель в USB-разъем для зарядки устройства. Во время зарядки LED индикатор будет постоянно мигать синим цветом. Когда устройство полностью заряжено LED индикатор будет постоянно гореть синим цветом.
- В устройстве есть функция памяти, при включении будет выбран режим, которым вы пользовались в последний раз.
- Для предотвращения расхода батареи, устройство отключится автоматически после двух минут не использования.
- В устройстве есть функция нагрева, обеспечивающая температуру 42°C. Устройство отрегулирует оптимальную температуру после нанесения средств по уходу за кожей.
- Рекомендуется использовать массажёр не более 1 минуты на каждом прорабатываемом участке кожи. После каждой минуты устройство сигналом оповестит о необходимости сменить участок воздействия.
- Устройство может использоваться для процедур на различных частях тела, таких как лицо, шея, спина, талия, бедра, руки и т.д.
- Если у вас возник дискомфорт при использовании устройства, прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Храните устройство в сухом, прохладном, вентилируемом месте, вдали от детей. Устройство НЕ ЯВЛЯЕТСЯ водонепроницаемым. Мыть под прямой струей воды ЗАПРЕЩЕНО. ТОЛЬКО СУХАЯ ЧИСТКА. Специальная безворсовая ткань для чистки может быть использована многократно, стирка ткани разрешена. Рекомендуется удалять с устройства остатки средств по уходу за кожей каждый раз после процедуры.
- В случае длительного неиспользования устройства, рекомендуется перезарядить батарею. Устройство необходимо от 10 до 20 секунд для включения зарядки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

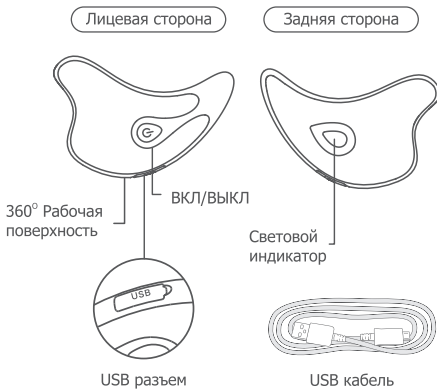

Наименование	Микротоковый массажер для лица
Модель	MIO
Размеры	99мм*88мм*22мм
Вес	66г
Рабочее направление	5V
Мощность	3W
Дополнительно	инструкция, USB кабель, салфетка, чехол для хранения

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 1 сек. Кнопку в центре (одно длинное нажатие).
- Для переключения режима нажмите кнопку в центре еще раз (одно короткое нажатие). LED индикатор изменит цвет. Индикатор синего цвета обозначает стандартный режим с частотой вибрации 142 Гц. Индикатор красного цвета обозначает тепловой режим с частотой вибрации 200 Гц.
- Выберите необходимый вам режим и начинайте процедуру. Перед началом процедуры убедитесь, что вы удалили макияж и другие загрязнения. Для лучшего эффекта можно использовать средства по уходу за кожей лица (крема, сыворотки, масла, гелевые маски и другие косметические средства на водной основе).
- Грани массажера являются источником микротоков. Они имеют плавно изогнутые формы, благодаря которым массажер удобно использовать на любом участке лица и тела, учитывая анатомические особенности каждого лица. Прикладывайте массажер удобной вам гранью, чтобы он легко скользил по вашему лицу (и другим участкам тела). Ниже, мы даем общие рекомендации по использованию той или иной грани массажера.
- Для отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку в центре около 1 сек.(длинное нажатие). После использования протрите устройство специальной тканью, затем поместите в сухое место.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Для достижения желаемого эффекта перемещайте массажёр по лицу согласно анатомическому расположению мышц на лице (рисунок 2).

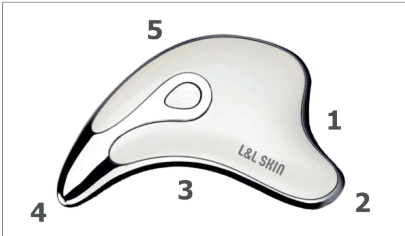


рис. 1

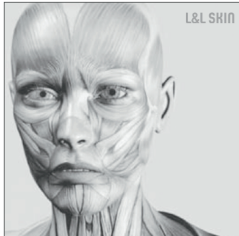


рис. 2



рис. 3

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

КАК ДОЛГО ПО ВРЕМЕНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ МАССАЖА?

Рекомендуется использовать устройство ежедневно от 5 до 10 минут после утреннего и вечернего умывания. Максимально желаемый результат вы сможете достигнуть через 60 дней непрерывного использования.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ КРЕМА И ГЕЛИ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ?

Да, при проведении процедуры желательно использовать косметические средства, которые подходят именно вам: крема, гели, сыворотки или использовать массажер после увлажняющих масок, например тканевых, насыщенных витаминами, аминокислотами и коллагеном, так как MIO усиливает проникновение питательных компонентов глубже в кожу.

КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ МАССАЖЕРОМ ОТ L&L SKIN И ДАРСОНВАЛЬ?

Микротоки и токи дарсонваля оказывают совершенно разное воздействие на кожу. Токи дарсонваля - это токи высокой частоты. В косметологии они применяются с целью дезинфекции и "коагуляции" отдельных элементов (например, после чистки лица) или улучшения микроциркуляции (для рассасывания застойных пятен, оставшихся после угревой болезни). Микротоковая терапия - это воздействие на кожу токами малой интенсивности, которое никак не чувствуется организмом, нет сокращения мышц. Воздействие происходит на уровне клетки, нормализуется ее работа, транспорт ионов, синтез АТФ, т.е. клетка начинает работать как молодая (или здоровая).

МОЯ КОЖА ДОВОЛЬНО ЧУВСТВИТЕЛЬНА, МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО?

Да, устройство выполнено из нержавеющей стали в соответствии с международными стандартами, поэтому устройство безопасно в использовании и не вызывает аллергических реакций.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЛАКТАЦИИ?

Да, использование при лактации безопасно для здоровья мамы и ребенка.

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕСЛИ СТОЯТ УКОЛЫ КРАСОТЫ — БОТОКС, ФИЛЛЕРЫ?

Наличие ботокса и филлеров не является противопоказанием к использованию массажера, но рекомендуется использовать массажер не раньше чем через 3 недели после проведения процедуры, при более ранем использовании эффект от уколов закончится быстрее.

КАК ЗАРЯЖАЕТСЯ МАССАЖЕР?

Массажер имеет сертифицированный надежный аккумулятор, который заряжается от сети, через USB кабель. Заряда хватает на 10 часов работы в режиме индикатора синего цвета, и на 30 минут в режиме индикатора красного цвета.

ГАРАНТИЯ

Благодарим Вас за приобретение массажёра микротокового лифтинга MIO от L&L SKIN. На устройство распространяется гарантия с гарантийным сроком 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

Массажер микротокового лифтинга MIO от L&L SKIN

Артикул ST-F808

По заказу: L&L SKIN TECH CO., LTD

Адрес заказчика: 3F Kabutocho Daiichi Heiwa Building, 5-1 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, Japan 103-0026

Изготовитель: SHENZHEN SIST TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес изготовителя: 7/F, 2nd Building, Huangfeng First Technology Park, Gushu, Xixiang, Baoan, Shenzhen, PRC

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А.Н.

125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, офис 14-18. Тел. 8-800-600-33-61. zakaz@llskin.ru

www.llskin.ru

www.llskin.jp

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.llskin.ru

1. **Часть 1** показанная на рис. 1 предназначена для мышц вокруг глаз, подбородка и губ. Если следовать рис.2 используя массажёр на левой стороне лица, то для мышц вокруг глаза и губ проведите движением справа-налево описывая круг ←. На правой стороне лица - проведите →слева направо, описывая круг. Для мышц вокруг подбородка - снизу вверх↑.

2. **Часть 2** показанная на рис. 1, предназначена для стимулирования массажных точек (методика акупунктуры-традиционная азиатская методика иглоукалывания) для снятия стресса. Для данного массажа используйте режим с синим индикатором. Выпуклой областью легко прикоснитесь и сделайте небольшой круг в точках, указанных на рис. 3.

3. **Часть 3** предназначена для мышц вокруг щек, лба и области шеи. Следуйте рисунку 2. и проведите движением под углом 45 градусов снизу вверх. Для лба проведите движением снизу вверх ↑. Для шеи - по центру проведите снизу вверх, слева и справа шеи - сверху вниз.

4. **Часть 4** предназначена для массажа сухожилий. Это традиционный азиатский массаж, позволяющий снять усталость и напряжение. Следуйте рис. 3, проследите чтобы устройство работало в режим с синим индикатором.

5. **Часть 5** предназначена для скрабирования. Согласно традиционной азиатской медицине скрабирование стимулирует кровообращение и позволяет избавиться от неприятных ощущений. Процедура очень популярная в Японии и Китае. Эту часть вы можете использовать на любом участке вашего тела, если вы чувствуете боль или неприятные ощущения.

⚠ Данный товар не является изделием медицинского назначения

КАКОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ДЛЯ ЧЕГО

Режим с синим индикатором LED предназначен для:

- Улучшения цвета лица
- Снятия отчётности и синяков под глазами
- Сужения пор
- Восстановления эластичности и тонуса кожи
- Способствует производству коллагена
- Стимулирует кровообращение и улучшает микроциркуляцию

Режим с красным индикатором LED + нагрев до 42°C предназначен для:

- Лифтинга кожи лица
- Лучшего проникновения в кожу косметических средств по уходу за счет дополнительного нагрева (сыворотка, крем, масло, маски, гель алоэ вера и тд)
- Сокращения морщин, поднятия мышечного тонуса
- Массажа лицевых мышц
- Способствует производству коллагена
- Стимулирует кровообращение и улучшает микроциркуляцию.

Вы можете использовать любой режим либо их комбинировать, в зависимости от того какой эффект вы желаете получить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАССАЖЁРА

Беременность, онкологические заболевания, нервно-психические заболевания, так же не рекомендуется использовать в период острых заболеваний организма.