

wau



MIO2

MICROCURRENT MASSAGER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Содержание

---

Технические характеристики .....	4
Назначение .....	4
Детали устройства .....	5
Порядок работы .....	6
Способ применения .....	6
Чистка .....	8
Хранение .....	9
Зарядка .....	9
Меры предосторожности .....	10
Утилизация .....	12
Гарантия .....	12

## Технические характеристики


Параметр	Величина
Артикул	ST-F818
Материалы	ABS пластик, PC пластик, цинковый сплав
Размер (ВхШхГ)	Массажер 136x54x22 мм Зарядная база 85x78x52 мм
Вес	Массажер 80 гр Зарядная база 70 гр
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Ёмкость аккумулятора	500 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	5 Вт
Время зарядки	2,5 часа
Время работы (от полной зарядки)	50 минут
Смарт-таймер	10 минут
Режимы	Микроток / Нагрев / Микроток + нагрев + вибрация

## Назначение

Микротоковый девайс MIO2 использует технологии микротоковой терапии, нагрева и вибрации для сохранения молодости кожи, её здоровья и свежести. Массажер позволит снять отечность, усилит проникновение уходовых средств в кожу, подтянет овал лица. Особенная изогнутая форма подойдет для проведения массажа гуаша, а заостренные концы девайса можно использовать для акупунктурного массажа и расслабления мышц.

## Детали устройства

---

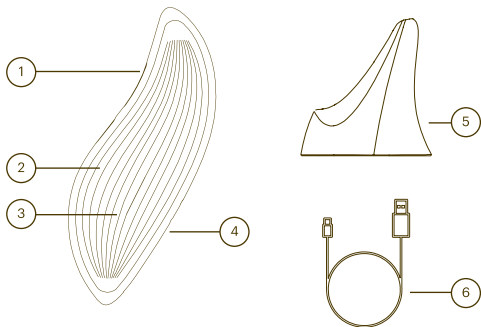

1. Массажная поверхность
2. Индикатор вкл/ режима / зарядки
3. Кнопка «вкл/выкл/переключение режимов»
4. Магнитный разъем зарядки
5. Зарядная база
6. Зарядный кабель

### Комплектация

Устройство x1, база для зарядки x1, кабель для зарядки x1, мешочек для хранения x1, салфетка x1, инструкция x1.

## Порядок работы

---

1. Длительным нажатием на кнопку «вкл/выкл/переключение режимов» включите устройство.
2. Массажер имеет 3 режима работы. Первым после включения запускается режим микротоковой терапии. Индикатор загорается голубым цветом.
3. Нажмите кнопку «вкл/выкл/переключение режимов» для переключения режима. Следующий режим работы - нагрев. Во время его работы индикатор горит красным.
4. Повторное нажатие кнопки переключения режимов запустит режим «Микротоки + нагрев + вибрация». Индикатор загорится белым цветом.
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «вкл/выкл/переключение режимов».
6. Устройство имеет смарт-таймер. После 10 минут работы девайс отключится автоматически.

## Способ применения

---

1. Включите устройство. Выберите нужный вам режим.
2. Нанесите на кожу массажный гель-проводник. Приложите массажную поверхность устройства к коже лица.
3. Проведите массаж лица, двигаясь по массажным линиям.
4. Двигайтесь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу).
5. Проведите процедуру по всем массажным линиям повторно от трех раз, не рекомендуется работать устройством более 10 минут.



[Примечание]: Во время массажа на третьем режиме советуется закрыть глаза и расслабить лицо, затем поместить массажер на участки с морщинами или на участки, склонные к появлению морщин, в области гусиных лапок и носогубной складки. Например, область между бровями; правый/левый висок; правая левая носогубная складка.

7. При помощи салфетки очистите массажную поверхность.

*Эффект от использования и особенности каждого из режимов:*

1) Микроток воздействует на мышечные волокна и лимфатические каналы. За счет тонизации лицевых мышц улучшается кровообращение, что позволяет насытить клетки коллагеном и, как результат, разгладить морщины, подтянуть кожу лица. Проработка микротоком лимфатических каналов способствует выведению из кожи лишней жидкости и токсинов, за счет чего улучшается тонус и цвет кожи. Общий эффект от использования микротоков – это стимуляция процессов обновления кожи.

2) В режиме «Нагрев» воздействие на кожу теплом (до 45°C) активирует циркуляцию крови, ускоряет метаболизм кожи, успокаивает её, способствует впитыванию полезных ингредиентов таких как витамин С и минералы. Данный режим рекомендуется применять с использованием косметических средств.

3) Комбинация 3 технологий в режиме «Микроток + Нагрев + Вибрация» позволит стимулировать циркуляцию крови, успокоить кожу, активировать клетки кожи, снять припухлости, запустить продуцирование коллагена и повысить эластичность кожи. Эффект от использования данного режима может выражаться в разглаживании тонких линий и морщин, лифтинге кожи лица и шеи и создании V-образной формы лица.

## Чистка

---

- Пожалуйста, чистите устройство после каждого использования, так как остатки косметических средств могут повредить его.
- Перед началом чистки убедитесь, что устройство выключено.
- Для очищения девайса используйте только сухие ткани.
- Для чистки массажёра не используйте металлические мочалки, чистящие средства, содержащие абразивы, а также коррозионные жидкости, такие как спирт или ацетон и пр.
- Тщательно очищайте устройство и проверяйте его работоспособность после каждой чистки.
- Не мойте девайс под проточной водой, не погружайте его в воду.
- Убедитесь, что все части девайса вытерты насухо перед тем, как подсоединять его к зарядке.





## Хранение

---

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство вдали от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

## Зарядка

---


1. Подзарядка через компьютер с помощью USB кабеля: включите компьютер, подсоедините кабель USB к USB порту компьютера, а другой конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к зарядной базе.

2. Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB к розетке с адаптером. Второй конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к зарядной базе.

Характеристики адаптера: 5В 1А

3. Во время подзарядки световой индикатор мигает, при достижении полного заряда он будет гореть постоянно.

- После длительной паузы в использовании устройства, потребуется 15 минут для повторной активации и начала зарядки.

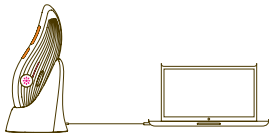

## Меры предосторожности

---

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием массажёра и сохраните данную инструкцию для использования в будущем.

### Опасно

- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Не заряжайте устройство во влажной среде (например, рядом с наполненной ванной, работающим душем, рядом с полным бассейном воды).
- Не бросайте устройство в огонь.

### Внимание

- Не используйте устройство, если сам массажёр или его комплектующие повреждены.
- Подзаряжайте массажёр полностью на 100% минимум раз в 2 месяца – это позволит продлить срок службы аккумулятора.
- Это устройство не предназначено для использования людьми младше 12 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями или тем, кто не имеет опыта использования или осведомленности о работе подобных массажёров, до тех пор пока им не будет оказано личное сопровождение или инструктаж по девайсу.
- Не вставляйте металлосодержащие материалы в разъем устройства для зарядки во избежание короткого замыкания.
- Не рекомендуется использовать массажёр женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания.

## **С осторожностью**

- Используйте устройство только по назначению.
- Заряжайте/ используйте/ храните массажёр при температуре от 5 до 40°C, от 35 до 95°F.
- Не используйте устройство, если вы принимаете лекарственные средства со стероидами.
- Не используйте девайс, если ваша кожа проходит этап заживления после косметических процедур таких как косметический или химический пилинги, лазерная шлифовка, фракционное лазерное омоложение, мезотерапия или после использования дермальных филлеров в последние две недели.
- Проконсультируйтесь с дерматологом, если у вас есть вопросы по использованию девайса с учетом состояния вашей кожи или медицинских противопоказаний.
- Если во время применения массажёра вы испытываете дискомфорт, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь со специалистом.
- Не рекомендуется использовать девайс совместно с кем-либо еще по гигиеническим причинам.

## **Общие рекомендации**

- Регулярная чистка устройства обеспечивает результативную работу и длительный срок использования девайса.
- Не используйте массажёр во время сна или в состоянии дремоты.

## Утилизация

---

Не выбрасывайте данное устройство вместе с ежедневными бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте данный массажёр в соответствии с нормами локального законодательства или сдайте в центр переработки отходов.



## Гарантия

---

На микротоковый массажер MIO2 от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.







# MI02

---

## МИКРОТОКОВЫЙ МАССАЖЕР

---

Артикул: **ST-F818**

Материал: **ABS пластик, PC пластик, цинковый сплав**

Размер: (ВхШхГ) **136x54x22 мм**

Вес: **150 гр**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А.Н.  
125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.  
8-800-600-33-61.  
[zakaz@wau.ru](mailto:zakaz@wau.ru)

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.  
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [wau.ru](http://wau.ru)

