



LED MASK

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики

2. Детали устройства

3. Описание изделия

4. Назначение

5. Меры предосторожности

6. Зарядка

7. Сборка маски

8. Порядок работы

9. Выбор режима работы

10. Проверка чувствительности

11. Уход за изделием

12. Проверка изделия


13. Утилизация изделия

14. Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	WAU
Наименование изделия	LED маска для фототерапии
Артикул	FM-22
Номинальное напряжение	3,7 В
Материал	Силикон
Ёмкость аккумулятора	1500 мАч
Количество светодиодов	100 шт.
Вес	215 г
Размеры (L×W×H)	383×198×33,5 мм
Время зарядки	< 3 ч

ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

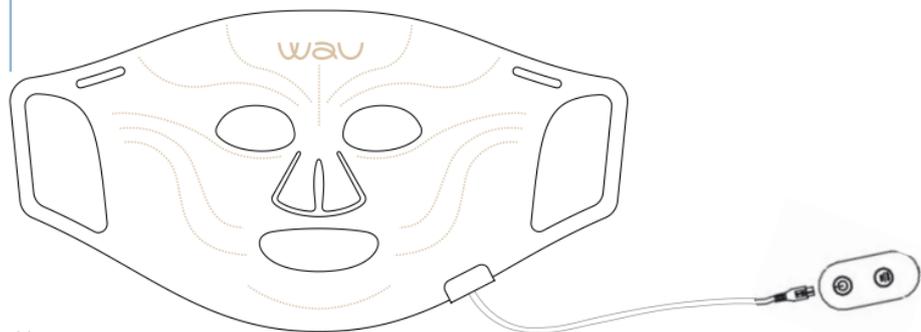

Маска для лица



Мини-пульт
дистанционного управления



Кабель для зарядки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Комплект поставки

- ① Силиконовая маска
- ② Пульт дистанционного управления
- ③ 4 ремешка
- ④ USB-кабель
- ⑤ Руководство по эксплуатации

2. Индикация на пульте дистанционного управления

- ① Пульт дистанционного управления служит для включения/выключения маски и управления режимами работы.
- ② Пульт дистанционного управления содержит литий-ион-полимерную аккумуляторную батарею.

Индикация	Значение
M1	Красный свет
M2	Синий свет
M3	Жёлтый свет
M4	Смешанный свет
A	Автоматический режим
M	Ручной режим

НАЗНАЧЕНИЕ

LED MASK — маска для фототерапии в домашних условиях от WAU — уникальный аппарат, который оказывает положительный эффект на кожу лица за счет использования лечебных светодиодов с разной длиной волны: синий, красный, желтый, смешанный.

В зависимости от длины волны свет разных цветов может проникать в слои кожи и оказывать благоприятное воздействие, благодаря которому кожа становится более ровной, увлажненной и гладкой со здоровым сиянием. Кроме этого, LED терапия может способствовать ускорению метаболизма, замедлять старение кожи, уменьшать секрецию кожного жира, эффективно обеззараживать, бороться с акне, воспалениями, уменьшать отёки, улучшать цвет лица.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное изделие может применяться лишь для целей, перечисленных выше, и не может применяться для других целей, в противном случае это может привести к повреждению изделия или травмам. Изготовитель и продавец не несут ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией или использованием не по назначению.


- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие неисправностей и повреждений. При повреждении маски не продолжайте пользоваться ею и, во избежание опасностей, свяжитесь с представителем бренда для замены или ремонта. В случае самостоятельного ремонта, разборки, неверного подключения или неправильной эксплуатации пользователем с продавца снимается ответственность и гарантийные обязательства.
- Во время зарядки маской не следует пользоваться.
- Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь корпуса прибора.
- Не используйте прибор рядом с открытым источником тепла.
- В случае возникновения дискомфорта или любого побочного эффекта, немедленно прекратите пользоваться маской.
- LED-маска является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендаций врача.
- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также недостаточным опытом и знаниями.
- Запрещается использование данного изделия беременным женщинам, несовершеннолетним, людям, страдающим от эпилепсии, при повреждённой коже, лицам с заболеваниями щитовидной железы или принимающие препараты для щитовидной железы, а также лицам с аллергией на свет, при онкологических заболеваниях, вирусах герпеса в активной стадии.

ЗАРЯДКА

Вставьте разъем USB-кабеля для зарядки из комплекта поставки в разъем для зарядки пульта дистанционного управления, а другой конец кабеля – в адаптер питания, убедившись, что напряжение питания, указанное на изделии, соответствует выходному напряжению адаптера питания. Во время зарядки только один индикатор на пульте дистанционного управления светится белым цветом, после окончания зарядки будут светиться все четыре индикатора. Для соблюдения мер безопасности LED маска не включается для работы во время зарядки.

Советы:


- Для зарядки используйте только оригинальный USB-кабель для зарядки, поставляемый в комплекте с изделием. Во время зарядки не подключайте маску.
- Использование адаптера питания с выходным напряжением менее 5В не позволит зарядить устройство. Использование адаптера питания с выходным напряжением более 5 В может привести к повреждению пульта дистанционного управления.
- Если напряжение аккумулятора в пульте дистанционного управления становится менее 3,2 В, на пульте управления начинает мигать индикатор, и через 5 вспышек устройство выключится автоматически.
- Маска имеет защиту от чрезмерного напряжения (диапазон напряжений, при котором срабатывает защита – от 6 В до 20 В). Во время зарядки устройством пользоваться нельзя.

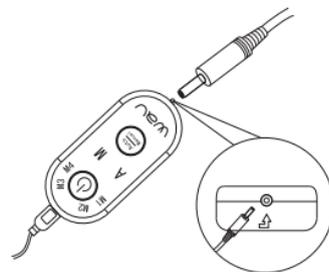

СБОРКА МАСКИ

1. Закрепите ремешки на маске согласно рис.
2. Тщательно вымойте и высушите лицо и руки.
3. Зафиксируйте ремешки на маске так, чтобы маска удобно сидела на лице.
4. Надев маску, сядьте или лягте.
5. При помощи пульта дистанционного управления выберите режим.
6. После процедуры нанесите маску, сыворотку или крем, впитывание которых после фототерапии будет еще лучше.
7. Регулярно проводите процедуры по уходу за кожей. Длительность каждой процедуры не более 15 минут, 3-4 процедуры в неделю. По достижению нужного результата сократите количество процедур до 1-2 в неделю для поддержания результата.



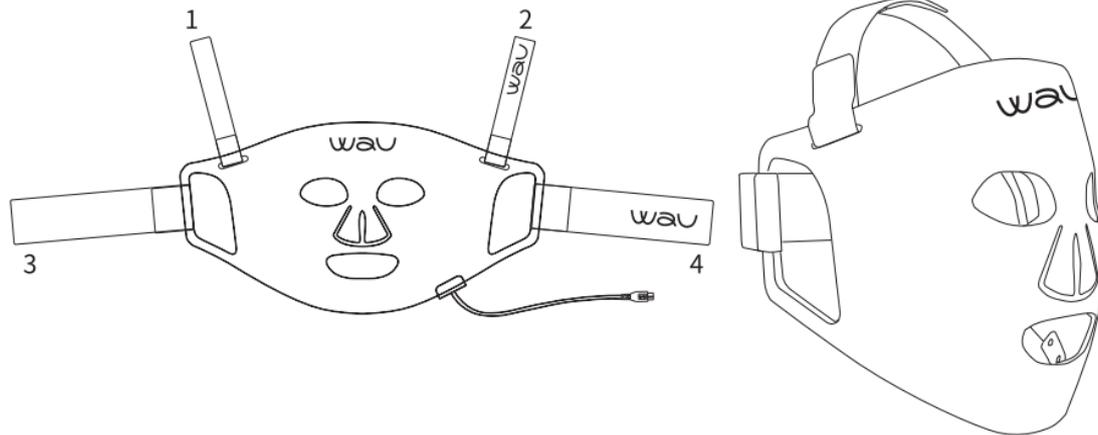

Внимание:

При эксплуатации в ручном режиме необходимо следить за временем использования, которое не должно превышать 15 минут. Чрезмерно долгое использование может привести к повреждению кожи.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Переключение режимов работы

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы включить маску.
После включения задействуется функция красного света.
Если маска требует зарядки, перейдите к разделу «Зарядка» и обратите внимание, что во время зарядки маска не работает.
2. Нажмите кнопку питания ещё раз, включится синий свет.
3. Нажмите кнопку питания в третий раз, включится жёлтый свет.
4. Нажмите кнопку питания в четвёртый раз, включится режим смешанного света.
5. Нажмите кнопку питания в пятый раз, маска выключится.
6. Долгим нажатием кнопки вкл/вкл маска отключится (в любом режиме).



Красный свет имеет длину волны до 800 нм. Один из самых мощных, проникает в биологические ткани на глубину 2,5 мм, доходит до дермы и воздействует на фибробласты, то есть способствует выработке коллагена и эластина, улучшает циркуляцию крови, сокращает глубину морщин. Повышает уровень естественной гидратации и способствует удержанию влаги в коже. Показан при отеках после процедур. Подходит для всех типов кожи.



Синий свет имеет длину волны до 490 нм. Синий свет помогает бороться с акне, вызываемое пропионовыми кислотными бактериями, улучшая состояние тканей вокруг волосяных фолликулов и сужая поры. Имеет мощное антибактериальное воздействие.



Жёлтый свет имеет длину волны до 590 нм. и работает на уровне эпидермиса. Устраняет покраснения, раздражения. Показан при отеках после процедур. Желтый свет улучшает тон кожи, осветляет пятна, ускоряет выведение пигментации.



Смешанный свет, длина волны до 420 нм: это сочетание красного и голубого света, которое обладает комбинационным фототерапевтическим эффектом, оказывая особое заживляющее и восстанавливающее воздействие на шрамы от акне, а также уменьшает воспаление и замедляет старение, выводит токсины, восстанавливает тургор, подходит для всех типов кожи. Рекомендуется для вялой кожи с расширенными порами и воспалительными элементами.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Устройство имеет два режима работы – ручной режим и автоматический режим.

Ручной режим: по умолчанию маска включается в ручном режиме (красный свет).

В отсутствие нажатия кнопок в течение 3 секунд маска начинает автоматический отсчёт времени и выключится через 10 минут.

Автоматический режим: после включения маски нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 3 секунд для переключения в автоматический режим. Включится красный свет, через 5 минут включится синий свет, ещё через 3 минуты включится желтый свет, затем через 4 минут включится смешанный свет, и через 3 минуты устройство выключится.

Напоминание: при эксплуатации в ручном режиме необходимо следить за временем использования, которое не должно превышать 15 минут. Чрезмерно долгое использование может привести к повреждению кожи.

ПРОВЕРКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Перед первым сеансом следует провести проверку чувствительности. Следуйте пошаговому руководству ниже:

1. Поместите устройство на внутреннюю часть руки.
2. На пульте дистанционного управления нажмите кнопку включения и проведите сеанс терапии в течение 10 минут.
3. Если чувствуется жжение кожи или дискомфорт, немедленно прекратите использование устройства.
4. После процедуры подождите не менее 6 часов. Если кожа на внутренней поверхности руки покраснела и/или чешется, светодиодная маска для фототерапии вам не подходит.
5. Подготовка к использованию и частота использования

Рекомендации:

Для получения наилучшего результата используйте маску 3–4 раза в неделю не менее 4 недель. Процедуру по уходу следует выполнять по мере необходимости в зависимости от стиля жизни и состояния кожи.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Советы по уходу за изделием

- После каждой процедуры очищайте поверхность LED маски.
- Храните LED маску в сухом помещении при комнатной температуре.
- Избегайте хранения устройства в пыльном помещении, под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.
- Данная LED маска для фототерапии не имеет обслуживаемых деталей.

2. Чистка устройства

- 1) Во время чистки и обслуживания устройства выключайте питание.
- 2) Дважды протрите поверхности маски 70-80% раствором этанола в течение 3 минут, а затем вытрите насухо влажной либо сухой тканью.
- 3) Во время чистки данного устройства не используйте для протирания горючие вещества, такие как бензин, бутилацетат и т. п.
- 4) При чистке устройства не споласкивайте изделие непосредственно под струёй воды.
- 5) Не пользуйтесь никакими средствами для чистки, их использование может повредить LED маске.

ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ

После получения данного изделия следует проверить комплектность всех принадлежностей и их работоспособность. Если какие-либо части отсутствуют или устройство не работает должным образом, следует связаться с представителем бренда для своевременной замены.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. При утилизации изделия следует извлечь из устройства аккумулятор. Порядок извлечения: при помощи инструмента отожмите защёлки пульта дистанционного управления и извлеките аккумулятор.
2. Перед извлечением аккумулятора следует отключить питание
3. Извлечённый аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами, следует воспользоваться сортировкой мусора.

ГАРАНТИЯ

Благодарим вас за приобретение LED маски от бренда WAU. На устройство распространяется гарантия с гарантийным сроком 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

wau

LED MASK — маска для фототерапии в домашних условиях

Артикул: FM-22

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А.Н.

125167, Москва, ул. Ленинградский пр-т. 37, офис 14-18.

8-800-600-33-61

Электронная почта: service@waubeaauty.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.waubeaauty.ru

Товар сертифицирован.

www.waubeaauty.ru

