

# 2 в 1

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА И ЗВУКОВОЙ СКАЛЕР



ЗАРЯДКА TYPE-C



ИНСТРУКЦИЯ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗЕРКАЛО



НАКОНЕЧНИК  
ДЛЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ



НАКОНЕЧНИК  
ДЛЯ СКАЛЕРА




ПОДСТАВКА

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для достижения желаемого результата, наконечником для скалера необходимо работать вверх-вниз, вправо-влево, аккуратно касаясь поверхности зуба.

Не рекомендуем использовать скалер в местах, где нет налета и зубного камня!

Поверхность зубов

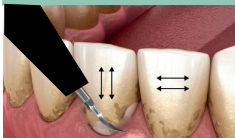

Межзубные промежутки




Межзубный промежуток




Загрязнения в неровностях зубов



Загрязнения на задней поверхности зубов

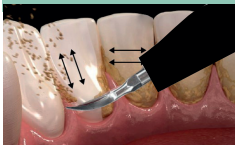

При обработке задней части зубов, необходимо использовать стоматологическое зеркало

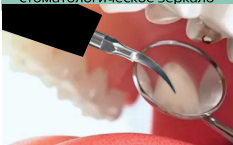

Ультразвуковой наконечник аналогичен тому, который используется в стоматологии и эффективно удаляет зубной камень и налет. Прибор обеспечивает профессиональную чистку зубов у вас дома.

# РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## Наконечник для чистки зубной щеткой



## Наконечник для ультразвуковой чистки



**Чтобы снять наконечник, поверните его вправо или влево**

- Жажмите кнопку включения, чтобы включить устройство. Далее одним нажатием на кнопку включения выберите режим. При выборе режима будет загораться световой индикатор.
- Режимы 1/2/3 предназначены для чистки скалером, 4/5 – режимы для чистки зубной щеткой.
- Устройство делает паузу каждые 30 секунд и автоматически отключается через 3 минуты. Для достижения максимального эффекта процедуру можно повторить .

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядка Туре-С
- Инструкция
- Наконечник для зубной щетки
- Наконечник для скалера
- Подставка
- Стоматологическое зеркало

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не прижимайте металлический чистящий наконечник скалера сильно к деснам или зубам, чтобы избежать дискомфорта.
2. Если вам нужно зарядить, убедитесь, что источник и устройство полностью сухие, а затем подключите к источнику питания.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
4. Не наматывайте шнур питания вокруг устройства, когда оно находится под напряжением.
5. Используйте прибор по назначению.
6. Замените наконечник, в случае его повреждения, во избежание травм.
7. Нельзя использовать устройство во время зарядки.

## ВНИМАНИЕ!

1. Данное устройство предназначено для чистки зубов, оно не может заменить медицинские инструменты для лечения или восстановления зубов.
2. Небольшая кровоточивость десен при использовании аппарата – нормальное явление.
3. Пожалуйста, храните прибор в недоступном для детей месте. Устройство не предназначено для пользования детьми, если чистка все же необходима, то во избежание травм она должна проводиться под присмотром взрослых.
4. Не погружайте прибор в воду на длительное время.
5. Прибор оснащен батареей, пожалуйста избегайте воздействия на него огня и высоких температур, во избежание возгорания или взрыва.
6. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на прибор, храните его в помещении.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## РЕЖИМЫ

Superstrong – основная чистка для удаления зубного камня

Strong – стандартная чистка между зубами

Standard – бережная чистка зубов и профилактика зубного камня

Comfort – комфорт для чистки зубов

Soft – мягкость для чистки зубов

## В КОМПЛЕКТЕ

### 2 НАСАДКИ

Наконечник для скалера – 1

Наконечник для зубной щетки – 1

## ЛЕГКОЕ СНЯТИЕ НАСАДКИ

Поворот на 90 градусов

## КНОПКА ПИТАНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

Удобен в использовании

Включить/выключить – длительное нажатие

Выбрать режим – одним нажатием

## СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМОВ

Режим Superstrong

Режим Strong

Режим Standard

Режим Comfort

Режим Soft

## СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ TYPE-C

Во время зарядки световой индикатор мигает красным, как только устройство будет заряжено – мигание индикатора прекратится

|                        |         |                        |             |
|------------------------|---------|------------------------|-------------|
| Номинальное напряжение | 3,7В    | Номинальный ток        | 200 mA      |
| Ток в режиме ожидания  | 20мкА   | Блок питания           | 5В          |
| Зарядка                | USB     | Уровень защиты от воды | IPX6        |
| Модель                 | LC-H156 | Размер                 | 212x27x27мм |



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ  
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  
В НАШ КЛИЕНТ - СЕРВИС

 PARU.PRO

 MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU

 +7 938 313 15 69