


wau

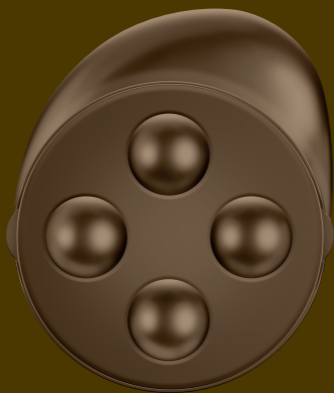

KIO

BODY DEVICE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики.....	4
Назначение.....	5
Детали устройства.....	5
Порядок работы.....	6
Способ применения.....	7
Чистка.....	11
Хранение.....	12
Зарядка.....	12
Меры предосторожности.....	12
Гарантия.....	17


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	TBW-001
Материалы	ABS пластик
Размер (ВхШхГ)	111x91x28 мм (корпус) 111x91x44 мм (корпус с насадкой EMS) 111x91x37 мм (корпус с насадкой RF&LED)
Вес	128 гр (корпус) 96 гр (насадка EMS) 93 гр (насадка RF&LED)
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1050 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	10,6 Вт
Время зарядки	3 часа
Время работы (от полной зарядки)	60 минут
Смарт-таймер	5 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX6
Режимы	Режим EMS Режим RF&LED

Назначение

Аппарат для тела с функциями EMS, RF&LED KIO от бренда WAU предназначен для коррекции фигуры в области живота, талии, бедер и ягодиц. Массажер решает вопросы потери упругости и тонуса кожи, помогает в борьбе с дряблостью и целлюлитом за счет 3 самых действенных технологий. EMS использует токи низкой частоты, которые, вызывая сокращение мышц, улучшение крово- и лимфотока, подтягивают кожу, повышают тонус мышц. RF волны, высвобождая тепловую энергию, подтягивают кожу, способствуют регенерации коллагена. Кожа обретает упругость и эластичность. Красный свет LED терапии воздействует на фибробласты, за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

Детали устройства

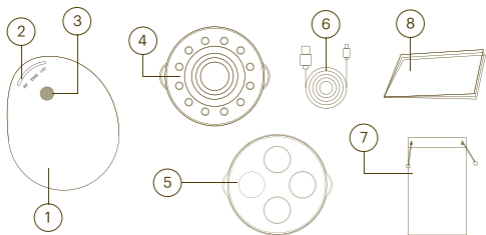

1. Корпус массажера
2. Световой индикатор уровня воздействия / уровня заряда
3. Кнопка вкл/ выкл/ переключение интенсивности
4. Насадка RF&LED
5. Насадка EMS


6. Кабель для зарядки USB-C
7. Мешочек для хранения
8. Инструкция

Комплектация

Корпус устройства x1, насадка EMS x1, насадка RF&LED x1, зарядный кабель USB-Туре С x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Массажер для тела КЮ имеет 2 насадки: насадку с крупными шарами для работы в режиме EMS и насадку с кольцом и мелкими шарами для работы в режиме RF&LED. Установите насадку в корпус девайса: для этого совместите углубление на обратной стороне массажной головки с выпуклой частью в отверстии для насадок корпуса девайса.

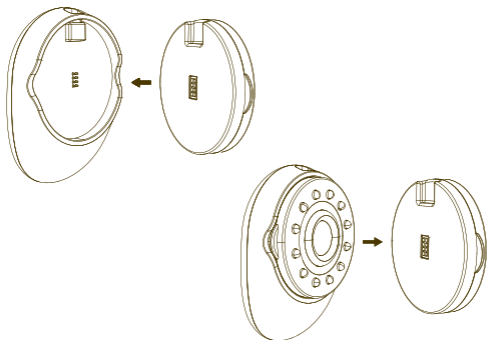

2. После установки насадки длительным нажатием (2 сек) на кнопку вкл/ выкл включите массажер. В зависимости от выбранной насадки запустится режим EMS или RF&LED, загорится индикатор уровня воздействия.
3. Как в режиме EMS, так и в режиме RF&LED представлено 3 уровня силы. Для переключения уровня повторно нажимайте на кнопку переключения уровня интенсивности. Световой индикатор постепенно заполняется по мере увеличения уровня силы. После достижения максимального уровня при повторном нажатии кнопки переключения уровня девайс автоматически перейдет на минимальный уровень интенсивности воздействия. Обратите внимание, что в режиме RF&LED меняется только уровень интенсивности RF, LED остается постоянным.
4. В массажере установлен смарт-таймер, устройство выключится через 5 минут работы.
5. Для выключения прибора нажмите на кнопку вкл/ выкл и удерживайте в течение 2-ух секунд.
6. Для того чтобы снять насадку, возьмите устройство одной рукой, второй рукой возьмитесь за ушки на массажной головке. С силой потяните насадку на себя, достаньте ее из корпуса девайса.

Способ применения

Общие рекомендации

- Используйте массажер на чистой коже, удалите излишки масла и любые загрязнения с тела.
- Если ваш контактный гель или уходовое средство впиталось в кожу в процессе массажа, нанесите средство повторно, чтобы обеспечить свободное движение (скольжение) массажера и усилить эффективность воздействия. Перемещаясь по разным частям тела, наносите контактный гель на кожу той области тела, по которой вы планируете работать перед началом массажа.

- Массажер КЮ оснащен датчиком движения. Во время использования обязательно перемещайте устройство по коже. Если вы оставите девайс на одном месте без движения в течение длительного времени, он перестанет работать. После возобновления движения, девайс снова начнет работать.

- Просим вас избегать повторяющихся движений в одной и той же области в течение длительного времени, пожалуйста, не держите массажер неподвижно в определенной точке. У разных людей разный болевой порог и чувствительность кожи: удержание устройства без движения на определенной области может привести к небольшим ожогам. Во время использования не задерживайтесь на одном месте дольше 2-3 секунд.

- Чувствительность кожи и результативность работы девайса — это индивидуальные характеристики, которые различаются в зависимости от человека и области воздействия.

Режим EMS

1. Нанесите на кожу контактный гель проводник или ваше уходовое средство на водной основе гелеобразной структуры, что обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.

2. Установите насадку согласно режиму, который вы хотите использовать.

3. Включите устройство, для первого применения выберите начальный уровень интенсивности EMS.



4. Для массажа талии проводите устройством по бокам, двигаясь от периферии к центру в течение 5 минут.



5. Для массажа ног проводите устройством по бедру/ голени, двигаясь по направлению вверх в течение 5 минут.



6. Для массажа рук проводите устройством по плечу от локтевого до плечевого сустава в течение 5 минут.



7. Для массажа живота двигайтесь устройством вверх вниз зигзагом, избегая области пупка, в течение 5 минут.

8. Во время массажа обязательно прикладывайте достаточное давление, чтобы обеспечить полный контакт поверхности электродов с кожей.

9. После завершения процедуры выключите девайс, снимите и очистите насадку. Контактный гель или уходовое средство оставьте на коже до полного впитывания, после чего очистите кожу.

Режим RF

1. Нанесите на кожу контактный гель проводник или ваше уходовое средство на водной основе гелеобразной структуры, что обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.

2. Установите насадку согласно режиму, который вы хотите использовать.

3. Включите устройство, для первого применения выберите начальный уровень интенсивности RF&LED.

4. Выберите область воздействия и выполните массажные движения, перечисленные ниже.



5. Используя скользящие движения, передвигайтесь по направлению текстуры кожи в течение 5 минут.



6. Скользяте по горизонтали в течение 5 минут.



7. Круговыми движениями двигайтесь по часовой стрелке в течение 5 минут.



8. Повторяйте круговые движения против часовой стрелки в течение 5 минут.

[Примечание]: основа функции RF — нагревание кожи для стимуляции регенерации коллагена и метаболизма подкожного жира. Если температура нагрева ощущается вами недостаточной, уменьшите скорость скольжения, если же температура напротив слишком высокая, увеличьте скорость движения, чтобы температура ощущалась комфортно.

9. После завершения процедуры выключите девайс, снимите и очистите насадку. Контактный гель или уходовое средство оставьте на коже до полного впитывания, после чего очистите кожу.

Частота и длительность использования

- Используйте один или оба режима в зависимости от ваших потребностей.
- В девайсе предусмотрен смарт-таймер: девайс выключится автоматически по истечении 5 минут. Данное время отделяет конкретный отрезок единовременного сеанса. Если вы хотите продолжить массаж, повторно включите устройство.
- Если вы работаете на одной и той же области, делайте перерыв в использовании массажера минимум 1 день между сеансами.
- Используйте девайс 3 раза в неделю, на протяжении минимум 6-8 недель. По истечении данного срока рекомендуем использовать массажер на постоянной основе для достижения лучших результатов. Частота и длительность использования может быть определена в соответствии с вашими потребностями.

Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что девайс выключен.
- После каждого использования очищайте насадки и корпус массажера. Данное устройство имеет уровень водонепроницаемости IPX6 — допустимо прополаскивать его под водой. Однако запрещено погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
- После чистки вытирайте остатки воды сухой тканью.
- Не используйте для чистки устройства металлические мочалки, абразивные чистящие средства, химикаты или едкие жидкости.

Хранение

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от попадания пыли.
- Храните устройство вдали от повышенных температур.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Если вы планируете на долгое время воздержаться от использования девайса, зарядите его перед тем, как убрать на хранение.

Зарядка

- При заряде аккумулятора менее 10%, индикатор заряда начинает быстро мигать.
- При заряде аккумулятора 0% индикатор заряда мигает 5 раз, после чего устройство выключается.
- Подключите зарядный кабель с разъемом Type-C к разьему устройства, обратный конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру.
- Во время зарядки индикатор заряда аккумулятора постепенно заполняется и вновь гаснет.
- Девайс не работает во время зарядки.
- При 100% заряде аккумулятора индикатор заряда полностью заполнен и горит постоянно.

Меры предосторожности

Внимательно изучите данное руководство пользователя перед использованием и сохраните для будущих применений.

Предупреждения

— устройство не является игрушкой. Храните в недоступном для детей месте;

- используйте это устройство осторожно в соответствии с указанными рекомендациями. Несоблюдение инструкций может вызвать нежелательные последствия;
- неконтролируемое использование устройства на одном участке тела в течение длительного времени может привести к потенциальному повреждению кожи;
- не используйте данный прибор с легковоспламеняющимися косметическими средствами;
- не используйте это устройство на области вокруг глаз;
- не используйте устройство в области живота во время беременности;
- перед использованием устройства проверяйте его на наличие повреждений. Если массажер работает некорректно, сломан или поврежден, не используйте его;
- проведите тест на чувствительность за 24 часа до первого применения устройства. Нанесите небольшое количество контактного геля на внутреннюю часть предплечья, чтобы убедиться, что ни уходное средство, ни массажер не вызывают кожной реакции;
- не используйте девайс слишком долго на участках тела, объем которых вы не хотите уменьшать;
- при использовании в сухой среде обращение с этим устройством может привести к образованию статического электричества. Это нормальное явление. Оно не влияет на использование массажера;
- держите зарядный кабель USB-C и разъем устройства для зарядки сухими. Не используйте прибор во время зарядки;
- будьте осторожны при использовании вашего контактного геля или уходного средства, масла и кислоты в составе косметических средств могут повредить покрытие девайса;
- перед применением проконсультируйтесь с врачом;
- прекратите использование, если вы чувствуете дискомфорт или испытываете какую-либо побочную реакцию, при появлении аллергии, кожных заболеваний, дерматита и пр.

Противопоказания

Запрещено использовать устройство:

- лицам с кардиостимулятором или другим электронным медицинским оборудованием;
- лицам, страдающим от аллергии;
- лицам, страдающим диабетом, красной волчанкой, порфирией, застойной болезнью сердца, нарушениями свертываемости крови или имеющим аутоиммунные заболевания (например, ВИЧ или СПИД);
- если у вас есть действующие импланты, такие как кардиостимулятор или внутренний дефибриллятор;
- лицам, страдающим аритмией или любыми другими заболеваниями сердца;
- если у вас есть какие-либо постоянные металлические импланты или пирсинг в области использования прибора;
- если у вас есть какие-либо неопознанные поражения кожи;
- если вы проходите курс радиотерапии или химиотерапии;
- если у вас есть заболевания, вызванные воздействием тепла;
- это устройство подходит для использования на растяжках, вызванных ожирением или беременностью. Однако данное устройство не используется для лечения шрамов.

Запрещено использовать устройство, если вы принимаете какое-либо из перечисленных медицинских средств:

- если в настоящее время или в недалеком прошлом ваша кожа обрабатывалась альфа-гидрокислотами (АНА), бета-гидрокислотами (ВНА), локально изотретиноином или азелаиновой кислотой;
- если в течение последних 6 месяцев вы принимали любую форму Роаккутана А;

— если вы принимаете фотосенсибилизирующие препараты или прочие лекарства, прописанные врачом. Пожалуйста, перед использованием массажера ознакомьтесь с инструкцией по применению вашего медицинского препарата. Если в инструкции указано, что лекарственное средство может вызывать фотоаллергические или фототоксические реакции, или если в ней показано избегать воздействия солнечного света, пожалуйста, откажитесь от использования данного устройства;

— если вы принимаете антикоагулянтные препараты, включая большие дозы аспирина, используйте массажер только через неделю после окончания лечения.

Прочее:

— допустимо использовать данный аппарат на руках, талии, животе, бедрах, ягодицах. Не используйте устройство на лице, шее, груди, в области генеталий и на участках тела, подвергнувшимся пластическим операциям в течение последних 3-х месяцев;

— не используйте устройство в режиме LED терапии, если ваша кожа чувствительна к свету, склонна к появлению сыпи, аллергическим реакциям;

— не используйте устройство в режиме LED терапии, если в области использования массажера есть инфекции, экзема, ожоги, воспаление волосяных фолликулов, открытые раны, синяки, простой герпес, поражения кожи или гематомы;

— не направляйте в глаза и не смотрите на источник света в данном массажере;

— не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство. Не используйте этот аппарат для каких-либо иных целей, кроме указанных в данной инструкции по эксплуатации.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причины
Устройство после включения не работает.	Низкий уровень заряда или полная разрядка аккумулятора.
Способы устранения	
Зарядите девайс в соответствии с инструкцией.	

Неисправность	Причины
Нагрев не ощущается.	1. Вы нанесли недостаточно контактного геля. 2. Вы перемещаете девайс по телу слишком быстро. 3. Устройство прекратило работать.
Способы устранения	
1. Нанесите гель проводник или ваше уходовое средство на кожу. 2. Медленней передвигайте девайс по телу. 3. Продолжите массажные движения с умеренной скоростью.	

Рекомендация: если устройство работает некорректно, несмотря на принятые вами меры, пожалуйста, прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с организацией, уполномоченной производителем на принятие претензий от потребителей.

Гарантия

На Массажер-миостимулятор для тела KIO от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

KIO

МАССАЖЕР-МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТЕЛА

Артикул: **TBW-001**

Материал: **ABS пластик**

Размер: **(ВхШхГ) 107х88х32 мм**

Вес: **317 гр**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **10,6 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14. 8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

