



Руководство по использованию умных Bluetooth-весов

Модель SC-310



25 Показателей вашего организма

Вес	ИМТ	Телесный жир	Мышечная масса	Висцеральный жир	Соотношение белка	Уровень воды	Уровень подкожного жира	Пульс
BMP	Костная масса	Степень ожирения	Скелетные мышцы	Жировая масса	Состояние здоровья	Возраст тела	Мышечная скорость	
Уровень скелетных мышц %	Контроль мышц	Нормальный вес	Контроль жира	Контроль веса	Безжировая масса	Оценка здоровья	Телосложение	

Меры предосторожности

- Беременным женщинам и пользователям, использующим кардиостимуляторы, рекомендуется отказаться от режима биоимпеданса и использовать умные весы как обычные (вы узнаете ваш вес и ИМТ)
- Пожалуйста, установите весы на твёрдую ровную поверхность
- Не прыгайте на платформу весов
- Детям следует пользоваться весами только под присмотром взрослых
- Перед взвешиванием убедитесь, что ваши стопы чистые и сухие
- Для более точных данных советуем вам взвешиваться в одинаковое время каждый день
- Не мочите весы и не протирайте поверхность весов маслом или абразивными веществами
- Убедитесь, что батарейки установлены правильно/аккумулятор заряжен
- Весы не являются медицинским устройством и не могут полностью заменить консультацию врача
- Результаты измерений можно использовать в личных целях для контроля состояния вашего тела

Установка батареек

Откройте отсек для батареек, вставьте их в правильной полярности
Если на дисплее высвечивается “Lo”, значит заряд батареи очень низкий.
Необходимо заменить батарейки/

Автоматическое выключение

Если вы закончили измерение и весы не используются, то через 10 секунд устройство автоматически выключится. Автоматическое выключение также происходит при перегрузе на 2,5 кг от максимально допустимого веса.

Правильное положение тела при взвешивании

- 1) Поставьте весы на твердую ровную поверхность
- 2) Встаньте на весы босиком, поставьте ноги на датчики на поверхности
- 3) Постарайтесь не двигаться во время взвешивания


Скачайте
мобильное
приложение
Unique Health
для отслеживания
своих результатов



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

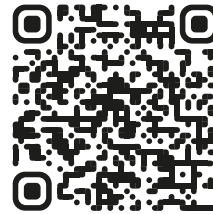

- 1) Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне, скачайте и откройте приложение “ Unique Health”. При первом использовании вам необходимо зарегистрироваться в приложении. Пройдите регистрацию и введите вашу персональную информацию
- 2) Перед началом подключения убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен/ батарейки вставлены. Так же необходимо разрешить Bluetooth и GPS подключения

11:36

Unique Health

Авторизоваться

Почта

Пароль

☒ Запомнить пароль

Авторизоваться

Войти | Забыли пароль

10:32

←

Согласие пользователя

Условия эксплуатации >

политика конфиденциальности >

☐ Я прочитал и согласен с условиями использования и политикой конфиденциальности


☐ Держите меня в курсе о Unique Health

Следующий шаг

11:35

←

Персональная информация




Никнейм Daria >

Пол Женский >

День рождения 1999-07-25 >


Рост 173cm >

Аватар пользователя устройства  >

Сохранить


Подключение устройства

После регистрации откройте вкладку “Мой/ Мой профиль” - “ Управление оборудованием” - “+ Добавить устройство”

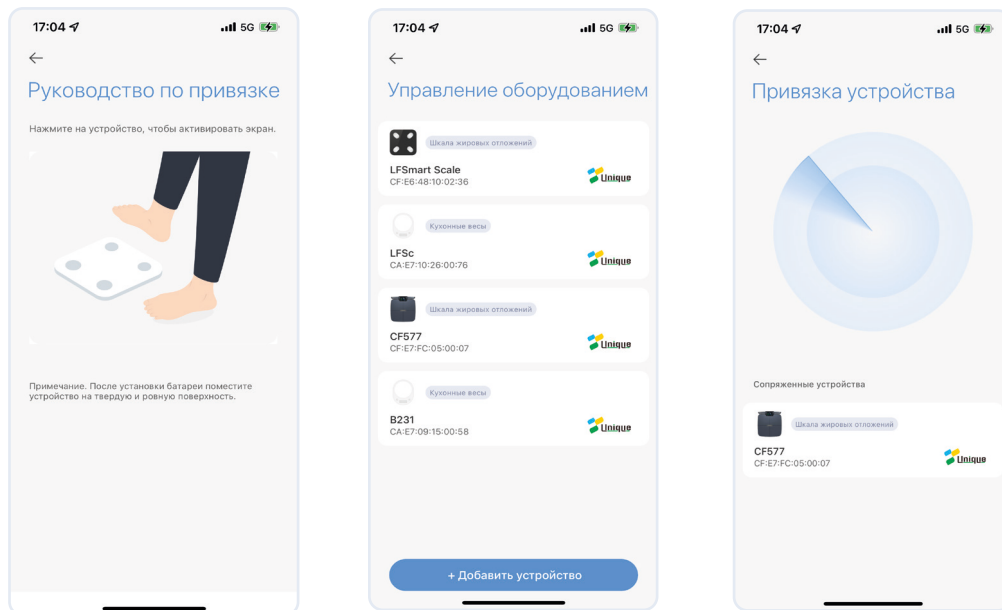

Начало взвешивания




Поставьте весы на ровную твёрдую поверхность, нажмите на иконку весов, к которым вы присоединились, нажмите кнопку “Взвеситься”/”Измерение на шкале”

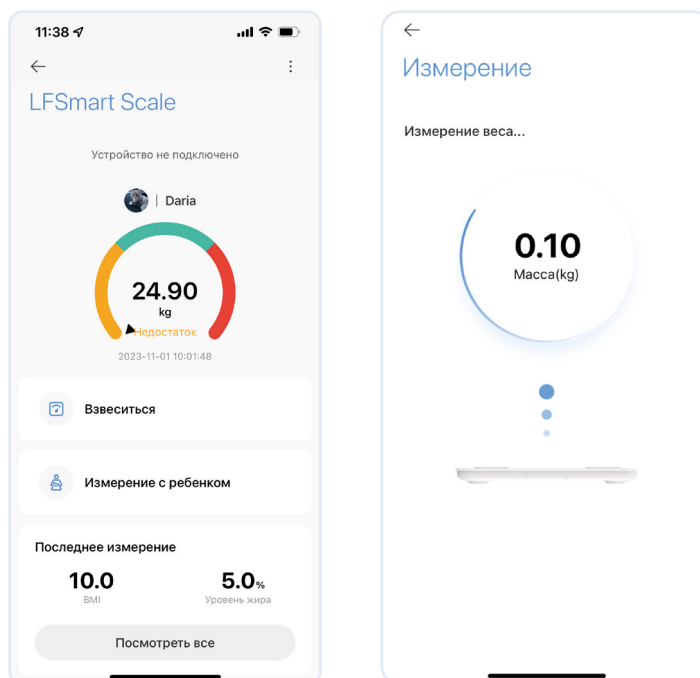

Добавить пользователя

Вы можете добавить пользователя в приложении следующим способом:

Мой профиль - Управление участниками - Добавить участников

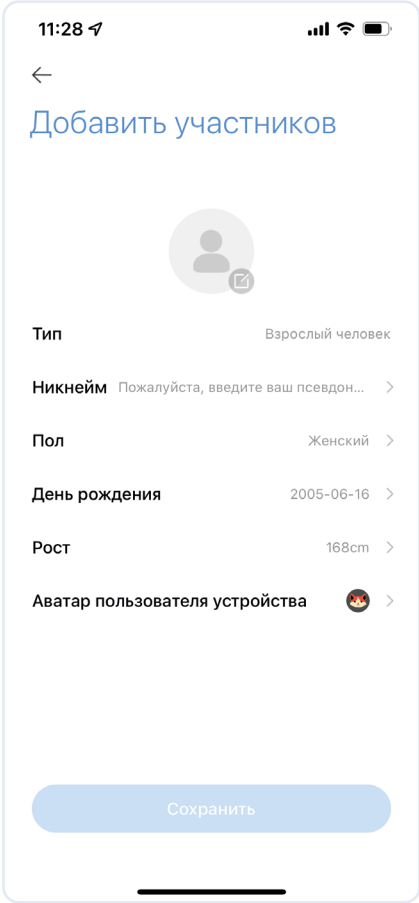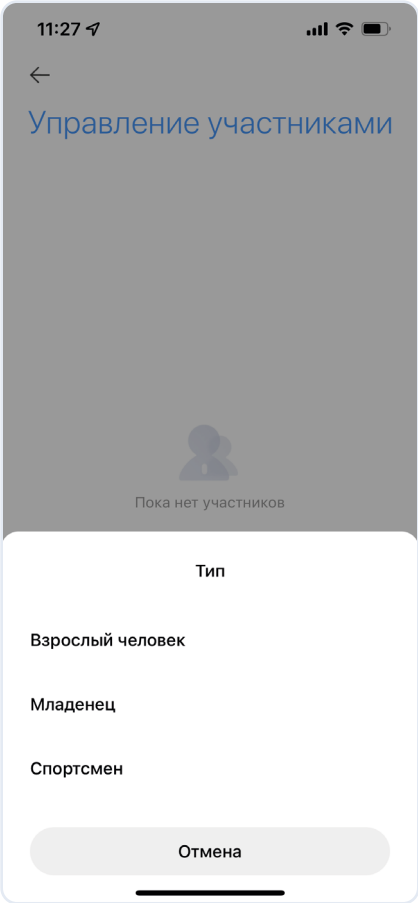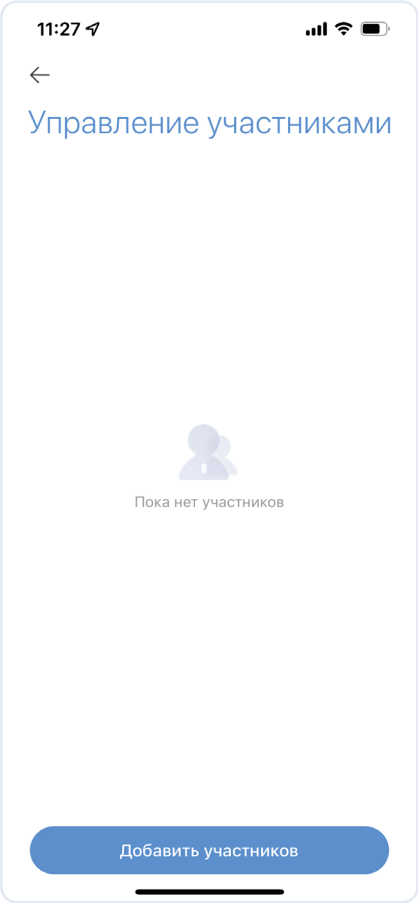

Результаты измерений

- 1) После взвешивания данные отобразятся в приложении.
- 2) Нажмите на иконки результатов, чтобы прочитать информацию о показателях подробнее



Если вы хотите взвесить ребёнка, то добавьте нового пользователя “Младенец” и затем нажмите кнопку **“Измерение с ребенком”**.

Правила взвешивания: Сначала взвешивается только взрослый, затем он берет на руки ребёнка. Следуйте советам как правильно взвесить ребёнка в приложении. После измерений в приложении отобразится профиль ребенка и его вес.

В приложении вы можете открыть архив ваших взвешиваний и отчет по измерению. История ваших взвешиваний доступна по кнопкам:

Последнее измерение - Посмотреть все

Выберите нужную вам запись взвешивания и просмотрите результаты.

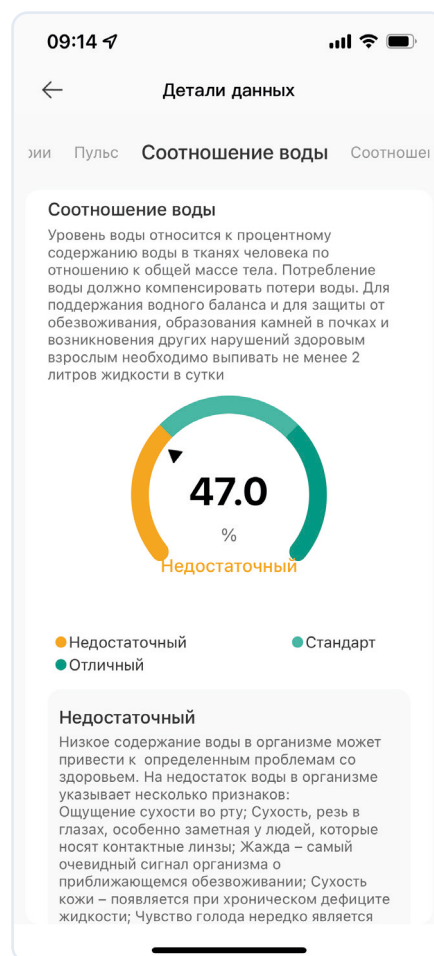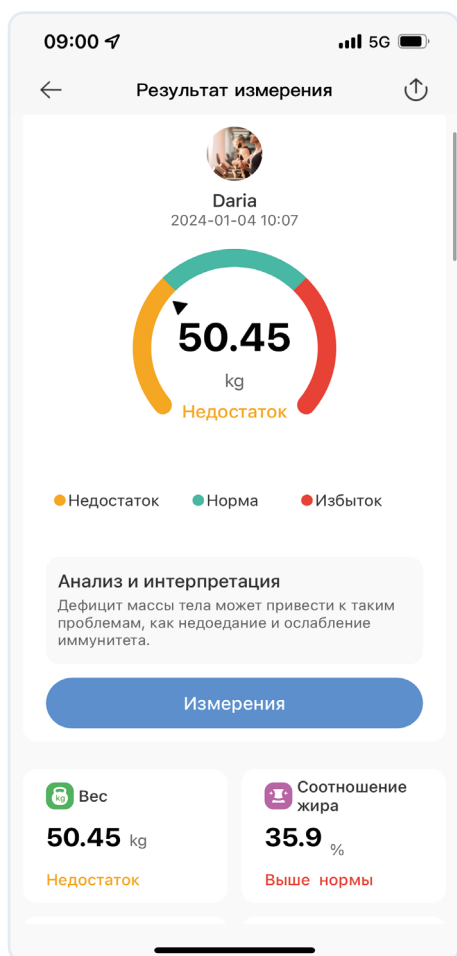

FAQ

Как происходит калибровка весов?

Калибровка устройства происходит автоматически. Поставьте весы на твердую ровную поверхность, включите, наступите и дождитесь, пока весы вернутся в положение “0.00”

На дисплее отображено “Err”

Убедитесь, что ваши стопы и поверхность чистые и сухие. Если есть какие-либо загрязнения или жидкость, это мешает работе датчиков.

Убедитесь, что нет перегруза

Нет данных после взвешивания

Проверьте подключение Bluetooth

Убедитесь в сухости ваших стоп и поверхности весов

Встаньте босиком ровно, чтобы ваши стопы равномерно касались датчиков

Если не отображается измерение пульса, то убедитесь, что вы стояли ровно и неподвижно

Весы не подключаются к приложению:

Проверьте соответствует ли ваша версия Android или IOS требуемым

Для Android 5 и выше включите GPS перед подключением по Bluetooth

Для IOS11 - убедитесь, что Bluetooth соединение подключено

Если вы уже подключали свой телефон к другим девайсам по Bluetooth, рекомендуем временно отключить их перед первым подключением к весам

Техническая спецификация устройства

Название устройства	Умные Bluetooth-весы
Модель	SC-310
Подключение	Bluetooth
APP	Unique Health or Customized APP
Показатели здоровья	2 шт
Размер весов	280*280*23.5 мм
Мин. Макс. вес	0.1 - 180 кг
Шкала	100 г
Единицы измерения	кг / фунт
Дисплей	LED
Питание	2 шт AAA батареек
Низкий заряд батареи	Lo
Перегруз	Err
Точность	±200 г (0-49.9 кг) ±300 г (50-99.9 кг) ±400 г (100-149.9 кг) ±600 г (150-179.9 кг)
Требования к устройствам:	Bluetooth 4.0 Android 4.3 and above IOS 8.0 and above