

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В наборе 6 многофункциональных насадок.



2 СТАНДАРТНЫЕ НАСАДКИ для глубокого очищения межзубных промежутков.

Предназначены для ежедневной чистки и поддержания полноценной гигиены полости рта. Необходимо встать над раковиной и направить наконечник струи к зубам и деснам вверх, чтобы запустить струю воды. Держите рот слегка приоткрытым, чтобы вода стекала в раковину. Направьте струю воды на линию десен под углом 90 градусов, чтобы контакт происходил в месте соединения зуба и десны. Регулируйте поток воды от зуба к зубу, не забывая делать короткие паузы в межзубных промежутках.



1 ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКАЯ НАСАДКА для массажа десен, очищения десневого края и десневых карманов, способствует лечению гингивита, пародонтита.

Поместите пародонтальный наконечник в полость рта между зубами и десной. Прислоните мягкий прорезиненный наконечник к зубу под углом 45 градусов и осторожно введите наконечник в десневой карман. Включите ирригатор, установив его на минимальное давление, и проведите чистку, аккуратно следуя по десневой линии, вводя пародонтальный наконечник между зубами. Продолжайте проводить вдоль линии десен, чтобы массировать десны, что помогает направить поток воды или жидкие пероральные лекарства под слизистую оболочку десны.



1 ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ НАСАДКА предназначена для одновременной чистки и ополаскивания труднодоступных мест вокруг брекетов, коронок, мостов и имплантатов.

Используйте ортодонтический наконечник для одновременной чистки и ополаскивания труднодоступных мест вокруг брекетов, коронок, мостов и имплантатов. Рекомендуем начинать с последнего заднего зуба. Расположите наконечник под углом 90 градусов к зубу у линии десны. Аккуратно проведите наконечником вдоль десны, делая короткие паузы, чтобы слегка почистить область между зубами и вокруг брекетов и других стоматологических конструкций, а затем переходите к следующему зубу и внешней стороне верхних и нижних зубов. Продолжайте процесс, пока не очистите всю внутреннюю поверхность.



1 НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЯЗЫКА. Насадка в виде лопатки-ложечки, эффективно снимает бактериальный налет с языка.

Наклоните голову над раковиной. Переведите кнопку давления в ирригаторе в нижнее положение. Отключите ирригатор, поместите длинный очиститель на заднюю часть языка и продвиньте его вперед, чтобы очистить язык. Установите давление на самый низкий уровень и регулируйте его по мере удобства, постепенно увеличивая давление воды. Повторяйте движения плавно, очищая язык.



1 НАСАДКА - ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Головка щетки сконструирована в соответствии с рекомендациями стоматологов для чистки зубов. Насадка убирает зубной налет и тщательно очищает поверхность каждого зуба и промежутки у десен, не повреждая при этом саму десну.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ИСПРАВЛЯЮЩИЕ МЕРЫ
Протечки в резервуаре	Проверить уплотнительное кольцо неисправно	Снимите уплотнительное кольцо и установите на место
Низкий уровень давления воды	Низкий заряд батареи	Перезарядите устройство
	Блоки форсуночных головок	Замените на новые насадки
Работает всего несколько минут с полным зарядом	Разряжена батарея	Обратитесь к производителю
	Шнур для зарядки	Попробуйте использовать новый кабель для зарядки
	Сломанный адаптер	Попробуйте использовать новый адаптер
Мотор издает звук, но вода не выходит	Блоки форсуночных головок	Заменить новыми наконечниками
	Смещение всасывающего клапана	Держите прибор включенным, наполните водой отверстие, в которое входит головка форсунки
Мотор не издает звук	Разряженная батарея (устройство находится в режиме ожидания более 3 месяцев)	Активируйте батарею, заряжая ее в течение 16 часов
Прибор внезапно перестал работать	Включена защита от перегрева (непрерывное использование 5 резервуаров воды с максимальным давлением)	Перезагрузите устройство через 2 часа

Если проблема с устройством все еще не устранена вышеуказанными способами, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для получения помощи.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:


- на расходные материалы и комплектующие;
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания;
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению;
- на неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц и домашних животных, явления природы, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;
- на внешние и внутренние загрязнения, трещины, царапины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в результате естественного износа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия на ирригатор - 24 месяца.
Сохраняйте данную инструкцию

Эксклюзивный представитель в России:
ООО «Веллес Групп»,
Казань, ул.Меридианная, д.4, ОЦ №3, оф.14

☎ ☎ ☎ Тел: +7 (906) 111 23 23
E-mail: link@pecham.ru
Сайт: www.pecham.ru

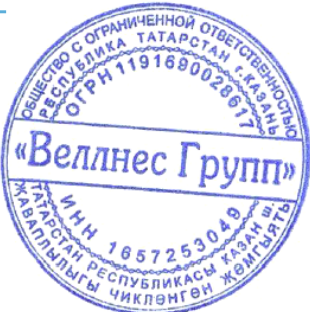

РЕСНАМ

ACTIVE WHITE PC-2000

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Руководство по эксплуатации

www.pecham.ru

link@pecham.ru



Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в конце настоящего руководства по эксплуатации.

Уважаемый Покупатель!

Спасибо, что Вы выбрали нашу продукцию PESCHAM в качестве ежедневного использования по уходу и поддержания правильной гигиены полости рта. Ведь одной из основ здоровой жизни являются здоровые зубы и красивая улыбка! В этом и есть миссия нашей компании!

Будем Вам благодарны за оставленный отзыв на нашем сайте или у партнеров-маркетплейсах, где приобретался товар. Это позволит нам более тщательно следить за качеством продукции и совершенствоваться.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и храните его в надежном месте для дальнейшего использования. В случае возникновения вопросов по работе в процессе эксплуатации, техническим характеристикам Вы всегда можете связаться с службой поддержки для клиентов. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы.

Наши контакты указаны в инструкции и на упаковке товара.

Здоровья Вам и Вашим близким!


С уважением,
Генеральный директор
Ильназ Габдуллин

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- ① Насадки 6 шт.
- ② Регулятор вращения наконечника
- ③ Кнопка извлечения насадки
- ④ Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- ⑤ Кнопка выбора режима
- ⑥ Индикаторы режима (5 режимов)
- ⑦ Индикатор зарядки
- ⑧ Разъем питания
- ⑨ Резервуар для воды на 300 мл
- ⑩ Крышка резервуара для воды

АКСЕССУАРЫ

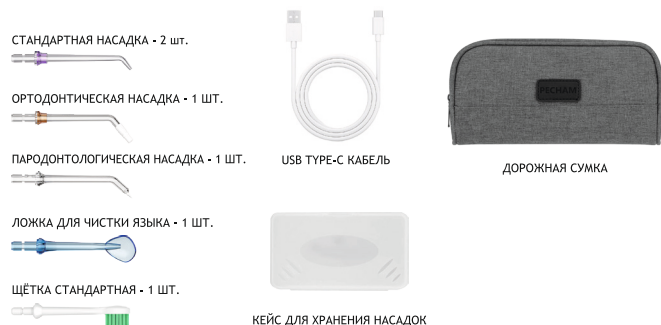

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Модель:**
PESCHAM ACTIVE WHITE PC-2000
- **Объем резервуара:**
300 мл
- **Уровень давления воды:**
от 280 до 760 кПа
- **Частота пульсации струи:**
от 1200 до 1400 импульсов в минуту
- **Метод подачи воды:**
пульсирующая струя воды
- **Напряжение:** 5V
- **Мощность:** 21W
- **Способ зарядки:**
USB Type-C кабель (без адаптера)
- **Питание:**
аккумулятор Li-ion, 2500 мА·ч
- **Время полной зарядки:**
5 часов
- **Степень защиты водонепроницаемости:**
IPx7
- **Насадки ТИП В:**
высота вводной части 1,8 см
- **Вес:** 300 г
- **Цвет:** белый

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте этот прибор только в соответствии с инструкциями или рекомендациями стоматолога.
- Используйте только насадки (типа В) и аксессуары, которые рекомендованы компанией PESCHAM.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия на приборе.
- Держите зарядное устройство и шнур вдали от нагретых поверхностей и не помещайте их в воду.
- Не используйте этот прибор на открытом воздухе или в местах, где применяются аэрозольные (распыляемые) средства или подается кислород.
- Не используйте йод, физраствор (солевой раствор) или нерастворимые в воде концентрированные эфирные масла в этом приборе. Их использование может снизить эффективность работы и сократить срок службы изделия. Использование этих продуктов может привести к аннулированию гарантии.
- Заполняйте резервуар только водой или специализированными растворами для ирригаторов.
- Перед использованием этого продукта снимите все посторонние предметы, украшения с полости рта. Не используйте прибор, если у вас есть открытая рана на языке или в полости рта.
- Не подключайте это устройство к сети с напряжением, отличным от напряжения, указанного на устройстве или зарядном устройстве. Неправильное напряжение приведет к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- Если изделие вскрыто/разобрано по ЛЮБОЙ причине, гарантия аннулируется.
- Не используйте изделие, если у него поврежден шнур или вилка, если оно не работает должным образом, в случаях повреждения или урона в воду.
- Не направляйте воду под язык, в ухо, нос или другие чувствительные места, области, из-за мощного создаваемого давления в устройстве есть большая вероятность повреждения указанных мест.
- Рекомендуется использовать только очищенную фильтрованную воду.
- Возрастные ограничения 14+. Использование ирригатора в более раннем возрасте разрешено только после консультации лечащего врача стоматолога и под тщательным контролем взрослого.

Рекомендуем использование специализированных жидкостей PESCHAM, разработанных специально для ирригаторов:

- «Антибактериальная жидкость для ирригатора-ополаскиватель 2в1»
- «Отбеливающий концентрат жидкость для ирригатора + ополаскиватель».



ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Данный продукт поставляется с универсальным кабелем USB Type-C. Индикатор заряда на рукоятке мигает красным цветом и горит непрерывно, когда устройство полностью зарядится. Полная зарядка устройства занимает 5 часов.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием необходимо заполнить резервуар для воды. Для залива воды аккуратно откройте крышку резервуара, залейте воду, закройте крышку до щелчка.

Объем залитой воды не должен превышать 300 мл.

Рекомендуется использовать воду не выше 45 °С.

Перед первым использованием промойте резервуар под струей воды, слейте оставшуюся воду.

Резервуар для воды снимается простым поворотом.

Поместите устройство на ровное место. Держите резервуар для воды в одной руке, а другой рукой поворачивайте корпус ирригатора по часовой стрелке. Чтобы установить его обратно, поверните в противоположном направлении.

УСТАНОВКА НАСАДКИ

В комплект входят 6 сменных насадок. Вставьте выбранную Вами насадку в отверстие для насадок в верхней части корпуса до щелчка. Чтобы извлечь насадку, нажмите на специальную кнопку на корпусе прибора и потяните насадку на себя.

ВНИМАНИЕ: Не нажимать кнопку извлечения насадки во время работы прибора.

НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Вы можете отрегулировать напор, нажав кнопку режима на ручке. Начните с самого низкого значения и увеличивайте его по своему усмотрению.

После окончания процедуры выключите прибор. Удалите всю жидкость, оставшуюся в резервуаре.

После использования оставьте ирригатор в рабочем состоянии еще 2-3 секунды, чтобы слить оставшуюся жидкость.

5 РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

- 1) Высокая мощность
- 2) Глубокая чистка
- 3) Ежедневная чистка
- 4) Средняя мощность
- 5) Малая мощность