

РЕСНАМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА РЕСНАМ ORAL CARE

PC-3200, PC-3201, PC-3202



Перед эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и сохраните данное руководство для последующего использования.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда РЕСНАМ. В современном мире очень важно следить за здоровьем, так как это является основой счастливой жизни. Наша компания стремится к постоянному развитию для того, чтобы обеспечить Вас качественной продукцией.

Мы всегда рады обратной связи, поэтому будем Вам благодарны за оставленный отзыв на нашем сайте или у партнеров-маркетплейсов. Это позволит нам более тщательно следить за качеством продукции и совершенствоваться в дальнейшем.

Если у Вас появятся дополнительные пожелания или вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам! Контактная информация указана в инструкции и на упаковке товара.


Здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением,
Генеральный директор
Ильназ Габдуллин

Электрическая зубная щетка РЕСНАМ Oral Care представляет собой устройство, предназначенное для ежедневной гигиены полости рта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Рукоятка (электронный блок) – 1 шт.
2. Сменные насадки – 4 шт.
3. Зарядный кабель USB Type-C – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

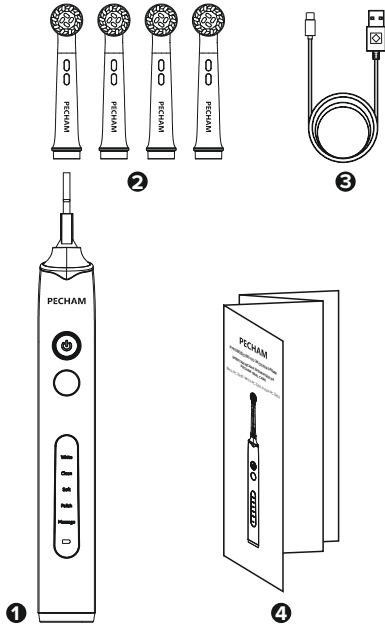

ОПИСАНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	РЕСНАМ Oral Care
Модель	PC-3200 (Black) PC-3201 (White) PC-3202 (Purple)
Номинальное напряжение	3,7 V
Номинальная мощность	3W
Входное напряжение	5V
Потребляемая мощность	2W
Режимы работы	5 режимов (отбеливание, чистка, деликатная чистка, полировка, массаж)
Время работы	Более 23 дней при полной зарядке (в режиме "Отбеливание" в течение 2 минут дважды в день)
Аккумулятор	3,7 В, 700 мАч (2,59 Втч) заряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время полной зарядки аккумулятора	Около 4 часов
Тип зарядки	USB Type-C
Степень защиты корпуса	IPX7
Размер продукта	28,3*25,5*238 мм
Вес нетто	111 гр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Устройство не предназначено для использования детьми до 14 лет или лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями при отсутствии у них достаточного опыта или знаний по эксплуатации устройства, или если они не находятся под контролем лица, отвечающего за их безопасность.
2. Не позволяйте детям играть с устройством и его комплектующими.
3. Не включайте и не используйте повреждённое устройство.
4. Каждый из членов семьи должен пользоваться индивидуальной сменной насадкой.
5. Используйте только оригинальные сменные насадки.
6. В устройстве установлен несъемный аккумулятор. Не пытайтесь его извлечь.
7. Запрещается мыть устройство и его комплектующие в посудомоечной машине.
8. Не заряжайте устройство на открытом воздухе, вблизи источников тепла, а также в местах с повышенным риском падения устройства в воду (например, на раковине или в ванне)
9. Не опускайте и не роняйте зарядное устройство в воду и другие жидкости.
10. Не используйте устройство во время принятия душа или ванны.
11. Не погружайте устройство в воду на длительное время.
12. Не подвергайте устройство и его комплектующие воздействию прямых солнечных лучей, отрицательных и высоких температур.
13. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что номинальное напряжение и частота, указанные в технической документации, соответствуют параметрам электросети.
14. Не подключайте устройство к источнику питания мокрыми руками.
15. Используйте прибор только по целевому назначению, описанному в данном руководстве.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При наличии кардиостимулятора, заболеваний полости рта, а также после хирургического вмешательства в ротовую полость перед использованием устройства необходимо проконсультироваться с врачом.
2. При первичном использовании зубной щетки возможно возникновение кровоточивости дёсен. Если данная проблема не решается в течение 14 дней, рекомендуем обратиться к стоматологу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Если индикатор заряда мигает красным цветом, или устройство вовсе не включается, необходимо своевременно произвести зарядку аккумулятора.

1. Подключите кабель зарядки к зубной щетке и к источнику питания.
2. Во время зарядки индикатор горит **красным** цветом.
3. При полной зарядке аккумулятора индикатор загорится **зеленым** цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если прибор используется впервые или не был в использовании более 3 месяцев, рекомендуем зарядить устройство в течение 4 часов. В процессе зарядки прибор может нагреться, что является нормой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ

- 1. Установите насадку на рукоятку зубной щетки (Рис. 1) так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
- 2. Нанесите зубную пасту на поверхность щетки.
- 3. Поместите головку щетки в рот во избежание разбрызгивания пасты во время начала работы.
- 4. Включите устройство однократным нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Настройте предварительно режим, воспользовавшись кнопкой Выбора режима. При включении щетки загорится индикатор режима чистки. (Рис. 2, 3).

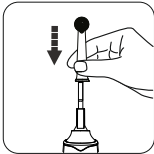


Рис. 1

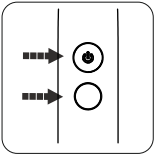


Рис. 2

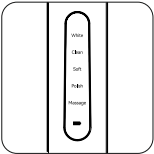


Рис. 3

РЕЖИМЫ ЧИСТКИ

- «Отбеливание» - эффективное устранение мягкого зубного налета, профилактика образования зубного камня
- «Чистка» - оптимальный вариант для ежедневного использования
- «Деликатная чистка» - идеально подходит для чувствительных зубов и десен, а также для носителей ортодонтических конструкций
- «Полировка» - придает зубной эмали здоровой блеск и гладкость
- «Массаж» - профилактический массаж подходит для чувствительных десен, стимулирует кровообращение, что положительно сказывается на состоянии десен

- 5. Медленно ведите щётку от зуба к зубу, уделяя внимание каждому из них.

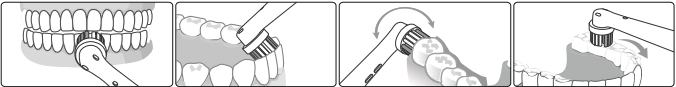


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

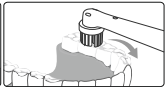


Рис. 7

- 5.1. Начните чистку внешней части поверхности зубов. Расположите щетку горизонтально и перемещайте ее медленно вдоль линии десны (Рис. 4).
- 5.2. Далее переходите на внутреннюю поверхность зубов. Задерживайтесь у нижних резцов, здесь часто образуется зубной камень (Рис. 5).
- 5.3. После медленно очищайте жевательные зубы, уделяя особое внимание межзубным промежуткам (Рис. 6, 7).
- 5.4. Стоматологи рекомендуют во время чистки зубов разбивать челюсти на четыре квадранта: верхний правый, верхний левый, нижний правый и нижний левый. И каждому из них уделять по 30 секунд. Зубная щетка ненадолго останавливается, чтобы напомнить вам о переходе в следующую зону.

- 6. Во время чистки зубов при выборе другого режима начнется очередной 2-минутный цикл чистки с интервалом в 30 секунд.
- 7. Для выключения щетки в любой момент нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ".
- 8. Зубная щетка запоминает последний используемый режим и запускается с него при следующем включении.
- 9. Все режимы оснащены интеллектуальным таймером на 2 минуты с 30-секундными паузами для напоминания о необходимости смены зоны чистки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ

- 1. После чистки зубов снимите насадку и тщательно промойте её внутреннюю часть и щетину (Рис. 8, 9).
- 2. После каждой процедуры мойте место крепления насадки под проточной водой, чтобы удалить остатки зубной пасты и налета. (Рис. 10).
- 3. Протрите зубную щетку мягкой влажной тканью или бумажным полотенцем (Рис. 11).
- 4. Если вы не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени, рекомендуется очистить прибор и хранить его в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10

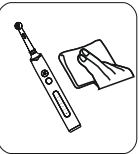


Рис. 11

СОВЕТ СТОМАТОЛОГА: следует менять насадку каждые 3 месяца и/или после перенесенных вирусных заболеваний.

Рекоменуем использовать оригинальные сменные насадки PECHAM. Артикулы PC-3200-1, PC-3201-1

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Низкий заряд батареи или разряженная батарея	Пожалуйста, зарядите устройство не менее 4 часов
	Неисправность кнопки вкл/выкл	Обратитесь к производителю
Световой индикатор режима горит, при этом зубная щетка не работает	Батарея разряжена	Пожалуйста, зарядите устройство не менее 4 часов
Сила вибрации ослабевает	Слишком сильно давите на зубы	Более мягко прижимайте головку щетки к зубам
После зарядки работает только несколько минут	Время зарядки было недостаточным	Пожалуйста, зарядите устройство не менее 4 часов

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство включает в себя перезаряжаемую батарею, не подлежащую замене. В целях защиты окружающей среды, не выбрасывайте прибор вместе с обычными бытовыми отходами по истечении срока его службы. Утилизация может быть произведена в сертифицированных местах переработки или утилизация в соответствии с местными правилами.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на расходные материалы и комплектующие;
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильно источнику питания;
- на товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению;
- на неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц и домашних животных, явления природы, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;
- на внешние и внутренние загрязнения, трещины, царапины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в результате естественного износа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия на товар — 14 месяцев.

Спасибо, что выбрали электрическую зубную щетку PECHAM Oral Care. Все зубные щетки и насадки дезинфицированы. Все продукты PECHAM были протестированы и успешно прошли строгие процессы обеспечения качества. Бренд PECHAM гарантирует, что продукт при правильном использовании не ломается.

Пожалуйста, заполните ниже информацию клиента

Имя: _____ Дата покупки: _____

Контактные данные: _____

Пожалуйста, заполните ниже информацию по продавцу

Наименование: PECHAM Oral Care Дата производства: _____

Имя продавца: _____

Сохраните данную инструкцию

Эксклюзивный представитель в России:
ООО «Веллнес Групп», г. Казань, ул. Меридианная, д 4, оф 14
+7 (906) 111 23 23
E-mail: link@pecham.ru
Сайт: www.pecham.ru



Гарантия и поддержка

ВМЕСТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ!



Совместно с электрической зубной щеткой PECHAM рекомендуем использование отбеливающей зубной пасты PECHAM PC-500 и ополаскивателя для полости рта PECHAM PC-301.