

Вы обязаны сдавать отработавшие элементы питания в специализированные приёмные пункты по месту жительства, занимающиеся сбором такого вида отходов.

Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете узнать в муниципальных службах Вашего города.

Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Элементы питания вставлены неправильно	Проверить правильность установки элементов питания
Неправильные показания	Весы установлены на неровной поверхности или под наклоном	Установить весы на ровную твердую горизонтальную поверхность
Отсутствие соединения с телефоном	Выключен модуль ВТ телефона	Включить модуль ВТ телефона
Отсутствие считывания параметров в приложении ОКОК	Не произведена регистрация в приложении ОКОК	Произвести регистрацию в приложении ОКОК

Организация принимающая претензии по качеству товара у конечных потребителей ООО "НД Хоум"
Контактный телефон сервисной службы: 8(495)981-47-00

СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ

Товар сертифицирован.
Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: Нинбо Путиан Информейшн Индастри Ко., Лтд
Адрес: №2 СИНЬЯНГ-РОУД, РАЙОН ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ, ДИТАНГ, ГОРОД ЮЯО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью "НД Хоум"
Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, помещение I, часть комнаты 22
Телефон: +7(495)785-65-14

Дата производства: см. гарантийный талон, упаковка



УМНЫЕ ВЕСЫ
Hi VS-114




Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя. Сохраните его для использования в будущем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по технике безопасности.
 - Этот прибор разрешается использовать только в бытовых целях и только по назначению.
 - Прибор следует ставить на устойчивую ровную поверхность.
 - Не наступайте мокрыми ногами. Поверхность скользкая. Это может привести к травмам.
 - Не роняйте устройство.
 - Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Никогда не бросайте их в огонь. Опасность взрыва!
 - Храните элементы питания в недоступном для детей месте. Это не игрушка!
 - Не открывайте элементы питания силой.
 - Избегайте контакта с металлическими предметами (кольца, гвозди, винты и т. Д.), Существует опасность короткого замыкания!
 - В результате короткого замыкания элементы питания могут сильно нагреться или даже загореться. Это может привести к ожогам.
 - Для вашей безопасности полюса элементов питания во время транспортировки должны быть закрыты изолирующими пластиковыми полосками.
 - Если элемент питания протек, не трите глаза руками. При контакте с жидкостью следует тщательно вымыть руки и промыть глаза чистой водой. Если симптомы не исчезнут, обратитесь к врачу.
 - Нельзя перезаряжать непозаряжаемые батареи
 - Перезаряжаемые батареи должны быть удалены из прибора перед перезарядкой
 - Различные типы батарей, а также новые и использованные не допускается смешивать
 - Батареи следует вставлять с соблюдением полярности
 - Использованные батареи должны быть удалены из прибора и безопасно утилизированы
 - Если прибор хранится длительное время без использования, батареи необходимо удалить
 - Не допускать замыкания зажимов питания
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

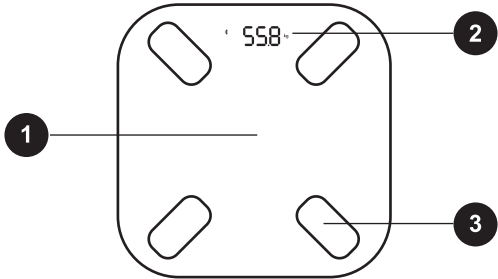

- 1. Стекла́нная поверхность
- 2. Цифровой дисплей
- 3. Металлические элементы

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 4,5 В (1.5 В AAA x 3)
- МАХ вес: 180 кг
- Шаг измерения: 100 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Весы
- 2. Руководство пользователя
- 3. Гарантийный талон
- 4. Батарейки 1.5 В AAA x 3 шт.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте прибор и аксессуары из коробки. Удалите с устройства наклейки, защитную пленку или пластик.
- Всегда взвешивайте / используйте весы на твердой и плоской поверхности. Когда вы измеряете, пожалуйста, не двигайтесь.
- Рекомендуется проводить измерения в одно и то же время дня и в одном месте.

- Осторожно встаньте на платформу для взвешивания и во время измерения не двигайтесь.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Откройте крышку аккумуляторного отсека.
 - Вставьте 3 элемента питания типа AAA с соблюдением правильной полярности. Закройте крышку.
 - Встаньте на платформу весов. Зкран, показывающий ваш вес, откроется автоматически.
 - Ваши ноги обязательно должны находиться на металлических элементах на поверхности весов. С их помощью порисходят измерения параметров тела.
 - Найдите «ОКОК International» в App Store / Google play для установки.
 - Включите Bluetooth вашего телефона, откройте приложение ОКОК, зарегистрируйтесь как пользователь, введите личную информацию.
 - Начните взвешивание и сопоставление.
 - Войдите в интерфейс «Динамическое взвешивание».
 - Встаньте на весы и синхронизируйте данные о весе с приложением.
 - Посмотреть результат теста. Войдите в интерфейс «Тенденция веса», затем просмотрите отчет о тестировании тела.
 - Данные измерений: вес, телесный жир, висцеральный жир, мышцы, кости, BMR, возраст, BMI.
- Для смены отработанных батареек:
- Подготовьте новые батарейки, извлеките их из упаковки. Переверните корпус прибора платформой в низ. Откройте крышку отсека для батарей. Установите батарейки соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека. Если весы не включаются, проверте правильность установки батареек.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ОКОК

Откройте приложение ОКОК, оно напомнит вам включить Bluetooth. Включите Bluetooth, и процесс сопряжения завершится автоматически. Пользователь начинает взвешивание, данные о весе синхронизируются с приложением. Если Bluetooth отключен, данные о весе будут сохранены в памяти весов, а затем синхронизированы с приложением при подключении Bluetooth.

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ОКОК

Просканируйте QR-код, а затем установите приложение; или выполните поиск «Международная форма ОКОК» в магазине приложений / Google Play, чтобы установить.

Записать данные о весе в приложение
Пользователь может записывать данные о весе в приложение для отслеживания

Текущий вес: интерфейс текущего веса отображает информацию о весе пользователя и членов семьи, а также генерирует отчеты и рекомендации по здоровью на основе измерений. Включая текущий интерфейс веса, интерфейс списка веса, отчетсданными и уведомление.

Тенденция веса: включая еженедельный отчет, ежемесячный отчет и ежеквартальный отчет, показывающий изменения веса в виде кривых.

Примечание. Для жировой шкалы имеется 8 данных: вес, телесный жир, висцеральный жир, мышцы, кости, BMR, возраст, BMI.

ЭКРАННЫЕ КОДЫ

Lo: замените источник питания. Тип батареи 3 x AAA 1.5 В

Err: Индикация перегрузки. Если вес превышает максимальную грузоподъемность 180 кг. На дисплее появляется «Err».

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Очищайте прибор влажной тканью. Никогда не используйте жесткие и абразивные чистящие средства, мочалки или стальную мочалку, которые могут повредить устройство.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. Не выбрасывайте неисправные приборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Использованные элементы питания утилизируются отдельно от бытового мусора. Как потребитель



Download