

# Smartwave

Массажёр для ног  
Smartwave  
модель: 100



# Smartwave®



## Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и следуйте строго рекомендациям.

[www.smartwave-russia.ru](http://www.smartwave-russia.ru)



**Уважаемый пользователь!**  
**Выражаем Вам свою благодарность за выбор продукции Smartwave®!**  
**Убедительно просим Вас прочитать настоящее руководство, перед применением изделия.**


## Введение

Массажер для ног Smartwave 100 предназначен для проведения процедур массажа ног в домашних условиях.

Аппаратный массаж ног позволяет снять усталость в ногах, снять отеки, улучшить кровоснабжение и лимфоток. Массаж стоп стимулирует работу внутренних органов, что положительно влияет на состоянии всего организма.

Массажер Smartwave 100 имеет 4 различных режима массажа, регулировку интенсивности массажа (5 уровней), функцию прогрева (2 уровня), функцию вибромассажа.

## Технические данные

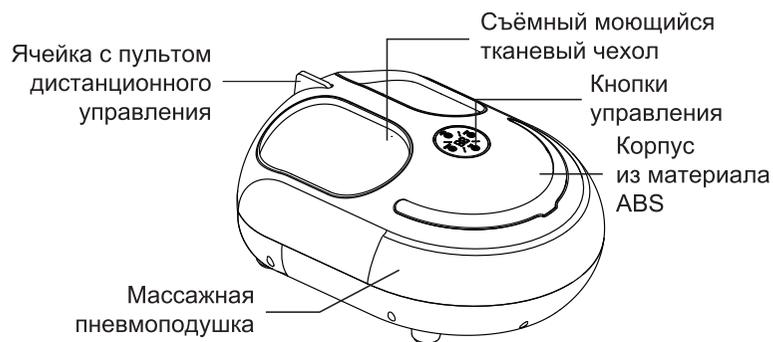

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение сети	AC220В 50Гц
Время процедуры	15-30 мин
Мощность	40 Вт
Стандарты	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

## Начало работы

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. После подсоединения к сети замигает индикатор питания.
3. Нажмите кнопку вкл.  на корпусе массажёра

2

**Кнопка включения**  
 при длительном нажатии (2 сек.) - отключение, при коротком нажатии - регулировка времени 15-20-25-30-5-10-15 минут, время по умолчанию 15 минут.

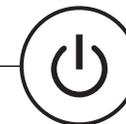

**Интенсивность**  
 при нажатии происходит выбор 1 из 5 уровней: L1-L2-L3-L4-L5; По умолчанию L1.




**Выбор режима**  
 при коротком нажатии происходит выбор 1 из 4 режимов:  
 P1 - массаж роликами вперед + пневмомассаж;  
 P2 - массаж роликами назад + пневмомассаж;  
 P3 - массаж роликами вперед и назад;  
 P4 только пневмомассажа;  
 по умолчанию включается режим P1.  
 При длительном нажатии, включение-отключение вибрации F1-F0, по умолчанию вибрация отключена F0.


**Уровень нагрева.** При коротком нажатии происходит переключение уровней нагрева H1-H2-H0, по умолчанию нагрев отключён H0.

**Примечание:** при каждом нажатии кнопки управления загорается индикатор, указывая на выполнение операции.

## Панель управления

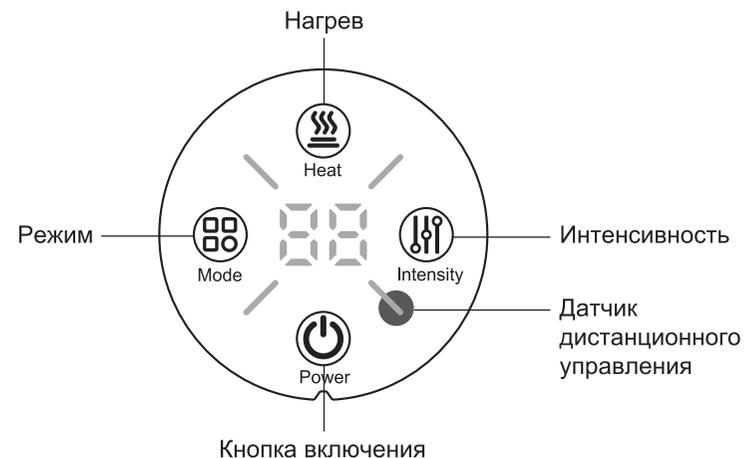

3

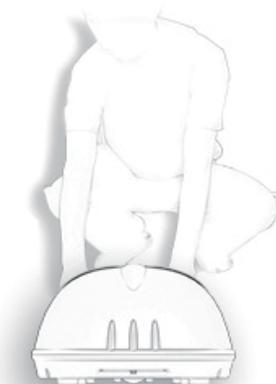

Запрещено вставлять  
руки в массажёр

### ⚠ Предупреждения

Рекомендуется использовать массажёр не более 30 минут за 1 сеанс, при более длительном применении - с осторожностью. Чрезмерный массаж может вызвать боль в мышцах и суставах.

При нижеперечисленных заболеваниях или состояниях, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием массажёра:

- наличие кардиостимулятора или подобного имплантируемого медицинского устройства;
- хрупкие или поврежденные кости;
- травма позвоночника;
- послеоперационный период;
- беременность;
- остеопороз;
- кожная инфекция;
- патология конечностей;
- обострение хронических заболеваний.

2. Если корпус массажёра поврежден, или возникла другая механическая или электронная неисправность, не используйте массажер. Обратитесь к местному продавцу или производителю для осуществления ремонта.
3. Не используйте массажер в очень влажных помещениях и при высокой температуре, не используйте массажер рядом с нагревательными приборами (такими как электрические нагреватели, батареи и т. д.).
4. Не используйте косметические кремы или лосьоны во время массажа так, чтобы они оставались на частях массажера.
5. При возникновении неисправности, массажер можно ремонтировать только в авторизованном сервисном центре. Пользователь не имеет права ремонтировать массажер самостоятельно, в противном случае гарантия будет аннулирована.
6. Не подвергайте массажер ударам, избегайте прочих механических воздействий на массажер.
7. Не рекомендуется использовать массажер за час до или после еды.
8. Не наматывайте шнур питания на массажер, это может привести к его повреждению.
9. Не вставляйте на массажер и не кладите на него тяжелые предметы.
10. Если массажер вышел из строя, отключите шнур питания и обратитесь к производителю. Не используйте неисправный массажер.
11. Электроприборы могут представлять опасность после контакта с водой. Пожалуйста, не используйте этот продукт во влажной среде, например, в ванной комнате или в местах рядом с краном или бассейном.
12. Если шнур питания как-либо поврежден, дальнейшая эксплуатация массажера недопустима. Замените шнур питания.

### Безопасная эксплуатация

Используйте только рекомендованное напряжение сети	Использование источника питания с другим напряжением может привести к несчастным случаям, таким как поражение электрическим током, пожар и т. д.
Отключение от сети после работы	После прекращения работы отключите вилку сетевого шнура из розетки.
Если массажёр не работает	Пожалуйста, отключите вилку питания и свяжитесь с продавцом или сервисным центром.
Если массажер работает нештатно	Пожалуйста, отключите вилку питания и свяжитесь с продавцом или сервисным центром.
Если сетевой шнур или вилка повреждены	Замените шнур питания. Эксплуатация с поврежденным шнуром питания или вилкой запрещена.
При пользовании массажёром	Во избежание травм запрещено вставлять руки или какие-либо предметы в массажёр.

## Уход за массажером

Если после использования на массажере остались какие-либо загрязнения, протрите их тканью, смоченной нейтральным моющим средством. (Не используйте химические вещества, такие как бензин, спирт или растворитель).

Затем оставьте массажер на открытом месте для естественной сушки. (Пожалуйста, не сушите массажер в интенсивном режиме.)

**Предупреждение:** перед обслуживанием и чисткой выключите массажер кнопкой питания и отсоедините вилку шнура питания.

**Совет:** массажёр достаточно использовать около 30 минут одновременно для достижения идеального массажного эффекта.

**Температура хранения:** 0 - 40С°.

## Возможные неисправности

Массажер управляется микрокомпьютером и чувствителен к колебаниям напряжения. Если колебания напряжения сети превышают 10%-15% от номинального напряжения, могут возникнуть следующие неисправности.

<i>Неисправности</i>	<i>Устранение неисправности</i>
Массажёр не работает после подключения к источнику питания.	Проверьте целостность шнура питания. Проверьте, подключена ли вилка питания к источнику питания.
Массажёр не работает после подключения к источнику питания.	Массажер имеет защиту от перегрева. Если массажер долго работал, может сработать автоматическая защита от перегрева. Пожалуйста, выключите питание и дайте электромотору и компрессору рассеять тепло в течение ~30 минут.
Ручная регулировка не функционирует, массажёр не работает	Истекло установленное время процедуры. Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы включить питание и перезапустить массажер.
Если какие-либо неисправности сохраняются после попытки их устранить, обратитесь к производителю, в сервисный центр или продавцу.	

## Гарантийный талон

### Гарантийный талон (заполняет продавец)

Наименование продукта	Массажёр для ног
Модель	Smartwave 100
Серийный номер	
Дата покупки	
Гарантия	12 месяцев

Продавец
Штамп продавца