


RU Руководство по использованию Беспроводной массажер для шеи NM 990

Устройство и элементы управления

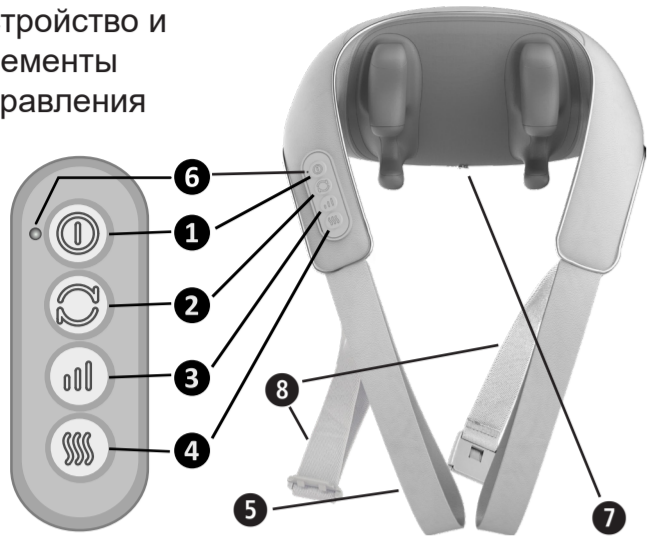

- 1 Вкл/Выкл
- 2 Переключение между двумя направле-ниями массажа
- 3 Переключение между тремя направле-ниями массажа
- 4 Кнопка Heat включает и выключает функ-цию нагрева
- 5 Петли ручек (по одной справа и слева)
- 6 Светодиодный индикатор (LED)
- 7 Съёмный чехол для шеи
- 8 Наспинный ремень

Условные обозначения



Не втыкайте в изделие иглы!



Не подходит для детей до 3 лет!



Используйте изделие только в закрытых помещениях!



Чехол можно стирать при температуре до 30°C, выбрав специальный щадящий режим стирки!



Не отбеливать!



Изделие нельзя сушить в сушилке!



Не гладить!



Не подвергать химчистке!



ВАЖНО!

Несоблюдение этой инструкции может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо соблюдать эти предупреждения, чтобы избежать возможного травмирования пользователя.



ВНИМАНИЕ

Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ

Данные указания дают дополнительные рекомендации по установке и эксплуатации.

LOT

Номер партии  Изготовитель



Символы/коды переработки: Они служат для информирования о материале и его надлежащем использовании, а также переработке.



RU Указания по технике безопасности



Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по использованию, в частности, указания по безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете устройство третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.



Электропитание

- Заряжайте аккумулятор устройства только с помощью прилагаемого кабеля USB для зарядки. Никогда не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети (для зарядки) или работает.
- Никогда не заряжайте устройство в присутствии легковоспламеняющихся веществ (как например, легковоспламеняющиеся материалы, бензин, горючие газы, краски и т. д.).
- Ставьте устройство на зарядку только таким образом, чтобы к кабелю и разъему питания был свободный доступ.
- Конечному пользователю запрещено извлекать или менять встроенный блок питания. При возникновении каких-либо проблем с электропитанием обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Данное устройство можно подключать только к источнику питания с безопасным сверхнизким напряжением (SELV) в соответствии с маркировкой на устройстве.
- Чтобы отключить устройство от сети, всегда вынимайте вилку из розетки. Не тяните за кабель!

Для особых категорий пользователей

- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями, или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром, или их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Не используйте это устройство в качестве замены медицинского лечения или для его поддержки. Могут обостриться хронические болезни и симптомы.
- Вам следует отказаться от использования массажера шейно-воротниковой зоны **NM 990** или сперва проконсультироваться с врачом, если:

- вы беременны;
- вам установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или электронные имплантаты,
- вы страдаете одним или несколькими из следующих заболеваний или расстройств: нарушения местного кровообращения, варикозное расширение вен, открытые раны, ушибы, трещины кожи, воспаление вен.
- Не используйте устройство вблизи глаз или других чувствительных частей тела.
- Если при применении устройства вы почувствуете боль или возникнут неприятные ощущения, прекратите использование и посоветуйтесь со своим врачом.
- Устройство имеет горячую поверхность. Лица с пониженной чувствительностью к горячему должны быть осторожны при пользовании прибором.
- В случае появления необъяснимых болевых ощущений, если вы находитесь в процессе медицинского лечения и/или пользуетесь медицинскими устройствами, перед использованием массажера проконсультируйтесь у своего врача.
- Дети до 3 лет не должны пользоваться этим устройством, так как они неспособны реагировать на перегрев.
- Данное устройство содержит несъемный аккумулятор.

Перед использованием устройства

- Перед каждым использованием внимательно проверяйте массажер на наличие дефектов. Запрещается пользоваться неисправным устройством.
- Не используйте устройство, если обнаружены повреждения на устройстве или кабеле, если оно работает не безупречно, падало на пол или если оно намокло. Во избежание опасностей отошлите устройство на ремонт в сервисный центр.

Для использования устройства



- Устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в сфере медицины.
- Если у вас есть сомнения в отношении здоровья, перед применением массажного устройства посоветуйтесь со своим врачом.
- Используйте массажер только в закрытых помещениях.
- Не используйте массажер во влажных помещениях (например, в ванной комнате или в душе).

- Используйте прибор только по назначению, следуя инструкциям в руководстве по применению.
- При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Используйте устройство только в правильном положении, т.е. вокруг шеи и на плечах.
- Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.
- Не пользуйтесь устройством перед отходом ко сну. Массаж оказывает стимулирующее действие.
- Никогда не используйте устройство во время вождения автомобиля или управления механизмами.
- Максимальная длительность использования составляет 15 минут. Более длительное применение укорачивает срок службы устройства.
- Слишком длительное использование может привести к перегреву. Перед повторным использованием дайте устройству сперва полностью остыть.
- Никогда не устанавливайте и не используйте устройство непосредственно рядом с электрическим камином или другими источниками тепла.
- Не допускайте контакта устройства с колючими или режущими предметами.
- Не накрывайте устройство, когда оно включено. Ни в коем случае не используйте устройство под одеялом или под подушкой. Несоблюдение этих правил может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

Использование по назначению

Массажер **NM 990** предназначен для прямого воздействия на область шеи и плеч, а также может использоваться на бедрах, голених, животе или спине. Имеется 3 уровня регулировки интенсивности приятного массажа. Массаж можно сочетать с термотерапией. Устройство не предназначено для применения в медицинской практике или терапевтического лечения. Устройство не предназначено для использования в клиниках, массажных кабинетах, оздоровительных центрах и т. д. Массажер не является медицинским изделием и не предназначен для обезболивающего лечения. При возникновении вопросов или сомнений перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

Обслуживание и очистка

- Устройство не нуждается в обслуживании. Самостоятельно разрешается проводить только чистку изделия. В случае неполадок или повреждений не ремонтируйте устройство самостоятельно, так как вследствие этого право на гарантию будет утрачено. Если устройство неисправно, обратитесь за помощью к своему продавцу и, во избежание травм и повреждений, доверяйте ремонт только авторизованным сервисным центрам.
- Используются только те комплектующие, которые предназначены для устройства и поставляются производителем вместе с устройством.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.

Комплектация и упаковка

Прежде всего проверьте комплектность устройства и нет ли у него повреждений.

В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр. В комплект поставки входят:

- 1 Массажер шейно-воротниковой зоны **medisana NM 990**
- 1 зарядный кабель, USB-C
- 1 краткая инструкция



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и могут быть возвращены в цикл повторного использования сырья. Утилизируйте, пожалуйста, надлежащим образом ненужные упаковочные материалы. Если при распаковке вы заметите повреждение изделия, возникшие при перевозке, немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детей. Она может стать причиной удушья!


Использование устройства – зарядка аккумулятора

– Используйте сетевой адаптер 5 В с выходным током 2 А. Подключите прилагаемый кабель USB для зарядки к адаптеру и к порту USB-C устройства.

– Медленное мигание светодиода индикатора **6** указывает на процесс зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиод будет гореть постоянно. Во время зарядки устройство нельзя использовать. Вы можете подзарядить аккумулятор в любое время.

– Быстрое мигание светодиода **6** указывает на низкий уровень оставшегося заряда – аккумулятор следует зарядить как можно скорее.

Применение

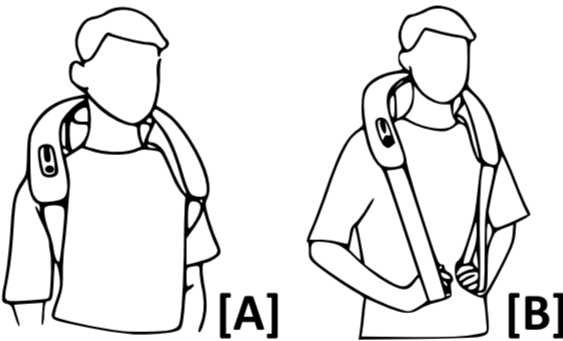

Разместите массажер вокруг шеи **[A]** таким образом, чтобы почувствовать достаточную опору на плечи. Если (по желанию) застегнуть наспинный ремень **8**, как показано на рисунке **[A]**, можно пользоваться устройством, **NM 990** не придерживая его, т.е. руки останутся свободными.

- Чтобы включить функцию массажа, нажмите кнопку включения/выключения **1**, и удерживайте ее примерно 2 секунды. Устройство сразу будет работать с низкой интенсивностью массажа. Короткое нажатие на кнопку **3** изменяет интенсивность массажа, короткое нажатие на кнопку **2** изменяет направление массажа. При повторном длительном (около 2 секунд) нажатии кнопки включения/выключения **1** отключится массажная функция и само устройство.
- Чтобы включить функцию нагрева, нажмите кнопку HEAT **4**. Теперь светодиодный индикатор **6** будет гореть красным. Чтобы выключить функцию нагрева, снова нажмите кнопку **4**.
- Проденьте руки сквозь петли **5** справа и слева **[B]**. Соответствующим натяжением массажера вниз вы можете удерживать его на своей позиции и, в зависимости от силы натяжения, индивидуально регулировать интенсивность массажа (более сильное натяжение петель = более высокая интенсивность массажа).
- После 15 минут непрерывной работы устройство отключается автоматически.



ВНИМАНИЕ

Следите, чтобы не превышалось максимальное время работы 15 минут!

Устранение неполадок

- **Устройство не включается или не заряжается:**

– Используйте устройство только в помещениях с соответствующей рабочей температурой. В противном случае могут возникнуть нарушения функционирования. Если устройство находилось в неподходящих окружающих условиях, поместите его в подходящую среду и не используйте его около 2 часов, после чего попробуйте снова зарядить или включить.

– Перед повторным включением устройства убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен.

- **Устройство не работает или работает неправильно, слишком низкий уровень заряда аккумулятора:**

– Всегда своевременно заряжайте аккумулятор. В противном случае может сработать защитное отключение.

Очистка и уход, хранение

- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно выключено. Дайте устройству остыть.
- Очищать массажер можно только слегка влажной губкой. Ни в коем случае не применяйте щетки, острые чистящие средства, бензин, растворитель или спирт. Насухо протрите устройство сухой чистой мягкой тканью.
- Чехол **7** можно снять (расстегнув молнию) и постирать в стиральной машине с мягким моющим средством в щадящем режиме при 30°C.
- Запрещается гладить, подвергать отбеливанию или химической чистке!
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и следите за тем, чтобы внутрь прибора не попадала вода или другая жидкость.
- Устройство можно пользоваться снова только после того, как оно полностью высохнет.
- Устройство лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.
- Храните устройство в безопасном, чистом, прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Предохраняйте его от падений и ударов.



Утилизация: Данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Все пользователи обязаны сдавать все электрические или электронные устройства, независимо от того, содержат они токсичные вещества или нет, в муниципальный или коммерческий пункт сбора, чтобы их можно было утилизировать экологически безопасным способом. За информацией об утилизации обращайтесь в местные органы власти или к продавцу.

Технические характеристики

Название и модель:	Массажер шейно-воротниковой зоны medisana NM 990
Электропитание:	литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 2200 мАч Вход: USB-C, 5 В= 2,0А
макс. продолжительность работы:	15 минут (с автоматическим отключением)
Условия эксплуатации:	Только в сухих помещениях при температуре от -5°C до +40°C
Условия хранения:	в сухих и прохладных помещениях
Размеры (ДхШхВ):	прибл. 23,5 × 15,5 × 19,5 см
Вес:	прибл. 1,2 кг ± 0,1 кг
Артикул №	88963
Номер EAN:	4015588 88963 9

Гарантия/условия ремонта

Гарантийный срок на изделия medisana составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом. Ваши законные гарантийные права не ограничиваются нашей гарантией, изложенной ниже.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ

Адреса сервисных центров можно найти на отдельном листе в приложении.

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

Актуальная версия настоящего руководства по использованию размещена на сайте: www.medisana.com