

MONTERI

Ирригатор AquaPulse W8



Содержание

• Об этом руководстве.....	1
• Меры безопасности.....	1
• Структура ирригатора.....	3
• Комплектация ирригатора.....	4
• Зарядка ирригатора.....	5
• Использование насадок.....	5
• Добавление воды.....	7
• Эксплуатация ирригатора.....	8
• Использование жидкостей для полоскания рта и других растворов.....	10
• Режим стерилизации.....	10
• Технические характеристики.....	11
• Устранение неисправностей.....	12
• Гарантийные обязательства.....	13
• Ограничения по гарантии.....	13
• Условия возврата.....	14
• Как с нами связаться.....	14

Об этом руководстве

Уважаемый покупатель! Перед началом использования ирригатора MONTERI AquaPulse W8 обязательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и следуйте всем инструкциям. Это обеспечит надежную работу и длительный срок службы устройства. Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок. При передаче устройства третьим лицам прилагайте к нему данную инструкцию. Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию устройства. В случае несоблюдения правил эксплуатации ирригатора или внесения каких-либо изменений в его конструкцию, он не подлежит гарантийному ремонту.

Меры безопасности



Внимание!


Данный раздел обязателен к внимательному прочтению и полному пониманию. Содержащаяся в нем информация относится к обеспечению Вашей безопасности и предотвращению риска ухудшения здоровья.

1. Пожалуйста, всегда заряжайте устройство в безопасном месте вдали от воды.
2. Если во время зарядки устройство упало в воду, не протягивайте руку за устройством. Немедленно отключите его от сети.
3. Никогда не используйте поврежденный шнур питания или вилку для зарядки.
4. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что разъем для зарядки полностью сухой.
5. Не оставляйте без присмотра включенное в сеть устройство.
6. При использовании устройства требуется проявлять особое внимание в том случае, если рядом с прибором находятся дети в возрасте до 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором, его деталями и упаковочным материалом.
7. Храните устройство в недоступном для детей месте.

8. Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены.
9. Храните и используйте шнур питания подальше от нагретых поверхностей.
10. Перед добавлением воды отключите устройство от сети. Наполняйте резервуар для воды только водой.
11. Не используйте, не храните и не заряжайте устройство вблизи высоких температур.
12. Питание устройства должно осуществляться только при безопасном напряжении, соответствующем маркировке на устройстве.
13. При эксплуатации устройства необходимо использовать источник питания выходной мощностью не более 15 Вт.
14. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство.
15. Не наполняйте резервуар для воды температурой выше 40°C.
16. Не используйте устройство ни для каких других целей, кроме чистки полости рта.
17. Храните насадки подальше от маленьких детей. Насадки очень маленькие, их легко проглотить.
18. Некоторые виды жидкостей для полоскания рта могут привести к повреждению резервуара для воды. Будьте внимательны при использовании жидкостей для полоскания рта в резервуаре для воды.
19. Не применяйте силу и не прижимайте насадку слишком сильно к зубам или деснам, иначе можете повредить их.

Структура ирригатора

- 1 Насадка
- 2 Кнопка извлечения насадки
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Кнопка выбора режима
- 5 Режимы
- 6 Индикатор заряда батареи
- 7 Разъем для зарядки
- 8 Патрубок для подвода воды
- 9 Резервуар для воды
- 10 Отсек для залива воды

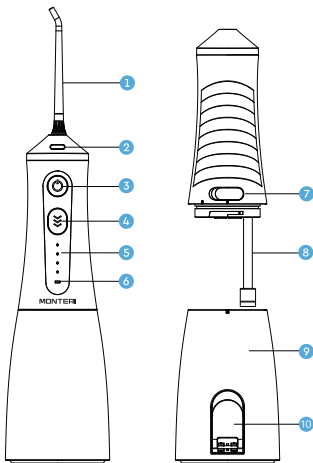

Комплектация ирригатора



Стандартная
насадка х3



Ортодонтальная
насадка



Пародонтальная
насадка




Насадка
для языка



USB шнур для зарядки



Адаптер 220В

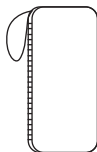

Чехол для хранения

Зарядка ирригатора

1. Снимите защитный колпачок для зарядки и вставьте USB-кабель постоянного тока в разъем для зарядки (пожалуйста, убедитесь, что в разьеме для зарядки не осталось жидкости).
2. Надежно подключите адаптер для зарядки к электрической розетке. Для подключения адаптера питания требуется выходное напряжение 5В-1А или 5В-2А.

Во время зарядки индикатор заряда батареи загорается красным цветом и мигает в режиме ожидания.

После полной зарядки аккумулятора зарядка автоматически прекратится, а зеленый индикатор останется гореть.




Обратите внимание!

Не включайте устройство во время зарядки.

Индикатор заряда батареи мигает красным цветом, когда уровень заряда ниже 20%.

Если уровень заряда ниже 3%, индикатор заряда батареи будет непрерывно мигать красным цветом и устройство автоматически выключится. Для полной зарядки требуется 6 часов.

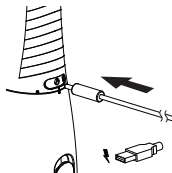

Использование насадок

Вставьте насадку в середину отверстия, расположенном в верхней части корпуса устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку извлечения насадки, затем достаньте насадку из отверстия.

Вставка насадки



Извлечение насадки



Стандартная насадка

Для обычной ежедневной очистки.

Ортодонтальная насадка

Для очистки брекет-систем (мосты, импланты, брекеты и т. д.).

Пародонтальная насадка

Для ухода за глубокими десневыми карманами.

Насадка для языка


Для очистки поверхности языка. Сначала используйте самое слабое давление струи, затем отрегулируйте его до комфортного уровня. Аккуратно поместите головку насадки посередине задней части языка и осторожно перемещайте ее вперед, прижимая к языку.

Добавление воды

Откройте резервуар для воды, налейте в него воду температурой не выше 40°C и затем закройте резервуар.


В качестве альтернативы, отсоедините резервуар для воды от основного корпуса ирригатора, наполните его водой температурой не выше 40°C и снова подсоедините резервуар к основному корпусу.

1

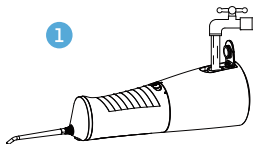

2


Поверните корпус ирригатора по часовой стрелке

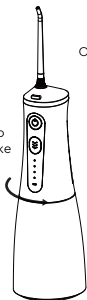

Отсоедините резервуар для воды



Налейте воду в резервуар

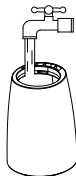

Эксплуатация ирригатора

1. Включите ирригатор, нажав кнопку включения/выключения питания.
2. Выберите подходящий режим для работы, используя кнопку выбора режима.
3. После выключения ирригатор запомнит последний используемый режим.

4 режима работы

SOFT

Бережная чистка чувствительных зубов. Давление струи 345–480 кПа.

STRONG

Глубокая чистка под высоким давлением воды. Давление струи 690–830 кПа.

PULSE

Пульсирующее и массажное воздействие на десны. Давление струи 410–760 кПа.

DIY

Персональная настройка мощности. Выберите режим DIY. После того, как загорится индикатор, удерживайте кнопку выбора режима. Индикатор режима DIY начнет мигать. Далее с каждым нажатием кнопки выбора режима давление струи будет увеличиваться на 70 кПа, начиная с 345 кПа до 830 кПа. Если в течение 5 секунд вы не выберите подходящее давление струи, оно будет установлено автоматически.

Применение


Низко наклонитесь над раковиной и поднесите ирригатор ко рту. Направьте насадку на зубы и включите прибор.



Направьте струю из насадки под углом 90° к линии десен. Слегка прикройте насадку, чтобы избежать разбрызгивания, но дайте воде свободно стекать изо рта в раковину. Лучше начинать с области коренных (задних) зубов и продвигаться к резцам. Проведите насадкой вдоль линии десен и ненадолго задержитесь между зубами. Продолжайте, пока не очистите внутреннюю и внешнюю поверхности верхних и нижних зубов.



По окончании работы выключите устройство и слейте всю жидкость, оставшуюся в резервуаре для воды, чтобы предотвратить размножение бактерий. Нажмите кнопку извлечения насадки и извлеките насадку из устройства. Откройте резервуар для воды и слейте остатки воды. Или вы также можете отсоединить резервуар для воды от корпуса и слить воду из отверстия в верхней части резервуара для воды. Включите ирригатор пока резервуар для воды не опустеет. Затем выключите его и протрите сухой тканью.

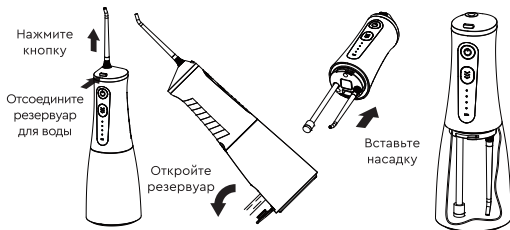



Внимание!

Чтобы предотвратить распространение бактерий, убедитесь, что в ирригаторе не осталось воды. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, обязательно очистите и высушите его как можно скорее перед хранением.

Использование жидкостей для полоскания рта и других растворов

Вы можете использовать ирригатор для полоскания рта и антибактериального раствора. Пожалуйста, используйте раствор, рекомендованный профессиональным стоматологом для лечения ваших зубов. Обратите внимание, что использование антибактериального раствора может сократить срок службы ирригатора. После каждого использования подобных растворов тщательно промывайте резервуар для воды – для этого налейте немного теплой воды в резервуар, вставьте насадку и распылите воду, включив устройство. Проверьте, что резервуар для воды пуст, выключите устройство и протрите его.

Режим стерилизации

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку включения. Внизу загорится ультрафиолетовая лампа, которая начнет стерилизацию резервуара для воды и насадок от бактерий. Время стерилизации составляет 90 секунд.



Технические характеристики

Бренд: **MONTERI**

Модель: **AquaPulse W8**

Тип ирригатора: **портативный**

Режимы работы: **4**

Давление струи: **345–830 кПа**

Количество импульсов: **1400–1800 в минуту**

Объем резервуара: **300 мл**

Емкость аккумулятора: **1500 мАч**

Время зарядки: **~ 6 часов**

Водонепроницаемость: **IPX7**

Размеры: **21.9 × 7.2 × 7.7 см**

Вес: **0.2 кг**

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Ирригатор не включается	Ирригатор не заряжен	Зарядите ирригатор (заряжайте не менее 6 часов)
Ирригатор не включается после зарядки	Аккумулятор вышел из строя	Обратитесь к производителю для решения проблемы
	Недостаточное время зарядки	Заряжайте ирригатор не менее 6 часов
Недостаточное давление воды	Низкий заряд аккумулятора	Полностью зарядите ирригатор
	Насадка засорилась или деформировалась	Замените насадку
Вода не выходит из ирригатора	Насадка засорилась или деформировалась	Замените насадку
	Слишком сильно наклонен ирригатор	Держите ирригатор в вертикальном положении
Вода протекает из ирригатора	Неправильно установлена насадка	Достаньте насадку и заново установите ее

Гарантийные обязательства

На ирригатор MONTERI AquaPulse W8 предоставляется гарантия 24 месяца при условии соблюдения настоящих правил эксплуатации и мер предосторожности. В случае обнаружения неисправности или выхода прибора из строя, в первую очередь, необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где Вы приобретали изделие.

В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:

- изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации;
- изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем;
- корпус изделия поврежден или деформирован;
- изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузки;
- параметры входного напряжения не соответствуют заявленному диапазону.

Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного ремонта, ненадлежащей эксплуатации или пользования позднее гарантийного срока.

Чтобы воспользоваться гарантией, обратитесь на почту info@monteri.ru. Далее гарантийный случай будет рассмотрен.

Ограничения по гарантии

Условия гарантии не распространяются на следующее:

- Расходные материалы (насадки).
- Повреждения из-за использования неоригинальных зарядных устройств.
- Устройства, разобранные пользователем.

Условия возврата изделия

На ирригатор MONTERI AquaPulse W8 распространяется гарантия возврата: 35 дней с момента покупки без объяснения причин. В течение этого времени вы можете вернуть изделие, если вам не понравилась его работа или просто что-то не устроило в качестве или дизайне товара. Для возврата обратитесь на почту info@monteri.ru.

Как с нами связаться

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь на нашу почту. Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на все вопросы.

Почта: info@monteri.ru

Телефон: 8 (495) 822-25-00

График работы: 09:00 – 21:00 ежедневно

Гарантийный талон

Изделие _____

Модель _____

Срок гарантии _____

Торговая организация _____

Дата продажи _____

Ф. И. О. покупателя _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

подпись покупателя

MONTERI Талон № 1

Название изделия _____

Дата продажи _____

Подпись клиента _____

MONTERI Талон № 2

Название изделия _____

Дата продажи _____

Подпись клиента _____

MONTERI Талон № 3

Название изделия _____

Дата продажи _____

Подпись клиента _____

MONTERI

Отрывной талон № 1

Название изделия _____

Дата продажи _____

Подпись клиента _____

MONTERI

Отрывной талон № 2

Название изделия _____

Дата продажи _____

Подпись клиента _____

MONTERI

Отрывной талон № 3

Название изделия _____

Дата продажи _____

Подпись клиента _____



MONTERI

Как с нами связаться

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь на нашу почту.
Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на все вопросы.

Почта: info@monteri.ru

Телефон: 8 (495) 822-25-00

График работы: 09:00 – 21:00 ежедневно