


Фототерапевтическая
Массажная Расческа
HY-7059

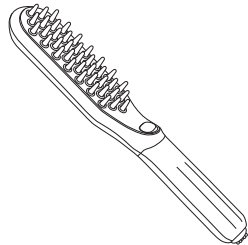


Инструкция
по эксплуатации

Название продукта	Фототерапевтическая массажная расческа
Модель продукта	HY-7059
Входящее напряжение	5В=1А
Аккумулятор	3,7В/1200мАч
Время работы	15 минут

Комплектация:

- 1 x массажная фототерапевтическая LED расчёска
- 1 x Адаптер питания
- 1 x Кабель питания
- 1 x Руководство по эксплуатации

Панель управления

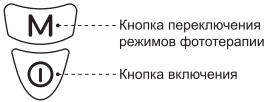

Инструкция по эксплуатации:

Этот аппарат представляет собой фототерапевтическую массажную расческу с функциями вибрации и фототерапии, три режима вибрации, два режима фототерапии и две кнопки.

Ключевые функции:

- 1 Нажмите и удерживайте эту кнопку в режиме ожидания, индикатор кнопки включения устройства загорится красным, указывая на то, что оно включено. Устройство перейдет в первый режим вибрации и режим красной фототерапии и начнет обратный отсчет (системный таймер по умолчанию равен 15 минутам). Нажмите и удерживайте эту кнопку во включенном состоянии, или по истечении установленного времени, или при массаже давлением воздуха, вибрации и нагреве одновременно выключаются,

система выключается и переходит в режим ожидания. Индикатор питания гаснет. Кратковременно нажмите эту кнопку, когда устройство включено , чтобы переключить режим фототерапии следующим образом: режим терапии красным светом , режим терапии синим светом и выключить функцию фототерапии. Соответствующие индикаторные лампы выглядят следующим образом:

- Красный свет - режим терапии красным светом
- Синий свет - режим терапии синим светом

М Коротким нажатием этой кнопки, когда устройство включено, вы можете переключить режим вибрации следующим образом: первый режим вибрации, второй режим вибрации, третий режим вибрации и отключение вибрации.

Индикаторы горят следующим образом:
Зеленый индикатор - первый режим вибрации
Синий индикатор - второй режим вибрации
Красный индикатор - третий режим вибрации

Индикация зарядки:
Зарядка (в процессе): индикатор питания мигает красным цветом
Зарядка завершена: индикатор питания постоянно горит зеленым.

Пожалуйста, будьте особенно внимательны и соблюдайте следующие меры предосторожности перед использованием.

Опасно! (Особое внимание):

1. Не используйте запасные части, не одобренные производителем.
2. Производить разборку прибора без разрешения может только специалист, имеющий соответствующие допуски.
3. Если шнур питания поврежден, его может заменить соответствующий специалист во избежание опасности.
4. Не используйте и не храните изделие во влажном месте или с высокой температурой.
5. Пожалуйста, отсоединяйте кабель питания при использовании.
6. Не используйте средство дольше 15 минут за раз.
7. При возникновении каких-либо побочных реакций прекратите его использование
8. Этот продукт не подходит для тех, у кого затруднены движения, проблемы с сенсорным восприятием или есть особенности умственного развития, также отсутствие опыта и знаний в сфере использования подобных продуктов (включая детей).

С осторожностью:

1. Если у вас есть одно из нижеперечисленных состояний, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием:
 - Беременные женщины, дети или пожилые люди
 - Люди, страдающие кожными инфекциями или имеющие покраснения
 - Люди, использующие кардиостимулятор или аналогичные имплантируемые медицинские устройства
 - Пациенты с заболеваниями сердца, злокачественными опухолями и т.д.
2. Этот продукт не используется в каких-либо медицинских целях. Этот продукт предназначен только для личного и непрофессионального использования.

Уход и техническое обслуживание:

1. Перед чисткой, пожалуйста, выключите устройство и выньте вилку из розетки.
2. Пожалуйста, протрите поверхность изделия сухой мягкой тканью.
3. Не чистите изделие и принадлежности с помощью агрессивные моющие средства, такие как бензол, растворители.
4. Пожалуйста, храните в сухом прохладном месте, когда не используете продукт.
5. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или влаги, также это может привести к выцветанию или повреждению изделия.