

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:
ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:
Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183
Израиль - Reg. №204012
Россия - Reg. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.



Служба заботы о клиентах




Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных для детей и животных



KZ 1422
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
DAY JOY

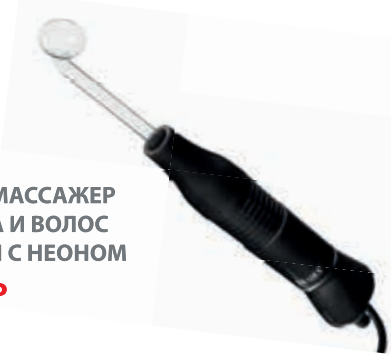

KZ 1175
ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ТЕЛА, ЛИЦА И ВОЛОС
С 5 НАСАДКАМИ С НЕОНОМ
ДАРСОНВАЛЬ



KZ 1181
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА



KZ 1180
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СО СЪЕМНЫМИ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫМИ МАНЖЕТАМИ
ВИВО

KZ 1166
КОМПРЕССИОННЫЙ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



Перед использованием массажера важно внимательно изучить инструкцию. Используйте прибор только по прямому назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед каждым использованием обязательно проверяйте массажер и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружили неисправности или повреждения, не используйте устройство и обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
- Обязательно отсоединяйте USB-кабель Type-C после полной зарядки аккумулятора.
- Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.
- Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.
- Не накрывайте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.
- Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания воды на панель управления.
- Не эксплуатируйте массажер, если на него попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости дождитесь полного высыхания.
- Держите USB-кабель Type-C для зарядки массажера вдали от источников тепла, не тяните за него. Никогда не беритесь за кабель мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- Не садитесь на массажер, не вставляйте ногами и не помещайте на него посторонние предметы.
- Не засыпайте во время использования массажера.
- Не используйте массажер после употребления алкоголя.
- Не храните и не используйте массажер при температуре воздуха выше 30°C.
- Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 20 минут. Делайте перерывы между применениями, чтобы прибор успевал полностью остыть.
- Перед утилизацией массажера (по истечении срока службы), аккумулятор необходимо извлечь и утилизировать безопасным способом.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учесть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:

- гиперчувствительность кожи и кожные заболевания;
- острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов) в местах воздействия;
- нарушения кровообращения: тромбоз, флебит, варикозное расширение вен и др.;
- онкологические заболевания;
- диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- недавно перенесенные травмы или операция;
- наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;
- беременность;
- при наличии в организме кардиостимуляторов и электронных имплантатов.

Во всех вышеперечисленных случаях требуется консультация врача. Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.
О всех возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:


Беспроводной лимфодренажный массажер для икр и предплечий
Артикул KZ 1429

Комплектация:
• Массажер: один манжет
• USB провод Type-C



Обязательно прочтите инструкцию пользователя до начала работы с массажером.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

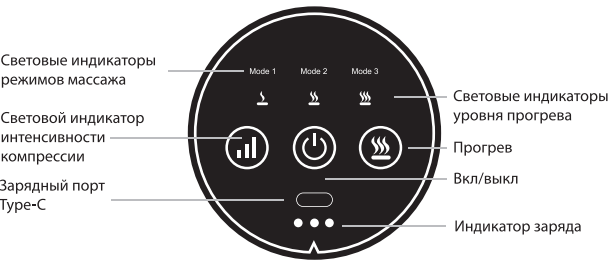

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед началом использования убедитесь, что массажер исправен, полностью заряжен и готов к работе. Если массажер разряжен, зарядите его с помощью прилагаемого USB-кабеля Type-C.

- Откройте фиксирующие липучки манжет и полностью разверните устройство.
- Оберните манжеты вокруг икр или предплечий, отрегулируйте необходимую плотность и закрепите с помощью фиксирующих липучек. Массажер можно использовать поверх одежды.
- Массажер управляется с помощью индивидуальных сенсорных экранов, расположенных отдельно на блоках управления каждой манжеты.
- Включите массажер, нажав на 2 секунды кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**.
- По умолчанию выставляется рекомендуемое время работы – 20 минут. С помощью этой же кнопки можно преждевременно прервать сеанс массажа.

Световые индикаторы:
Если загорелся все три индикатора заряда ●●● – массажер полностью готов к работе. Если мигает первый индикатор, значит уровень заряда аккумулятора низкий (необходимо зарядить устройство).

MODE:

Индикатор режимов массажа при включении загорается белым цветом:
Mode 1 – успокаивающий массаж.
Mode 2 – разминающий массаж.
Mode 3 – глубокий массаж.
Режим массажа можно менять с помощью кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ**.
Для каждого режима можно изменить уровень интенсивности компрессии, нажимая кнопку до нужного уровня от 1 – 3. Повторное нажатие увеличивает компрессию на один уровень.

Для каждого режима можно изменить уровень прогрета, нажимая кнопку до нужного уровня от 1 – 3. Повторное нажатие увеличивает прогрет на один уровень или выключает. При выключении функции прогрета все индикаторы гаснут.

Индикатор интенсивности компрессии при включении индикатор загорается: Зеленый – 1 уровень (мягкая компрессия). Синий – 2 уровень (средняя компрессия). Красный – 3 уровень (высокая компрессия). По умолчанию при включении массажера запускается 1 уровень. Выберите уровень компрессии, нажимая на кнопку. Повторное нажатие увеличивает компрессию на один уровень.

Прогрев при включении индикатор загорается белым цветом. Индикатор уровня прогрета при включении загорается белым цветом, в зависимости от выбранного уровня.
1 уровень: 40°C, 2 уровень: 50°C, 3 уровень: 60°C.

По умолчанию при включении массажера запускается 1 уровень прогрета. Выберите комфортную температуру, нажимая на кнопку. Повторное нажатие увеличивает прогрет на один уровень или выключает. При выключении функции прогрета все индикаторы уровня прогрета и кнопки прогрета гаснут.
6. Установленное время массажа – 20 минут. После завершения сеанса массажер автоматически отключится. С помощью кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** можно преждевременно прервать сеанс массажа.
7. Откройте фиксирующие липучки, снимите устройство и положите его для хранения в безопасное место.
Регулярно очищайте массажер и следуйте инструкции пользователя для дополнительного ухода.
Помните, что перед использованием беспроводного лимфодренажного массажера для икр и предплечий рекомендуется проконсультироваться со специалистом-врачом, особенно если есть медицинские проблемы в области ног или предплечий.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДOK:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При нажатии на кнопку включения массажер не включается.	— Отсутствует заряд аккумулятора. — Перегрев, если массажер не успел остыть после предыдущего сеанса.	— Проверьте уровень заряда массажера, при необходимости зарядите. — Дайте массажеру возможность полностью остыть в течение 10-15 минут.

МАССАЖЕР ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ ДЛЯ ИКР И ПРЕДПЛЕЧИЙ БЕСПРОВОДНОЙ

BRADEX
Health & Beauty

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1429

BRADERUSSIA
BRADERMOSCOW



ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Массажер шумит во время работы.	Небольшой уровень шума допустим при работе массажера.	—
Массаж прервался до окончания положенного времени.	— Время, установленное таймером, истекло. — Случайно была нажата кнопка отключения массажера. — Закончилась зарядка аккумулятора.	— Не рекомендуется использовать массажер дольше рекомендуемого времени. — Включить массажер еще раз. — Зарядить аккумулятор и включить массажер.
В процессе работы массажера прекратился прогрев.	— Время, установленное таймером, истекло. — Случайно была нажата кнопка Прогрева.	— Не рекомендуется использовать массажер дольше рекомендуемого времени. — Включить Прогрев еще раз.
При зарядке аккумулятора горит зеленый индикатор.	Аккумулятор полностью заряжен.	Массажер готов к использованию.

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ:

Условия гарантии:

- Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
- Если в течение гарантийного срока будет получена обоснованная претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригинальному изделию.

Гарантия не распространяется:

- При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
- В случае ремонта или модификации массажера самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.

- В случае несоблюдение рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению массажера, описанные в данной инструкции.
- В случае проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия.
- На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКИ:

- После перемещения массажера в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
- Массажер лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом, недоступном для детей месте.
- При необходимости, при видимых загрязнениях после использования очищайте массажер щеткой или мягкой тканью.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду.
- Храните массажер вдали от огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

**Массажер лимфодренажный для икр и предплечий беспроводной
Артикул KZ 1429**

Материал: АБС пластик, полиэстер. Цвет: серый. Размер: 57,5x34,2x8 см. Панель управления – сенсорный экран
Размер манжет в области икр: 57 см.
Максимальный обхват в области икр: 53 см.
Максимальный обхват в области щиколотки: 40 см.
Мощность: 5 Вт. Напряжение: 5 В.
Аккумулятор: 2500 мАч. Время зарядки: 5 ч.
Время работы при полной зарядки: 2-5 ч.
Давление воздуха:

- при высокой интенсивности: 45 кПа
- при средней интенсивности: 40 кПа
- при низкой интенсивности: 30 кПа

Функция прогрета: 1 уровень: 40°C, 2 уровень: 50°C, 3 уровень: 60°C.
Таймер – 20 минут.
Комплектация: массажер – 1 шт., USB провод Type-C – 1 шт., инструкция.