


ИНСТРУКЦИЯ К ультразвуковой электрической зубной щетке PARU



2 НАСАДКИ



3 РЕЖИМА РАБОТЫ

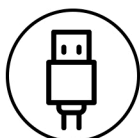

TYPE-C КАБЕЛЬ

RoHS CE FC

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ

1. Если вы не понимаете правил эксплуатации и инструкций по технике безопасности, не используйте данное изделие во избежание травм, вызванных неправильной эксплуатацией.
2. Не разбирайте и не модифицируйте данное изделие во избежание повреждения и аннулирования гарантии.
3. Данное изделие предназначено только для ухода за полостью рта и запрещено к использованию в других целях.
4. Если шнур питания или вилка повреждены, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисную службу или клиентский сервис.
5. Не размещайте изделие вблизи огня, высокой температуры, не заряжайте, не используйте и не храните его при высоких температурах во избежание возгорания или повреждения изделия.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Данный продукт предназначен только для личного и семейного использования.
2. Не замачивайте изделие в воде в течение длительного времени во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током или возгорания.
3. Если изделие повреждено (например, частично поврежден корпус или головка щетки), пожалуйста, немедленно прекратите его использование.
4. Не заряжайте устройство в жарких и влажных помещениях (например, в ванной комнате или туалете) во избежание поражения электрическим током или пожара.
5. Не используйте химические средства, такие как растворители для краски, для очистки изделия, чтобы избежать коррозии материала.
6. Если изделие не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите его от сети и зарядного устройства во избежание возгорания или других опасностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не используйте данное средство при наличии открытой раны во рту или на языке, чтобы предотвратить заражение или ухудшение состояния раны.
2. Данное средство предназначено только для чистки зубов, десен и языка и не может использоваться для других целей.
3. Данное изделие не подходит для детей, младенцев или людей, которые не могут работать самостоятельно без присмотра взрослых. Пожалуйста, храните изделие в недоступном для детей месте и никогда не используйте его в качестве игрушки.
4. Рекомендуется заменять головку щетки каждые три месяца. Если головка щетки повреждена или деформирована, пожалуйста, своевременно заменяйте ее.
5. Пользуйтесь только специальной электрической насадкой для зубной щетки, выпускаемой компанией PARU. Использование неофициальных сертифицированных продуктов может привести к угрозе безопасности или нарушению нормальной работы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

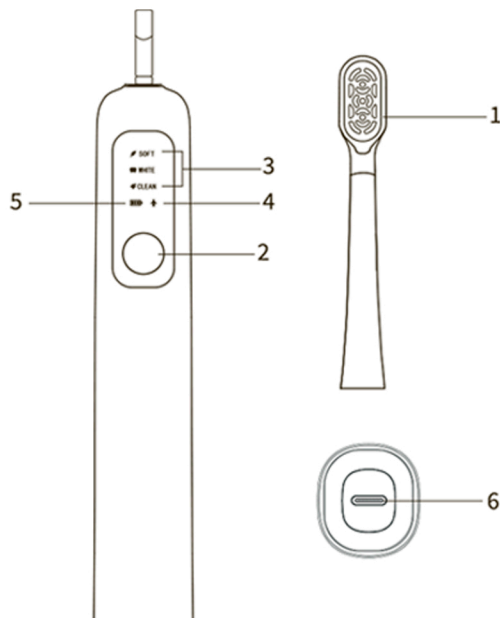

1. Насадка
2. Кнопка питания и переключения режимов
3. Световые индикаторы режимов: чувствительный, отбеливание, стандартный
4. Блокировка
5. Световой индикатор зарядки
6. Порт для зарядки TYPE-C

ПРИМЕЧАНИЕ


При первом использовании зубной щетки вы можете почувствовать некоторый дискомфорт на зубах или легкую кровоточивость десен. Это связано с тем, что ваши десны не привыкли к такой эффективной чистке. Рекомендуется использовать чувствительный режим в первый раз. Это явление обычно проходит в течение 1-2 недель. Если дискомфорт превышает 2 недели, пожалуйста, прекратите использование и обратитесь к врачу.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина неисправности	Решение
Не включается	Разряжен аккумулятор	Зарядите устройство
Насадка щетки не присоединяется к щетке	Внутри головки щетки находится посторонний предмет	Выньте посторонний предмет
	К приводному валу рукоятки прилип посторонний предмет	Очистите приводный вал
	Головка щетки не подходит	Приобретите соответствующую модель насадки для щетки
Слабая вибрация головки щетки	Головка щетки установлена не правильно	Установите головку щетки надлежащим образом
	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Выверните головку щетки по корпусу, убедитесь, что головка расположена вертикально, и аккуратно вдавите ее в ручку щетки, соблюдая соответствующий зазор между головкой и ручкой щетки.
2. Намочите головку щетки и выдавите на щетину необходимое количество зубной пасты.
3. Нажмите кнопку выбора режима, чтобы выбрать подходящий вам режим чистки.
4. Аккуратно прижмите щетинки под углом 45 градусов к зубам, держите головку щетки перпендикулярно к ним и очистите каждую поверхность зубов медленными возвратно-поступательными движениями.
5. После чистки зубов тщательно промойте головку щетки и храните электрическую зубную щетку в сухом, прохладном месте.

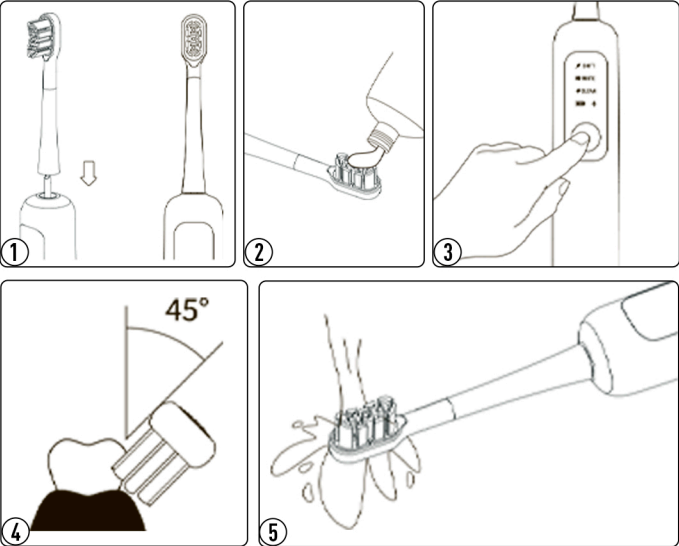

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

- При первой зарядке, пожалуйста, откройте нижнюю крышку основного корпуса, подключите порт зарядки к кабелю для зарядки и убедитесь, что кабель для зарядки надежно подключен к источнику питания.
- Если зубная щетка не использовалась более 6 месяцев, пожалуйста, зарядите ее в соответствии с вышеуказанными требованиями к зарядке пока она не зарядится полностью.
- Когда заряжается основной корпус, зубная щетка не может работать. Индикатор заряда батареи непрерывно мигает, указывая на то, что она заряжается, а индикатор заряда батареи продолжает гореть, указывая на то, что зарядка завершена.
- Если индикатор питания мигает во время использования, это означает, что мощность устройства низкая и его необходимо вовремя зарядить.
- Для полной зарядки требуется около 6 часов.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После ежедневного использования, пожалуйста, убедитесь, что питание устройства отключено, затем промойте ручку и головку щетки и поместите их в сухое и проветриваемое место.
- При хранении, пожалуйста, храните устройство в безопасном, сухом и проветриваемом месте, недоступном для детей.
- Рекомендуется заменять головку щетки каждые три месяца.
- Во время использования, ухода и техобслуживания запрещается вращать головку зубной щетки, чтобы не повредить электродвигатель зубной щетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель продукта: PARU Y01
Режим работы: 3 режима
Частота вибрации: 26000-33000 об/мин
Класс водонепроницаемости: IPX7
Входные параметры: 5 В == 1 А
Время зарядки: около 6 часов
Емкость аккумулятора: 2000 мАч
Порт для зарядки: Type-C

УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Однократное короткое нажатие кнопки питания позволяет включить устройство.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

После включения питания коротко нажмите кнопку включения, и зубная щетка последовательно переключится в различные режимы чистки.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

После включения нажмите и удерживайте кнопку в течение 1-2 секунд, чтобы выключить питание.

БЛОКИРОВКА УСТРОЙСТВА

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд, устройство перейдет в заблокированное состояние. Нажмите и удерживайте кнопку еще 4 секунды, устройство разблокировано и может работать нормально.

ЗАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО РЕЖИМА

Электрическая зубная щетка автоматически запоминает последний использованный режим и включит его при новой чистке зубов.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

Подходит для первого использования и людям с чувствительными зубами и деснами.

ОТБЕЛИВАНИЕ

Подходит для интенсивного отбеливания и очищения зубов от налета.

СТАНДАРТНЫЙ

Подходит для ежедневной чистки зубов и межзубных промежутков.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрическая зубная щетка - x1

Зарядный кабель type-c - x1

Сменная насадка - x2

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- Когда батарея разряжена, индикатор загорается красным.
- Когда батарея заряжается, индикатор загорается зеленым и мигает.
- Когда батарея полностью заряжена, индикатор загорается зеленым.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование продукта	PARU Y01
Период гарантии	3 года
Сертификация продукции	Декларация соответствия ТР ТС
Результат проверки	Квалифицированный



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ
ПОЖЕЛАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
В НАШ КЛИЕНТ-СЕРВИС

🌐 PARU.PRO
✉ MEGAMARKET4ORD@YANDEX.RU
☎ +7 938 313 15 69