

# Гарантийный талон

Product Name	ANTI-AGING & REJUVENATION DEVICE	Model No.	
Distributor	Kart House		
User's info	Name		
	Address		
	Tel		
Defective Phenomenon			

## Гарантия

Благодарим за выбор нашей продукции!  
Мы очень ценим наших покупателей, поэтому при возникновении неполадок или вопросов пишите нам:

- телеграм [@kart\\_house](https://t.me/kart_house)
- почта [kart\\_house@my.com](mailto:kart_house@my.com)

Или переходите по QR-коду :



Будем рады Вашему отзыву! Если вдруг что-то не устроило, не спешите оставлять плохой отзыв, а напишите нам в поддержку. Наши эксперты оперативно решат Ваш вопрос.

# Мультифункциональный аппарат для лица и шеи



## Инструкция

Спасибо, что выбрали аппарат нашего бренда Kart House.  
Обязательно прочтите её перед использованием.

## Прибор для антивозрастного и омолаживающего эффекта

Это прибор для ухода за кожей лица с использованием: ультразвука + микротоков EMS с положительными ионами + EMS микротоки отрицательных ионов + вибрация + RF красный/зеленый/синий/оранжевый свет + криомассаж, что позволяет глубоко очистить, активизировать кожу и улучшить ее состояние.

### • Ультразвуковой фонофорез:(ФОНОФОРЕЗ)

это введение лечебных косметических средств в глубокие слои дермы под воздействием ультразвука. Эта процедура применяется для омоложения, увлажнения лица и чистки кожи при ее увядании, морщинистости, нарушении локального кровообращения, лимфооттока, приводящих к отечности лица и шеи.

### • Микротоки(МИКРОТОКИ)

усиливает тонус мышц, проникает в клетки эпидермиса, достигая глубокие слои дермы кожи, ускоряет выработку коллагена и эластина, стимулирует тонус мышц, восстанавливает их эластичность.

### • Криомассаж(ОХЛАЖДЕНИЕ)

помогает усилить кровообращение в коже, приводит ее в тонус и улучшает общее состояние за счет сужения и расширения сосудов от непродолжительного воздействия холода. В результате кожа становится более упругой и гладкой, при этом запускаются процессы естественного омоложения.


Усиливает эффект RF-лифтинга за счёт быстрого сжатия коллагеновых волокон после прогрева.

### • RF лифтинг:

это применение высокочастотных токов, которые воздействуют на дерму и гиподерму, не затрагивая поверхностный слой кожи, не травмируя его. Путем прогрева в подкожных тканях усиливается кровоток, повышается микроциркуляция лимфотоков, возобновляется работа фибробластов. Процедура буквально запускает процесс регенерации, омолаживая кожу изнутри, при этом волокна возвращают тонус, сжимаются, и формируется новая упругая эластичная кожная ткань.


### •Режим ОЧИЩЕНИЕ•

Вибрационный массаж открывает поры и очищает их от глубоких загрязнений. Аппарат использует принцип притяжения ионов, способствующий глубокому очищению кожи.

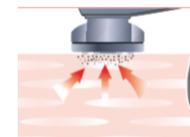


### •Режим RF лифтинг•

Красный свет усиливает активность клеток, способствует синтезу белка и костного коллагена, в сочетании с вибромассажем разглаживает морщины.

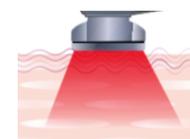

### •Режим ОСВЕТЛЕНИЕ•


Зеленый свет уменьшает выделение кожного сала, нормализует выработку себума, подавляет избыточную выработку меланина и осветляет кожу.

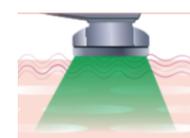

### •Режим ФОНОФОРЕЗ•


Микроэлектрические ионы вводят полезные компоненты крема или сыворотки в глубокие слои кожи под воздействием высокочастотного ультразвука, с помощью оранжевого света дно полностью поглощает питание, сохраняют гидробаланс кожи.

**ВНИМАНИЕ! На данном режиме не работает вибрация и нет нагрева.**

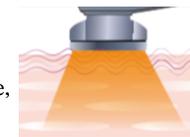

### •Режим МИКРОТОКИ•

Микротоковый массаж EMS активизирует кожу, повышает упругость и эластичность кожи, надолго сохраняет кожу в наилучшем состоянии, подтягивает дряблую кожу, полностью восстанавливает ее блеск и жизненную силу.

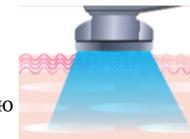

### •Режим ЗОНА ГЛАЗ•


Вибрационный массаж снимает усталость глаз, вводит крем или эссенцию для глаз в глубокие слои кожи и способствует впитыванию, что позволяет достичь эффекта красоты глаз.



### •Режим ОХЛАЖДЕНИЕ•

Освежает и успокаивает кожу, сужает поры. Усиливает влагоудерживающую способность и устраняет отеки по утрам.

**ВНИМАНИЕ! На данном режиме не работает вибрация.**

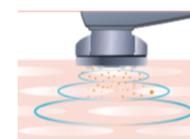

# Описание

# Способы применения



LED-дисплей

Полоски ионного датчика

Кнопка светодиода

Выбор мощности и вибрации

Вкл/Выкл и выбор режима

Разъём type-c

 -кнопка светодиода. Короткое нажатие выбирает цвет светодиода.

 -кнопка мощности: короткое нажатие-выбор интенсивности

 -вкл/выкл и выбор режима: длительное нажатие-вкл/выкл; короткое нажатие-выбор режима.



Значок заряда батареи

Низкий заряд батареи-красный  
Во время зарядки-мигает  
Полная зарядка-зеленый



Интенсивность

1-5 режимов

## Параметры

Наименование	Мультифункциональный аппарат для лица и шеи Kart House	Модель №	M1
Напряжение	DC5V	Мощность	5Вт
Ёмкость батареи	1500mAh	Время зарядки	3 часа
Интенсивность	5	Представительский стандарт	GB4706.1-2005
Комплектация	Основное устройство, крепежное кольцо, подставка, кабель для зарядки, инструкция.		

a. Перед использованием полностью зарядите аппарат. После полной зарядки он самостоятельно отключится.

b. Используйте аппарат только для лица и шеи. Не пользуйтесь аппаратом при активных воспалениях или ранах на лице. Если у вас чувствительная кожа, то используйте аппарат с осторожностью. Сначала попробуйте аппарат на небольшом участке кожи. Прекратите использование если у вас появилось раздражение или аллергическая реакция.

c. Начните пользоваться аппаратом на первой мощности. Если почувствуете дискомфорт, то немедленно прекратите использование.

d. Перед процедурой очистите кожу  
-Используйте очищающее средство для лица  
-Затем выберите режим “ОЧИЩЕНИЕ”

Примечание: Если вы используете гидрофильное масло или очищающий лосьон, то обязательно смойте их с лица.

e. При использовании держите полоски ионного датчика с обеих сторон и коснитесь кожи металлической направляющей головкой. Не используйте на сухой коже. Используйте контактный гель, крем или сыворотку для лица.

f. У аппарата на режиме ОХЛАЖДЕНИЕ есть автаймер, он отключается каждые 5 минут.

• После использования режима “ОХЛАЖДЕНИЕ” дайте отдохнуть аппарату полчаса перед следующим использованием.

## Режим “ОЧИЩЕНИЕ”

используется с фиксирующим кольцом, хлопковым спонжем или тряпочкой, и со средством для снятия макияжа .

•Перед использованием обязательно снимите макияж и помойте лицо. Частота использования: 2-3 раза в неделю в зависимости от чувствительности кожи.


• Время использования: не более 3х минут; для чувствительной кожи 1-2 минуты.




Наденьте влажную хлопковую тряпочку на металлическую головку




Зафиксируйте кольцо

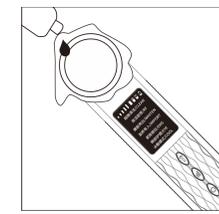

Используйте средство для снятия макияжа или очищающий тоник

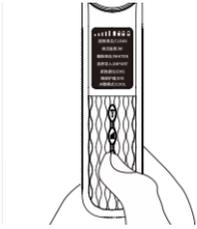


Длительное нажатие включает питание, выберите режим “ОЧИЩЕНИЕ” этой же кнопкой

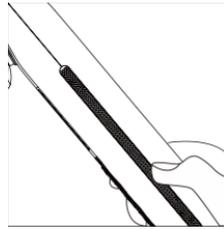


Держите полоски ионного датчика с обеих сторон аппарата



Очистите лицо круговыми движениями

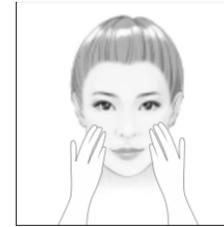

Равномерно нанесите гель или крем на лицо.

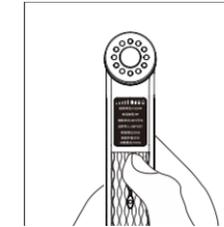

В рабочем состоянии выберите режим “ОСВЕТЛЕНИЕ”




Перемещайте по лицу по линиям, как показано на картинке


## Режим “RF ЛИФТИНГ”

можно использовать с контактным гелем, тоном или лосьоном (без фиксирующего кольца и хлопковой тряпки).

- Перед использованием обязательно снимите макияж и помойте лицо;
- Частота использования: 1 раз в 5 дней в зависимости от чувствительности кожи;
- Время использования: 3-5 минут в зависимости от чувствительности кожи.

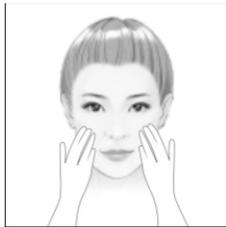

Равномерно нанесите гель, тонер или лосьон на лицо.

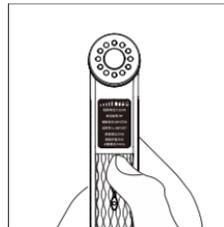

В рабочем состоянии выберите режим “RF ЛИФТИНГ”



Перемещайте по лицу по линиям, как показано на картинке

## Режим “ОСВЕТЛЕНИЕ”


можно использовать с контактным гелем, кремом (без фиксирующего кольца и хлопковой тряпки).

- Перед использованием обязательно снимите макияж и помойте лицо;
- Частота использования: 1-3 раза в неделю в зависимости от чувствительности кожи;
- Время использования: не более 3х минут в зависимости от чувствительности кожи.

## Режим “ФОНОФОРЕЗ”

можно использовать крем для лица, тканевую маску или эссенцию (без фиксирующего кольца)

- Перед использованием обязательно снимите макияж и помойте лицо.
- Частота использования: 2 раза в день, утром и вечером
- Время использования: не более 3х минут в зависимости от чувствительности кожи

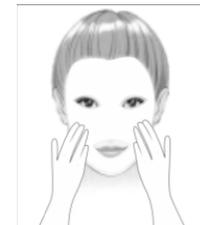

Равномерно нанесите крем или эссенцию на лицо.



В рабочем состоянии выберите режим “ФОНОФОРЕЗ”



Перемещайте по лицу по линиям, как показано на картинке




Снимите маску и очистите лицо или помассируйте до полного впитывания эссенции/крем

## Режим “МИКРОТОКИ”

можно использовать с контактным гелем (без фиксирующего кольца и хлопковой тряпки).

- Перед использованием обязательно снимите макияж и помойте лицо;
- Частота использования: 1-2 раза в неделю в зависимости от чувствительности кожи;
- Время использования: 3-5 минут в зависимости от чувствительности кожи.

# Рекомендации по уходу за кожей

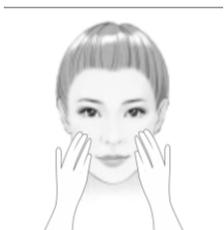

Равномерно нанесите гель или крем на лицо.



В рабочем состоянии выберите режим "МИКРОТОКИ"



Перемещайте по лицу по линиям, как показано на картинке


## Режим "ЗОНА ГЛАЗ"

можно использовать с кремом для глаз/эссенцией для глаз (без фиксирующего кольца и хлопковой тряпки).

- Перед использованием обязательно снимите макияж и помойте лицо;
- Частота использования: каждый день в зависимости от чувствительности кожи;
- Время использования: не более 3х минут в зависимости от чувствительности кожи.



Равномерно нанесите крем вокруг глаз/эссенцию для глаз

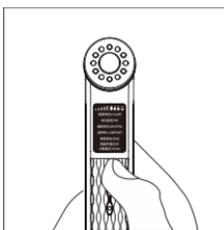

В рабочем состоянии выберите режим "ЗОНА ГЛАЗ"




Перемещайте по лицу по линиям, как показано на картинке

## Режим "ОХЛАЖДЕНИЕ"

можно использовать с контактным гелем/кремом (без фиксирующего кольца и хлопковой тряпки).


- Перед использованием обязательно снимите макияж и помойте лицо;
- Частота использования: каждый день в зависимости от чувствительности кожи;
- Время использования: не более 3х минут в зависимости от чувствительности кожи.

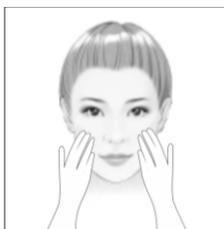

Равномерно нанесите гель или крем на лицо.



В рабочем состоянии выберите режим "ОХЛАЖДЕНИЕ"

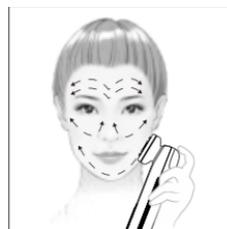

Перемещайте по лицу по линиям, как показано на картинке

Уход за кожей более эффективен, если делать массаж как показано на следующих изображениях:

- Угол рта-носогубная складка-висок

- Линия челюсти-под ухом-шея



1. Равномерно нанесите эссенцию на лицо
2. Следуйте направлению, противоположному носогубному, снизу-вверх
3. Затем двигайтесь в сторону виска(3 раза)



1. Равномерно нанесите эссенцию на лицо
2. Проведите от подбородка до уха(3 раза)
3. Помассируйте часть под ухом(3 раза)
4. Проведите от шеи сверху вниз(3 раза)

### Примечание:

- не использовать на адамовом яблоке
- чтоб сохранить изделие в чистоте, очищайте его после ухода за кожей и поместите его в проветриваемое место

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание преждевременной поломки аппарата из-за перепадов температур, давайте отдохнуть аппарату минимум 15 минут между режимами.

## Уход за кожей утром/подготовка к макияжу



- очистите лицо
- используйте тонер/эссенцию/лосьон/крем
- выберите режим ОЧИЩЕНИЕ/ОСВЕТЛЕНИЕ/ФОНОФОРЭЗ по своему усмотрению
- сделайте макияж

## Уход за кожей ночью



- очистите кожу
- глубокое очищение(выберите режим ОЧИЩЕНИЕ 2-3 раза в неделю)
- нанесите тонер/эссенцию/лосьон/маску для лица(выберите ОСВЕТЛЕНИЕ или ФОНОФОРЕЗ по своему усмотрению)
- нанесите контактный гель и выберите режим МИКРОТОКИ или RF ЛИФТИНГ (нельзя делать вместе и в один день)
- нанесите крем для глаз/эссенцию для глаз (ежедневно)
- нанесите крем(выберите режим ОХЛАЖДЕНИЕ ежедневно)

## Обслуживание

- ❶ При уходе за изделием убедитесь, что оно выключено, чтобы избежать раздражения во время чистки.

### Не мыть!

Пожалуйста, протирайте аппарат с помощью мягкой ткани с небольшим количеством жидкого мыла



### Очистите фиксирующее кольцо.

Если оно загрязнено, то помойте его водой.



### Не протирайте аппарат едким раствором.

Запрещено использовать спирт, бензин или жидкость для снятия лака, они могут привести к поломке изделия, растрескиванию деталей, обесцвечиванию и т.д



Вопросы	Ответы
Есть ли регламент по времени и частоте использования аппарата?	Использовать до 5 дней в неделю в зависимости от чувствительности кожи
Есть ли какая-то подготовка перед использованием?	Перед использованием обязательно нужно очистить лицо. Для лучшего эффекта следует сделать очищающую маску или скраб.
Можно ли использовать подставку другого аппарата для зарядки?	Используйте оригинальную подставку для зарядки во избежание несчастных случаев
Почему после чистки ватным диском не остаётся явных загрязнений?	Это зависит от типа и состояния кожи
Почему немеет рука и лицо после использования?	Аппарат выдаёт положительные и отрицательные ионы EMS для массажа. Отрегулируйте интенсивность в соответствии с состоянием вашей кожи
Вредно ли это для глаз?	Закройте глаза и не смотрите прямо на светодиоды
Могу ли я использовать аппарат в душе?	Не используйте его во время приема душа или ванны, чтобы избежать несчастных случаев

## Противопоказания

1. Пластика лица, подкожная металлоимплантация;
2. Аллергия на косметику и косметические аппараты(перед использованием проконсультируйтесь с врачом);
3. Плохое здоровье, алкоголизм;
4. Кожные заболевания, хрупкая кожа, аллергия;
5. Туберкулёз, гипертония, инфекционные заболевания;
6. Менструация, лактация, беременность;
7. Психические расстройства
8. Во время приёма снотворных препаратов;

## Пожалуйста, не используйте на:

1. Резанные раны, пластические раны, полость рта, вульва, слизистая оболочка, гнойно-воспаленные участки кожи;
2. Адамово яблоко, глазное яблоко, окологлазная область, вирусные бородавки и т.д.;
3. На частях тела со встроенными металлическими, пластиковые, кремниевые деталями;
4. Недавно сделанная эпиляция или бритьё.