



Dental Line



Вдохновляйся здоровой улыбкой

## ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА



**DL-010B**  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

# Содержание

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Содержание                 | 1  |
| Предисловие                | 2  |
| Описание устройства        | 3  |
| Технические характеристики | 4  |
| Комплектация               | 5  |
| Насадки в комплектации     | 6  |
| Структура устройства       | 7  |
| Подготовка к работе        | 8  |
| Эксплуатация               | 9  |
| Режимы работы              | 10 |
| Уход и обслуживание        | 11 |
| Гарантийные обязательства  | 12 |
| Видео-обзор                | 15 |
| Контакты                   | 16 |

# Предисловие

Компания «**Mendes**» благодарит Вас за выбор нашей продукции. Данная продукция представляет собой портативный ирригатор для полости рта модели DL-010B из категории Dental Line.

**Mendes Dental Line** – представляет собой новое направление в линейке продуктов «Mendes», ориентированное на предоставление инновационных решений для ухода за полостью рта. В эту категорию входят передовые ирригаторы и электрические зубные щетки, разработанные для обеспечения максимальной эффективности и комфорта в ежедневном уходе за зубами.

**Инновационная Технология:** Продукты Mendes DENTAL LINE оснащены последними достижениями в области стоматологии, что позволяет обеспечить глубокую очистку и профилактику заболеваний полости рта.

**Комфорт и Легкость Использования:** Ирригаторы и электрические щетки разработаны с учетом комфорта пользователя, имеют эргономичный дизайн и просты в использовании.

**Настройка под Индивидуальные Потребности:** Продукты позволяют настроить режимы работы в зависимости от индивидуальных потребностей, обеспечивая максимальную эффективность и комфорт.

## Описание устройства

### Ирригатор DL-010B

#### *Откройте Силу Безупречной Чистоты*

Вдохновленный передовыми инновациями в уходе за полостью рта, ирригатор DL-010B переопределяет ваш подход к ежедневной гигиене. Это больше, чем просто устройство для водной чистки, это комплексная система для здоровья полости рта, разработанная для улучшения вашего самочувствия и уверенности.

В каких областях раскрывает свой потенциал модель DL-010B:

**Здоровье Десен:** Пульсирующая струя воды мягко, но эффективно массирует и стимулирует десны, улучшая кровообращение и уменьшая воспаление. Попрощайтесь с опухшими, кровоточащими деснами и поздоровайтесь со здоровым и устойчивым основанием для ваших зубов. Идеально подходит для тех, у кого чувствительные десны или кто хочет предотвратить гингивит.

**Удаление Налета:** Целенаправленно воздействуйте на упрямый зубной налет в труднодоступных местах, которые не могут очистить только щетка и зубная нить. Данная модель вымывает остатки пищи и бактерии, скрывающиеся между зубами, вдоль линии десен и в пародонтальных карманах, оставляя ощущение исключительной чистоты во рту.

**Уход за Брекетами:** DL-010B — это настоящая находка для людей с брекетами, мостами, коронками и имплантатами.

Специализированные насадки легко перемещаются вокруг ортодонтических конструкций, удаляя застрявшие частицы пищи и обеспечивая тщательную очистку, способствующую долгосрочному здоровью зубов.

**Свежее Дыхание:** Боритесь с неприятным запахом изо рта в его источнике. Устраняя бактерии и остатки пищи, наш ирригатор помогает нейтрализовать соединения, вызывающие запах, оставляя вам свежую, уверенную улыбку, которая сохраняется надолго.

**Общее Здоровье Полости Рта:** Mendes Dental Line выходит за рамки поверхностной очистки, способствуя сбалансированному микробиому полости рта и снижая риск развития кариеса, заболеваний десен и других стоматологических проблем.

Инвестируйте в долгосрочное здоровье полости рта с помощью простого и эффективного инструмента.

## Технические характеристики

---

- Модель DL-010B
- 4 режима работы
- Ёмкость резервуара: 300мл
- Уровень давление жидкости: 207-827кПа
- Частота пульсации: 1400- 1800 /мин
- Литиево-ионный аккумулятор: 1500mAh
- Время полной зарядки: 4 ч
- Уровень влагозащиты: IPX7
- Потребляемая мощность: 5 Вт
- Материал корпуса: ABS + PC
- Гарантия: 2 года
- Средний срок службы: 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

## Комплектация



Основной блок ирригатора



4 сменных насадки



Кабель USB Type-C



Инструкция по эксплуатации

## Насадки в комплектации



Стандартные сопла- 2 шт

Он может эффективно удалить 99% пятен, массаж десен, что может защитить ваше здоровье полости рта.



Скребок для языка – 1 шт

Вы можете использовать его для очистки покрытия языка, которое сохранит свежесть дыхания.



Головка зубной щетки – 1 шт

Он поможет хорошо очистить поверхность вашего зуба, очищая зазор между зубами, что может лучше очистить и отбелить ваши зубы.

# Структура устройства

Насадка

Кнопка блокировки насадки


Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка выбора режима

Индикаторы режимов работы

Резервуар


Гравитационный шар («якорь»)

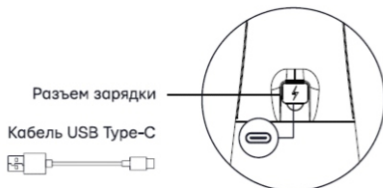

# Подготовка к работе

## Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

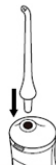

**Внимание!** Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

## Установка и снятие резервуара для жидкости

Удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.



### Примечание:

В резервуаре вы можете заменить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской проверки. Она не представляет никакой опасности для вашего здоровья.

## Наполнение резервуара

Снимите резервуар и наполните его очищенной водой. Заливайте в резервуар воду, температура которой не выше +40°C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.




### Внимание!

Насадка должна быть СТРОГО индивидуальной.  
 Совместное использование одной насадки различными  
 Пользователями не рекомендуется.  
 Рекомендуется заменять насадки каждые 3 месяца.

# Эксплуатация

## Способ применения

- Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

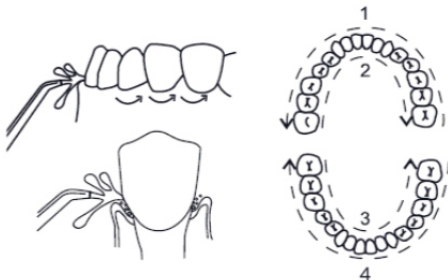

## После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ИРРИГАТОР В КАКУЮ-ЛИБО ЖИДКОСТЬ!**

## Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его деталях и возникновения неприятного запаха

# Режимы работы

## Включение и выключение прибора

1. Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ
2. Для выключения прибора один раз нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ

## Выбор режима работы



Выбор режима работы осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства.

## Портативный ирригатор для полости рта DL-010B, имеет 4 режима работы:



### Pulse

Ирригатор меняет давление, чередуя высокое и низкое. Режим рекомендован для ежедневного применения и массажа десен.



### Soft

Низкое давление подходит для людей с повышенной чувствительностью зубов и десен, режим идеален в начале использования ирригатора.



### Normal

Режим предназначен для регулярного использования, эффективно удаляет остатки пищи и бактериальный налет из межзубных промежутков и с поверхности зубов.



### Power

Самый интенсивный из четырех режимов: ирригация происходит на максимальном давлении.



**Внимание!** После включения ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

## Уход и обслуживание

- Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.
- Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образоваться известковые

- отложения. Для их устранения используйте специальное средство RevyLine для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению.

Производитель рекомендует проводить чистку

- ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

# Гарантийные обязательства

Компания «Mendes» – благодарит Вас за выбор и надеется на долговременную работу изделия без поломок и нареканий.

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Продавец                   | ИП Шагалдян А.Р.<br>_____ |
| Покупатель                 | _____<br>_____            |
| Название оборудования      | _____<br>_____<br>_____   |
| Количество                 | _____<br>_____            |
| Срок гарантийной поддержки | _____<br>_____<br>_____   |

МП \_\_\_\_\_

## Гарантии НЕ подлежат следующие случаи:

- Отсутствие гарантийного талона на момент сдачи изделия в ремонт, неправильное, неполное заполнение или наличие исправлений в гарантийном талоне, не завизированных продавцом. Отсутствие подписи Покупателя в гарантийном талоне.
- Нарушены правила или условия эксплуатации, установки, монтажа изделия, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, поставляемой в комплекте с изделием.
- Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта, повреждения вследствие использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
- Несоблюдение пользователем предписанной инструкции по эксплуатации и использование изделия не по назначению
- Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации, ухудшения технического состояния или внешнего вида из-за длительного использования изделия (более 1 года).
- При повреждении изделия, возникшем в результате климатических явлений или природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения правил эксплуатации, неправильного хранения, небрежного обращения, механического или химического воздействия, применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации эксплуатационных и расходных материалов.
- При ухудшении технических характеристик изделия, явившихся следствием его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации расходных материалов, интенсивного использования, перегрузки, в том числе использования изделия любительского класса в

коммерческих (профессиональных) целях, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и сроков службы изделия.

● В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ). Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом. Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара, который является сложным техническим изделием, Покупатель в первую очередь обращается в компанию, продавшую ему товар и указанную в гарантийном талоне. Ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения данной инструкции, возлагается на покупателя в полном объеме.

*Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели товара, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.*

**С условием гарантии согласен**

**Дата продажи**

\_\_\_\_\_  
(фамилия покупателя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_г.

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

Продающая организация ИП Шагалдян А.Р.

Фамилия и подпись продавца \_\_\_\_\_ **А.Р. Шагалдян**

Контактный телефон: +7-915-202-26-36 (Ватсап / Телеграм)  
Email: zakazmendes@gmail.com  
По сотрудничеству: albertshagaldyan1@gmail.com  
График работы Сервисной службы: с 10:00 до 18:00 по  
московскому времени.

### **Официальный сайт**

Наведи камеру на QR-КОД



### **Сервис Центр Поддержки**

Наведи камеру на QR-КОД

Тех.Поддержка Mendes  
Бизнес-аккаунт WhatsApp



**ВИДЕО-ОБЗОР ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

## Контактная информация

Контактный телефон: +7-915-202-26-36 (Ватсап / Телеграм)

Сервисная служба: servicemendes@yandex.ru

Вопросы по сотрудничеству: officemendes@yandex.ru

### Официальный сайт



Instagram\*



@MENDES.ONE

### Вконтакт



Тех.поддержка



\*компания Meta Platforms считается экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена в России. Организация принадлежит «Инстаграм»



Dental Line



Вдохновляйся здоровой улыбкой