

GÉZATONE ҰАΛΛΟ'Ο



Массажер-пилоу

ИНСТРУКЦИЯ/ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

МАССАЖЕР ПОДУШКА
COFFEE CREAM



Введение

GÉZATONE

Поздравляем Вас с удачной покупкой и благодарим за выбор продукции компании Gézatone!


Массажная подушка Gézatone, модель AMG406 незаменима для расслабления и снятия напряжения в мышцах, общего восстановления и тонизации организма. Массажная подушка Gézatone, модель AMG406 имеет эргономичный дизайн, идеально подходит для использования дома, в офисе, в автомобиле.

Использование массажной подушки в домашних условиях удобно и не требует дополнительного времени – ею можно пользоваться во время чтения или просмотра телевизора. Подушка отлично впишется в интерьер вашего дома.

Массажная подушка расслабляет мышцы шеи, плеч и спины. Функция массажа стимулирует приток крови к голове, что снимает чувство усталости и склонность ко сну, бодрит и поднимает тонус. Легко приводимая в действие массажная подушка с функцией смены движения роликов в течение 15-минутного цикла работы устранил дискомфортные ощущения в области шеи и расслабит шейные мышцы.

Внешний вид прибора

GÉZATONE

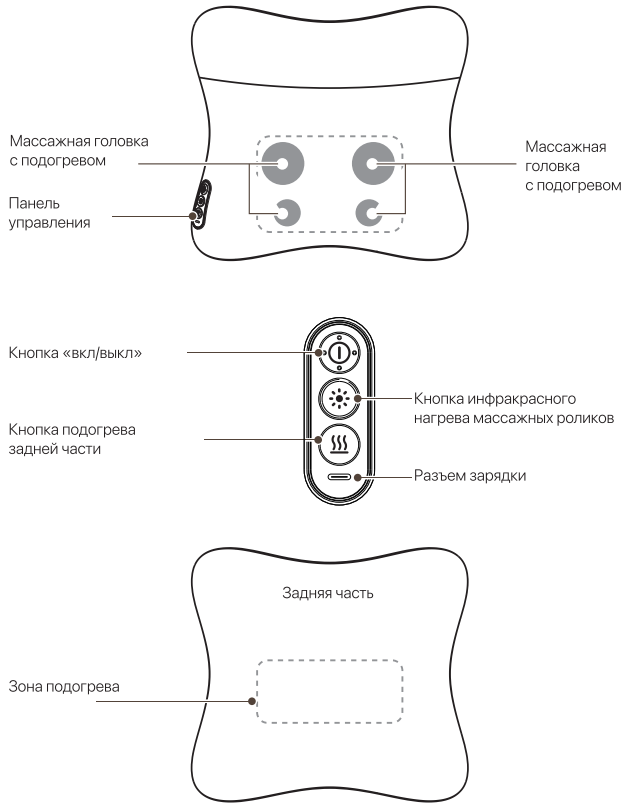

Функции подушки

GÉZATONE



2 встроенных массажных ролика в сочетании с ИК – излучением обеспечивают массаж глубоких тканей, эффективно снимают мышечное напряжение, усталость, улучшают микроциркуляцию, снимают синдром затекшей шеи, дарят Вам несравнимые моменты расслабления.

ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ

•**Офисные работники/студенты**
Длительное использование компьютера ведет к отеку мышц.

•**Водители**
Высокая нагрузка на плечи в связи с долгим вождением.

•**Пожилые люди**
Слабость мышц и боли в спине.



МАССАЖ ШЕИ

Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно прилегал к области Вашей шеи. Легкий массаж способствует улучшению микроциркуляции шейного и прилегающих отделов, ускоряет метаболические процессы, снимает спазм мышц, расслабляет напряженные мышцы шеи. Регулярное использование массажной подушки способствует улучшению локальной микроциркуляции, в результате чего происходит снятие усталости и стресса.



МАССАЖ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ

Убедитесь, что массажная подушка плотно прилегает к области спины и поясницы. Разминающие движения помогают улучшить микроциркуляцию, в результате чего снимаются боли в спине и пояснице. Регулярное использование массажной подушки значительно улучшает локальное кровообращение, позволяет снять усталость, уменьшить боли в пояснице.

Зарядка

GÉZATONE

Состояние индикатора зарядки аккумулятора на кнопке «вкл/выкл»

Цвет индикатора	Состояние	Описание
Зеленый	Зеленый цвет, горит постоянно	Батарея полностью заряжена
Оранжевый	Оранжевый цвет, горит постоянно	Батарея не полностью заряжена
Оранжевый	Оранжевый цвет, часто мигает	Низкий заряд батареи
Оранжевый	Оранжевый цвет, медленно мигает	Батарея на зарядке

Управление прибором

Нажмите и удерживайте кнопку «вкл/выкл» 2-3 сек для включения прибора. По умолчанию включена функция инфракрасного нагрева массажных роликов. Коротким нажатием на кнопку «вкл/выкл» можно изменить направление вращения роликов. Нагрев массажных роликов можно выключить нажатием на кнопку управления нагревом. После нажатия на кнопку подогрева задней части подушки массаж остановится и включится подогрев задней части, чтобы снизить его температуру, нужно нажать на кнопку подогрева еще раз. После третьего нажатия на кнопку массаж возобновится, подогрев задней части отключится. Выключить прибор в любой момент времени можно, нажав и удерживая кнопку «вкл/выкл». Прибор автоматически отключается через 15 минут работы. Вы можете отключить прибор в любой момент проведения процедуры, нажав и удерживая кнопку питания 2-3 сек. После автоматического отключения подушки нужно подождать как минимум 30 мин до проведения следующей процедуры во избежание перегрева.

Противопоказания к использованию

– во время беременности
– при наличии повреждений и заболеваний кожи, ожогов в месте воздействия
– после приема успокоительных, болеутоляющих и снотворных средств, а также алкоголя
– при диабете и люди, использующие кардиостимуляторы, должны получить разрешение врача на использование данного аппарата

Меры предосторожности

GÉZATONE

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования массажера и сохраните ее на будущее!

Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Всегда отключайте сетевой адаптер из розетки после зарядки аккумулятора.
- Запрещается использование аппарата в помещении бассейна или душевой комнаты.
- Не располагайте аппарат или любую из его частей в местах, где есть риск их падения в воду.
- Не касайтесь и не пытайтесь извлечь упавший в воду аппарат до отключения зарядного устройства из розетки.
- Запрещается любое дальнейшее использование аппарата, если произошло проникновение воды внутрь массажной подушки, корпуса сетевого адаптера.
- Берегите аппарат и соединительные провода от соприкосновения с нагреваемыми поверхностями.
- Запрещается использовать во время сна. Избегайте ситуаций, когда Вы можете заснуть во время использования аппарата. Например, после приема успокоительных или снотворных препаратов, алкоголя.
- Если Вы страдаете каким-либо заболеванием, не упомянутым в разделе «Противопоказания», перед использованием массажной подушки проконсультируйтесь с врачом.

Используйте аппарат только по его прямому назначению и строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Уход и обслуживание

1. Обязательно отключайте аппарат от сети и давайте ему остыть перед проведением обслуживания и чистки.
2. Теканевую поверхность массажной подушки следует очищать мягкой, слегка влажной тканью или мягкой щеткой. Никогда не погружайте массажную подушку в жидкость и не позволяйте намокать.
3. Наружный чехол подушки можно снять для дальнейшей ручной чистки. Вниманию! При надевании чехла убедитесь что накладка кнопок управления на чехле совпадает с расположением самих кнопок на внутренней поверхности подушки.
4. Не сушите массажную подушку на солнце или рядом с нагревательными приборами.
5. Запрещается подвергать массажную подушку сухой химчистке.

Вопросы и ответы

GÉZATONE

Проблема	Возможная причина	Решение
Подушка не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите прибор. Индикатор заряда должен гореть зеленым цветом, когда аккумулятор полностью заряжен.
	Прибор не включен	Нажмите и удерживайте кнопку включения прибора 2-3 сек для включения
Массаж прекратился	Массажные ролики заблокированы	Выключите прибор и включите снова
Не идет зарядка или индикатор заряда ничего не показывает	Используется некорректный провод зарядки или зарядное устройство.	Проверьте подключение к разъему зарядки, состояние зарядного провода и зарядного устройства, оно должно быть USB 5B 2A

Технические характеристики


Модель: AMG406
Потребляемая мощность: 10Вт
Параметры аккумулятора: 3200 мА*ч Li-Ion
Параметры зарядного устройства (в комплект не входит): USB 5B 2A
Продолжительность непрерывной работы: 15 мин
Материал чехла: полиэстер, лен
Материал наполнителя: искусственный латекс
Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C - 40°C
Допустимая влажность воздуха: <80%

Комплектность

Подушка AMG406 – 1шт
Провод зарядки Type-C – 1шт
Инструкция по эксплуатации – 1шт

Құрылғының сыртқы түрі

GÉZATONE

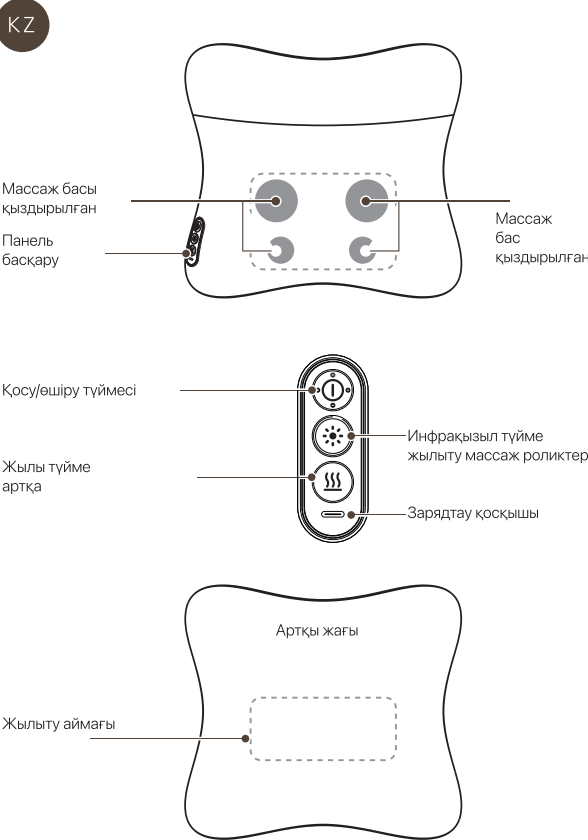

Жастық функциялары

GÉZATONE



2 кіріктірілген массаж роликтері ИК-сәулеленуімен үйлесімде тіңдердің терең массажын қамтамасыз етеді, бұлшықет кернеуін, шаршауды тиімді жеңілдетеді, микроциркуляцияны жақсартады, мойынның қатаю синдромын жеңілдетеді, Сізге теңдесі жоқ релаксация сәттерін береді.

Техникалық сипаттамалар

Үлгі: AMG406
Қуатты тұтыну: 10 Вт
Батареяның параметрлері: 3200 мА Li-Ion
Зарядтағыш параметрлері (жинаққа кірмейді): USB 5V 2A
Үздіксіз жұмыс уақыты: 15 мин
Жабылатын материал: полиэфир, зығыр
Толтырғыш материал: жасанды латекс
Рұқсат етілген ауа температурасының диапазоны: 5°C - 40°C
Ауаның рұқсат етілген ылғалдылығы: 880%

Комплектность

AMG406 жастығы – 1 дана
Type-C зарядтау кабелі – 1 дана
Пайдалану нұсқаулары – 1 дана.

GÉZATONE ҰАΛΛΟ'Ο

Прибор бытовой электрический для ухода и массажа за телом, Серия(typ) AMG, модель AMG406, т.м. Gézatone
Изготовитель: "Gézatone I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 ро де Гранж Галан, Франция. Өндіруші зауыттың филиалы: Guangdong Whale Import & Export Trading Co., Ltd, Room 1307, World Trade Center South Tower, No.371-375 Huanshi Dong Road, Yuexi District, Guangzhou City, Guangdong Province, China, Китай.
Импортёр/уполномоч. изготовителем орг: ООО «МИТРИДАТ», Р.Ф. Москва, Алтуфьевское ш., д. 41, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком 8, тел.: 8 (499) 225 25 83. Срок службы: 3 года. Способ применения и дату производства: см. инструкцию.

КЗ: Дене құтығы мен массаждына арналған тұрмыстық техника, AMG сериясы (тип), AMG406 моделі, т.м. Gézatone
Дайындаушы: "Gézatone I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", мекенжайы: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 ро де Гранж Галан, Франция. Өндіруші зауыттың филиалы: Guangdong Whale Import & Export Trading Co., Ltd, Room 1307, World Trade Center South Tower, No.371-375 Huanshi Dong Road, Yuexi District, Guangzhou City, Guangdong Province, China, Китай.
Импорттаушы/дайындаушының уәкілетті мекемесі: "МИТРИДАТ" ЖШҚ, Ресей, Москва қ., Алтуфьевское тас жолы, 41 үй, 1 қүрылы, 2 қабат, үй-жай 1, 8 бөлме, тел.: 8 (499) 225 25 83.

Дата производства: 06.2025

