



Dental Line



Вдохновляйся здоровой улыбкой

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА



DL-010W
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержание

Содержание	1
Предисловие	2
Описание устройства	3
Технические характеристики	4
Комплектация	5
Насадки в комплектации	6
Структура устройства	7
Подготовка к работе	8
Эксплуатация	9
Режимы работы	10
Уход и обслуживание	11
Гарантийные обязательства	12
Видео-обзор	15
Контакты	16

Предисловие

Компания «**Mendes**» благодарит Вас за выбор нашей продукции. Данная продукция представляет собой портативный ирригатор для полости рта модели DL-010W из категории Dental Line.

Mendes Dental Line – представляет собой новое направление в линейке продуктов «Mendes», ориентированное на предоставление инновационных решений для ухода за полостью рта. В эту категорию входят передовые ирригаторы и электрические зубные щетки, разработанные для обеспечения максимальной эффективности и комфорта в ежедневном уходе за зубами.

Инновационная Технология: Продукты Mendes DENTAL LINE оснащены последними достижениями в области стоматологии, что позволяет обеспечить глубокую очистку и профилактику заболеваний полости рта.

Комфорт и Легкость Использования: Ирригаторы и электрические щетки разработаны с учетом комфорта пользователя, имеют эргономичный дизайн и просты в использовании.

Настройка под Индивидуальные Потребности: Продукты позволяют настроить режимы работы в зависимости от индивидуальных потребностей, обеспечивая максимальную эффективность и комфорт.

Описание устройства

Ирригатор DL-010W

Откройте Силу Безупречной Чистоты

Вдохновленный передовыми инновациями в уходе за полостью рта, ирригатор DL-010W переопределяет ваш подход к ежедневной гигиене. Это больше, чем просто устройство для водной чистки, это комплексная система для здоровья полости рта, разработанная для улучшения вашего самочувствия и уверенности.

В каких областях раскрывает свой потенциал модель DL-010W:

Здоровье Десен: Пульсирующая струя воды мягко, но эффективно массирует и стимулирует десны, улучшая кровообращение и уменьшая воспаление. Попрощайтесь с опухшими, кровоточащими деснами и поздоровайтесь со здоровым и устойчивым основанием для ваших зубов. Идеально подходит для тех, у кого чувствительные десны или кто хочет предотвратить гингивит.

Удаление Налета: Целенаправленно воздействуйте на упрямый зубной налет в труднодоступных местах, которые не могут очистить только щетка и зубная нить. Данная модель вымывает остатки пищи и бактерии, скрывающиеся между зубами, вдоль линии десен и в пародонтальных карманах, оставляя ощущение исключительной чистоты во рту.

Уход за Брекетами: DL-010W — это настоящая находка для людей с брекетами, мостами, коронками и имплантатами.

Специализированные насадки легко перемещаются вокруг ортодонтических конструкций, удаляя застрявшие частицы пищи и обеспечивая тщательную очистку, способствующую долгосрочному здоровью зубов.

Свежее Дыхание: Боритесь с неприятным запахом изо рта в его источнике. Устраняя бактерии и остатки пищи, наш ирригатор помогает нейтрализовать соединения, вызывающие запах, оставляя вам свежую, уверенную улыбку, которая сохраняется надолго.

Общее Здоровье Полости Рта: Mendes Dental Line выходит за рамки поверхностной очистки, способствуя сбалансированному микробиому полости рта и снижая риск развития кариеса, заболеваний десен и других стоматологических проблем.

Инвестируйте в долгосрочное здоровье полости рта с помощью простого и эффективного инструмента.

Технические характеристики

- Модель DL-010W
- 4 режима работы
- Ёмкость резервуара: 300мл
- Уровень давление жидкости: 207-827кПа
- Частота пульсации: 1400- 1800 /мин
- Литиево-ионный аккумулятор: 1500mAh
- Время полной зарядки: 4 ч
- Уровень влагозащиты: IPX7
- Потребляемая мощность: 5 Вт
- Материал корпуса: ABS + PC
- Гарантия: 2 года
- Средний срок службы: 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

Комплектация



Основной блок ирригатора



4 сменных насадки



Кабель USB Type-C



Инструкция по эксплуатации

Насадки в комплектации



Стандартные сопла- 2 шт

Он может эффективно удалить 99% пятен, массаж десен, что может защитить ваше здоровье полости рта.



Скребок для языка – 1 шт

Вы можете использовать его для очистки покрытия языка, которое сохранит свежесть дыхания.



Головка зубной щетки – 1 шт

Он поможет хорошо очистить поверхность вашего зуба, очищая зазор между зубами, что может лучше очистить и отбелить ваши зубы.

Структура устройства

Насадка

Кнопка блокировки насадки


Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка выбора режима

Индикаторы режимов работы


Резервуар

Гравитационный шар («якорь»)

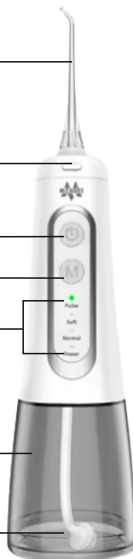

Разъем зарядки


Кабель USB Type-C

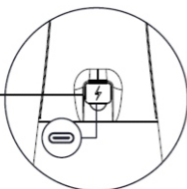

Подготовка к работе

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

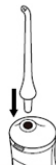

Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

Установка и снятие резервуара для жидкости

Удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.



Примечание:

В резервуаре вы можете заменить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской проверки. Она не представляет никакой опасности для вашего здоровья.

Наполнение резервуара

Снимите резервуар и наполните его очищенной водой. Заливайте в резервуар воду, температура которой не выше +40°C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.




Внимание!

Насадка должна быть СТРОГО индивидуальной.
 Совместное использование одной насадки различными Пользователями не рекомендуется.
 Рекомендуется заменять насадки каждые 3 месяца.

Эксплуатация

Способ применения

- Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

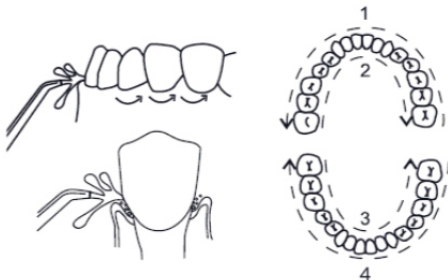

После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ИРРИГАТОР В КАКУЮ-ЛИБО ЖИДКОСТЬ!

Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его деталях и возникновения неприятного запаха

Режимы работы

Включение и выключение прибора

1. Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ
2. Для выключения прибора один раз нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ

Выбор режима работы



Выбор режима работы осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства.

Портативный ирригатор для полости рта DL-010W, имеет 4 режима работы:



Pulse

Ирригатор меняет давление, чередуя высокое и низкое. Режим рекомендован для ежедневного применения и массажа десен.



Soft

Низкое давление подходит для людей с повышенной чувствительностью зубов и десен, режим идеален в начале использования ирригатора.



Normal

Режим предназначен для регулярного использования, эффективно удаляет остатки пищи и бактериальный налет из межзубных промежутков и с поверхности зубов.



Power

Самый интенсивный из четырех режимов: ирригация происходит на максимальном давлении.



Внимание! После включения ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

Уход и обслуживание

- Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.
- Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образоваться известковые

- отложения. Для их устранения используйте специальное средство RevyLine для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению.

Производитель рекомендует проводить чистку

- ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

Гарантийные обязательства

Компания «Mendes» – благодарит Вас за выбор и надеется на долговременную работу изделия без поломок и нареканий.

24 МЕСЯЦА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Продавец	ИП Шагалдян А.Р. _____
Покупатель	_____ _____
Название оборудования	_____ _____
Количество	_____ _____
Срок гарантийной поддержки	_____ _____ _____

МП _____

Гарантии НЕ подлежат следующие случаи:

- Отсутствие гарантийного талона на момент сдачи изделия в ремонт, неправильное, неполное заполнение или наличие исправлений в гарантийном талоне, не завизированных продавцом. Отсутствие подписи Покупателя в гарантийном талоне.
- Нарушены правила или условия эксплуатации, установки, монтажа изделия, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, поставляемой в комплекте с изделием.
- Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта, повреждения вследствие использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
- Несоблюдение пользователем предписанной инструкции по эксплуатации и использование изделия не по назначению
- Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации, ухудшения технического состояния или внешнего вида из-за длительного использования изделия (более 1 года).
- При повреждении изделия, возникшем в результате климатических явлений или природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения правил эксплуатации, неправильного хранения, небрежного обращения, механического или химического воздействия, применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации эксплуатационных и расходных материалов.
- При ухудшении технических характеристик изделия, явившихся следствием его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации расходных материалов, интенсивного использования, перегрузки, в том числе использования изделия любительского класса в

коммерческих (профессиональных) целях, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и сроков службы изделия.

● В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ). Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом. Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара, который является сложным техническим изделием, Покупатель в первую очередь обращается в компанию, продавшую ему товар и указанную в гарантийном талоне. Ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения данной инструкции, возлагается на покупателя в полном объеме.

Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели товара, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

(фамилия покупателя)

«__» _____ 202_г.

(подпись покупателя)

Продающая организация ИП Шагалдян А.Р.

Фамилия и подпись продавца _____ **А.Р. Шагалдян**

Контактный телефон: +7-915-202-26-36 (Ватсап / Телеграм)
Email: zakazmendes@gmail.com
По сотрудничеству: albertshagaldyan1@gmail.com
График работы Сервисной службы: с 10:00 до 18:00 по
московскому времени.

Официальный сайт

Наведи камеру на QR-КОД



Сервис Центр Поддержки

Наведи камеру на QR-КОД

Тех.Поддержка Mendes
Бизнес-аккаунт WhatsApp



ВИДЕО-ОБЗОР ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Контактная информация

Контактный телефон: +7-915-202-26-36 (Ватсап / Телеграм)

Сервисная служба: servicemendes@yandex.ru

Вопросы по сотрудничеству: officemendes@yandex.ru

Официальный сайт



Instagram*



@MENDES.ONE

Вконтакт



Тех.поддержка



*компания Meta Platforms считается экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена в России. Организация принадлежит «Инстаграм»



Dental Line



Вдохновляйся здоровой улыбкой