



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-333-BK



Благодарим Вас за приобретение зубной щетки CS-333-BK



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем. Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данный раздел.
- Предупреждение! Следующие ситуации являются потенциально опасными и, если их не предотвратить, могут привести к серьезной травме:**
- Используйте прибор только по прямому назначению, указанному в данном руководстве.
 - Не размещайте и не храните прибор в местах, откуда он может легко упасть в ванну или раковину.
 - Не погружайте прибор в воду или иную жидкость.
 - Данный прибор не является игрушкой. Не разрешайте детям играть с прибором. Не допускается использование прибора детьми в отсутствие взрослых.
 - Храните устройство в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми.
 - Не допускайте обматывания USB-кабеля вокруг каких-либо частей тела, это может привести к травме или удушью.
 - Рекомендованный возраст для пользования данной зубной щеткой – от 12 лет.
 - Данный прибор не предназначен для самостоятельного использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.
 - Не подключайте зарядное устройство к сети мокрыми руками.
 - Подключайте устройство к электрической сети с требуемыми параметрами.
 - Не допускайте попадания воды на USB-кабель зарядного устройства.
 - Не используйте зарядное устройство с поврежденным проводом или разъемом. Не пользуйтесь неисправным гнездом питания.

Общие меры предосторожности

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.
- Храните устройство вдали от огня и прямых солнечных лучей.
- Не храните устройство в местах, подверженных сильным ударам или вибрации (например, в местах, где устройство легко может упасть на пол).
- Используйте для подзарядки оригинальное зарядное устройство.
- Не повреждайте и не обрывайте USB-кабель.
- Не вносите изменения в конструкцию USB-кабеля.
- Не кладите тяжелые предметы на USB-кабель.
- Не пытайтесь зарядить устройство, если USB-кабель поврежден.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Перед каждым использованием осматривайте прибор и его компоненты на предмет наличия повреждений. В случае обнаружения неисправностей или повреждений не пользуйтесь изделием и обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр по обслуживанию продукции торговой марки CS Medica, адрес которого указан в настоящем руководстве.

Предосторожности медицинского характера

- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная стоматологическая хирургическая операция;
 - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой, а также в случае возникновения боли или дискомфорта во время использования щетки.
- Проконсультируйтесь с врачом, если у Вас установлен электрокардиостимулятор.
- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного использования. Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед тем, как начать использование зубных паст с повышенным содержанием абразивных веществ совместно с электрической зубной щеткой.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный прибор предназначен для ухода за полостью рта взрослых и детей от 12 лет.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Ниже приведены основные составные части прибора:




Дополнительно можно приобрести:

Насадки CS Medica SP-33 для электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-333-BK (в комплекте 2 насадки).

4. РЕЖИМЫ ЧИСТКИ


- Режим Daily (Ежедневный)**
Оптimalен для ежедневного поддержания чистоты полости рта.
- Режим White (Отбеливание)**
Рекомендуется для особо тщательного удаления налета и пятен (например, от кофе, табака, красного вина) с эмали, а также полировки эмали для придания естественной белизны Вашим зубам, что достигается за счет повышенной амплитуды колебаний щетинок.
- Режим Gum Care (Забота о деснах)**
Помимо непосредственно удаления налета с эмали, также осуществляет профилактический массаж десен за счет чередования амплитуд колебания щетинок. Также может быть рекомендован пользователям с болезнями и/или повышенной чувствительностью десен и эмали.

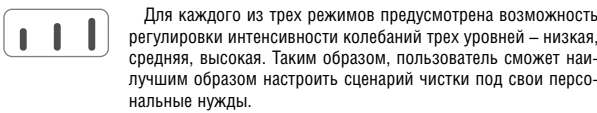

5. ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Высокоэффективный мотор с магнитной левитацией**
Обеспечивает высокую частоту колебаний щетинок (до 42 000 вибраций в минуту) для эффективного ухода за полостью рта, при этом снижает уровень вибраций и шума, делая чистку более комфортной для пользователя и продлевая срок службы самого прибора.
- 9 сценариев чистки**
Сочетание трех базовых режимов (Daily, White, Gum Care) и трех уровней интенсивности для каждого режима позволяют создать до 9 сценариев чистки, способных удовлетворить индивидуальные потребности большинства пользователей.
- Индукционное зарядное устройство с USB-кабелем**
Вам не нужно подключать кабель непосредственно к щетке и подвергать ее риску преждевременной поломки – вместо этого достаточно поставить ее на индукционное зарядное устройство. Помимо удобства использования и снижения риска поломки, тип подзарядки с отсутствием разъема для питания в корпусе щетки отличает герметичность, что обеспечивает высокий уровень защиты от влаги и продлевает срок эксплуатации.

- Энергоемкий аккумулятор**
Щетка оснащена мощным встроенным литий-ионным аккумулятором емкостью 700 мАч, что обеспечивает до 3 недель (при условии использования после полной подзарядки 2 раза в день в течение 2 минут) работы щетки без подзарядки – Вы можете смело брать с собой щетку в длительные поездки, командировки и путешествия.
- Напоминание о замене насадки**
Больше не нужно запоминать дату установки очередной насадки или изучать щетинки на предмет износа – специальный умный индикатор на рукоятке щетки подскажет, когда придет время замены насадки.
- Умный таймер**
Щетка оснащена умным таймером, который делает паузы каждые 30 секунд, чтобы сориентировать пользователя на равномерную очистку каждого из четырех квадрантов ротовой полости, и отключает прибор по прошествии двух минут – времени, рекомендованного стоматологами для чистки зубов.

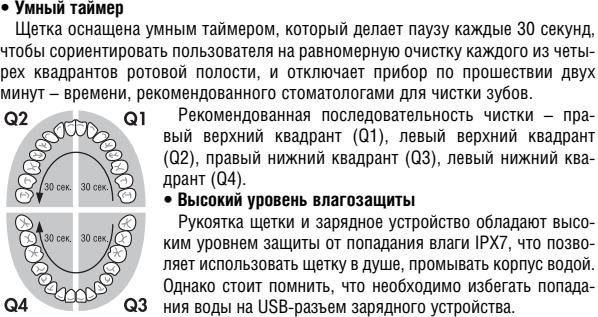


- Дорожный футляр**
Щетка поставляется в комплекте с фирменным твердым футляром с отделением для ручки и одной насадкой – теперь можно не расставаться с любимой щеткой в командировках или отпуске.
- 5 насадок в комплекте**
Щетка укомплектована 5 насадками. Трехуровневые щетинки, выполненные из высококачественного мягкого нейлона компании Dupont, адаптируются под форму зубного ряда и позволяют более качественно очищать труднодоступные места полости рта, например, межзубные промежутки и поверхности моляров, при этом не травмируя эмаль и десны.
- Индикатор заряда аккумулятора**
О необходимости подзарядки напомним специальный индикатор на рукоятке щетки, что позволит Вам избежать неприятной ситуации, когда щетка разряжается утром перед сборами на работу или прямо во время чистки. Время полной подзарядки составляет около 8 часов.

6. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЗАРЯДКА

- Установите зубную щетку в гнездо для ручки (электронного блока) и подключите его к USB-разъему выбранного устройства.
- Выберите один из следующих способов подзарядки:

- От электросети 220 В с помощью сетевого адаптера**
Соедините USB-кабель зарядного устройства с сетевым адаптером (приобретается отдельно). Вставьте вилку адаптера в электрическую розетку.
- Примечание:** всегда используйте адаптер с техническими параметрами, которые указаны на рисунке.
- Напрямую от USB-разъема компьютера или другого устройства**
Подсоедините USB-кабель зарядного устройства к USB-разъему выбранного устройства.

- В процессе подзарядки будет гореть красный индикатор на корпусе щетки. Как только устройство полностью зарядится, индикатор погаснет. Общее время полной зарядки составляет примерно 8 часов.
- О необходимости подзарядки в процессе эксплуатации будет напоминать индикатор заряда аккумулятора на корпусе щетки. Если уровень заряда низкий, то по окончании чистки индикатор мигает в течение нескольких секунд.
- Примечания:**
 - перед первым применением зубной щетки сразу же зарядите ее до максимального уровня (без перерывов);
 - в процессе подзарядки рукоятка (электронный блок) и зарядное устройство могут немного нагреваться;
 - в процессе подзарядки включить питание щетки не удастся.

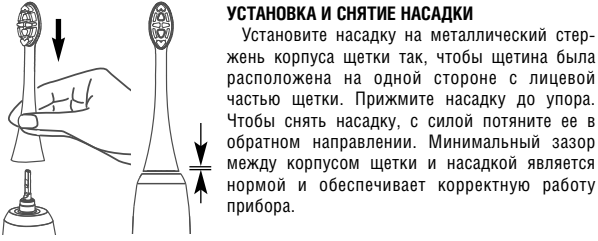


Примечание: данная модель щетки оснащена функцией напоминания о необходимости замены насадки – по завершении 180 циклов (что соответствует примерно 3 месяцам при использовании 2 раза в день) на рукоятке щетки на 30 секунд загорится желтым цветом индикатор замены насадки.


7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Использование электрической звуковой зубной щетки CS Medica CS-333-BK безопасно для пломб, брекетов, ортопедических конструкций (коронки, мостов, виниров и т. д.).
- При использовании на брекетах износ щетины будет происходить быстрее. Для качественной очистки полости рта необходимо своевременно заменять насадки, а также следовать рекомендациям, изложенным в данном руководстве.
- Не включая питание щетки, выберите один из трех базовых режимов последовательным нажатием кнопки М.
 - Смочите щетину водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого поместите щетку в ротовую полость и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
 - При необходимости отрегулируйте интенсивность режима нажатием кнопки М.
 - Примечание:** чтобы сменить режим работы, необходимо выключить щетку, установить нужный режим и заново включить.
 - Расположите щетинки насадки под углом 45 градусов по отношению к линии десны.
 - Аккуратно касаясь зубов и десен щетинками, медленно перемещайте чистящую головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, совершая легкие круговые движения и задерживаясь по несколько секунд на поверхности каждого зуба, захватывая межзубные промежутки и десны, для наилучшей очистки и массажного воздействия.
 - Данная щетка оснащена функцией умного таймера, который будет совершать паузы каждые 30 секунд чистки, что позволит пользователю концентрироваться на чистке каждого из 4 основных квадрантов ротовой полости в течение 30 секунд. Не забывайте очищать все поверхности зуба.
 - Зубная щетка автоматически выключится по прошествии двух минут – времени, рекомендованного стоматологами для чистки. Чтобы выключить щетку, не дожидаясь автоматического выключения, просто нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Правильная чистка зубов

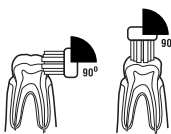

Боковые и жевательная поверхности зуба: во время чистки держите щетину под углом 90° к поверхности зуба.

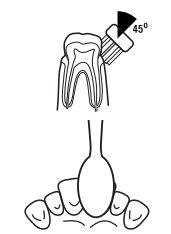


Граница между зубами и десной: во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.




8. ОЧИСТКА

Внимание: категорически запрещается мыть прибор или его компоненты в посудомоечной машине.

Очистка насадки

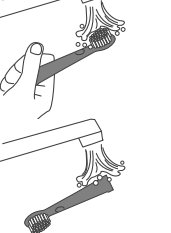

Очистка рукоятки (электронного блока) и зарядного устройства

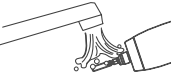

- Не погружайте рукоятку и зарядное устройство в воду или иную жидкость.
- Снимите насадку и промойте стержень рукоятки теплой водой (см. рисунок слева).
- Насухо вытрите рукоятку (электронный блок), прежде чем помещать ее на зарядное устройство и подключать к сети.
- Периодически очищайте рукоятку и зарядное устройство мягкой слегка влажной тканью или бумажным полотенцем.
- Не допускайте попадания жидкости на USB-разъем зарядного устройства.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии:

Рукоятка (электронный блок) – 2 года

Насадка – 3 месяца

Зарядное устройство – 2 года

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи « _____ » _____ г.

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации вручил

Подпись покупателя _____

9. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Обращайтесь с зубной щеткой и зарядным устройством аккуратно. Не роняйте их и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Храните устройство вдали от огня и прямых солнечных лучей.
- Если прибор не предполагается использовать в течение продолжительного времени, произведите его очистку в соответствии с пунктом 8 «Очистка» данного руководства и уберите на хранение в прохладное сухое место.
- Не кладите тяжелые предметы на прибор во время транспортировки.
- Не наматывайте USB-кабель на зарядное устройство.

10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Симптом	Возможная причина	Способ решения
Зубная щетка не заряжается.	1) USB-кабель не подключен к источнику питания. 2) Источник питания неисправен.	1) Подключите USB-кабель к источнику питания. 2) Проверьте исправность источника питания (подключив к нему другой прибор) и попробуйте использовать другой источник питания.
Зубная щетка не включается.	Вы только что приобрели прибор или не использовали его в течение нескольких месяцев.	Зарядите батарею с помощью зарядного устройства, см. пункт «Подзарядка».
Вибрации щетинок слишком медленные и слабые.	Вы слишком сильно прижимаете щетину к поверхности зубов.	Во время чистки слегка касайтесь щетиной поверхности зубов.
Прибор работает непродолжительное время даже после полной подзарядки.	1) Батарея неисправна или исчерпала свой ресурс. 2) Прибор заряжался недостаточно продолжительное время.	Обратитесь в сервисный центр по обслуживанию продукции торговой марки CS Medica. Заряжайте батарею не менее 8 часов.

