

# GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА  
И МАССАЖА ЛИЦА,  
серии Biolift, модель m100(S),  
бытовой электрический



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прежде всего, благодарим Вас за выбор этого продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом эксплуатации и сохраните его для последующего использования.

Раздел «Меры безопасности» следует прочитать особенно внимательно, чтобы обеспечить безопасность во время использования прибора.

## **О ПРИБОРЕ GEZATONE BIOLIFT m100(S)**

В приборе Biolift m100(S) Gezatone комбинация трех эффективных методик для уменьшения объемов в проблемных местах, укрепления и подтяжки кожи лица и тела.

Три косметологических метода: ЭМС, микротоки и пластический массаж специальными многогранными насадками, соединенные в приборе Biolift m100(S) Gezatone, воздействуют на кожу, мышцы и жировую ткань, оказывают подтягивающее и общее омолаживающее действие на кожу, повышают ее тонус и упругость, позволяют уменьшить объем жировых отложений.

Прибор Biolift m100(S) Gezatone позволит провести профессиональную процедуру омоложения кожи с комфортом, не выходя из дома.

Результаты усиливаются от процедуры к процедуре и сохраняются на длительное время.

### **МЕТОД ЭМС**

Электромиостимуляция (ЭМС) имитирует естественные сокращения мышц. Сигналы подаются к нервным окончаниям, которые управляют движением мышц и заставляют их сокращаться естественным образом. ЭМС тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, устраняет дряблость кожи. ЭМС улучшает кровообращение, что способствует насыщению кислородом, выведению токсинов и избыточной жидкости.

Стимуляция мышц восстановит овал лица естественным образом, предотвратит дряблость кожи и поможет моделировать силуэт в проблемных зонах тела (руки, бока, живот).

Курс процедур поможет получить превосходный результат, который сохраняется долгое время.

ЭМС – это технология, основанная на естественных процессах тела, используется более 45 лет косметологами всего мира, применяется в физиотерапии для укрепления и восстановления мышц, что помогает сотням тысяч людей каждый год.

## **МИКРОТОКИ**

Микротоки оказывают деликатное действие на кожу, восстанавливают метаболическую активность клеток. С возрастом работа клеток замедляется, снижается их энергетический потенциал и нарушаются функции. Микротоки помогают восстановить процессы выработки энергии в клетках кожи, что ведет к восстановлению их функциональной активности, клетки «просыпаются» и начинают «работать» как в молодом возрасте.

Микротоки воздействуют не только на клетки кожи, но и укрепляют мышцы, повышают их тонус, восстанавливают процессы кровообращения и активизируют лимфодренаж, уменьшают отечность, а также обеспечивают увлажнение глубоких слоев кожи.

Благодаря стимулирующему действию микротоков на процессы синтеза коллагена и эластина, кожа становится более упругой, более плотной и подтянутой.

Эффекты микротоков усиливаются при дополнительном воздействии функции миостимуляции.

## **3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ**

Металлические шарики с многочисленными гранями вращаются на 360° и оказывают глубокое массажное воздействие на кожу и мышцы. Благодаря глубокому воздействию пластический массаж укрепляет мышцы и повышает их тонус, создавая прочный «каркас» для кожи. Пластический массаж роликами великолепно восстанавливает форму лица, борется с проблемой «второго подбородка», создает четкие контуры и линии, позволяет укрепить кожу на внутренней поверхности рук, бедра, уменьшить жировые отложения в области талии и живота, справиться с проблемой дряблости кожи.

Активная глубокая проработка роликами повышает тонус мышц и кожи, оказывает лифтинговый эффект, активизирует кровообращение.

- Повышение синтеза коллагена и эластина.

Пластический массаж глубоко «прорабатывает» кожу, усиливает кровообращение и обменные процессы, благодаря чему клетки получают необходимое количество питательных веществ и кислорода, что позволяет им работать более активно, вырабатывая коллаген и эластин.

- Усиление действия косметических средств.

Активизация кровообращения ускоряет доставку к клеткам кожи питательных веществ и кислорода, а также повышает эффективность косметических средств.

- Уменьшение отеков.

При вращении массажные насадки усиливают лимфодренаж, что способствует выведению избыточной жидкости и устранению отечности.

---

## **ЭМС**

### **Мышцы в тонусе**

- Стимулирует мышцы и повышает тонус.
- Устраняет дряблость.
- Укрепляет овал лица.
- Способствует уменьшению жировых отложений.
- Улучшает цвет кожи.
- Активизирует кровообращение и обменные процессы.

---

## **МИКРОТОКИ**

### **Упругая, плотная и подтянутая кожа**

- Повышают тонус и упругость, подтягивают кожу
  - Тонизируют и укрепляют мышцы
  - Уменьшают отечность
  - Стимулируют детоксикацию
  - Способствуют увлажнению
  - Улучшают цвет кожи
-


---

## 3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

### Моделирование и подтяжка

- Повышает тонус и упругость кожи
  - Повышает тонус мышц
  - Активизирует кровообращение и обменные процессы
  - Устраняет отеки
  - Уменьшает объемы жировых отложений
- 

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



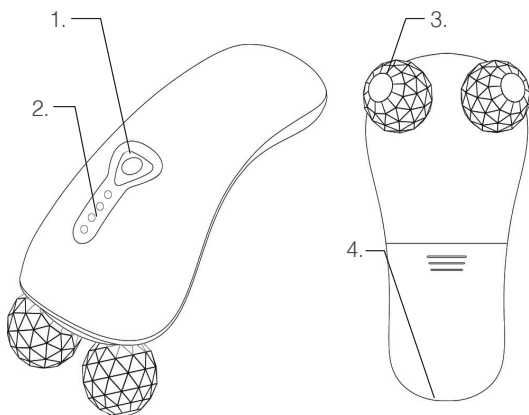


1. Кнопка питания    2. Индикатор уровня интенсивности  
3. Роллер-электрод    4. Разъём зарядки (на торце прибора)

## ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Подключите провод USB Type C к разъёму зарядки прибора и к зарядному устройству (в комплект не входит). Во время зарядки аккумулятора индикатор будет гореть красным цветом. По окончании зарядки индикатор меняет цвет на синий. Полное время зарядки прибора составит 2–2,5 часа.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

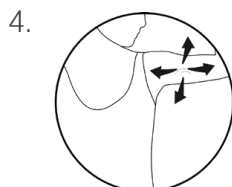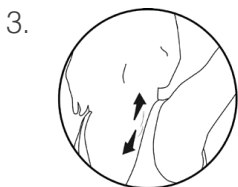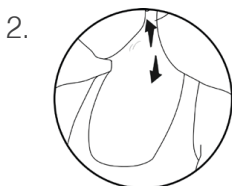

1 – лицо 2 – шея, «второй подбородок»  
3 – тело 4 – руки, ноги

## РАБОТА С ПРИБОРОМ VIOLIFT M100(S)

Нажмите кнопку питания (1). На индикаторе мощности высветится первый сегмент – установлен минимальный уровень воздействия. Каждое последующее нажатие повышает уровень интенсивности. После установки 4-го уровня интенсивности следующее нажатие кнопки выключает прибор.

**Внимание!** Начинайте процедуру с минимального уровня интенсивности, постепенно увеличивая ее, основываясь на Ваших ощущениях.

3. Проведите процедуру согласно схемам на стр. 6.

4. После окончания работы выключите прибор кнопкой (1).

Перед использованием прибора рекомендуется проанализировать состояние кожи и мышечного тонуса и выбрать участки, нуждающиеся более всего в применении процедур, описанных на стр. 2, 3. Можно проконсультироваться с косметологом.

1. Оберегайте прибор от падений и ударов.

2. Не оставляйте и не храните прибор в доступном детям месте.

3. Не используйте прибор в помещениях с повышенным уровнем влажности. Корпус аппарата не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги внутрь корпуса и на его поверхность.

4. Если Вы не планируете использовать прибор длительное время, выньте батареи питания.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Беременность
- Онкологические заболевания
- Острые воспалительные процессы
- Инородные тела и импланты, располагающиеся внутрикожно или непосредственно под кожей
- Армирование золотыми нитями, ботокс
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Купероз в области воздействия
- Наличие кардиостимулятора
- Дерматиты и дерматозы различной этиологии
- Гнойничковые заболевания, акне
- Повреждения кожи в области воздействия (ссадины, царапины, порезы, ожоги)
- Эпилепсия
- Лихорадочные состояния, грипп, ОРВИ

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ BIOLIFT M100(S)

После каждого использования рекомендуется протирать поверхность электродов мягкой тканью или салфеткой.

## ПРЕИМУЩЕСТВА BIOLIFT M100(S)

- Компактность, простота в использовании и надежность.
- Удобная форма обеспечивает комфортное проведение процедуры.
- Процедура занимает мало времени: 20 минут.
- Тройной эффект: подтяжка, уменьшение объемов и моделирование.
- Универсальность: прибор может использоваться для лица и тела.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Biolift m100(S)
Частота генерации	30–37 Гц
Диапазон амплитуды выходного напряжения	10–100 В
Среднее значение выходного тока	0,1 мА
Аккумулятор Литий–Ион	900мА*ч

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа лица	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Провод зарядки USB Type C	1 шт.

Прибор бытовой электрический для ухода и массажа лица, Серия(тип) Biolift, модель Biolift m100(S), т.м. Gezatone

Изготовитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 rue де Гранж Галан, Франция. Филиал завода-изготовителя: Guangzhou Whale Import & Export Trading Co., Ltd, Room 1307, World Trade Center South Tower, No.371-375 Huanshi Dong Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China, Китай.

Импортер/уполномоч. изготовитель-лем орг.: ООО «МИТРИДАТ», РФ, Москва, Алтуфьевское ш., д. 41, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком 8, тел.: 8 (495) 225 25 83.

Способ применения и дату производства: см. инструкцию. Срок службы: 3 года.

KZ. Бет күтімі мен массажына арналған тұрмыстық электр құрылғысы, Biolift сериясы (түрі), Biolift m100(S) моделі), т.м. "Gezatone"

Дайындаушы: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", мекенжайы: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 rue де Гранж Галан, Франция. Өндіруші зауыттың филиалы: Guangzhou Whale Import & Export Trading Co., Ltd, Room 1307, World Trade Center South Tower, No.371-375 Huanshi Dong Road, Yuexiu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Қытай, Қытай. Импорттаушы/дайындаушының уәкілетті мекемесі: "МИТРИДАТ" ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қ., Алтуфьевское тас жолы, 41 үй, 1 құрыл., 2 қабат, үй-жай 1, 8 белме, тел.: 8 (495) 225 25 83.

