


Ирригатор PARU

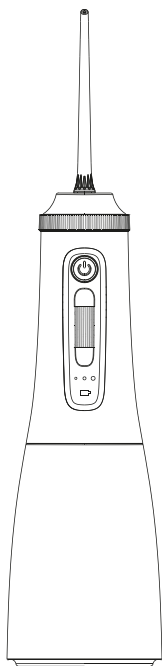

Руководство пользователя

Благодарим за приобретение данного продукта. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием и соблюдайте меры безопасности. После прочтения храните руководство в надежном месте для возможности последующего прочтения.

Содержание

Меры предосторожности.....	01
Знакомство с ирригатором для полости рта.....	02
Сборка и разборка резервуаров для воды.....	03
Сборка и разборка насадок.....	04
Методы использования.....	05
Методы обслуживания.....	09
Устранение неполадок.....	09
Технические характеристики.....	10
Гарантийный талон.....	11

Меры предосторожности

Данный продукт предназначен для общего бытового использования. Не используйте данный продукт в коммерческих целях или для иных целей, не предусмотренных настоящим руководством. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности» и используйте устройство корректно. Все пункты, отмеченные ниже предупреждающими символами, содержат важные предостережения. Обязательно строго соблюдайте их.



Опасность



Не подвергайте корпус воздействию огня и не оставляйте устройство при высоких температурах. Данное устройство содержит аккумулятор. При воздействии высокой температуры возможно возгорание или взрыв, способные привести к травмам.

Предупреждение



- Никогда не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.
- Никогда не разбирайте устройство, за исключением случаев утилизации.
- Не вставляйте и не извлекайте USB-кабель влажными руками.
- Не допускайте использования устройства лицами, неспособными самостоятельно выразить свои потребности, а также маленькими детьми без присмотра.
Кроме того, храните устройство в недоступном для младенцев месте.
- Не допускайте использование устройства детьми младше 6 лет.
- Не разрешайте самостоятельное использование устройства лицам, которые не могут им пользоваться без посторонней помощи или незнакомым с его эксплуатацией.
- Перед зарядкой убедитесь, что USB-кабель не поврежден. Поврежденный кабель может вызвать пожар, поражение электрическим током или травмы.
- Немедленно прекратите использование изделия при обнаружении перегрева или дыма.
Это может привести к авариям, таким как пожар, электрический удар или травмы.
- Если во время использования вы почувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование.



- Не наливайте в резервуар для воды воду с температурой выше 40 °C. Чтобы избежать травм.
- Не помещайте в резервуаре посторонние предметы.
- Используйте устройство только в полости рта. Чтобы избежать травм при использовании под языком, в глазах, носу или других чувствительных областях.
- Не используйте насадки совместно.
- Не касайтесь зубов или десен ничем, кроме верхней части насадки. Чтобы избежать повреждений зубов и десен.


Знакомство с ирригатором для полости рта

Передняя сторона ирригатора PARU



*Для включения режима стерилизации необходимо длительно нажать кнопку питания


Задняя сторона ирригатора PARU

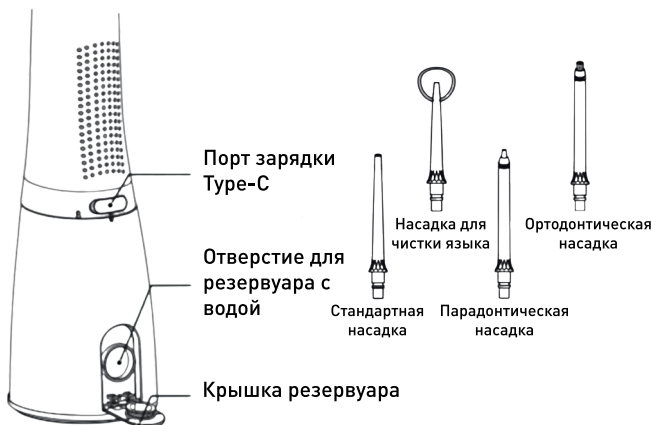


Сборка и разборка резервуаров для воды

Сборка

- 1 Соберите резервуар для воды, совместив метку резервуара с отметкой на корпусе

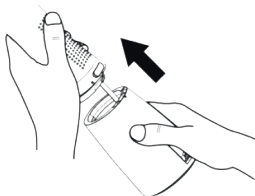


- 2 Поверните резервуар для воды, совместив метку резервуара с отметкой на корпусе

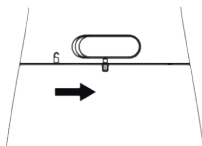


Разборка

- 1 Поверните резервуар для воды, чтобы метка резервуара совместилась с позицией корпуса

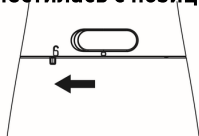

- 2** Плотно удерживая корпус, снимите резервуар для воды, потянув его вниз

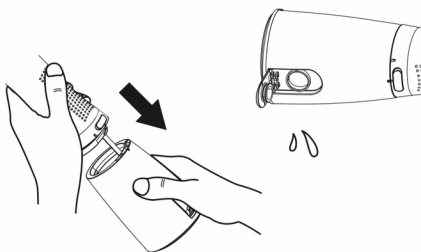

Сборка и разборка насадок


Сборка

- 1** Вставьте насадку в гнездо для насадки до щелчка, обозначающего правильную сборку



Разборка

- 2** Нажмите кнопку для извлечения насадки и снимите насадку, потянув ее вверх

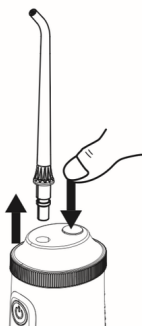


Способы использования

■ При первом использовании необходимо сначала зарядить устройство

ПРИМЕЧАНИЕ: устройство нельзя использовать во время зарядки


1 Подключите зарядный кабель к зарядному порту

Во время зарядки индикатор мигает красным. Переход от темного к светлому занимает примерно 2 секунды. Процесс зарядки автоматически завершается, когда индикатор светится постоянным зеленым светом. Для полной зарядки требуется 6 часов

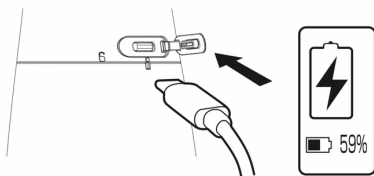

2 Отключите зарядный кабель и закройте крышку зарядного порта


Теперь устройство готово к использованию

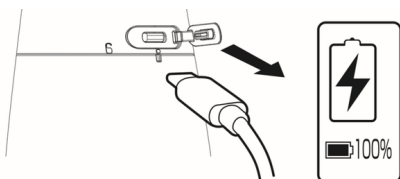

■ Во время использования

1 Заполните резервуар водой

Убедитесь, что питание выключено и зарядка прекращена. Откройте крышку резервуара, наполните его водой и закройте крышку. Не используйте горячую воду.

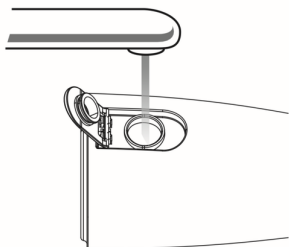


2 Установите насадку для использования

Вставьте насадку в гнездо до щелчка, подтверждающего ее фиксацию



3 Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство

Индикатор зарядки постоянно горит зеленым светом. При последующем включении устройство запомнит выставленную силу давления воды. Индикатор давления светится белым и показывает уровень давления

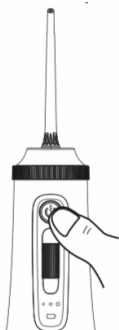

4 Отрегулируйте давление воды.

После включения питания, для регулировки давления воды используйте ролик (поворачивайте по часовой стрелке для увеличения давления, против часовой — для уменьшения). Индикатор давления воды загорается в соответствующем диапазоне силы (при минимальном давлении индикатор не светится).




5 Направьте насадку на десны или зубы над раковиной

Перед очисткой слегка приоткройте рот, чтобы вода могла свободно стекать




6 Нажмите кнопку питания, чтобы начать процедуру очистки

Отрегулируйте угол так, чтобы водяная струя была перпендикулярна деснам или межзубным промежуткам. Уровень водяного давления можно регулировать даже во время процедуры очистки.

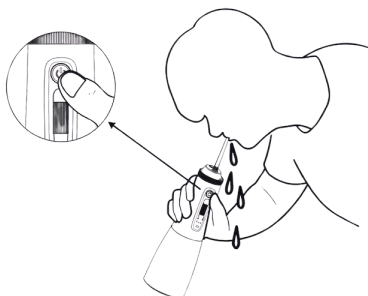


7 По окончании очистки выключите питание перед извлечением насадки из рта

Не используйте устройство непрерывно более 10 минут

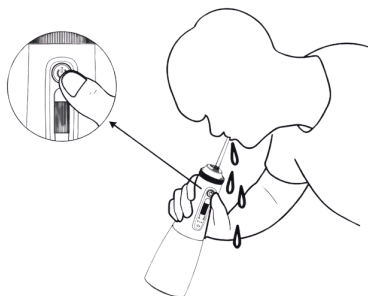


- 8** После отключения питания откройте крышку резервуара для воды и вылейте воду. Затем включите устройство и слейте воду, оставшуюся внутри корпуса.

Обязательно сливайте остаточную воду после каждого использования.

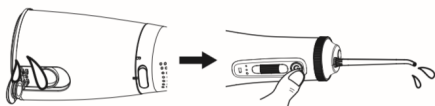


- 9** Снимите насадку и резервуар. (См. страницу 4)

Снимите насадку. Поверните резервуар с водой, совместив метку резервуара с отметкой на корпусе, затем потяните вниз, чтобы снять резервуар. Снятую насадку можно легко вставить в корпус, чтобы предотвратить ее потерю. При хранении держите детали и корпус сухими

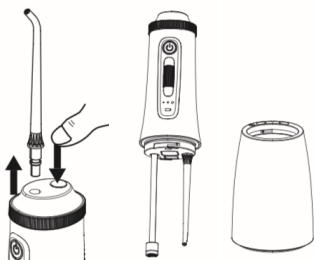

- 10** Используйте функцию УФ-стерилизации

Удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунды для перехода в УФ-режим. Под корпусом загорается УФ-светильник для стерилизации резервуара и насадки. Время стерилизации составляет 90 секунд

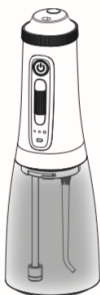

Методы обслуживания

! Внимание

Не используйте растворители, бензин или спирт

Насадку следует промывать после каждого использования

1 Снимите и промойте насадку водой

2 Хорошо просушите на воздухе



Корпус, резервуар и всасывающую трубку так же следует промывать после каждого использования

1 Снимите резервуар с водой

2 Промойте корпус, резервуар и всасывающую трубку водой и тщательно высушите

3 После тщательного высыхания установите резервуар на корпус



Устранение неисправностей

Сбой	Возможная причина	Решение
Не включается	Недостаточно питания	Проверьте заряжено ли устройство
Вода не вытекает или слабое давление	Недостаточно воды в резервуаре	Налейте достаточное количество воды
	Недостаточная мощность	Проверьте заряжено ли устройство
	Засоренная насадка	Проверьте не засорилась ли насадка и в случае засора - замените ее
Протечка внизу насадки	Неправильная сборка	Установите правильно насадку
Протечка воды между резервуаром и корпусом	Резервуар для воды собран некорректно	Переустановите резервуар для воды корректно

О литий-ионных аккумуляторах

В данном изделии используется литий-ионный аккумулятор. При утилизации изделия соблюдайте рекомендации местных органов власти и содействуйте переработке.

Аккумулятор не подлежит замене.

Аккумулятор будет разряжаться естественным образом.

Даже если вы не используете устройство, пожалуйста, заряжайте его хотя бы раз в месяц примерно в течение часа.

Длительная зарядка или повторная зарядка при полном аккумуляторе сокращает срок службы устройства.



Li-ion

Технические характеристики

Модель/Название	X7-A Портативный ирригатор для полости рта
Аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, 1500 мАч
Время зарядки	Около 6 часов (от полного разряда до полной зарядки)
Время работы	Около 100 минут (при слабом давлении воды)
Защита от воды	IPx7*
Габариты	76,9 x 76,1 x 290 мм (включая насадку)
Вес	265 г
Объем бака	300 мл
Материал	ABS, ПК
Комплектация	Кабель зарядки, стандартная насадка, ортодонтическая насадка, пародонтическая насадка, насадка для языка, инструкция на русском языке

*Степень защиты IPx7 означает, что устройство сохранит работоспособность после погружения в водопроводную воду на глубину 1 метр при комнатной температуре на период около 30 минут — при этом вода не проникнет внутрь.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА С ДАТЫ ПОКУПКИ


Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, неисправности или он не работает, пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв. Свяжитесь с нами через наш клиент-сервис, мы обязательно ответим!

С уважением, команда PARU

НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

1. Нарушений транспортировки, установки или подключения изделия.
2. Использования изделия не по назначению.
3. Нарушения правил эксплуатации (в том числе правил, изложенных в руководстве по эксплуатации), небрежного обращения.
4. Обстоятельств непреодолимой силы (пожаров, наводнений, стихийных бедствий и т.д.).
5. Внешних воздействий: загрязнений, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
6. Самостоятельного разборки/вскрытия изделия, изменений конструкции или схемотехники, несанкционированного ремонта.
7. Эксплуатации изделия в промышленных или коммерческих целях, не предусмотренных техническими характеристиками изделия.
8. Повреждений, вызванных использованием расходных материалов, запчастей или принадлежностей, не рекомендованных производителем.

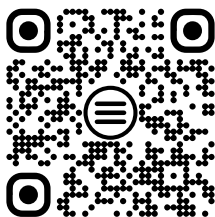

Если у Вас возникли
вопросы или пожелания,
Вы можете обратиться
в наш клиент-сервис

Больше наших товаров на нашем сайте

 paru.pro

 [@paru.pro](https://www.instagram.com/paru.pro)

 [@paru3653](https://www.youtube.com/@paru3653)