

Гарантия

• Гарантийные обязательства на прибор действительны в течение 12 месяцев с даты приобретения в розничной сети. Датой приобретения считается дата указанная в гарантийном талоне или в кассовом чеке.

• Настоящие гарантийные обязательства действительны только при предъявлении правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (серийный номер модели, даты продажи, подписи продавца, печать или штамп магазина) и кассового чека.

Не допускается внесение в гарантийный талон каких-либо изменений и исправлений.

• Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, которые были повреждены в результате небрежного обращения, несоблюдения инструкции по пользованию прибором, неправильной установки, постороннего вмешательства в электрическую схему изделия или выполнения ремонта в организации, официально не уполномоченной изготовителем на проведение данных работ, повреждений во время перевозки или же в результате обстоятельств, не являющихся следствием дефекта изготовления прибора, воздействия на изделие обстоятельств неодолимой силы (молния, пожар и т.д.), попадания внутрь изделия жидкостей, посторонних предметов, насекомых и животных, отклонения значений напряжений питающих сетей, к которым подключено изделие, от норм Государственных технических стандартов.

• Все условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

• Гарантийные обязательства не распространяются на быстро изнашивающиеся части (насадки).

• Мы не несем ответственность за прямой или косвенный ущерб людям, имуществу или домашним животным, ставший следствием несоблюдения всех требований приведенных в данной инструкции по эксплуатации по установке, эксплуатации и обслуживанию прибора.

• В течение гарантийного срока дефектный прибор, при предъявлении гарантийного талона и кассового чека с указанием даты приобретения, будет бесплатно отремонтирован или заменен на новый.

Срок службы прибора – 5 лет.

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма продавец _____

м.п. _____

Подпись продавца _____

(при покупке в интернет-магазинах для гарантии достаточно электронного чека без заполнения гарантийного талона)


Служба клиентской поддержки: service@hasten-pro.ru

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ДАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.**

HASTEN®

Ирригатор для полости рта

Инструкция по применению

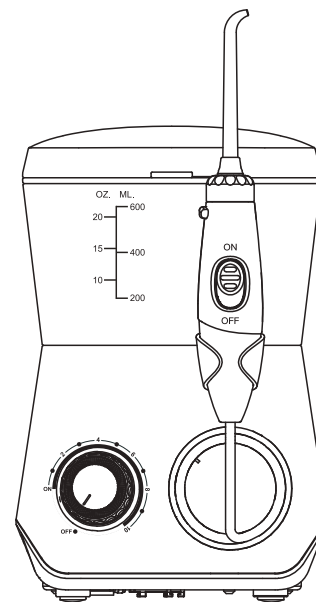

Model №: HAS855

Благодарим за выбор нашего ирригатора полости рта HAS855!


Вы на пути к улучшению здоровья полости рта и здоровой улыбке! С помощью пульсирующего водяного потока ирригатор для полости рта устранил вредные бактерии глубоко между зубами и за линией десен, где обычная щетка их не достанет.

Традиционная чистка

Используя обычную щетку, сложно устранить остатки пищи и вредные бактерии, находящиеся в труднодоступных местах.




Зубная нить не может добраться за линию десен.

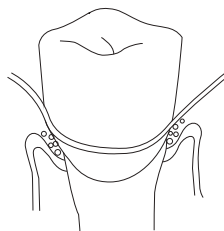

Чистка с помощью ирригатора для полости рта

Удаляет застрявшие остатки пищи и вредные бактерии с помощью высокочастотного пульсирующего водяного потока.

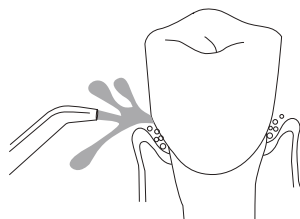

Технические характеристики

Питание: 100-240В (50/60Гц)

Мощность: 18Вт

Частота пульсаций: 1700 имп/мин

Емкость резервуара: 600 мл

Давление воды: от 210 до 870 кПа (плавная регулировка 10 уровней)

Длина сетевого шнура: 1,8 м

Вес прибора: 1,08 кг

Размеры прибора: 14х12,5х20 см

Таймер: на 3 минуты

Комплектация*

Основной блок ирригатора HAS855 -1шт.

Стандартные насадки-3шт.

Пародонтологическая насадка-1шт.

Ортодонтическая насадка-1шт.

Насадка от зубного налета-1шт.

Насадка для чистки языка-1шт.

Гидравлическая вращающаяся зубная щетка-1шт.

Пластиковый бокс для хранения дополнительных насадок-1шт.

Фирменная сумка для хранения и перевозки-1шт.

Инструкция на русском языке с гарантийным талоном-1шт.

*-производитель оставляет за собой право изменять комплектацию без согласования

Техника безопасности

При использовании электрических продуктов, особенно в присутствии детей, необходимо

соблюдать следующие жизненно важные правила:

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ДО КОНЦА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА**

ОПАСНО.

Во избежание удара электрическим током:

- Всегда отключайте устройство от сети сразу же после завершения использования
- Не используйте во время принятия ванны
- Не используйте и не храните продукт в местах, откуда он может упасть в ванну или раковину
- Не роняйте продукт в воду или другие жидкости
- Не прикасайтесь к устройству, если оно упало в воду. Немедленно обесточьте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Чтобы снизить риски получения ожогов, удара электрическим током, возгорания и получения травм, соблюдайте следующее:


- Прибор нельзя оставлять включенным без присмотра
- Необходим пристальный контроль, если данное устройство используется детьми или инвалидами, или в присутствии таковых
- Используйте прибор только по назначению строго в соответствии с инструкцией. Не рекомендуется применять насадки других производителей с данным устройством.

- Не включайте прибор, если заметили повреждения на шнуре или вилке, сбой в работе самого устройства, после падения и сильного удара устройства о твердую поверхность или если оно упало в воду. Обратитесь в сервисный центр для тестирования и устранения неисправностей.

- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Никогда не закрывайте воздушные отверстия изделия и не ставьте его на мягкую поверхность, например на кровать или диван, где воздушные отверстия могут быть заблокированы. Оберегайте воздушные отверстия от попадания пыли и волос.
- Не используйте во время сна или в сонном состоянии
- Не бросайте и не вставляйте посторонние объекты в отверстия для установки насадок.
- Отключите устройство от сети перед заполнением его водой.
- Заполняйте резервуар только водой (возможно добавления специальных жидкостей для ирригаторов в небольших концентрациях).

**СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Структура продукта

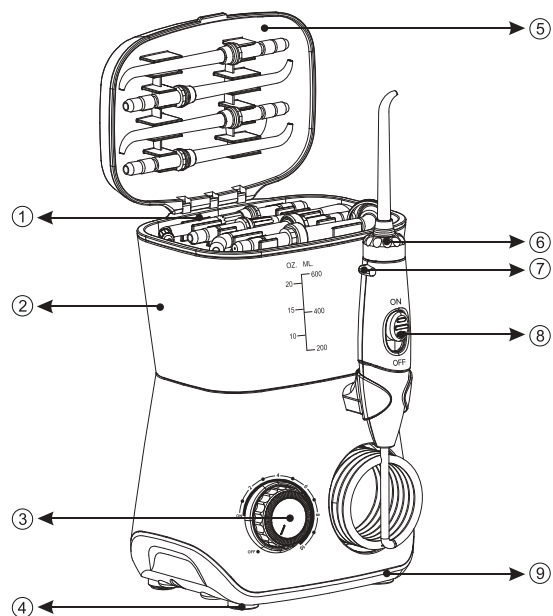

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Насадки 8 штук | 6. Вращающаяся на 360° насадка |
| 2. Резервуар | 7. Кнопка отсоединения насадки |
| 3. Вкл/выкл | 8. Кнопка паузы |
| 4. Опоры-присоски | 9. Основание корпуса |
| 5. Крышка хранения насадок и резервуара | |


Стандартная насадка высокого давления	Пародонтологическая насадка	Ортодонтическая насадка	Насадка от зубного налета	Насадка для чистки языка	Гидравлическая вращающаяся зубная щетка

Стандартная насадка высокого давления: с кольцами 3-х разных цветов. Используются для гигиены полости рта. Рекомендуется использовать тремя членами семьи (семейный пакет).

Остальные насадки:

Пародонтологическая насадка	x1
Ортодонтическая насадка	x1
Насадка от зубного налета	x1
Насадка для чистки языка	x1
Гидравлическая вращающаяся зубная щетка	x1


Держите прибор вне зоны досягаемости детьми

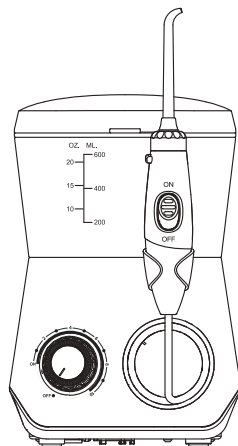

Вставьте вилку в розетку. Если розетка включается дополнительным выключателем, убедитесь что он включен.


Наполнение резервуара

Отсоедините крышку и резервуар от корпуса. Наполните резервуар теплой водой. Вставьте резервуар обратно в корпус, крепко прижмите и вставьте крышку.

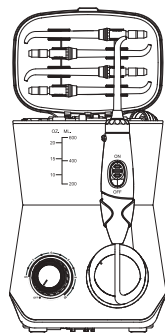


Смена насадок

Вставьте насадку в центр крутящегося регулятора в верхней части ручки устройства. Если вы правильно вставили насадку, цветное кольцо будет плотно примыкать к регулятору. Чтобы отсоединить насадку от ручки, нажмите на кнопку отсоединения насадки и вытащите насадку из ручки устройства.

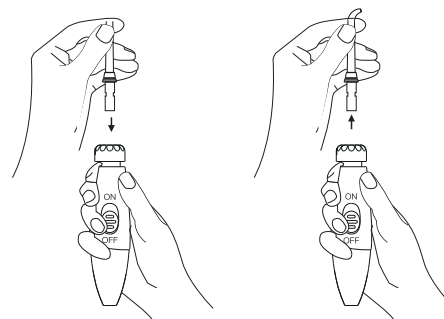



Настройка параметров давления

Начните вращать регулятор настройки давления, вы услышите щелчок, говорящий о том, что регулятор включен. Далее, поворачивая регулятор по часовой стрелке, можно настроить давление от меньшего к большему. Устройство выключится автоматически по истечению 3-х минут в любом случае.


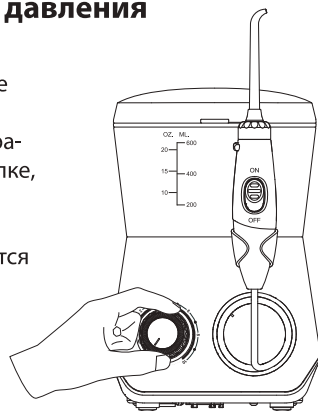


Использование ирригатора для полости рта

Наклонитесь низко над раковиной и поместите струйную насадку в рот. Направьте насадку на зубы. Свободной рукой нажмите на кнопку включения. Установите давление на желаемый уровень. Направляйте поток струи, поворачивая крутящийся регулятор в верхней части ручки.

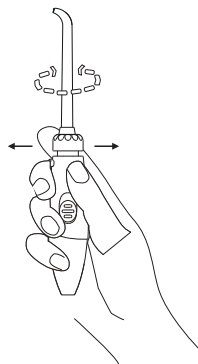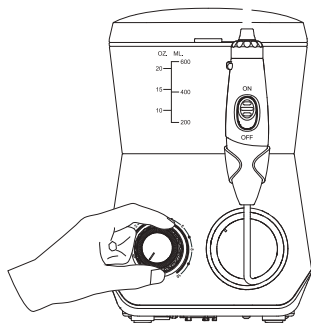

Направляйте струю под углом 90° к линии десен, слегка сомкните губы, чтобы избежать разбрызгивания, при этом поток воды должен свободно стекать изо рта в раковину. Для достижения наилучшего результата, начните с зоны моляров (задние зубы) и двигайтесь вперед к передним зубам. Перемещайте струю вдоль линии десен и ненадолго останавливайтесь между зубами. Продолжайте процедуру, пока не очистите все зоны вокруг и между зубами.

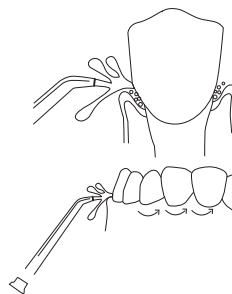
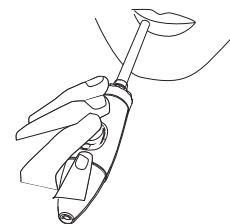


Управление паузой

Вы можете временно остановить поток в любое время, сдвинув вниз кнопку паузы на ручке.

Окончание использования


Выключите устройство, оставив жидкость в резервуаре. Обессточьте устройство.

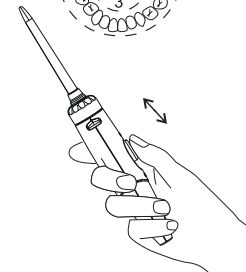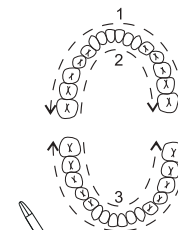

Описание струйных насадок


Пародонтологическая насадка

Пародонтологическая насадка может направить воду в труднодоступные области за линией десен.

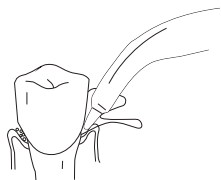

Стандартная насадка высокого давления

Струя насадки может добраться в труднодоступные места в полости рта с диапазоном 360 градусов, дополнительно удаляя пищевые отходы и вредные бактерии, расположенные глубоко в зубных трещинах или под деснами.

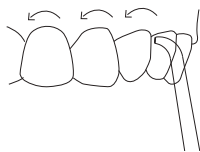

Насадка для чистки языка


Поместите насадку на язык до включения ирригатора для полости рта. Аккуратно прикоснитесь щеткой для чистки к центральной части языка. Слегка потяните щетку вперед, удерживая ее в контакте с поверхностью языка.



Насадка для удаления зубного налета


Зубной налет - это группа бактерий, скапливающихся на поверхности зубов до тех пор, пока они не начинают минерализоваться. Насадка для удаления зубного налета очень эффективна для предотвращения данного загрязнения.

Насадка против зубного налета может дополнительно использоваться для чистки труднодоступных областей во время ношения брекетов и других зубных приспособлений

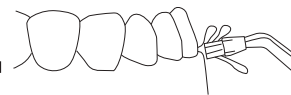


Ортодонтическая насадка

Специальная ортодонтическая насадка с уникальным дизайном для одновременной чистки и промывки труднодоступных областей при ношении брекетов и других стоматологических устройств.

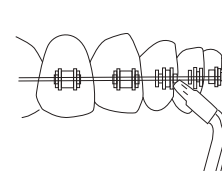

Гидравлическая вращающаяся зубная щетка

Дизайн головки щеточки разработан по подобию зубоочистных инструментов, и, в отличие от обычных щеток, которые покрывают весь зуб целиком, тщательно очищают поверхность каждого зуба, устраняют налет, спрятанный между зубами и в десневых щелях, при этом не причиняя вреда деснам.

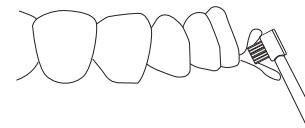

Уход за прибором

После использования с любыми лекарственными жидкостями в резервуаре, устройство необходимо промыть водой. Частично наполните резервуар теплой водопроводной водой, направьте струю насадки в раковину, включите устройство и полностью спустите воду из устройства, тем самым промыв насадку и само устройство. Это поможет уберечь насадку от засора и увеличит продолжительность службы устройства. Протирайте устройство по мере необходимости тряпочкой смоченной мягким неабразивным очистителем. Перед очисткой устройства следует отключить его из сети. Перед тем как подвергнуть устройство воздействию низких температур, извлеките резервуар и слейте воду (запустите устройство до полного опорожнения).

После использования ирригатора для полости рта HAS855 убедитесь, что он обесточен. Переверните бак вверх дном и установите для просушки на плоской поверхности. Когда вода полностью высохнет, поместите бак вместе с чистым устройством в прохладное сухое место. Во время длительного хранения рекомендуется держать устройство в коробке.

Если устройство неисправно, вы можете связаться со службой поддержки для получения рекомендаций по ремонту. Не разбирайте прибор и не пытайтесь устранить неисправности самостоятельно, это может привести к возникновению новых неисправностей, не подпадающих под гарантийный ремонт. В случае обнаружения повреждения на электрошнуре, обратитесь в службу поддержки. Не меняйте электрокабель или вилку самостоятельно.

Если гарантийный срок на обслуживание устройства закончился, вы можете обратиться в службу клиентской поддержки для ремонта.

Общие проблемы и решение

Проблема	Причина	Решение
Струйные насадки и щетка для чистки языка дают утечку между насадкой и верхней частью ручки	Насадка установлена не правильно	Вытащите насадку и установите заново
Пародонтологическая насадка разорвалась на конце	Насадка износилась	Замените насадку
Потек шланг корпуса ирригатора	Повреждение шланга	Необходимо обратиться в сервисный центр
Течь в резервуаре	Отсутствует клапан в резервуаре для воды или клапан установлен неправильно	Установите клапан в резервуар (свяжитесь с продавцом); переверните клапан верной стороной
Недостаточное давление	Резервуар установлен неправильно	Убедитесь, что розетка работает, попробуйте включить другие электроприборы, проверьте электрощиток
Вода не подается	Мотор не работает	Заполните резервуар