

ИНСТРУКЦИЯ

Массажер для ног
Model JB-543



Jagergross

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства3
Гайд в подарок4
Управление устройством5
Режимы работы5
Меры предосторожности.....6
Техническое обслуживание7
Устранение неполадок.....7
Параметры устройства7
Гарантия: как воспользоваться8
Гарантийный талон8

2


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Комплектация: изделие - 1 шт, тканевая сумка - 1 шт, кабель подключения к сети - 1 шт, пульт дистанционного управления - 1 шт, батарейки AAA - 1 комплект, инструкция - 1 шт, маска для сна - 1 шт, терка для ног - 1 шт.


3D-массажер для ног — это устройство, предназначенное для улучшения кровообращения конечностей, снятия усталости и напряжения. Массажер оснащён подвижными роликами и воздушными подушками, которые воздействуют на биологически активные точки стоп, имитируя массаж шиatsu и воздушный массаж.

Массажер идеально подходит для тех, кто проводит много времени на ногах, занимается спортом или испытывает проблемы с кровообращением. Он помогает снять усталость, улучшить настроение и общее самочувствие. Мы позаботились о гигиеничности массажера и предусмотрели съёмную тканевую накладку, которую удобно снимать и стирать (важно: тщательно высушите накладку перед использованием).


Выбранный вами массажер обладает рядом преимуществ:

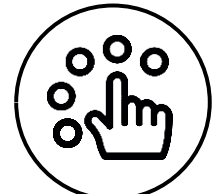


5 режимов
работы

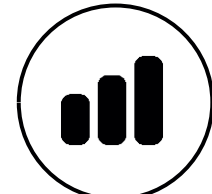

9 уровней
интенсивности

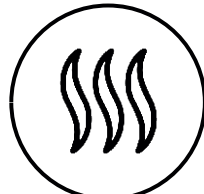

Функция
нагрева

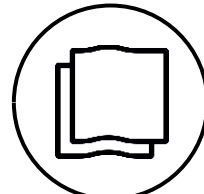

Съёмная
тканевая
накладка


ТЕХ. ПОДДЕРЖКА / ГАРАНТИЯ

Если вы хотите обратиться
в **тех. поддержку** или приобрести
другую продукцию бренда -
отсканируйте Qr-код или перейдите по
ссылке:

taplink.cc/jagergross

Наши менеджеры уже готовы
помочь в решении вашего вопроса
или проконсультировать.

WhatsApp / Telegram
+7 916 573 23 92

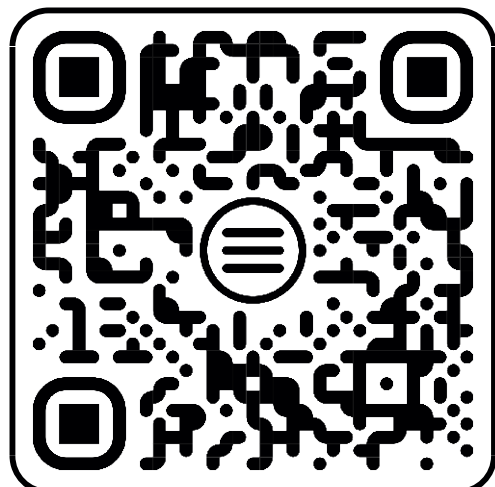

Здесь тех. поддержка работает
быстрее, чем на маркетплейсе!

3



ГАЙД В ПОДАРОК

Китайская мудрость гласит:
«Дерево стареет с корня, человек — с ног».

Она опирается на многовековой опыт и знания, которые воплотились в направлении акупунктурного массажа. На наших ступнях сосредоточено множество биологически активных точек, воздействие на которые благотворно влияет на здоровье и состояние организма. Массаж стоп способен улучшить работу внутренних органов, расслабление и самочувствие.

Мы подготовили гайд с рекомендациями и ценной информацией о вашем здоровье. Приятного прочтения!




Сканируйте QR-код
Если возникли проблемы,
напишите нам в WhatsApp/Telegram:
+7 916 573 23 92

4

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Массажер оснащён 5 режимами массажа, функцией нагрева, функцией вибрации и таймером.

Панель управления

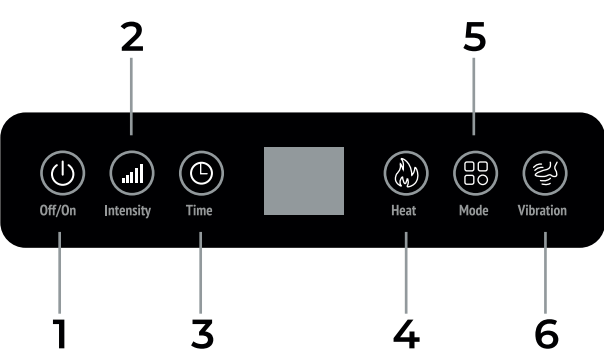

1. Кнопка включения/выключения.
2. Интенсивность массажа.
3. Таймер.
4. Нагрев.
5. Режимы.
6. Вибрация.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режимы	Режим 1	Компрессия + Подогрев + Роликовый массаж вперед/назад (вращение 1 минуту, пауза 3 секунды)
	Режим 2	Компрессия + Подогрев + Роликовый массаж вперед/назад (вращение 30 секунд, пауза 3 секунды)
	Режим 3	Компрессия + Подогрев + Роликовый массаж вперед/назад (вращение 10 секунд, пауза 3 секунды)
	Режим 4	Подогрев + Роликовый массаж вперед/назад
	Режим 5	Компрессия + Подогрев
Интенсивность	1-9 уровень	Массажер оснащён 9 уровнями интенсивности. По умолчанию настроен 5 режим интенсивности.
Таймер	15 мин	Время по умолчанию: 15 мин. При каждом нажатии добавляется 5 мин. Максимальное время - 30 мин.
Вибрация	1-3 уровень	Массажер оснащён 3 уровнями вибрации (F1-F3).

5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед применением устройства внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.
- Данное устройство не заменяет лечение.
- Используйте источник питания, соответствующий параметрам устройства.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного лица.
- Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии - перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя.
- Не используйте этот продукт в течение одного часа после еды.
- Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства - немедленно прекратите использование.
- Не используйте прибор, если у вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем: воспаления, застои крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей, повреждения кожи, кожная болезнь, плохое физическое самочувствие, остеопороз, проблемы с сердцем, наличие кардиостимулятора.
- Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста.
- Не разбирайте устройство.
- Не пытайтесь в случае поломки отремонтировать устройство самостоятельно.
- Избегайте воздействия повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки устройства сухую мягкую безворсовую ткань. Не используйте для очистки какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
- Не используйте прибор в месте с большим количеством летающей пыли или агрессивных газов.
- Обязательно выключайте устройство от сети после использования или перед очисткой.
- Не кладите устройство в воду и не подвергайте воздействию воды во избежание несчастных случаев и поломок устройства.
- Не подключайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- При отсоединении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не подвергайте устройство сильному нагреванию.
- Чтобы обеспечить устройству достаточную вентиляцию, не накрывайте работающее устройство тканью или другими материалами, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы изделия.
- Не используйте устройство, если корпус или шнур питания данного прибора повреждены, если шнур питания отсырел или износился, во избежание опасности он должен быть заменен.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Если вы почувствуете какие-либо неполадки в работе прибора во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь в тех. поддержку (стр.3).

6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следуйте рекомендациям ниже, чтобы устройство служило дольше.

Очистка устройства	1. Выключите устройство и выньте вилку питания из розетки. 2. Протрите панель управления и шнур питания сухой тканью. 3. Не используйте моющее средство. Не используйте для очистки изделия металлические щетки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (такие, как бензин или ацетон). Не погружайте изделие в воду.
Хранение устройства	1. Выключите устройство и выньте вилку питания из розетки. 2. Храните изделие в прохладном и сухом месте, защищенном от солнечного света. 3. Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть изделия.
В случае поломки	Если устройство повреждено, пожалуйста, прекратите использование устройства и обратитесь к продавцу. Контакты продавца указаны на стр. 3 и стр. 8.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможные причины	Устранение
Не работает	Отключено от сети	1. Подключите продукт к источнику питания или проверьте, хорошо ли подключен продукт 2. Нажмите кнопку питания
	Кнопка питания не нажата	
Внезапно перестал работать	Отключение питания	1. Проверьте подключение устройства к сети 2. Перезапустите устройство 3. Дождитесь охлаждения устройства и перезапустите его
	Продолжительность работы более 15 минут	
	Перегрев устройства	
	Большое давление, массажные шарики останавливают вращение	

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Мощность устройства	50 Вт
Напряжение	230 V, 50 Гц
Вес	4 кг
Высота	20 см
Ширина	35 см
Глубина	43 см


7

ГАРАНТИЯ: КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Обнаружили дефект или брак устройства?

Напишите нам с описанием вашей проблемы, приложив фото или видео. Отсканируйте Qr-код или перейдите по ссылке:

taplink.cc/jagergross
Или позвоните по номеру: 8 (800) 777-43-10

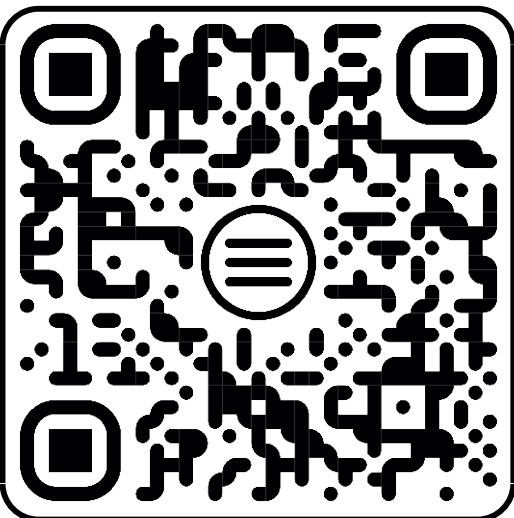

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Серийный номер	Дата	
Информация о покупателе	ФИО:		
	Почтовый адрес:		
	Контактный номер:		
Торговая марка		Записи о ремонте	
Информация об обслуживании:			



Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные несоблюдением техники безопасности, механическими повреждениями, химическими и термическими воздействиями, а также любыми воздействиями, произошедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку устройства, а также выезд мастера с целью подключения, настройки, ремонта, консультации.

12 месяцев гарантии

Ваш комфорт и радость от покупки - самое главное для нас! Если вы столкнулись с браком, можете не беспокоиться - мы вернем деньги или обменяем массажер.

8