

ИНСТРУКЦИЯ

Массажный матрас
Model OQ-067



Jagergross

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства 3

Об устройстве 4

Подключение и настройка 4

Управление устройством 5

Техническое обслуживание 6

Устранение неполадок 6

Параметры устройства 6

Меры предосторожности 7

Гарантия: как воспользоваться 8

Гарантийный талон 8

2

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Комплектация: изделие (массажный матрас, массажер для ног, массажер для поясницы) - 1 шт, адаптер - 1 шт, инструкция - 1 шт, сумка для переноски - 1 шт, маска для сна - 1 шт.

Массажный матрас Jagergross - это устройство, которое обеспечивает эффективный массаж, релаксацию, снятие мышечного напряжения и улучшение кровообращения. Благодаря продуманному расположению массажных элементов и мощности матраса, вы ощутите незабываемые ощущения, словно побывали на сеансе у профессионального массажиста. Наслаждайтесь комфортом и пользой массажа в домашних условиях с матрасом Jagergross!

Выбранный вами массажер обладает рядом преимуществ:

Вибрационный массаж всего тела

Подогрев

Независимые панели управления

20 массажных головок для шеи и головы

64 массажные головки для разминания стоп

Воздушная подушка для поясницы

ТЕХ. ПОДДЕРЖКА / ГАРАНТИЯ

Если вы хотите обратиться в **тех. поддержку** или приобрести другую продукцию бренда - отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:

taplink.cc/jagergross


Наши менеджеры уже готовы помочь в решении вашего вопроса или проконсультировать.

WhatsApp / Telegram
+7 916 573 23 92

Здесь тех. поддержка работает быстрее, чем на маркетплейсе!

3

ОБ УСТРОЙСТВЕ

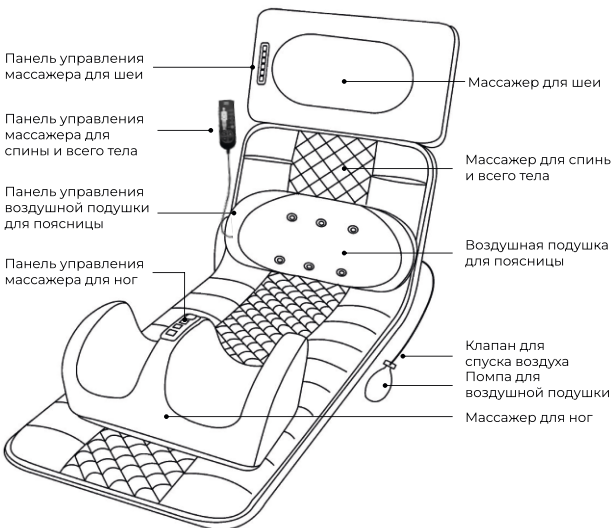

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

1. Разместите массажный матрас на диване или кровати.
2. Плотно вставьте разъем адаптера питания в разъем массажного матраса, затем плотно вставьте вилку адаптера питания в розетку.
3. На панели управления отобразится "OFF", что означает, что массажный матрас был успешно включен и можно переходить к настройке устройства.
4. Массажный матрас состоит из 4 массажеров, каждый из которых имеет свою панель управления и предназначен для разных частей тела: шея, поясница, ноги, спина. Настройте комфортный режим для каждого из массажеров.

4

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Панель управления массажера для спины и всего тела

Дисплей

Настройка времени массажа
Регулировка интенсивности (1-9 уровней)

Вибрация плеч (вкл/выкл)
Вибрация спины (вкл/выкл)
Вибрация бедер и ягодиц (вкл/выкл)
Вибрация ног (вкл/выкл)
Вкл/выкл питания
Смена режимов (1-9 режим)
Подогрев (1-3 уровня)

Режимы:
A1: Плечи - спина - бедра - ноги, затем возвращение от ног к плечам, затем автоматическое переключение на вибрацию по отдельности в четырех зонах.
F1: Увеличение интенсивности от сильной до слабой. Плечи - спина - бедра - ноги, затем возвращается от бедер к плечам.
F2: Слабая интенсивность, последовательная вибрация по всему телу.
F3: Переключение вибрации между плечами, спиной, бедрами и ногами.
F4: Основной акцент на вибрацию плеч, остальные зоны вибрируют с перерывами.
F5: Средняя интенсивность, произвольное переключение вибрации по всему телу.
F6: Сильная интенсивность, последовательная вибрация по всему телу.
F7: Быстрое переключение вибрации между плечами, спиной, бедрами и ногами.
F8: Сильная интенсивность, одновременная вибрация по всему телу.

Панель управления массажера для шеи

Кнопка включения (время по умолчанию - 15 минут)
Кнопка направления (по часовой/против часовой)
Интенсивность (1-3 уровня)
Подогрев (вкл/выкл, выключен по умолчанию)
Энергосберегающий режим (снижение интенсивности)
Интеллектуальный режим (автоматическое переключение режимов)

Панель управления воздушной подушки для поясницы

Подогрев (вкл/выкл)
Вибрация (вкл/выкл)

Панель управления массажера для ног

Кнопка включения (время по умолчанию - 15 минут)
Кнопка направления (по часовой/против часовой)
Интенсивность (1-3 уровня)
Подогрев (вкл/выкл)
Вибрация (1-3 уровня)

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Следуйте рекомендациям ниже, чтобы устройство служило дольше.

Ежедневное обслуживание	Убедитесь, что устройство выключено из сети. Используйте нейтральное моющее средство и мягкую хлопчатобумажную ткань для ежедневного ухода. Не используйте агрессивные чистящие средства. После использования храните массажер в упаковочной коробке или в сухом, прохладном и безопасном месте. Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
Хранение устройства	1. Выключите устройство и выньте вилку питания из розетки. 2. Храните изделие в прохладном и сухом месте, защищенном от солнечного света. 3. Не кладите тяжелые предметы на изделие.
В случае поломки	Если устройство повреждено, пожалуйста, прекратите использование устройства и обратитесь к продавцу. Контакты продавца указаны на стр. 3 и стр. 8.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможные причины	Устранение
Не работает	Отключено от сети	1. Подключите продукт к источнику питания или проверьте, хорошо ли подключен продукт
	Кнопка питания не нажата	2. Нажмите кнопку питания
Шум	Неправильное размещение	Скорректируйте положение устройства
Слишком слабая интенсивность	Напряжение сети слишком низко	Используйте регулятор напряжения

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Номинальная мощность	40 Вт		
Номинальное напряжение	12 V		
Размеры устройства:			
• Массажер для спины и тела	158 см	50 см	-
• Массажер для шеи	24 см	51 см	4 см
• Массажер для шеи	26 см	43 см	13 см
• Массажер для ног	32 см	45 см	25 см

6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед применением устройства внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.
- Данное устройство не заменяет лечение.
- Используйте источник питания, соответствующий параметрам устройства.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного лица.
- Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии - перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя.
- Не используйте этот продукт в течение одного часа после еды.
- Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства - немедленно прекратите использование.
- Не используйте прибор, если у вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем: грыжи, тромбозы, опухоли, несросшиеся переломы, воспаления, застои крови, проблемы с сердцем, наличие кардиостимулятора или наличие иного медицинского оборудования.
- Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь в случае поломки отремонтировать устройство самостоятельно.
- Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
- Не используйте прибор в месте с большим количеством летающей пыли или агрессивных газов.
- Не оставляйте и не используйте прибор под подушками, одеялами и другими покрытиями.
- Обязательно выключайте устройство от сети после использования или перед очисткой.
- Не кладите устройство в воду и не подвергайте воздействию воды во избежание несчастных случаев и поломки устройства.
- Не подключайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- При отсоединении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не подвергайте устройство сильному нагреванию.
- Чтобы обеспечить устройству достаточную вентиляцию, не накрывайте работающее устройство тканью или другими материалами, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы изделия.
- Не используйте устройство, если корпус или шнур питания данного прибора повреждены, если шнур питания отсырел или износился, во избежание опасности он должен быть заменен.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Если вы почувствуете какие-либо неполадки в работе прибора во время использования, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь в тех. поддержку (стр.3).

7

ГАРАНТИЯ: КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Обнаружили дефект или брак устройства?

Напишите нам с описанием вашей проблемы, приложив фото или видео. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:

taplink.cc/jagergross

Или позвоните по номеру: **8 (800) 777-43-10**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель		Серийный номер		Дата	
Информация о покупателе	ФИО:				
	Почтовый адрес:				
	Контактный номер:				
Торговая марка			Записи о ремонте		
Информация об обслуживании:					

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные несоблюдением техники безопасности, механическими повреждениями, химическими и термическими воздействиями, а также любыми воздействиями, произошедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку устройства, а также выезд мастера с целью подключения, настройки, ремонта, консультации.

12 месяцев гарантии

Ваш комфорт и радость от покупки - самое главное для нас! Если вы столкнулись с браком, можете не беспокоиться - мы вернем деньги или обменяем массажер.

8