

ИНСТРУКЦИЯ

Перкуссионный
массажер-
пистолет
Model A2



VODOROD

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства	3
Использование насадок	4
Скорости работы массажера	5
Пример массажа на все тело	5
Управление устройством	6
Параметры устройства	6
Использование устройства	7
Техника безопасности	8
Инструкция по использованию батареи	8
Устранение проблем	9
Обслуживание устройства	9
Утилизация	9
Гарантия: как воспользоваться	10
Гарантийный талон	10

2

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Перкуссионный массажный пистолет — это устройство, предназначенное для вибрационного массажа. Оно способствует расслаблению и восстановлению тела, обеспечивая глубокий массаж мышц, улучшение кровообращения, снятие напряжения и боли.

Обширный выбор насадок и скоростей работы позволяют настроить массажер под ваши индивидуальные потребности. Этот массажер поможет улучшить общее самочувствие и насладиться приятным ощущением расслабления в любое время дня.

Удобный дизайн и продуманная комплектация обеспечивают легкость в использовании дома, на работе, в спортзале или в поездках.


Выбранный вами массажер обладает рядом преимуществ:




8 насадок



99 скоростей работы

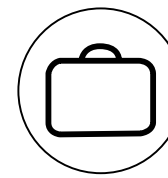

Кейс в комплекте

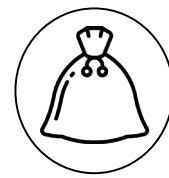

Дорожная сумка



Видеокурс


ТЕХ. ПОДДЕРЖКА / ГАРАНТИЯ

Если вы хотите обратиться в тех. поддержку или приобрести другую продукцию бренда - отсканируйте Qr-код или перейдите по ссылке:

taplink.cc/jagergross

Наши менеджеры уже готовы помочь в решении вашего вопроса или проконсультировать.

WhatsApp / Telegram
+7 (916) 573 23 92

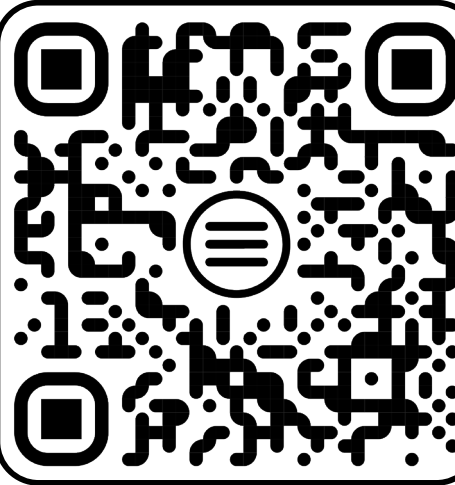

Здесь тех. поддержка работает быстрее, чем на маркетплейсе!

3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

В комплекте 8 насадок, которые подходят для различных частей тела. Насадки можно менять в соответствии с вашими потребностями.



Сферическая

От целлюлита и для массажа больших групп мышц (руки, спина, ягодицы, бедра и икры).



Дугообразная

Для массажа больших групп мышц ног (ягодицы и бедра).



U-образная

Для массажа шейно-плечевого пояса и боковых сторон позвоночника.



Головка-шар

Для работы с мелкими мышечными группами (кисти и ступни).



Пуля

Для воздействия на глубокие ткани (акупунктурные точки, меридиональные суставы ладоней и стоп).



T-образная

Для расслабления мягких тканей и чувствительных групп мышц (брюшная полость, бедренная ягодица, икроножные мышцы).



Осьминог

Для расслабляющего массажа мышц всего тела.




Плоская

Для деликатного массажа мягких тканей и расслабления линий мышц живота.

4

СКОРОСТИ РАБОТЫ МАССАЖЕРА

Массажер оснащен 99 скоростями работы. В зависимости от целей использования, вы можете подобрать нужную скорость.

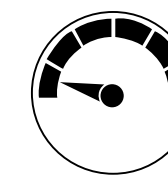

1-20

Пробуждение мышц



21-40

Расслабление мышц



41-60

Разрушение молочной кислоты



61-80

Профессиональный массаж



81-99

Глубокий массаж

ПРИМЕР МАССАЖА НА ВСЕ ТЕЛО

Длительность: 10 мин.



Плечи

15-20 сек × 3 раза



Грудные мышцы

30 сек × 3 раза



Мышцы живота

20-30 сек × 1 раз



Мышцы спины

30-60 сек × 3 раза



Мышцы ног

20-30 сек × 3 раза



Ягодицы

20-30 сек × 3 раза

5

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- Зажмите на 3 секунды кнопку включения на панели управления, чтобы включить устройство.
- Нажмите +, чтобы увеличить скорость.
- Нажмите -, чтобы уменьшить скорость.
- Зажмите на 3 секунды кнопку выключения на панели управления, чтобы выключить устройство.



ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Номинальное напряжение	7,4V
Зарядный ток	2A
Исполнительный стандарт	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
Напряжение зарядки	5V
Номинальная мощность	12 Вт
Емкость АКБ	1500 mAh
Глубина перкуссии	10-12 мм
Мощность двигателя	до 3200 об/мин
Вес	600 гр
Высота	24 см
Ширина	6 см
Глубина	17 см

6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Перед применением устройства внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.
- Перед использованием устройства убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая. Не используйте устройство через одежду. Нажимайте и аккуратно перемещайте устройство по коже. Рекомендуется ограничивать каждую область массажа до 60 секунд.
- Не используйте устройство на голове, твердых костях и области лимфатических узлов.
- Выберите подходящую массажную насадку для той части тела, которую вы хотите массировать.
- Даже при умеренном нажиме могут появиться синяки, поэтому всегда следите и проверяйте область, которую массируете.
- Регулируйте скорость и интенсивность устройства в соответствии с чувствительностью и болью в различных частях тела. Если появляется дискомфорт, прекратите использование.
- Держите пальцы, волосы и другие части тела подальше от штока и насадки устройства, чтобы избежать зажимания.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства и не вставляйте в них никакие предметы.
- Избегайте погружения устройства в воду и предотвращайте попадание влаги в его вентиляционные отверстия.
- Не бросайте и не используйте устройство неправильным образом и не по назначению.
- Перед каждым использованием внимательно проверяйте состояние устройства и уровень заряда аккумулятора.
- Не вносите изменения и не модифицируйте устройство.
- Не оставляйте устройство включенным без присмотра и не заряжайте его без присутствия.



Показания к применению

- Боль и спазмы, вызванные мышечным ушибом, растяжением и напряжением.
- Обеспечение притока жидкости в отекшую область.
- Расслабление и разжижение соединительных тканей и фасции.
- Снижение накопления молочной кислоты в мышцах.
- Увеличение подвижности суставов
- Устранение мышечной усталости.



Противопоказания к применению

- Аневризмы, кровотечения, прием препаратов, разжижающих кровь.
- Заболевания сердца, наличие кардиостимулятора или дефибрилятора.
- Беременность.
- Онкологические заболевания.
- Устройство не должно использоваться в пределах 8 см от внутренних фиксаторов в течение 90 дней после их установки.
- Чувствительные зоны: голова, лицо, шейный отдел позвоночника.
- Передняя часть голени, верхняя поверхность стопы, верхняя поверхность руки и т.д., где мышцы менее плотно расположены.

7

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


- Никогда не используйте устройство вблизи источников тепла.
- Убедитесь, что кабель во время зарядки не контактирует с острыми краями.
- Не превышайте время использования устройства 30 минут.
- Если вы планируете утилизировать устройство, обеспечьте его непригодность для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство не рекомендуется для использования лицами (особенно детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами без достаточного опыта или знаний, если они не находятся под контролем ответственного лица или не получили соответствующую информацию.
- Используйте устройство только в сухих помещениях, при условии, что ваше тело сухое. Избегайте использования устройства в ванных комнатах, душевых кабинках, в бассейне или в сауне.
- Это устройство заряжается от электросети, поэтому применяются те же правила безопасности, что и для других электроприборов.
- Проверьте, что напряжение устройства соответствует напряжению в вашей сети.
- Перед использованием убедитесь, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. Если во время зарядки вы обнаружите дефект или неисправность, выключите устройство и немедленно отсоедините его от розетки. Ремонт должен выполнять только специалистами авторизованных сервисных центров. Никогда не вскрывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты данного устройства не могут быть разобраны, отремонтированы или переустановлены самостоятельно.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед его очисткой. При очистке следите, чтобы жидкость не попала на переключатели и кнопки. Устройство можно использовать только в полностью сухом состоянии.
- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые можно отремонтировать самостоятельно.
- Не вставляйте иглы или другие острые предметы в массажер.
- Никогда не используйте данное устройство одновременно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, например электрокардиографами. Это устройство может повлиять на работу указанного медицинского оборудования и вызвать сбои.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕИ

- Когда батарея полностью разряжена, подключите устройство к зарядному кабелю с разъемом Type-C.
 - Подключите зарядный кабель к адаптеру.
 - Подключите адаптер к электрической розетке.
 - Во время зарядки на панели управления будет мигать свет. Когда батарея будет полностью заряжена, на панели управления будет отображаться --.
 - Важно: не включайте устройство во время зарядки для вашей безопасности.
- Примечание: Время зарядки составляет примерно 3 часа, чтобы полностью зарядить батарею. Продолжительность автономной работы зависит от скорости и давления, используемых во время работы, и может быть в диапазоне от 0,5 до 3 часов.

8

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

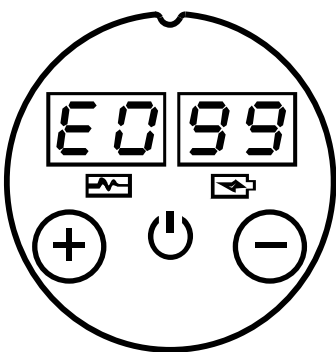

Индикатор на дисплее передачи означает, что сработал ограничитель от перегрузки.


Для восстановления работоспособности устройства нажмите на любую кнопку на панели управления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Следуйте рекомендациям ниже, чтобы устройство служило дольше.

- После использования устройства, протрите поверхность и насадку влажной тряпкой или салфеткой, затем тщательно высушите.
- Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, храните его в сухом месте в кейсе или дорожной сумке.

УТИЛИЗАЦИЯ

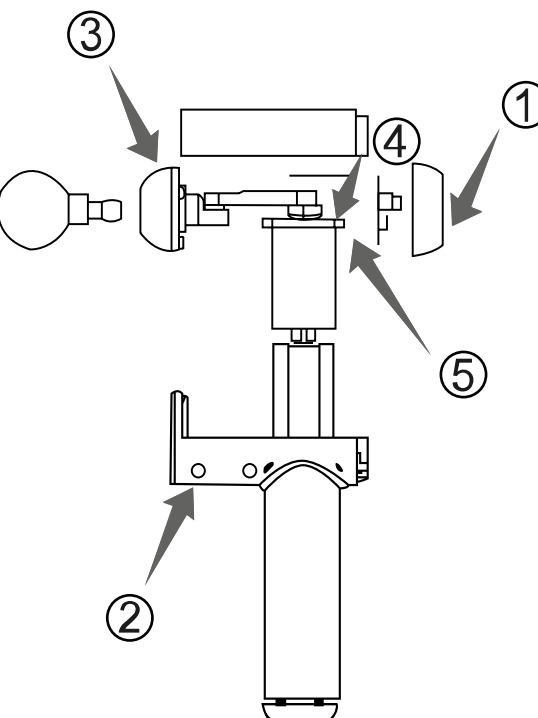

- Используя отвертку, выверните один винт с отметкой "1", как показано на рисунке, чтобы открыть заднюю крышку устройства.
- Затем с помощью отвертки отверните винт с отметкой "2", как показано на рисунке, чтобы открыть верхнюю крышку устройства.
- С помощью крестовой отвертки выверните винты с отметкой "3" и ослабьте винты с отметкой "4" с помощью шестигранного ключа размером 2,5. Затем снимите эксцентрик.
- Отверните винт с отметкой "5" с помощью крестовой отвертки и извлеките двигатель.

Когда двигатель будет извлечен, найдите штекер аккумулятора на плате, отсоедините штекер, извлеките аккумулятор и утилизируйте его в соответствии с местными правилами и нормативами.

9


ГАРАНТИЯ: КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Обнаружили дефект или брак устройства?

Напишите нам с описанием вашей проблемы, приложив фото или видео. Отсканируйте Qr-код или перейдите по ссылке:

taplink.cc/jagergross

Или позвоните по номеру: 8 (800) 777-43-10

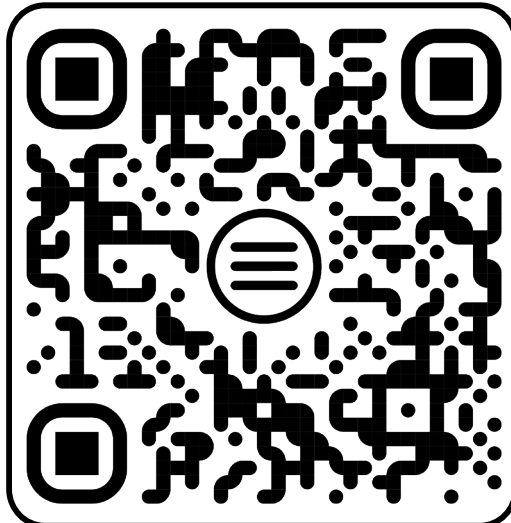

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Серийный номер	Дата	
Информация о покупателе	ФИО:		
	Почтовый адрес:		
	Контактный номер:		
Торговая марка		Записи о ремонте	
Информация об обслуживании:			



Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные несоблюдением техники безопасности, механическими повреждениями, химическими и термическими воздействиями, а также любыми воздействиями, происходящими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку устройств, а также выезд мастера с целью подключения, настройки, ремонта, консультации.

12 месяцев гарантии

Ваш комфорт и радость от покупки - самое главное для нас! Если вы столкнулись с браком, можете не беспокоиться - мы вернем деньги или обменяем массажер.

10