

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Благодарим за покупку! Наше устройство, разработанное по высшим стандартам качества, позволяет профессионально удалять нежелательные волосы в домашних условиях с помощью световой технологии.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с полной инструкцией, включая противопоказания и меры безопасности. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Описание
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
3. ПРИНЦИП РАБОТЫ
4. ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
5. БЕЗОПАСНОСТЬ:
 - 5.1 Противопоказания
 - 5.2 Предупреждения
 - 5.3 Меры предосторожности
 - 5.4 Электробезопасность
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
8. УХОД И ХРАНЕНИЕ
9. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
10. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
11. ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
12. УТИЛИЗАЦИЯ
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Использование:

- Разрешено лицам от 18 лет
- Лица с ограниченными возможностями должны находиться под присмотром
- Требуется понимание опасностей и инструктаж

2. Дети:

- Запрещено использование детьми
- Запрещены игры с устройством
- Запрещена чистка и обслуживание детьми без присмотра
- Храните в недоступном для детей месте

3. Электробезопасность:


- Запрещена замена поврежденного кабеля пользователем
- Используйте ТОЛЬКО оригинальный адаптер из комплекта
- Отключайте от сети после использования
- Не оставляйте подключенным без присмотра

4. Защита от влаги:

- Содержите устройство в сухости
- Запрещено использование вблизи воды
- Особую осторожность соблюдайте в ванных комнатах

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

1. Описание

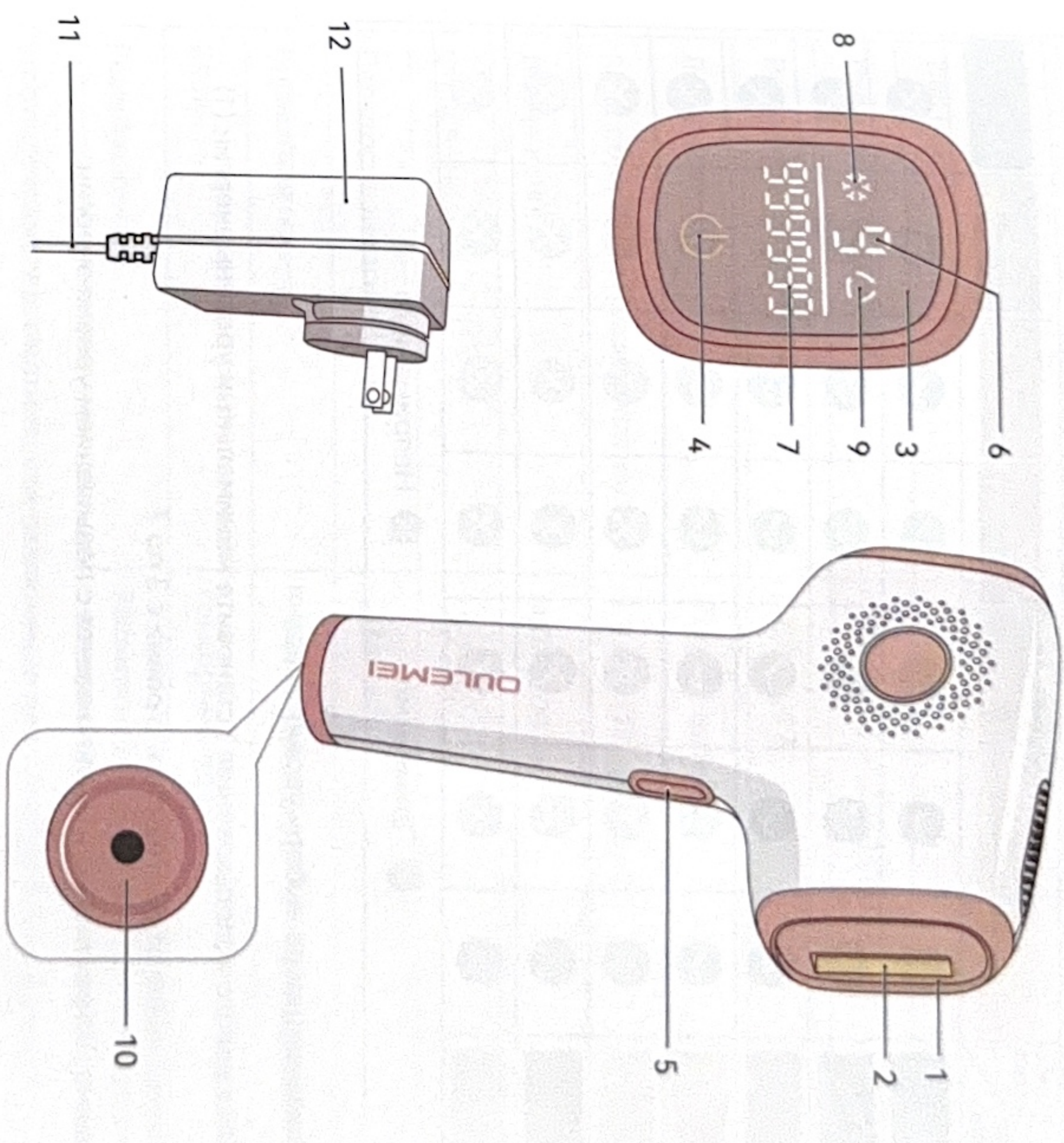

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Рабочее окно | 7. Индикатор количества вспышек |
| 2. Стекланный фильтр | 8. Индикатор ледяного охлаждения |
| 3. Сенсорный экран | 9. Автоматический режим |
| 4. Кнопка питания / уровня | 10. Разъем питания |
| 5. Кнопка вспышки | 11. Сетевой шнур |
| 6. Индикатор уровня энергии | 12. Адаптер |

17 ОУНУСЯНУ

Применено ☒ / Неприменено ☐



- повышением уровня

Автоматический режим/Ручной режим

лючение при простое более 3 минут.

	9	8	7	6	5	4	3	2	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

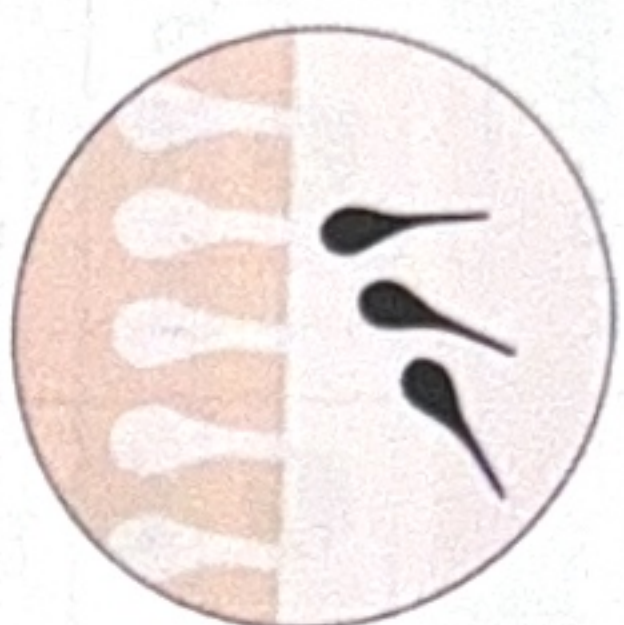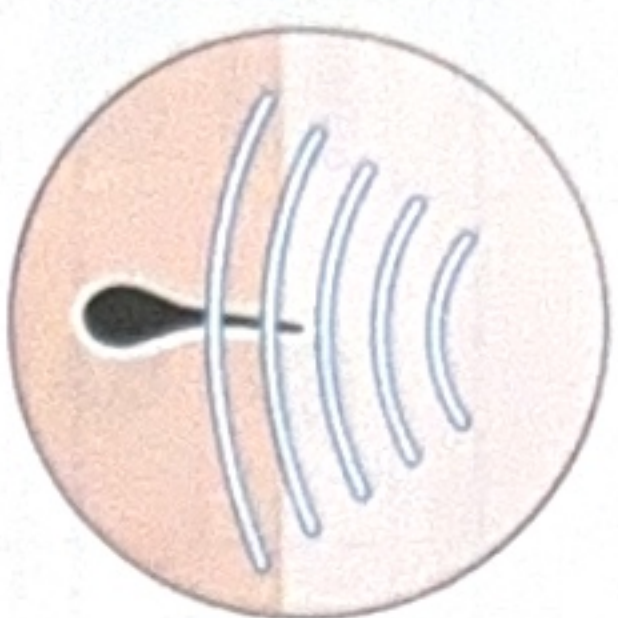

Лазерный эпилятор прерывает цикл роста волос за счет световой энергии, которая проникает через кожу и поглощается меланином в волосах стержне. Поглощенная энергия преобразуется в тепло, воздействующее на волосную фолликул и блокирующее его функцию.

Функция охлаждения:

Инновационная система охлаждения снижает дискомфорт и воспаление после процедуры. Холод сужает кровеносные сосуды, уменьшает кровоток и жжение, обеспечивая комфортное использование.

4. ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

План лечения:

1. Этап интенсивного курса (1-8 недель):



- Недели 1-3: Возможно появление отдельных волос, пропущенных из-за фазы покоя.
- Недели 4-8: Наблюдается заметное сокращение роста волос. Процедуры требуются еженедельно.

2. Поддерживающий режим (после 8 недель):

- При значительном сокращении волос перейдите на ежемесячные процедуры.
- Оставшиеся волосы становятся тоньше и светлее.
- При отсутствии роста волос полный курс завершать не требуется.

Важно:

Значительные побочные эффекты после правильного использования не возникают. Для устойчивого результата критично соблюдение периодичности процедур, так как свет воздействует только на волосы в фазе роста.

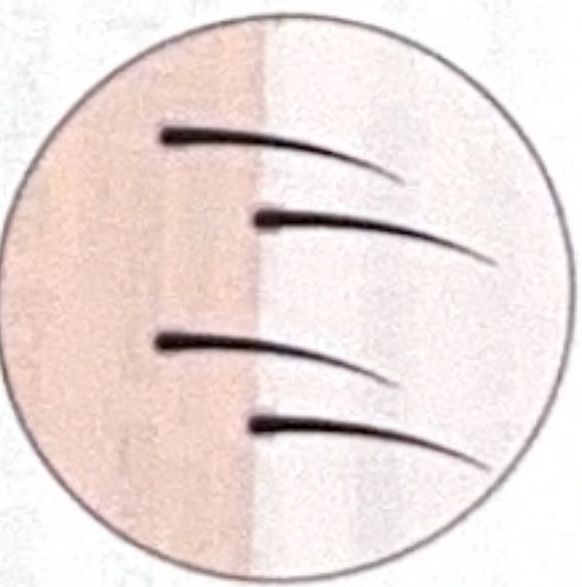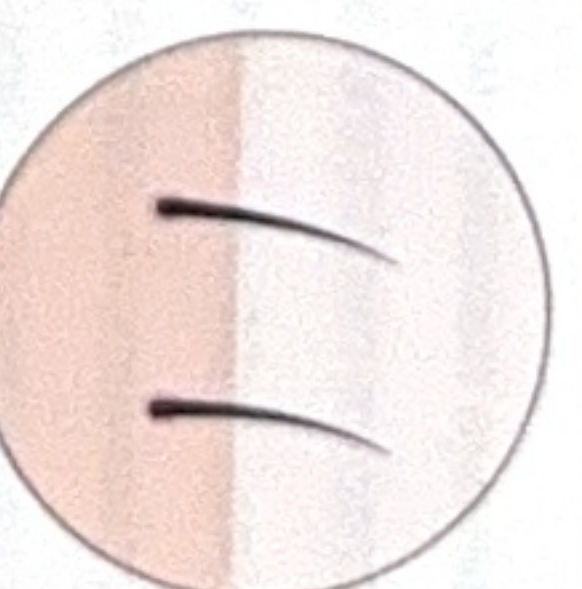2-3 раза в неделю, курс 1-3 недели	1-2 раза в неделю, курс 4-8 недели	1-2 раза в месяц или по необходимости после завершения 8-недельного курса.
		
Отдельные волосы могут продолжать расти - это пропущенные при обработке экзemplары, находившиеся в фазе покоя (телоген) во время процедуры.	Наблюдается сокращение роста волос, но часть фолликулов еще не обработана из-за несоответствия с фазой активного роста (анаген).	Достигается значительное сокращение волос в зоне обработки. Оставшиеся волосы становятся тоньше и светлее.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1 Противопоказания

Условия запрета использования:

Не применяйте устройство при следующих состояниях:

1. Тип кожи/волос:

- Кожа темнее 4-го типа по шкале Фитцпатрика (см. таблицу на стр. 4)



- Светлые/седые/рыжие волосы (низкое содержание меланина)

Причина: Риск ожогов, гиперпигментации или рубцов из-за избыточного поглощения световой энергии

2. Физиологические состояния:

- Беременность и лактация
- Возраст до 18 лет

Причина: Отсутствие клинических испытаний для данных групп

3. Кожные патологии:

- История онкологических заболеваний кожи
- Предраковые поражения (невусы > 5 мм, множественные родинки)
- Хронические дерматозы (псориаз, витилиго) в зоне обработки
- Повреждения кожи: солнечные ожоги, открытые раны, активные инфекции

4. Медикаментозное лечение:

- Приём фотосенсибилизирующих препаратов (Ретин-А, Аккутан, топические ретиноиды)
- Недавние косметические процедуры: химические пилинги (менее 4 недель)

Дополнительные ограничения:

- Избегайте использования при искусственном/естественном загаре (включая 4 недели после инсоляции)
- Противопоказано при варикозе в зоне обработки
- Запрещено для областей с татуировками/перманентным макияжем
- Ожоги, волдыри, рубцы
- Гипо-/гиперпигментацию
- Обострение существующих заболеваний

Рекомендации:

- При сомнении в совместимости устройства с вашим состоянием – проконсультируйтесь с дерматологом
- При длительном приеме лекарств – проверьте фотосенсиitivность у лечащего врача

5.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запрещенные зоны обработки:

**1. Голова/лицо:**

- Волосистая часть головы
- Брови
- Перiorбитальная область (вокруг глаз)

Причина: Риск необратимого повреждения сетчатки и роговицы

2. Пигментированные/модифицированные участки:

- Татуировки и перманентный макияж
- Тёмно-коричневые/чёрные образования:
- Родинки (невусы)
- Веснушки
- Родимые пятна
- Бородавки

Причина: Риск ожога и гиперпигментации из-за избыточного поглощения световой энергии

3. Чувствительные зоны:

- Соски и ареолы
- Гениталии
- Перинальная область

Причина: Повышенная плотность волосяных фолликулов и меланина, риск болевого шока и термического повреждения

Ограничения:

- Не обрабатывать участки с дермальными филлерами – возможен химический распад наполнителя и некроз тканей
- Запрещена повторная обработка одного участка в рамках сеанса – вызывает термическую перегрузку тканей (ожог II степени)

Критические последствия нарушения:

Повреждение кожи:

- Гипер-/гипопигментация

- Рубцы, волдыри, некроз

Глазные травмы:

- Фотокератит
- Поражение сетчатки

Безопасность глаз при использовании устройства

1. Запрещенные действия:

- Никогда не направляйте излучатель устройства в сторону глаз.
- Запрещено смотреть прямо в апертуру излучателя (включая стеклянные фильтры) при работе устройства.

2. Обязательные меры защиты:

- Всегда используйте сертифицированные защитные очки (соответствующие длине волны прибора) во время процедур.
- Убедитесь, что очки плотно прилегают к лицу, полностью блокируя боковые зазоры.

3. Критические зоны риска:

- Не применяйте устройство на веках или периорбитальной области (зона вокруг глаз).
- Избегайте обработки участков ближе 3 см от глазного яблока.

4. Потенциальные последствия нарушения:

Повреждение глаз:

- Ожог сетчатки, фотокератит, необратимая потеря зрения.

Повреждение кожи:

- Гиперпигментация, термические ожоги I-II степени.

5. Экстренные действия:

При случайном воздействии лазера на глаза:

- Немедленно прекратите процедуру.
- Приложите холодный компресс.
- Обратитесь к офтальмологу в течение 24 часов.

5.3 Меры предосторожности

Особые группы пользователей:

- Лица с ограниченными возможностями (физическими, сенсорными, ментальными) или недостатком опыта допускаются к использованию только под надзором после прохождения инструктажа по безопасности.
- Дети: Устройство должно храниться в недоступном для детей месте. Запрещено использование без прямого контроля взрослых.

5.4 Электробезопасность

Критические запреты:

1. Запрет на ремонт:

- Любая попытка вскрытия устройства подвергает пользователя риску:
- Поражение электрическим током от высоковольтных компонентов
- Травмы глаз импульсной световой энергией
- Решение: При неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.



2. Проверка целостности устройства:

- Регулярно осматривайте корпус, кабель питания и стеклянный фильтр (2) на предмет трещин, сколов или деформаций.
- При повреждении: Немедленно отключите устройство от сети и прекратите использование.

3. Защита от влаги и воды:

- Запрещено использование:
 - В ваннах, душах, возле раковин
 - На влажных поверхностях
 - При попадании жидкости внутрь корпуса
- Действия при намокании: Отключите питание и не используйте до полной просушки (≥ 72 часов).



4. Требования к чистке:

- Запрещено: - Погружение в воду или мытье под краном - Абразивные средства (царапают фильтр) - Легковоспламеняющиеся средства (спирт, ацетон)
- Разрешено: Протирать корпус сухой микрофиброй.

5. Эксплуатационные ограничения:

- Используйте только для эпиляции на коже.
- Фильтр (2) и рабочее окно (1) после процедуры нагреваются – не прикасайтесь 10 минут.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия (риск перегрева и возгорания).

КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**Запрещенные действия:**

1. Ремонт и вскрытие устройства:
 - Любая попытка самостоятельного ремонта подвергает пользователя воздействию:
 - Опасных электронных компонентов под высоким напряжением
 - Импульсной световой энергии лазерного модуля
 - Последствия: Риск поражения электрическим током, необратимого повреждения глаз.
2. Контакт с жидкостями:
 - Запрещено использование:
 - В ваннах, душевых, возле раковин
 - На влажных поверхностях
 - При попадании жидкости внутрь корпуса
 - Действия при намокании: Немедленно отключите питание. Не используйте до полной просушки (≥ 72 часов).
3. Эксплуатация поврежденного устройства:
 - Прекратите использование при любых повреждениях:
 - Треснутый корпус или стеклянный фильтр (2)
 - Деформированный кабель питания
 - Отсутствие/смещение отражателя
 - Проверка: Ежедневно осматривайте рабочее окно (1) на предмет сколов и трещин.

4. Опасные материалы и чистка:

- Запрещено:
 - Легковоспламеняющиеся средства (спирт, ацетон) – риск возгорания
 - Абразивные чистители – повреждение оптических поверхностей
 - Погружение в воду или мытье под краном
- Разрешено: Протирать корпус сухой микрофиброй.

5. Некорректное применение:

- Используйте только для эпиляции на коже человека.
- Фильтр (2) нагревается до $70-85^{\circ}\text{C}$ во время работы – не прикасайтесь 10 минут после процедуры.
- Убедитесь, что рабочее окно (1) полностью контактирует с кожей перед активацией.

6. Терморегуляция:

- Не блокируйте вентиляционные отверстия – перегрев вызывает:
 - Выход из строя лазерного модуля
 - Плавление изоляции проводов (риск короткого замыкания)
 - Термическое возгорание пластиковых компонентов

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимание: Строго соблюдайте последовательность шагов. Переход к следующему этапу допускается только после полного завершения текущего.

ШАГ 1: Подготовка зоны обработки

1. Удаление волос:
 - Полностью удалите видимые волосы любым методом (бритве, воск и т.д.).
 - После восковой депиляции выждите 24 часа

2. Очистка кожи:

- Промойте зону обработки водой, высушите полотенцем.
- Убедитесь в отсутствии на коже:
 - Остатков волос
 - Жировых веществ

- Косметических средств

- После 4-5 процедур предварительное удаление волос не требуется.

ШАГ 2: Тестовое воздействие (обязательно для новых зон)

1. Параметры теста:

- Обработайте участок 3×2 см (2 вспышки).

2. Оценка реакции:

- Выждите 24 часа.

- При отсутствии покраснения, ожога или волдырей продолжайте обработку

ШАГ 3: Процедура эпиляции

1. Активация устройства:

- Подключите блок питания (11) к сети.

- Удерживайте кнопку питания (4) 3 секунды → запуск вентилятора.

2. Выбор энергии:

- Краткое нажатие кнопки (4) для регулировки уровня (см. таблицу типов кожи на стр. 4)

3. Техника обработки:

- Плотно прижмите рабочее окно (1) к коже до мигания индикатора готовности.

- Нажмите кнопку вспышки (5).

- Интервал между вспышками: 2-3 сек (ожидайте звукового сигнала).

4. Критические правила:

- **X** Запрещена повторная обработка одного участка за сеанс.

- **X** Не активируйте вспышку без полного контакта с кожей.

ШАГ 4: Уход после процедуры

1. Нормальные реакции:

- Легкая эритема (покраснение), покалывание → проходят за 10-15 мин.

2. Действия при раздражении:

- Приложите ледяной компресс на 5 мин.

- Через 24 часа нанесите увлажняющий крем без отдушек

ШАГ 5: Завершение работы

1. Отключите блок питания (11) от сети.

2. Протрите рабочее окно (1) сухой микрофиброй (см. раздел 8 по уходу).

7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Доступны два режима работы:

- Автоматический режим (непрерывная вспышка)
- Ручной режим (одиночная вспышка)

Переключение режимов:

Удерживайте кнопку вспышки (5) в течение 3 секунд для переключения между режимами.

- Индикатор «O» на дисплее: Автоматический режим
- Индикатор отсутствует: Ручной режим


Критические требования перед использованием:

Кожа должна быть:

- Абсолютно сухой
- Без следов волос
- Очищена от косметических средств

Меры предосторожности:

- Отверните лицо от рабочего окна (1) при активации вспышки
- Рекомендуется проводить процедуры в хорошо освещенном помещении для снижения зрительного дискомфорта
- Яркая вспышка света является нормальным явлением и не представляет опасности для зрения при корректном использовании

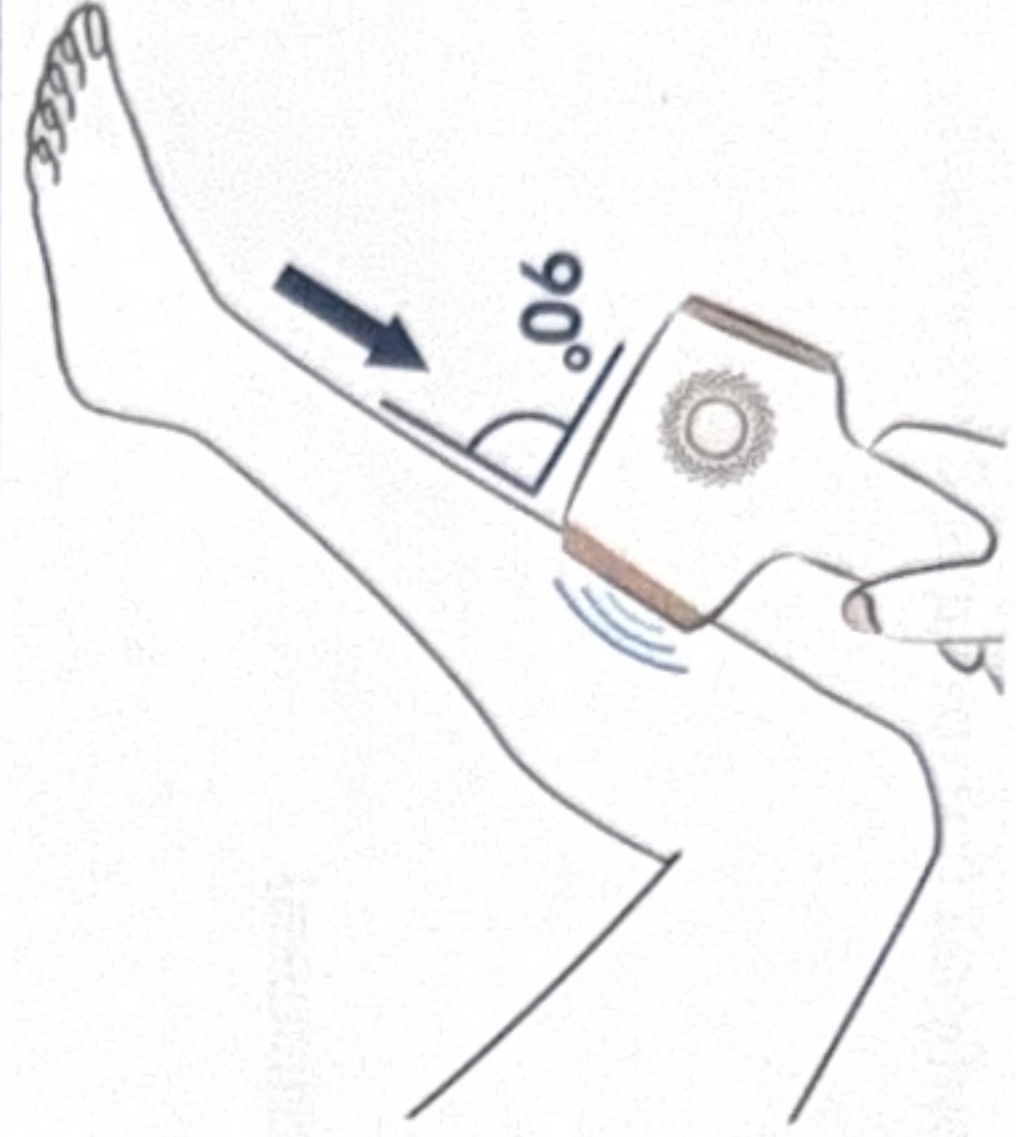Автоматический режим	Ручной режим
 для быстрого и эффективного лечения больших областей (например, ноги)	 для лечения маленьких, труднодоступных областей (например, лицо для женщин, линия бикини, подмышки, колени, подбородок, лодыжки)
1. Плотно поместите рабочее окно на вашу кожу. Когда белая энергетическая шкала появится на экране, оно готово к испусканию вспышки. Осторожность: Существует временной интервал между 2 вспышками (1с-3с).	
2. Вам не нужно нажимать кнопку лечения (5) Устройство будет автоматически испускать вспышку.	2. Нажмите и мгновенно отпустите кнопку лечения (5) Устройство испустит вспышку.
3. Медленно и непрерывно перемещайте устройство от нижней части обрабатываемой области к верхней. Убедитесь, что полный контакт с кожей постоянно поддерживается, чтобы устройство подавало вспышки непрерывно.	
Продолжайте обработку участок за участком, пока не обработаете всю желаемую область.	

Чтобы избежать непроработанных участков, располагайте рабочую насадку устройства непосредственно рядом с только что обработанной зоной, не оставляя зазоров. При возникновении сильной боли **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ** процедуру и проконсультируйтесь с врачом перед возобновлением использования устройства.



Режим ожидания

После 3 минут бездействия устройство автоматически выключится.

Как лечить лицо

Подготовка:

- Обязательно выполните тестовый участок за 24 часа до полной процедуры
- Полностью удалите волосы и косметические средства с зоны обработки
- Обезжирьте кожу специальным лосьоном



Техника безопасности:

- Закройте глаза или отвернитесь перед активацией вспышки
- Избегайте прямого контакта с:
 - Губами (включая контур)
 - Ноздрями
 - Областью непосредственно под носом
- Не обрабатывайте перманентный макияж губ

Практические рекомендации:

- Для обработки надгубной зоны: сожмите губы для выравнивания поверхности
- При обработке подбородка: ожидайте временного покраснения (нормальная реакция)
- Используйте холодный компресс при продолжительном раздражении

КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Запрещена повторная обработка одного участка
- Покраснение должно полностью исчезнуть в течение 24 часов
- При сохранении раздражения более 48 часов обратитесь к дерматологу

ПРИМЕЧАНИЕ: Уход после процедуры и важные наблюдения**1. Нормальная реакция кожи:**

- Временное покраснение или легкое жжение (2-5 минут) - нормальная реакция
- Применение: Приложите прохладный компресс на 5-10 минут

2. Требования к прекращению использования:

- Немедленно прекратите использование при:
 - Изменениях пигментации (гипер- или гипопигментация)
 - Стойком раздражении (>24 часов)
- Обратитесь к дерматологу для выявления возможных медицинских причин

3. Защита от ультрафиолета:


- Обязательно используйте солнцезащитный крем SPF 30+ (не менее 15)
- Период защиты: 7 дней после процедуры
- Избегайте:
 - Прямого солнечного излучения
 - Искусственных источников UV (солярии, UV-лампы)

4. Ограничения в течение 24 часов:

- Запрещено:
 - Термовоздействие (сауны, джакузи, бани)
 - Тесная одежда в зоне обработки
 - Косметические средства:
 - Парфюмированные продукты
 - Отбеливающие кремы
 - Скрабы/пилинги
- Разрешено:
 - Легкие увлажняющие средства без отдушек
 - Прохладные компрессы.

8. УХОД И ХРАНЕНИЕ

После использования выключите устройство, отключите его от сети и проверьте аппликатор (1), стеклянный светофильтр (2) и встроенные отражатели на наличие повреждений. Протрите аппликатор сухой салфеткой из микрофибры или без ворса при наличии следов или черных точек. Не прикасайтесь к стеклянному светофильтру и не очищайте его сразу после использования — дайте ему остыть.

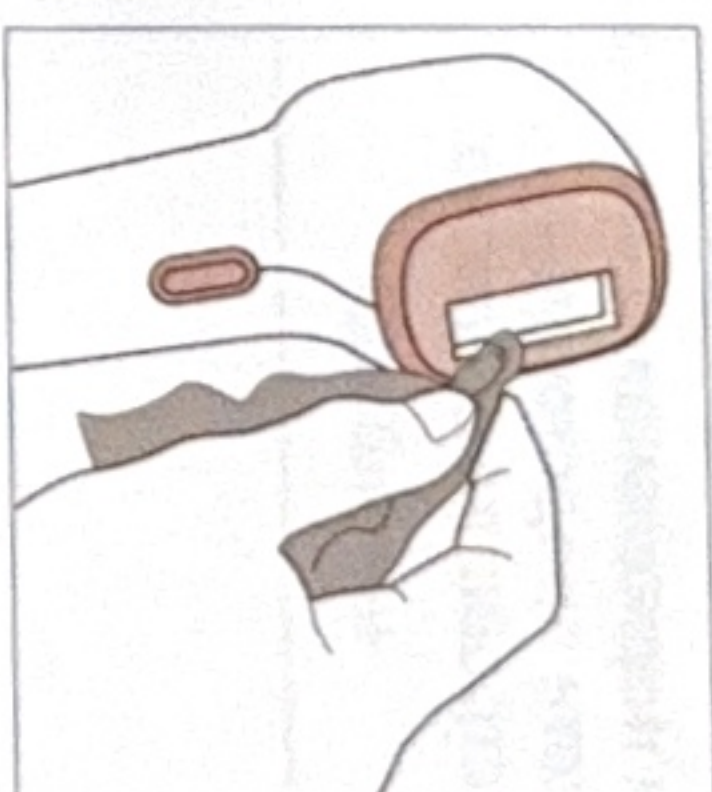

Не ополаскивайте и не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.

1. Смочите мягкую ткань, прилагаемую к устройству, несколькими каплями воды и используйте ее для очистки следующих частей:
 - окно выхода света
 - наружная поверхность головки
 - отражатель внутри головки
 - красноватое фильтровое стекло внутри головки
2. Дайте всем деталям тщательно просохнуть на воздухе.

9. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**НОРМАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ****Ожидаемые нормальные реакции:**

- Легкое ощущение тепла во время вспышки
- Покалывание в области обработки
- Временное покраснение кожи (эритема)

Временные рамки реакций:

- Нормальные реакции: исчезают в течение 24 часов
- Нежелательные реакции: проявляются сразу или в течение 24-72 часов

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ:

- При сохранении реакций более 72 часов - прекратите использование
- При следующих симптомах немедленно обратитесь к дерматологу:
 - Сильное жжение или боль
 - Образование волдырей
 - Изменение пигментации кожи
 - Отек или воспаление

Рекомендации:

- При сохранении покраснения более 2 часов приложите холодный компресс
- Используйте увлажняющий крем без отдушек через 24 часа после процедуры
- Избегайте солнечного воздействия на обработанные участки в течение 48 часов

Побочный эффект	Как оценить и реагировать
Ощущение тепла или покалывания во время процедуры, которые обычно исчезают через несколько секунд или минуту и уменьшаются при продолжении использования.	Это ожидаемая и нормальная реакция. Вы можете продолжать использование устройства согласно инструкции.
Если во время или после процедуры возникают сильный дискомфорт или боль, которые сохраняются, то следует прекратить использование и обратиться к врачу.	НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ использование устройства и проконсультируйтесь с врачом о возможности его дальнейшего применения.
Покраснение кожи, которое не проходит в течение 24-48 часов после процедуры.	
Припухлость и покраснение вокруг волосяного фолликула, которые не исчезают в течение двух-трех дней.	
Покраснение кожи во время или после процедуры, которое исчезает в течение от нескольких минут до нескольких часов.	
Припухлость и покраснение вокруг волосяного фолликула, которые исчезают в течение 2-3 дней.	Вы можете продолжить использование устройства согласно инструкции после того, как припухлость и покраснение вокруг волосяного фолликула полностью исчезнут.
Временные изменения пигментации кожи (осветление или потемнение)	При изменении пигментации кожи немедленно прекратите использование устройства и проконсультируйтесь с врачом.
Усиление роста волос в обрабатываемых зонах (чаще наблюдается у лиц средиземноморского происхождения).	При сохранении такого усиления в течение нескольких процедур прекратите использование устройства и проконсультируйтесь с врачом.

10. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Следующее руководство по устранению неполадок может помочь вам решить начальные проблемы, которые могут возникнуть при использовании данного устройства.

Проблемы	Возможная причина	Решение
Не включается	Подача питания не подключена	Убедитесь, что адаптер или шнур питания плотно подключены. Избегайте использования переходников.
Адаптер горячий при использовании	Это нормально	Никаких действий не требуется
Не может испускать свет	Плотно ли рабочее окно прижато к коже	Убедитесь, что аппликатор плотно прилегает к коже без зазоров для правильной работы устройства.
Автоматически выключается после того, как не использовалось в течение периода времени	Активация защиты от автоматического отключения	Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить устройство
Есть запах при вспышке	В фильтре есть пыль или волосы	Протрите фильтр / удалите волосы / понизьте уровень
Кожа чувствительна при воздействии излучения	Повреждена выходящая передняя / прозрачная окантовка.	Понижьте уровень энергии. / Если проблема не исчезнет, обратитесь в наш Сервисный центр послепродажного обслуживания для ремонта.

Эффект освещения не соответствует ожиданиям	Низкий уровень/Частота использования слишком низкая	Выберите уровень 6-9 / Обеспечьте правильное перекрытие / Обеспечьте правильный интервал использования при работе при свете.
После длительного использования на краю световой головки могут появиться пятна. Аккуратно протрите их мягкой тканью, смоченной медицинским спиртом.	Несбритые волосы до и после использования вызовут остатки меланина в световой головке	До и после использования аккуратно протрите рамку излучающей головки ватной палочкой, смоченной в спирте.
Отсутствие света или частое мигание после нормального запуска.	НИКОГДА не подносите руку или другие части тела к аппликатору до подключения устройства к сети.	Убедитесь, что аппликатор ничем не заблокирован, отсоедините шнур питания и перезапустите устройство.
Индикация ошибки	Ошибка 0 / Ошибка 2 / Ошибка 4	Выключите питание, через 24 часа попробуйте снова. Если проблема не исчезнет, обратитесь к нам для замены устройства.
Срабатывание защиты от перегрева (Ошибка 3)	Активация программы самозащиты устройства от перегрева	Разместите устройство в хорошо проветриваемом месте для остывания. Следите, чтобы во время работы вентиляционные отверстия на корпусе не были заблокированы.

11. ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Подходит ли этот эпилятор для моего оттенка кожи и цвета волос?	Пожалуйста, обратитесь к таблице оттенков кожи и типов волос на теле. (Страница 4)
Могу ли я использовать его на своих усах?	Нет, потому что волосные фолликулы в области бороды очень плотные, а кожа на лице относительно тонкая.
Следует ли излучать вспышки непрерывно на одном и том же участке кожи?	Не следует излучать вспышки непрерывно на одном и том же участке кожи.
Следует ли использовать какой-либо гель для депиляции непосредственно во время процедуры удаления волос, как это требуется на некоторых профессиональных сеансах?	Нет, потому что гель загрязнит выходное отверстие для света, повлияет на светочувствительность и эффективность использования. Правильный способ применения: сначала сбейте волосы, а затем нанесите гель после удаления волос для ухода за кожей.
Как долго прослужит картридж с лампой? Могу ли я получить замену для него?	Кроме того, вам, скорее всего, не потребуется замена картриджа, так как данное устройство позволит вам проводить процедуры удаления волос в течение почти 10-15 лет.
Как скоро вы увидите результат?	Обычно от 8 до 12 недель, в зависимости от типа кожи пользователя, цвета и толщины волос.
Является ли эффект эпиляции IPL (интенсивным импульсным светом) перманентным?	Ни IPL (Интенсивный Импульсный Свет, ИИС), ни лазерная эпиляция не дают постоянного эффекта — это касается даже медицинского оборудования. Но при правильном применении пользователь может долгое время сохранять шелковистую и гладкую кожу.

12. УТИЛИЗАЦИЯ



Обязательные требования:

- Запрещена утилизация с бытовыми отходами
- Не подлежит захоронению на свалках ТБО

Правильная процедура утилизации:

1. Обратитесь в авторизованный центр переработки электроники
2. Используйте пункты приема:
 - Специализированные экопункты
 - Торговые сети (место приобретения устройства)
3. Контакты для информации:
 - Местная администрация (муниципалитет)
 - Экологические службы региона

Экологическая ответственность:

- Соблюдайте Федеральный Закон №89 «Об отходах производства»
- Участвуйте в программе «Утилизация электроники без вреда»
- Переработка позволяет восстановить до 92% материалов устройства

Несоблюдение правил утилизации влечет административную ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Параметры гарантии:

- Срок: 1 год с даты покупки
- Покрытие: Дефекты материалов и изготовления
- Формы исполнения: Ремонт или замена устройства

Процедура активации гарантии:

1. Предоставьте в авторизованный сервисный центр:
 - Полное устройство
 - Гарантийный талон

- Фискальный чек
- 2. Обмен производится в течение 14 рабочих дней

Исключения из гарантии:

- Повреждения из-за нарушения инструкции
- Естественный износ компонентов (фильтры, аппликаторы)
- Использование неоригинальных аксессуаров
- Ремонт в неуполномоченных сервисах

Особенности замены:

- При отсутствии идентичной модели возможна замена на аналог
- Цвет/дизайн замены определяются складской доступностью

Территориальное действие:

Гарантия действительна во всех странах официальных продаж

Аннулирование гарантии при:

- Наличии следов самостоятельного ремонта
- Отсутствии платежных документов
- Механических повреждениях корпуса