

POWERGUN

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР



Руководство
пользователя

 **begibey**

Поздравляем с приобретением перкуSSIONного массажера Begibey PowerGun

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам массажное устройство, разработанное и изготовленное в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним.

Важно помнить, что массажер не заменяет профессиональное медицинское лечение или физиотерапию. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, если у вас есть сомнения относительно его применения.

Массажер предназначен исключительно для личного использования и не подходит для коммерческих целей или применения в медицинских учреждениях. Для достижения наилучших результатов и продления срока службы устройства следуйте инструкциям по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования или передачи устройства другому владельцу.

Содержание

Меры предосторожности	2
Комплектация и насадки	3
Инструкция по использованию	4
Хранение и утилизация	4
Технические характеристики	5

Меры предосторожности



Внимание! Чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания или травм, следуйте инструкциям:

Использовать только на сухой коже. Не применять на влажной или мокрой коже, через одежду — запрещено.

Не применять более 60 секунд на одном участке.

Использовать только на теле, избегая дискомфорта.

Не использовать на голове или возле лица.

Не оставлять включённым без присмотра.

Предосторожности:

Не использовать на опухших, воспалённых или повреждённых участках кожи.

Не прилагать чрезмерного давления.

Избегать костей, суставов и шеи.

Не прикасаться пальцами к движущейся головке.

Не вставлять посторонние предметы в отверстия устройства.

Не погружать устройство в воду.

Не ронять.

Заряжать только при температуре от 4°C до 40°C.

Проверять заряд перед использованием.

Не изменять конструкцию прибора.

Комплектация и насадки

Массажер

Плоская насадка

Шарообразная насадка

U-образная насадка

Насадка-пуля

Зарядный кабель Type-C

2



3



4



5



Плоская насадка

Для всего тела и расслабляющего массажа

Шарообразная насадка

Для массажа больших групп мышц, бедер, икроножных мышц, ягодиц, живота, плеч и т.д.

U-образная насадка

Для массажа шеи, спины, позвоночника

Насадка-пуля

Для глубокого массажа тканей (сухожилия, ладони, стопы и т.д.)

Инструкции по использованию

Включите питание (№1 на схеме ниже). Долгое нажатие кнопки — для включения/выключения, короткое нажатие для смены скорости .

Вставьте нужную насадку.


После использования снимайте насадку. При отсоединении не тяните с усилием — просто потяните прямо.

Заряжайте устройство при помощи кабеля Type-C (№3 на схеме ниже).

Во время зарядки индикатор мигает. После полной зарядки индикатор горит постоянно (№2 на схеме ниже.)

При включении устройства индикатор загорается, при выключении — гаснет.

При зарядке устройство отображает уровень заряда, во время работы — уровень скорости.

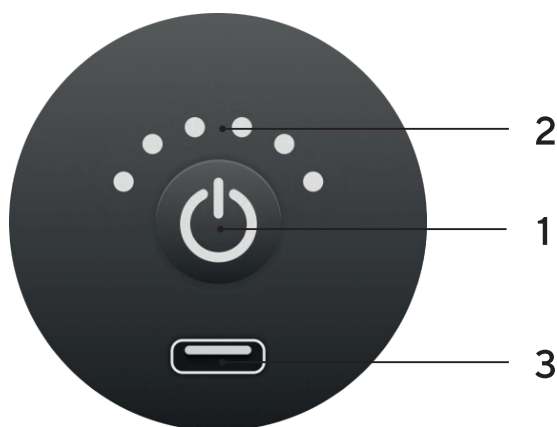

Хранение и утилизация

Хранить в сухом и чистом месте, при температуре от 4°C до 40°C вдали от источников тепла и помещений с повышенной влажностью воздуха. Переносите устройство в оригинальной упаковке, избегайте ударов и влаги.

Устройство не подлежит выбросу с бытовыми отходами. Сдайте его в пункт приёма электрооборудования.

Аккумулятор утилизируйте отдельно.

Технические характеристики

Название	ПеркуSSIONный массажер Begibey
Модель	PowerGun
Мощность	25 Вт
Емкость аккумулятора	1500 мА·ч
Частота вращения	1800-3200 об/мин
Напряжение зарядки	5 В / 2 А
Время зарядки	Около 3.5 часов
Продолжительность работы	до 90 минут
Вес	560 г

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель:

Wenzhou Songling Healthcare Equipment CO., LTD

No. 1320-1328 Wanxiang Road, Huangyang Village, Wanquan town, Pingyang County,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China

Дата производства: смотрите на упаковке

Сделано в Китае.



Импортер:

ИП Штукина Елена Александровна

193318, Санкт-Петербург, ул. Бадаева 8, корпус 1А, 695

БЕЙСЯ.
ДВИГАЙСЯ.
ДОБИВАЙСЯ.

 **begibey**

