



Ирригатор портативный

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за покупку ирригатора для полости рта JD 08.

Беспроводной ирригатор для дома и путешествий, со встроенным аккумулятором, выполнен в стильном эргономичном дизайне. Прибор обеспечивает эффективное очищение пространства между зубами и удаление зубного налета. Его использование предотвращает образование зубного камня и является отличной профилактикой кариеса и болезней пародонта.

Ирригатор для полости рта JD 08- это необходимый прибор для ухода за зубными протезами, коронками и брекет-системами.

Также с его помощью можно осуществлять массаж десен, который улучшает кровообращение, тем самым способствуя их оздоровлению.

Три режима работы обеспечивают максимальную эффективность данного прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: JD 08

Мощность: 5 Вт

Емкость резервуара: 160 мл

Регулятор давления воды: 3 режима

Питание: аккумулятор литий-ионный 700 мА.ч

Время работы при полном резервуаре воды:
50-60 секунд

Насадка стандартная в комплекте: 1шт

Дорожный чехол

Зарядка: универсальный шнур USB,
который можно подключить к любому
универсальному адаптеру.

Вход: 5В 1 а

Вес: 213 гр

Высота: (с насадкой) 31 см

Высота: (без насадки) 21,5 см

Материал корпуса: АБС пластик

Цвет: белый

Время полной зарядки: 2-3 часа

Три режима работы обеспечат комфортное
использование:


Режимы

«Soft» - для чувствительных зубов;


«Normal»- предназначен для ежедневного
использования;

«Pulse» - для массажа десен (импульсы с разным
давлением жидкости).

КОНСТРУКЦИЯ ИРРИГАТОРА

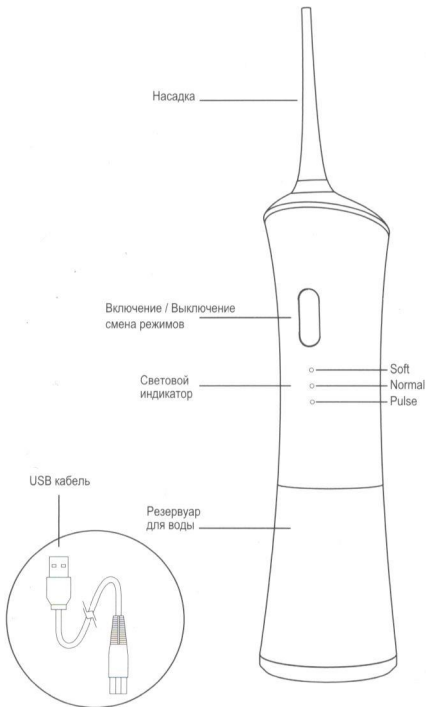

КОНСТРУКЦИЯ ИРРИГАТОРА

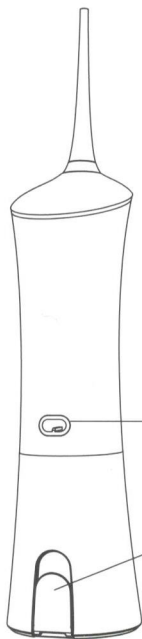


Интерфес зарядки

Крышка резервуара



Насадка съёмная

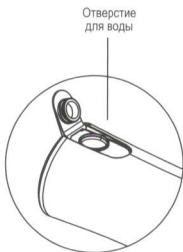

Отверстие для воды

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставить насадку в разъем, расположенный в верхней части ирригатора.
2. Резервуар ирригатора наполнить теплой водой.
3. Насадку поместить в полость рта, легко прижать ее губами, чтобы предотвратить разбрызгивание, но в тоже время позволить воде вытекать изо рта в раковину.
4. Наклониться над раковиной и включить прибор.
5. Выбрать самый комфортный режим давления водной струи, используя кнопку
 - «Soft» - для чувствительной эмали зубов или для детей;
 - «Normal» - эффективная очистка для ежедневного использования;
 - «Pulse» - режим для массажа десен импульсами с разным давлением жидкости.
6. Прежде чем вынимать насадку изо рта, нажмите кнопку для выключения устройства.
7. После обработки всей ротовой полости слейте оставшуюся жидкость из резервуара.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
- Держите прибор вдали от источников тепла, таких как плиты, печи, камины.
- Дефекты, возникающие из-за неправильного обращения или повреждения, исключены из гарантии. Это положение также относится к естественному износу.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.
- Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом, сделайте ее доступной для службы сбора материалов, подлежащих переработке.



ГАРАНТИЯ

Разработчик: Jardeko S.p.A. Италия, Via delle Robinie 10, 27010, Lombardia, Zeccone, Italy

Изготовитель: "U-MAX GROUP SHANGHAI LIMITED, Room 111, F1, No. 12 building, Lane 799 East Huanlin Road, Pudong District, Shanghai, China

Дата производства 10.2019 г

Страна производства: Китай

Импортер, уполномоченная организация на принятия претензий и поставщик в РФ: ООО "Жардеко"

info@jardeko.com | Торговая марка: JARDEKO

Гарантия: 1 год



Дата

М.П.