



RU



## Спасибо!

Всю необходимую информацию для эффективного и безопасного использования прибора Вы найдете в данной Инструкции.

Для получения дополнительной информации, а также с пожеланиями и предложениями, Вы можете написать нам на [contact@bluetens.com](mailto:contact@bluetens.com).

Работать с Bluetens легко и приятно. Ниже приведены рекомендации, как сделать использование прибора простым и безопасным с первых минут.


1. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию прибора, а также противопоказания, приведенные на стр.100 
2. Ваш смартфон должен соответствовать минимальным системным требованиям:  
iOS : iPhone 5s или выше, iOS 7 или выше  
Android : совместимость с Bluetooth 4.0 и Android 6 или выше
3. Необходимо установить приложение Bluetens на Ваш смартфон.  
Приложение доступно в Appstore а также Google Play под именем «Bluetens Get Better».  
4. Bluetooth Вашего смартфона должен быть ВКЛЮЧЕН  
Не нужно вручную синхронизировать прибор Bluetens. Ваш смартфон подключится к прибору автоматически, как только Вы запустите приложение. Это означает, что Вам не нужно заполнять поле PIN или менять настройки Вашего смартфона, потому что Bluetens не только маленький и мощный, но и умный!  
**Подготовка выполнена? Тогда перейдем к более серьезным вещам ;)**

95

RU

## ПРИБОР BLUETENS

- 1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 Регулятор интенсивности
- 3 Индикаторы интенсивности программы
- 4 Индикатор зарядки
- 5 Индикатор напряжения
- 6 Слайдер
- 7 Гнездо для кабеля электродов
- 8 Гнездо микро-USB
- 9 Кнопка перезагрузки

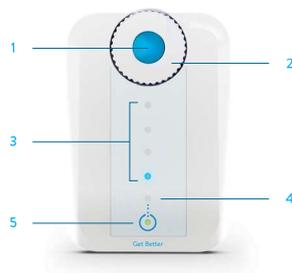

## ПРИМЕНЕНИЕ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
- КАЛЕНДАРЬ
- ИЗБРАННОЕ
- ЗАГРУЗКА

- ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
- ИКОНКА
- FAQ
- РЕЖИМ PRO

96


**ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BLUETENS**



- > выберите устройство
- > Создание Аккаунта Bluetens
- > Во время первого использования Вам будет доступен интерактивный помощник.
- > выбор программы
  - > Поворачивайте колесико для выбора части тела, а затем типа используемой программы.
  - +** **Здоровье**  
 Физиотерапия, призванная ускорить реабилитацию или обеспечить быстрое обезболивание.
    - +** **Восстановление**  
 Расслабляющий массаж или снятие мышечного напряжения. Очень эффективно для ускорения качества и скорости восстановления.
    - +** **Спорт**  
 Для активных тренировок.
- >Нажмите «Поехали!».

RU

ДОСТУП К СПИСКУ ПРОГРАММ

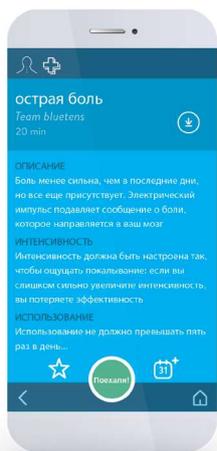

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ




ВКЛЮЧИТЕ ВАШ BLUETENS





RU

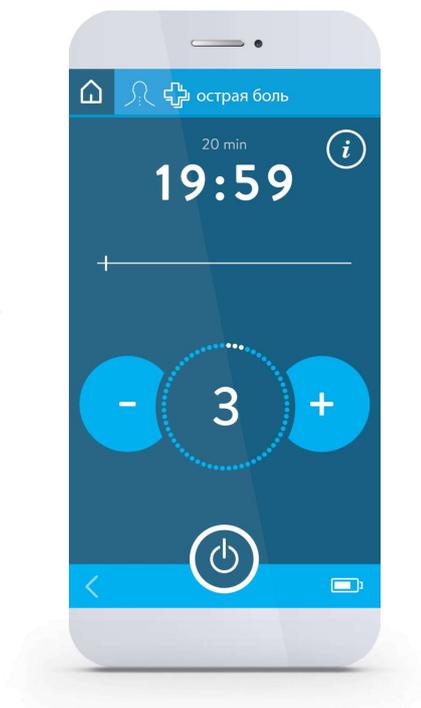

#### ВО ВРЕМЯ ПРОГРАММЫ

> **Настройте интенсивность программы, вращая колесико**

Загрузите описание программы, нажав на кнопку «Информация». Для наибольшей эффективности следуйте нашим рекомендациям по интенсивности программ.



#### ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ

> **Если Вы хотите остановить программу, нажмите на кнопку «Стоп». Вы будете перенаправлены в Главное меню.**

#### КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

> **Конец программы сопровождается всплывающим сообщением.**

Перед удалением электродов выключите Bluetens. Закрепите электроды на пластиковой подложке и храните в поставляемой упаковке и храните в защитном чехле.

RU

## БЕЗОПАСНОСТЬ А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование прибора Bluetens противопоказано людям с кардиостимулятором или страдающим эпилепсией. Использование Bluetens также не рекомендуется беременным женщинам, людям, страдающим, включая послеоперационную грыжу. Люди, страдающие сердечной недостаточностью, должны избегать применение прибора Bluetens на областях вокруг сердца. Не используйте Bluetens при заболеваниях сердца.

### ▲ ВАЖНО!

Не используйте Bluetens в воде или помещениях с повышенной влажностью (саунах, бальнеотерапевтических камерах, банях и т.п.). Запрещается размещать электроды на синкаротидную область (в передней части шеи), транскраниальную область (вся поверхность головы), а также на трансторакальную область (грудная клетка). Чтобы все правильно сделать, следуйте рекомендациям по размещению электродов. Они подготовлены профессиональными медиками и позволяют сделать применение прибора Bluetens наиболее эффективным.

- Вес : 25 грамм
- Батарея : 3.7V 400mAh
- Напряжение : 0-7.0V (500Ω нагрузки)
- Частота : 1Hz-1200Hz
- Ток на выходе : Максимум 300mA (рис), среднее значение 20 mA
- Напряжение на выходе: Максимум 120V (500Ω нагрузки), 65V с грузом
- Источник питания : USB
- USB (при зарядке) : 5V 500mA, 2.5W
- Источник импульса : симметричный двухфазный импульс квадратного сечения
- Максимальное сопротивление : 1500 Ohm

### Информация по утилизации

По окончании срока службы прибор подлежит утилизации в рамках местных регуляторных требований. Мы заранее благодарны Вам за то, что Вы выбросили отработавший прибор в подходящем месте, обеспечивающем утилизацию без нанесения вреда окружающей среде.

РЕКОМЕНДАЦИИ (хранение и транспортировка)  
Температура : 10°C / 45°C - Влажность : 25% / 80%

Bluetens должен быть использован только в рамках предложенных программ. Bluetens Limited не несет ответственности за неправильное использование прибора Bluetens. Манипуляции с электродами производить ТОЛЬКО при выключенном приборе. Bluetens является медицинским прибором, и следует ограничить доступ детей к нему. Ваш Bluetens является медицинским прибором класса 2A, сертифицированным TÜV. Гарантия 2 года. Bluetens Limited заявляет, что прибор Bluetens соответствует директивам Евросоюза 1999/5 / EC и 3/42 / EEC 9. Копия Декларации соответствия доступна по запросу в Bluetens Ltd по адресу 100 2003 20/F Tower 5, China Hong Kong City, 33 Canton Road, TST, Hong-Kong ou Bluetens France, 5 passage Saint Bernard, 75011 Paris, France, а также на сайте [www.bluetens.com/doc](http://www.bluetens.com/doc)

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте Bluetens ближе, чем на метр от коротковолновых медицинских приборов или микроволнового оборудования, которое может изменить токи, создаваемые прибором Bluetens. Во время сеансов не отключайте электроды, т.к. прибор находится под напряжением. Сначала следует выключить прибор. Никогда не отсоединяйте электроды от включенного прибора. Никогда не присоединяйте электроды к внешнему источнику питания.

Не используйте поврежденный электродный кабель. Для зарядки прибора Bluetens используйте только кабель USB, поставляемый в комплекте. Никогда не используйте прибор Bluetens или кабель USB, если они повреждены. Храните прибор Bluetens и его аксессуары в местах, недоступных для детей. Не позволяйте сторонним веществам (воде, песку, металлу и т.п.) попадать в прибор. Не используйте Bluetens во время управления автомобилем. Никогда не подзаряжайте Bluetens во время его использования: слайдер предотвращает использование прибора одновременно с его зарядкой, но является дополнительной мерой предосторожности. В случае наличия сомнений, обратитесь за консультацией к профессиональному врачу.

- Автоматическое выключение после завершения программы : да
- Защита от возгорания : 100%
- Классифицирован как тип BF
- Директивы CE по медицинскому оборудованию : (Direktiv 93/42/CEE)
- ROHS : приборы, изготовленные без применения материалов, способных нанести вред окружающей среде **RoHS**
- Защита от поражения электрическим током 2 класса
- Контакт прибора с пациентом вне зоны сердца
- Обращайте внимание на знак

## КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

RU

Мы лично решаем все вопросы послепродажного обслуживания.

Если после покупки аппарата Bluetens Вам необходима помощь и консультация одного из наших дистрибьютеров, свяжитесь с нами по электронной почте [contact@bluetens.com](mailto:contact@bluetens.com).

Наши сотрудники свяжутся с Вами в течение 24 часов и предложат быстрое решение Вашей проблемы.

## ГАРАНТИЯ

Срок гарантии на прибор Bluetens составляет 2 года. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным обслуживанием или использованием, осуществлявшимся не в соответствии с данной инструкцией, а также вызванные несчастными случаями (удар, пожар, наводнение), модифицированием прибора, его самостоятельной починкой, неправильным использованием или в следствие естественного износа. Гарантия покрывает дефекты, связанные с материалами, и производственный брак. Гарантия распространяется только на приборы Bluetens, приобретенные непосредственно в Bluetens или у одного из авторизованных дилеров Bluetens.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Срок гарантии на прибор составляет 2 года с момента покупки. Срок гарантии на батарею составляет 6 месяцев.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Электроды, зажимы, чехлы, кабели и аксессуары, входящие в комплект поставки, не попадают под действие гарантии.

### BLUETENS СЕРВИС

В случае обнаружения дефекта, на который распространяется действие гарантии, наш дистрибьютор направит Вам бланк возврата и возьмет на себя ответственность за починку или замену Вашего аппарата, а также на его возврат Вам.

### КАК ПОЛУЧИТЬ КЛИЕНТСКУЮ ПОДДЕРЖКУ?

Клиентская поддержка доступна круглосуточно по адресу: [contact@bluetens.com](mailto:contact@bluetens.com), выделенный сотрудник поможет Вам с решением Вашей проблемы.

101