

# Diva

Аппарат для ухода  
за кожей лица



ReadySkin

Руководство  
по эксплуатации

ru

kz



# Оглавление

Введение	4
Противопоказания и ограничения к использованию	5
Общие замечания	7
Меры безопасности	8
Внешний вид и управление аппаратом	13
Режимы работы аппарата	14
Подготовка аппарата к работе	15
Проведение процедур	17
Ультразвуковая чистка лица	19
Глубокое очищение пор	22
Глубокое питание и увлажнение	28
Ультразвуковой массаж	31
Микротоковый лифтинг	34
Чистка и обслуживание аппарата	37
Возможные неполадки и способы их устранения	39
Технические характеристики	40
Комплектация	41
Правила хранения, реализации, транспортировки и утилизации	42

## Введение

*Бытовой аппарат ReadySkin Diva не является медицинским оборудованием. Не для применения в медицинских целях.*

Благодарим вас за покупку аппарата для ультразвуковой чистки и ухода за кожей лица ReadySkin Diva!

Аппарат предназначен для ухода за кожей в домашних условиях и совмещает в себе 5 функций: ультразвуковой пилинг, глубокое очищение пор, питание и увлажнение, ультразвуковой массаж и микротоковый лифтинг.

Аппарат ReadySkin Diva дарит комплексный и бережный уход за кожей лица на основе современных эффективных косметологических методик с использованием ультразвука и микротоковой терапии и возможностью регулировать уровень мощности его работы.

Аппарат ReadySkin Diva достаточно прост в использовании, однако необходимо внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с устройством.

Для обеспечения своей безопасности перед использованием рекомендуем внимательно изучить раздел «Меры безопасности».

## **Противопоказания и ограничения к использованию**

Запрещено использование аппарата при следующих условиях:

- беременность и лактация;
- острые инфекционные и вирусные заболевания;
- онкологические заболевания;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- наличие кардиостимулятора;
- заболевания кожи и соединительной ткани (например, склеродермия, красная волчанка);
- психические заболевания;
- хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения;
- акне в стадии обострения;
- склонность к образованию келоидов;
- наличие силиконовых имплантатов, косметологических нитей, металлических имплантатов в области обработки;

*Перед проведением процедур рекомендуется предварительная консультация врача.*



- тяжелые формы сахарного диабета;
- тяжелые стадии гипертонической болезни, нарушения сердечного ритма;
- детский или подростковый возраст;
- прием дерматропных препаратов (например, роаккутан);
- грипп, ОРВИ, повышенная температура тела;
- при посещении солярия или в период активного солнечного загара.

***Во время процедуры следует избегать таких областей тела, как:***

- глаза;
- области сердца и щитовидной железы;
- области половых органов;
- области над силиконовыми имплантатами, области с гелевой контурной пластикой.



## Общие замечания

Принцип действия аппарата основан на генерации ультразвукового сигнала с частотой 30 кГц и гальванического тока.

### Выходная сила микротоков

CLEAN .....	300 – 450 мкА
MOIST .....	300 – 450 мкА
LIFT .....	50 – 80 мкА

Выходная мощность ультразвуковых колебаний до 2,5 Вт.

Материал лопатки аппарата — нержавеющая сталь.



## **Меры безопасности**

Аппарат ReadySkin Diva прост в использовании, однако необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с аппаратом.

### **Внимание**

- Аппарат рассчитан на питание от аккумулятора. Для зарядки используйте идущий в комплекте адаптер и кабель. Перед подключением кабеля к сети убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений изоляции.
- Проводите регулярную проверку состояния металлических аппликаторов аппарата. При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности лопатки дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки.
- Запрещается эксплуатация и хранение аппарата в местах с повышенной влажностью

(саунах, ваннных комнатах) и высокой температурой, под прямыми солнечными лучами.

- После внесения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и началом использования.
- Во время проведения процедуры с использованием ReadySkin Diva запрещается касаться или быть подключенным к другому электрооборудованию или заземлению.
- Запрещается работать лопаткой аппарата по сухой коже. Поддерживайте поверхность кожи постоянно увлажненной при помощи специальных средств (тоники, сыворотки, лосьонов или гелей) или чистой воды.
- Во время процедуры не рекомендуется многократная обработка лопаткой одного и того же участка кожи.
- Выключайте питание аппарата во время перерывов в работе, если их продолжительность

превышает 30 секунд.

- Не допускайте попадания воды или косметических средств внутрь аппарата, регулярно удаляйте влагу с поверхности металлической лопатки. Категорически запрещается погружать аппарат в жидкость.
- После использования аппарата в течение 20 минут необходимо сделать перерыв не менее чем на 30 минут, чтобы дать аппарату остыть.
- Не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
- Перед и после проведения процедуры очищайте рабочую поверхность лопатки ватным диском, пропитанным дезинфицирующим раствором (70 % раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода).
- Не нажимайте на кнопки управления аппаратом острыми предметами или кончиками ногтей.
- Храните аппарат вдали от нагревательных приборов



и в защищенном от солнечных лучей месте.

- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не используйте аппарат в помещениях с высокой влажностью и температурой.
- Использование аппарата допускается только в возрасте от 18 лет. Людям с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными возможностями перед использованием аппарата необходимо внимательно ознакомиться с устройством и возможными рисками.
- Не рекомендуется разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство. Сервисное обслуживание аппарата должно производиться только в специализированных центрах.
- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- В случае необходимости ремонта обратитесь в уполномоченный сервисный центр.




**Внимание**

*Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за последствия применения аппарата, вызванные нарушением текущих правил эксплуатации или несоблюдением методик проведения процедур.*



## Внешний вид и управление аппаратом

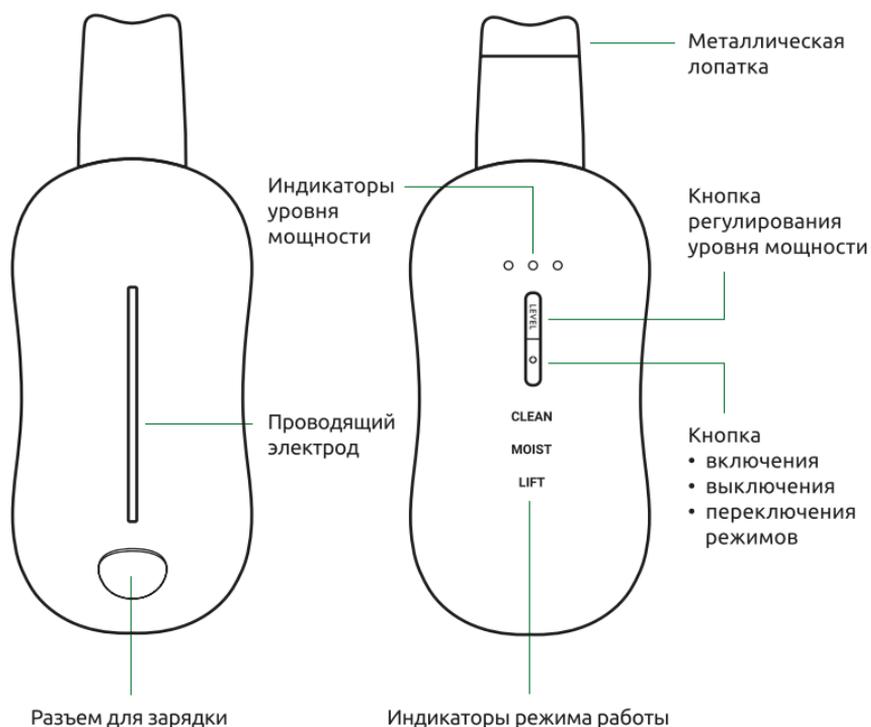

Силиконовая  
защитная крышка



Подставка

## Режимы работы аппарата

*В каждом режиме есть 3 уровня мощности для типов кожи с разной чувствительностью.*

«CLEAN» — режим для ультразвуковой чистки (пилинга) лица и глубокого очищения пор (дезинкрустации) (ion +).

«MOIST» — режим для питания и увлажнения кожи (ion -).

«LIFT» — режим для ультразвукового массажа и микротокового лифтинга.



## **Подготовка аппарата к работе**

### **Подготовка**

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что металлическая лопатка не имеет повреждений и острых сколов.

### **Зарядка аппарата**

Полностью зарядите устройство перед первым использованием.

*Прибор не предназначен для использования во время зарядки.*

### **От компьютера**

Включите компьютер и затем подсоедините прибор при помощи USB кабеля. Индикаторы уровней мощности начнут мигать. Это значит, что прибор заряжается. Остановите зарядку, когда индикаторы перестанут мигать и будут гореть непрерывно.

### **От розетки**

Подсоедините прибор с помощью кабеля к адаптеру (входят в ком-



плект), затем подсоедините адаптер в розетку. Индикаторы уровней мощности начнут мигать. Это значит, что прибор заряжается. Остановите зарядку, когда индикаторы перестанут мигать и будут гореть непрерывно.

### **Внимание**

1. *Аппарат включается нажатием кнопки питания. Режимы аппарата выбираются переключением кнопки питания. Регулировать уровень мощности воздействия можно переключением кнопки «LEVEL».*
2. *В аппарате предусмотрен таймер: аппарат автоматически отключается через 5 минут после включения.*
3. *Для повторного включения прибора снова нажмите на кнопку включения.*

### **Рекомендуемые производителем параметры адаптера питания:**

Выходной ток	1 А
Разъем выходной	USB, тип А
Входное напряжение	220 В
Выходное напряжение	5 В



## Проведение процедур

Перед проведением процедуры очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений.

Во время проведения процедур кожа лица не должна быть сухой, используйте специальные средства.

В процессе обработки кожи вы можете чувствовать легкое покалывание, вибрацию, легкий дискомфорт.

Немедленно остановите процедуру, если почувствуете боль, незамедлительно обратитесь к врачу.

Для достижения или поддержания лучшей эффективности косметического ухода аппарат следует использовать в течение длительного периода времени (курсами) в соответствии с рекомендациями, изложенными в данном руководстве.

Во время работы наблюдайте за ощущениями и состоянием кожи. При появлении дискомфорта следует прекратить работу.

*Бытовой аппарат ReadySkin Diva не является медицинским оборудованием и предназначен для ухода за кожей в домашних условиях.*



## Рекомендации по курсам процедур



*Для того, чтобы посмотреть видеоинструкцию, возьмите мобильный телефон с камерой.*

*1. Запустите программу для сканирования кода или наведите объектив камеры на код.*

*2. Приятного просмотра!*

- Основной курс процедур: 1-2 раза в неделю, курсом по 10-20 процедур.
- Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.

Курсы процедур проводят 1-2 раза в год.

Между основными курсами желательно проведение поддерживающих процедур один раз в месяц.

### **Внимание**

- 1. Не рекомендуется проходить по одному участку кожи аппаратом более 3-х раз во время одного сеанса.*
- 2. Общее время проведения процедуры не должно превышать 30 минут.*
- 3. Категорически запрещено направлять прибор к области щитовидной железы.*
- 4. Ни в коем случае не применяйте прибор для воздействия непосредственно в области глазниц.*



# Ультразвуковая чистка лица. Пилинг

## Принцип действия

Процедура деликатного очищения кожи лица.

За счет ультразвуковых волн, проникающих в верхние слои кожи, происходит отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, удаление поверхностных загрязнений и скоплений кожного сала. Ультразвуковая обработка способствует очищению, легкому массажу, регенерации в клетках и стимуляции процессов кислородно-восстановительного обмена. Происходит отшелушивание ороговевших клеток и обновление кожных покровов.

*Частота проведения процедуры: не более 1 раза в день.*

*3 уровня мощности для типов кожи с разной чувствительностью.*

## Режим аппарата: «CLEAN»

Во время работы касаться электрода на задней части корпуса устройства не нужно.

Аппарат автоматически отключается через 5 минут после включения.




## **Дополнительные препараты для проведения процедуры:**

*Рекомендуем использовать гель-дезинкрустант ReadySkin Care Ultraclean Gel.*

- гель для ультразвуковых процедур или очищенная вода/тоник.

## **Этапы проведения процедуры**

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на лицо гель для ультразвуковых процедур/термальную воду/тоник.
3. Снимите силиконовую защитную крышку с металлической лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите кнопку питания. Автоматически включится режим ультразвуковой чистки «CLEAN».
5. Кнопкой «LEVEL» установите необходимый уровень мощности воздействия. Начинать лучше с минимального уровня.
6. Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45 градусов к коже.

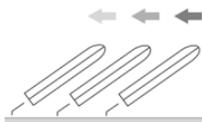

Лопатка смотрит вверх. Лезвие обращено внутрь



7. Проводите лопаткой против массажных линий лица (от периферии к носу).



8. Удаляйте излишки геля с лопатки при помощи ватного диска.
9. По завершению процедуры смойте остатки средства теплой чистой водой.

### ***Возможные ощущения во время процедуры***

Легкая вибрация. Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи и выбранного уровня мощности. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.

## Глубокое очищение пор. Дезинкрустация

### Принцип действия

*Частота проведения процедуры: не более 2-3 раз в неделю.*

*3 уровня мощности для типов кожи с разной чувствительностью.*

Процедура гальванической чистки кожи лица.

Метод основан на действии химической реакции, для запуска которой необходимо нанести на кожу щелочной гель-дезинкрустант, который помогает размягчить загрязнения в порах.

Под действием отрицательного электрода гель-дезинкрустант проникает глубоко в поры, взаимодействует с кожным салом, шлаками, токсинами и другими загрязнениями. Гальванический ток и гель образуют химическую реакцию, размягчая и омыляя загрязнения в порах и на поверхности кожи.

Под действием положительного электрода омыленные и размягченные загрязнения легко выводятся из пор, глубоко очищая кожу. После проведения процедуры дезинкрустации рекомендуем сделать процедуру



ионофореза (питания и увлажнения), чтобы под действием отрицательного иона произошло закрытие пор.

### **Режимы аппарата: «MOIST» (ion -) и «CLEAN» (ion +)**

Во время работы необходимо касаться электрода на задней части корпуса устройства.

Аппарат автоматически отключается через 5 минут после включения.

### **Дополнительные препараты для проведения процедуры:**

- гель для дезинкрустации;
- нейтральный тоник или чистая вода.

*Рекомендуем использовать гель-дезинкрустант ReadySkin Care Ultraclean Gel*

### **Этапы проведения процедуры**

Этап 1. Омыление кожного сала и загрязнений на поверхности кожи.


1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Распарьте кожу привычным способом для открытия пор.



3. Нанесите на кожу лица гель-дезинкрустант.
4. Накройте пленкой (полипропиленовой или целлофановой) участки лица с нанесенным гелем, обходя области глаз и губ.
5. Подождите 10-15 минут, пока гель разрыхляет эпидермис.
6. Снимите силиконовую защитную крышку с металлической лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
7. Нажмите кнопку питания аппарата. Переключением кнопки питания выберите режим «MOIST».
8. Кнопкой «LEVEL» установите необходимый уровень мощности воздействия. Начинать лучше с минимального уровня.
9. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцы руки были расположены на электроде на задней поверхности устройства.



10. Снимите пленку с одного участка лица и обработайте его плоской стороной лопатки по массажным линиям (от носа к периферии). Освободить сразу все лицо от пленки не рекомендуется во избежание высыхания геля и прекращения его действия на кожу.

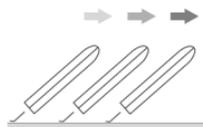

Лопатка обращена внутрь. Лезвие направленно вверх

11. Постепенно освобождайте от пленки и обрабатывайте остальные участки лица.
12. Когда обработаете всю кожу лица, переходите к следующему этапу.


Этап 2. Выведение загрязнений из пор и нейтрализация ошелачивания кожи.

1. Уберите остатки дезинкрустирующего средства с кожи лица ватным диском, смоченным чистой теплой водой.
2. Нанесите на кожу нейтральный тоник или очищенную воду (кожа не должна быть сухой).
3. Снимите силиконовую



защитную крышку с металлической лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.

4. Нажмите кнопку питания. Автоматически включится режим «CLEAN».
5. Кнопкой «LEVEL» установите необходимый уровень мощности воздействия. Начинать лучше с минимального уровня.
6. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцы руки были расположены на электроде на задней поверхности устройства.

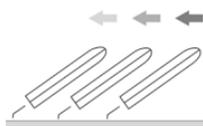

Лопатка смотрит вверх. Лезвие обращено внутрь

7. Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45 градусов к коже.
8. Обрабатывайте кожу лица острой стороной лопатки против массажных линий (от периферии к носу).



9. Периодически очищайте лопатку от загрязнений.

10. По завершении процедуры смойте остатки средства теплой чистой водой.

### ***Возможные ощущения во время процедуры***

Легкая вибрация и покалывание. Допустимо небольшое ощущение токов в области электрода. Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи и выбранного уровня мощности. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.



# Глубокое питание и увлажнение. Ионофорез

## Принцип действия

*Частота проведения процедуры: не более 2-3 раз в неделю.*

*3 уровня мощности для типов кожи с разной чувствительностью.*

Процедура глубокого питания и увлажнения кожи.

Процедура основана на проведении маломощного гальванического тока, который воздействует на верхние и средние слои дермы. Благодаря импульсу отрицательно заряженного электрода активные компоненты уходовых средств могут достигать более глубоких слоев дермы, повышая эффективность сывороток и кремов.

За счет такого воздействия косметические препараты лучше усваиваются, обеспечивая стойкое антивозрастное, увлажняющее и питательное действие.

## Режим аппарата: «MOIST» (ion -)

Во время работы необходимо касаться электрода на задней части корпуса устройства.

Аппарат автоматически отключается через 5 минут после включения.



## **Дополнительные препараты для проведения процедуры:**

- косметические средства для ухода за кожей лица с активными компонентами по типу кожи (сыворотки, эссенции и пр.);
- контактный гель для ультразвуковых процедур


*Расход уходовых средств меньше, а их эффективность выше.*

## **Этапы проведения процедуры**

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на кожу косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него – гель для ультразвуковых процедур
3. Снимите силиконовую защитную крышку с металлической лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите кнопку питания устройства. Переключением кнопки питания выберите режим «MOIST».
5. Кнопкой «LEVEL» установите необходимый уровень мощности воздействия. Начинать лучше с минимального уровня.



6. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцы руки были расположены на электроде на задней поверхности устройства.

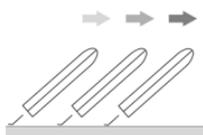

Лопатка обращена внутрь. Лезвие направленно вверх

7. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже.

8. Проводите лопаткой по массажным линиям лица (от носа к периферии).



9. Удалите излишки средства с лопатки ватным диском.

10. По завершении процедуры смойте остатки геля теплой чистой водой.

### **Возможные ощущения во время процедуры**

Еще заметное покалывание и вибрация. Допустимо небольшое ощущение токов в области электрода. Интенсивность ощущений зависит от чувствительности вашей кожи и выбранного уровня мощности. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.



# Ультразвуковой массаж. Лифтинг

## Принцип действия

Ультразвуковой массаж обеспечивает проникновение косметических средств в глубокие слои кожи для их лучшего воздействия. В ходе процедуры запускается регенерация, стимулируется выработка эластина и коллагена.

*Частота проведения процедуры: не более 1 раза в день.*

*3 уровня мощности для типов кожи с разной чувствительностью.*

## Режим аппарата: «LIFT»

Во время работы касаться электрода на задней части корпуса устройства не нужно.

Аппарат автоматически отключается через 5 минут после включения.

## Дополнительные препараты для проведения процедуры:

- контактный гель для аппаратных процедур (например, гель для УЗ процедур);
- косметические средства для ухода за кожей лица



с активными компонентами по типу кожи (необязательно).

## Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на кожу косметическое средство для ухода за кожей лица.
3. Снимите силиконовую защитную крышку с металлической лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите кнопку питания устройства. Переключением кнопки питания выберите режим «LIFT».
5. Кнопкой «LEVEL» установите необходимый уровень мощности воздействия. Начинать лучше с минимального уровня.



6. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже.
7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица (от носа к периферии).



8. Удалите излишки средства с лопатки ватным диском.
9. По завершении процедуры смойте остатки средства теплой чистой водой.

### ***Возможные ощущения во время процедуры***

Легкая вибрация. Интенсивность ощущений зависит от чувствительности вашей кожи и выбранного уровня мощности. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.



# Микротоковый лифтинг

## Принцип действия

*Частота проведения процедуры: не более 2-3 раз в неделю.*

*3 уровня мощности для типов кожи с разной чувствительностью.*

Микротоки воздействуют на ткани лица, способствуя выведению избыточной жидкости, устранению отеков, укреплению стенок сосудов, нормализации кровообращения и лимфотока. Микротоки совместно с ультразвуковыми колебаниями активизируют работу клеток, улучшают проникновение активных компонентов кремов и сывороток в глубокие слои эпидермиса.

## Режим аппарата: «LIFT»

Во время работы необходимо касаться электрода на задней части корпуса устройства.

Аппарат автоматически отключается через 5 минут после включения.

## Дополнительные препараты для проведения процедуры:

- контактный гель для аппаратных процедур (например, гель для УЗ или микротоковых процедур);
- косметические средства для

*Рекомендуем использовать контактный токопроводящий гель ReadySkin Care Lifting Gel.*




ухода за кожей лица  
с активными компонентами  
по типу кожи (необязательно).

### **Этапы проведения процедуры**

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него контактный гель для аппаратных процедур. Уходовые средства во время процедуры применять необязательно — можно просто использовать гель.
3. Снимите силиконовую защитную крышку с металлической лопатки. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите кнопку питания устройства. Переключением кнопки питания выберите режим «LIFT».
5. Кнопкой «LEVEL» установите необходимый уровень мощности воздействия. Начинать лучше с минимального уровня.
6. Возьмите в руку аппарат



таким образом, чтобы пальцы руки были расположены на электроде на задней поверхности устройства.

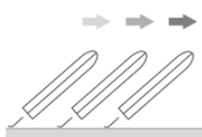

Лопатка обращена  
внутрь. Лезвие  
направленно вверх

7. Проводите плоской стороной лопатки по массажным линиям лица (от носа к периферии).

8. Удаляйте излишки средства с лопатки ватным диском.

9. По завершении процедуры смойте остатки средства теплой чистой водой.



### ***Возможные ощущения во время процедуры***

Вибрация, а также допустимо покалывание кожи и легкое подергивание лицевых мышц за счет стимуляции микротоками, а также небольшое ощущение токов в области электрода. Интенсивность ощущений будет зависеть от чувствительности кожи и выбранного уровня мощности. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.



## **Чистка и обслуживание аппарата**

Перед началом и по окончании каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку металлической лопатки прибора при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода).

Периодически протирайте корпус прибора мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством (прибор при этом должен быть выключен).

### **Внимание**

*Антисептическое средство не должно попадать внутрь пластикового корпуса прибора. Используйте салфетки с умеренным количеством жидкости.*

## **Запрещается**

- Погружать прибор в жидкость.
- Использовать для протирки аппликаторов и корпуса агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем.
- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию.



## Возможные неполадки и способы их устранения

### Неисправность

### Решение

Прибор не включается

Нет заряда.  
Зарядите устройство

Прибор нагревается во время использования

Это не является неисправностью, потому что во время работы прибора осуществляется выработка тепла.

После использования аппарата в течение 20 минут необходимо сделать перерыв не менее чем на 30 минут, чтобы дать аппарату остыть

После зарядки устройства прибор не включается

Недостаточно заряжен аккумулятор. Срок службы аккумулятора истек

Прибор выключается во время процедуры

С целью безопасного использования в приборе установлено автоматическое отключение через 5 минут на всех режимах

*Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера*

*по телефону  
8 800 755-56-29*

*или e-mail  
garotdel@mail.ru*



## Технические характеристики

Модель	Diva
Частота ультразвука	30 кГц
Выходная мощность ультразвуковых колебаний	до 2,5 Вт
Выходное напряжение адаптера	5 В
Входное напряжение адаптера	220 В
Сила тока адаптера	1 А
Время полной зарядки	3 ч
Размеры аппарата	158×58×28 мм
Параметры АКБ	800 мАч / 3,7 В




# Комплектация




Аппарат для уз-чистки  
ReadySkin Diva



Силиконовая  
защитная крышка

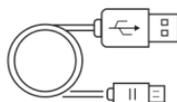


Кабель USB Type C

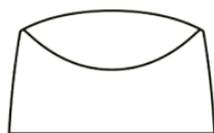

Подставка  
для аппарата




Руководство  
по эксплуатации

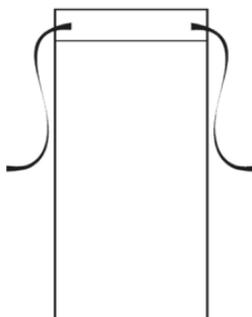

Чехол



Салфетка

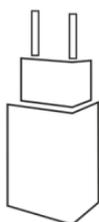

Зарядное устройство  
(адаптер)

*Комплектация и внешний вид могут  
быть изменены производителем*



ReadySkin

## Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в помещении при температуре воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха до 65%.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

## Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

## Сертификация и гарантия

ReadySkin Diva соответствует требованиям TP TC 020 / 2011, 004 / 2011 и TP EAЭС 037 / 2016.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой

*Гарантийный период на изделие ReadySkin Diva составляет 12 месяцев с даты получения товара.*



потребителю в комплекте с изделием;

- отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

## Надлежащая утилизация продукта

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.



Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местными органами власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.



**Производитель**

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD.

Сделано в Китае

**Адрес завода-изготовителя**

Building 11, Hekeng Industrial Zone, Liulian community,  
Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, 518117  
China

**Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: Россия, 195267,  
г. Санкт-Петербург, Просвещения пр-т,  
дом № 86, корпус 1, офис 12-Н

**Телефон**

8 800 775-56-29 звонок по России бесплатный

**Дата производства**

1 кв. 2024 г.





# Diva

Бет терісін күтуге  
арналған аппарат



ReadySkin

Пайдалану  
жөніндегі нұсқаулық

ru

kz



# Мазмұны

Кіріспе	50
Қолдануға қарсы көрсеткіштер мен шектеулер	51
Жалпы ескертпелер	53
Қауіпсіздік шаралары	54
Сыртқы түрі және аппаратты басқару	58
Аппараттың жұмыс режимдері	59
Аппаратты жұмысқа дайындау	60
Емшараларды жүргізу	62
Бетті ультрадыбыстық тазалау	64
Тері тесігін терең тазарту	67
Терең нәрлендіру және ылғалдандыру	73
Ультрадыбыстық массаж	76
Микротокты лифтинг	79
Аппаратты тазарту және қызмет көрсету	83
Ықтимал ақаулар мен оларды жою тәсілдері	85
Техникалық сипаттамалары	86
Жиынтықтамасы	87
Сақтау, өткізу, тасымалдау және кәдеге жарату қағидалары	88

## Кіріспе

*ReadySkin Diva тұрмыстық аппараты медициналық жабдыққа жатпайды. Медициналық мақсатта қолдануға арналмаған.*

Бет терісін ультрадыбыстық тазалауға және күтуге арналған ReadySkin Diva аппаратын сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз! Аппарат үй жағдайында теріні күтуге арналған және өзіне 5 функцияны біріктіреді: ультрадыбыстық пилинг, тері саңылауларын терең тазарту, қоректендіру және ылғалдандыру, ультрадыбыстық массаж және микротокты лифтинг.

ReadySkin Diva аппараты ультрадыбысты және микротокты терапияны пайдалана отырып, заманауи тиімді косметологиялық әдістердің негізінде бет терісіне кешенді және ұқыпты күтім жасайды және жұмыс қуатының деңгейін реттеу мүмкіндігі бар.

ReadySkin Diva аппаратын пайдалану өте оңай, алайда осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият зерделеп, аппаратпен жұмыс істеу жөніндегі онда көрсетілген талаптарды қадағалау қажет.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пайдаланар алдында «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз.



## Қолдануға қарсы көрсеткіштер мен шектеулер

Аспапты келесі жағдайларда пайдалануға тыйым салынады:

- жүктілік және лактация;
- жіті жұқпалы және вирустық аурулар;
- онкологиялық аурулар;
- жүрек-тамыр жүйесінің аурулары;
- жүрекширатқыштың болуы;
- тері және дәнекер тінінің аурулары (мысалы, склеродерма, қызыл жегі);
- психикалық аурулар;
- өршу сатысындағы созылмалы дерматиттер мен дерматоздар;
- өршу сатысында безеу;
- тыртық түйіннің пайда болуына бейімділігі;
- өңдеу саласында силикон импланттарының, косметологиялық жіптердің, металл импланттардың болуы;
- қант диабетінің ауыр түрлері;

*Емшараларды жүргізу алдында дәрігер-дерматологпен алдын ала кеңесу ұсынылады.*



- гипертониялық аурудың ауыр кезеңдері, жүрек ырғағының бұзылуы;
- бала немесе жасөспірім жасы;
- дерматотропты препараттарды қабылдау (мысалы, роаккутан);
- тұмау, ЖРВЖ, дененің жоғары температурасы;
- солярийге барғанда немесе белсенді күнге күйген кезде.

### **Емшара кезінде дененің келесі аймақтарынан аулақ болу керек:**

- көздер;
- жүрек және қалқанша безінің аймақтары;
- жыныс аймақтары;
- силикон имплантаттарының үстіндегі аймақтар, гельді контурлы пластикасы бар аймақтар.

## Жалпы ескертпелер

Аппараттың жұмыс қағидаты жиілігі 30 кГц ультрадыбыстық сигнал мен гальваникалық токтың генерациясына негізделген.

### Микротоктардың шығыс күші

CLEAN .....	300 – 450 мкА
MOIST .....	300 – 450 мкА
LIFT .....	50 – 80 мкА

Ультрадыбыстық тербелістердің шығыс қуаты – 2,5 Вт дейін.

Аппарат қалақшасының материалы – тот баспайтын болат.



## Қауіпсіздік шаралары

ReadySkin Diva аппаратын пайдалану өте оңай, алайда пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият зерделеу және аппаратпен жұмыс істеу жөніндегі онда мазмұндалған талаптарды сақтау қажет.

## Назар аударыңыз

- Аппарат аккумулятордан қуат алуға есептелген. Зарядтау үшін жиынтықтамаға кіретін бейімдегіш пен кабелін мен пайдаланыңыз. Кабельді желіге қоспас бұрын, кабельде оқшаулағыштың көрінетін зақымданудың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Аппараттың металл аппликаторларының күйін үнемі тексеріп отырыңыз. Қалақшаның жұмыс бетінде өткір жиектер немесе терең сызаттар табылған жағдайда, аппаратты жылтырату көмегімен ақаулар жойылғанға дейін одан әрі пайдалануға тыйым салынады.
- Аппаратты ылғалдылығы жоғары (сауналар, жуынатын бөлмелер) және температурасы жоғары,



тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде пайдалануға және сақтауға тыйым салынады.

- Аппаратты суықтан жылы үй-жайға енгізгеннен кейін, аппаратты желіге қосып, пайдалануды бастамас бұрын кем дегенде 2 сағат күту керек.
- ReadySkin Diva қолдана отырып емшара жүргізу барысында басқа электр жабдықтарына немесе жерлендіруге тиюге немесе қосылуға тыйым салынады.
- Аппараттың қалақшасымен құрғақ теріде жұмыс істеуге тыйым салынады. Арнайы өнімдердің көмегімен терінің бетін үнемі ылғалдандырып отырыңыз (тониктер, сарысулар, лосьондар немесе гельдер) немесе таза су.
- Емшаралар кезінде терінің белгілі бір аймағын қалақшамен бірнеше рет өңдеуге болмайды.
- Егер олардың ұзақтығы 30 секундтан асса, жұмыс уақытындағы үзіліс кезінде аппараттың қуатын өшіріңіз.



- Судың немесе косметикалық өнімдердің аппараттың ішіне енуіне жол бермеңіз, металл қалақшаның беттерінен ылғалды үнемі сүртіп отырыңыз. Аппаратты сұйықтыққа батыруға қатаң тыйым салынады.
- Аппаратты 20 минуттан артық қолданғаннан кейін, аппаратты салқындату үшін кем дегенде 30 минут үзіліс жасау керек.
- Қосылған аппаратты қараусыз қалдырмаңыз.
- Емшарадан бұрын және кейін қалақшаның жұмыс бетін залалдандырғыш ерітіндімен (спирттің 70% ерітіндісі, хлоргексидин, сутегінің асқын тотығы) тазалаңыз.
- Аппаратты басқару батырмасын өткір заттармен немесе тырнақтардың ұштарымен баспаңыз.
- Аппаратты жылыту құрылғыларынан алыс және күн сәулесінен қорғалған жерде сақтаңыз.
- Аппаратты әрқашан балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.




- Аппаратты ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Аппаратты тек 18 жастан бастап пайдалануға рұқсат етіледі. Физикалық, сенсорлық және психикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар аппаратты қолданар алдында құрылғымен және ықтимал тәуекелдермен мұқият танысуы керек.
- Құрылғыны бөлшектеуге немесе өз бетінше жөндеуге болмайды. Аппаратқа сервистік қызмет көрсету тек мамандандырылған орталықтарда жүргізілуі тиіс.
- Алғашқы қолданар алдында құрылғыны толық қуаттаңыз.
- Жөндеу қажет болса, уәкілетті сервистік орталыққа жүгініңіз.

### **Назар аударыңыз**

*Өндіруші-фирма және сауда ұйымы ағымдағы пайдалану қағидаларын бұзудан немесе емшараларды жүргізу әдістемелерін сақтамаудан туындаған аппаратты қолдандудың салдары үшін ешқандай жауапкершілік жүктемейді.*



# Сыртқы түрі және аппараты басқару

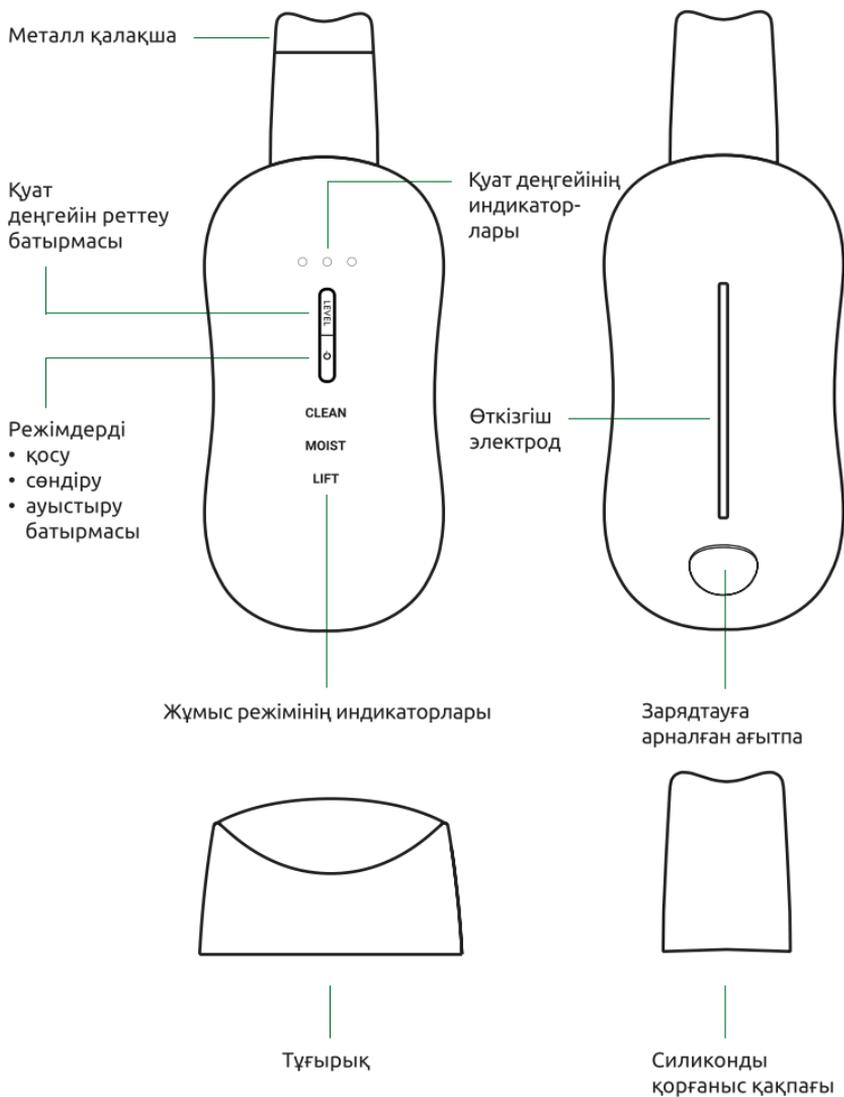

## Аппараттың жұмыс режимдері

«CLEAN» — бетті ультрадыбыстық тазарту (пилинг) режимі. және тері саңылауларын терең тазарту (дезинкрустация) (ion +).

«MOIST» — теріні нәрлендіруге және ылғалдандыруға арналған режим (ion -).

«LIFT» — ультрадыбыстық массаж және микротоқты лифтинг режимі.

*Әрбір режимде сезімталдығы әртүрлі тері түрлеріне арналған ток қуатының 3 деңгейі бар.*



## Аппаратты жұмысқа дайындау

### Дайындық

Аппаратта механикалық зақымданудың жоқтығын көзбен шолып тексеруден өткізіңіз. Металл қалақшаның зақымданбағанына және өткір жарықшақтардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

### Аппаратты зарядтау

*Аспап зарядтау кезінде пайдалануға арналмаған.*

Алғашқы қолданар алдында құрылғыны толық қуаттаңыз.

### Компьютерден

Компьютерді қосыңыз, содан кейін аспапты USB кабелі көмегімен қосыңыз. Қуат деңгейінің индикаторлары жыпылықтай бастайды. Бұл аспаптың зарядталып жатқанын білдіреді. Индикаторлар жыпылықтауды тоқтатып, үздіксіз жанған кезде зарядтауды тоқтатыңыз.

### Розеткадан

Аспапты кабель арқылы бейімдегішке



қосыңыз (жиынтыққа кіреді), содан кейін бейімдегішті розеткаға қосыңыз. Қуат деңгейінің индикаторлары жыпылықтай бастайды. Бұл аспаптың зарядталып жатқанын білдіреді. Индикаторлар жыпылықтауды тоқтатып, үздіксіз жанған кезде зарядтауды тоқтатыңыз.

### **Назар аударыңыз**

1. *Аппарат қуат батырмасын басу арқылы қосылады. Аппарат режимдері қуат батырмасын ауыстырып қосу арқылы таңдалады. «LEVEL» батырмасын ауыстыру арқылы әсер ету қуатының деңгейін реттеуге болады.*
2. *Аппаратта таймер көзделген: аппарат қосқаннан кейін 5 минуттан соң автоматты түрде өшеді.*
3. *Аспапты қайта қосу үшін қосу батырмасын қайтадан басыңыз.*

### **Өндіруші ұсынған қуат бейімдегішінің параметрлері:**

Шығыс тоғы	1 A
Шығыс ағытпасы	USB, Type A
Кіріс кернеуі	220 B
Шығыс кернеуі	5 B



*ReadySkin Diva тұрмыстық аппараты медициналық жабдық болып табылмайды және үй жағдайында теріні күтуге арналған.*

## Емшараларды жүргізу

Емшараны жүргізер алдында теріні макияждан және сыртқы ластанулардан тазартыңыз.

Емшаралар кезінде бет терісі құрғақ болмауы керек, арнайы өнімдерді қолданыңыз.

Теріні өңдеу процесінде сіз аздап шаншу, діріл, жеңіл жайсыздық сезінуіңіз мүмкін.

Егер ауырсынуды сезінсеңіз, емшараны дереу тоқтатыңыз, дереу дәрігерге қаралыңыз.

Косметикалық күтімнің үздік тиімділігіне қол жеткізу немесе қолдау үшін аппаратты осы нұсқаулықтағы ұсыныстарға сәйкес ұзақ уақыт бойы (курстармен) пайдалану керек.

Жұмыс кезінде терінің сезімі мен күйін бақылаңыз. Егер жайсыздық пайда болса, жұмысты тоқтату керек.



## Емшара курстары бойынша ұсыныстар

- Емшаралардың негізгі курсы: Аптасына 1-2 рет, 10-20 емшарадан тұратын курс.
- Қолдау курсы: айына 1 рет.



Емшара курстары жылына 1-2 рет өткізіледі.

Негізгі курстар арасында айына бір рет қолдау емшараларын жүргізген жөн.

### Назар аударыңыз

1. Бір сеанс кезінде аппаратпен терінің бір аймағынан 3 реттен артық өту ұсынылмайды.
2. Емшара жүргізудің жалпы уақыты 30 минуттан аспауы керек.
3. Аспапты қалқанша безінің аймағына бағыттауға қатаң тыйым салынады.
4. Ешқандай жағдайда көз ұясы аймағында тікелей әсер ету үшін аспапты қолданбаңыз.

*Бейненұсқаулықты көру үшін камерасы бар ұялы телефонды алыңыз.*

*Кодты сканерлеу бағдарламасын іске қосыңыз немесе камера объективін кодтың үстіне апарыңыз.*

*Жақсылап тамашалаңыз!*



## Бетті ультрадыбыстық тазалау. Пилинг

### Әрекет ету қағидаты

Бет терісін нәзік тазарту емшарасы.

Терінің жоғарғы қабаттарына енетін ультрадыбыстық толқындардың арқасында эпидермистің мүйізденген жасушалары қабыршақтанып, беткі ластаушы заттар мен майдың жиналуы жойылады. Ультрадыбыстық өңдеу тазартуға, жеңіл массаж жасауға, жасушалардағы оттегі-тотықсыздану алмасу процесін және қалпына келтіруді ынталандыруға ықпал етеді. Мүйізделген жасушалардың қабыршақтануы және терінің жаңаруы байқалады.

### Аппарат режимі: «CLEAN»

Жұмыс кезінде құрылғы корпусының артқы жағындағы электродқа қол тигізудің қажеті жоқ.

Аппарат қосылғаннан кейін 5 минуттан соң автоматты түрде өшеді.

*Емшараны жүргізу жиілігі: күніне 1 реттен көп емес.*

*Әр түрлі сезімталдығы бар тері түрлеріне арналған ток қуатының 3 деңгейі.*




## Емшараны жүргізуге арналған қосымша препараттар:

- ультрадыбыстық емшараларға арналған гель немесе тазартылған су/тоник.

*ReadySkin Care  
Ultraclean Gel  
гель-дезин-  
крустантын  
қолдануға кеңес  
береміз.*


## Емшараны жүргізу кезеңдері

1. Бет терісін мұқият тазалаңыз.
2. Ультрадыбыстық емшараға арналған гелді/термалық суды/тоникті бетіңізге жағыңыз.
3. Металл қалақшадан силиконды қорғаныс қақпағын алыңыз. Қалақшаны антисептикалық өніммен өңдеңіз.
4. Қуат батырмасын басыңыз. «CLEAN» ультрадыбыстық тазалау режимі автоматты түрде қосылады.
5. «LEVEL» батырмасымен әсер ету қуатының қажетті деңгейін орнатыңыз. Ең төменгі деңгейден бастаған дұрыс.
6. Аппараттың металл қалақшасын суретте көрсетілгендей теріге 45° бұрышпен қойыңыз.

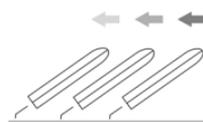

Қалақша жоғары қарайды. Жүзі ішке қарайды

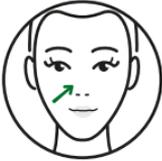

7. Қалақшаны беттің массаж сызықтарына қарсы жылжытыңыз (перифериядан мұрынға қарай). 
8. Мақталы жастықшаның көмегімен қалақшадан гель қалдықтарын кетіріңіз.
9. Емшара аяқталғаннан кейін өнімнің қалдықтарын жылы, таза сумен шайып кетіріңіз.

### **Емшара кезінде ықтимал сезімдер**

Жеңіл діріл. Сезінудің қарқындылығы терінің сезімталдығына және таңдалған қуат деңгейіне байланысты болады. Емшарадан кейін терінің аздап қызаруына жол беріледі.

## Тері тесігін терең тазарту. Дезинкрустация

### Әрекет ету қағидаты

Бет терісін гальваникалық тазарту процедурасы.

Бұл әдістеме химиялық реакцияның әсеріне негізделген, оны іске қосу үшін теріге сілтілі гель-дезинкрустант жағу керек, бұл тері тесігіндегі кірді жұмсартуға көмектеседі.

Теріс электродтың әсерінен гель-дезинкрустант тері тесігіне терең еніп, тері майымен, қождармен, токсиндермен және басқа ластаушы заттармен өзара әрекеттеседі. Гальваникалық ток пен гель тері тесігі мен тері бетіндегі кірді жұмсарту және сабындау арқылы химиялық реакция түзеді.

Сабындалған және жұмсартылған ластанулар оң электродтың әсерімен тері саңылауларынан оңай шығарылып, теріні терең тазартады. Дезинкрустация процедурасын жүргізгеннен кейін теріс

*Емшараны жүргізу жиілігі: аптасына 2-3 реттен көп емес.*

*Әр түрлі сезімталдығы бар тері түрлеріне арналған ток қуатының 3 деңгейі.*



ионның әсерінен тері саңылауларының жабылуы үшін ионофорез процедурасын (нәрлендіру және ылғалдандыру) жасауды ұсынамыз.

### **Аппарат режимдері: «MOIST» (ion –) және «CLEAN» (ion +)**

Жұмыс кезінде құрылғы корпусының артқы жағындағы электродқа қол тигізу керек.

Аппарат қосылғаннан кейін 5 минуттан соң автоматты түрде өшеді.

### **Емшараны жүргізуге арналған қосымша препараттар:**

- дезинкрустацияға арналған гель
- бейтарап тоник немесе таза су.

*ReadySkin Care  
Ultraclean Gel  
гель-дезин-  
крустантын  
қолдануға кеңес  
береміз*

### **Емшараны жүргізу кезеңдері**


**1-кезең. Тері бетіндегі тері майы мен ластануларды сабындау.**

1. Бет терісін мұқият тазалаңыз.



2. Тері саңылауларын ашу үшін теріні әдеттегідей буландырыңыз.
3. Бет терісіне гель-дезинкрустант жағыңыз.
4. Үлдірмен (полипропилен немесе целлофан) көздің және еріннің айналасын айналып өтіп, гель жағылған беттің аймақтарын жабыңыз.
5. Гель эпидермисті босаңдатқанша 10–15 минут күтіңіз.
6. Металл қалақшадан силиконды қорғаныс қақпағын алыңыз. Қалақшаны антисептикалық өніммен өңдеңіз.
7. Аппараттың қуат батырмасын басыңыз. Қуат батырмасын ауыстырып қосу арқылы «MOIST» режимін таңдаңыз.
8. «LEVEL» батырмасымен әсер ету қуатының қажетті деңгейін орнатыңыз. Ең төменгі деңгейден бастаған дұрыс.
9. Аппаратты қолыңыздың саусақтары құрылғының артқы жағындағы электродта орнала-



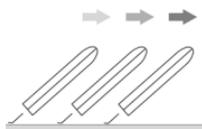

Қалақша жоғары қарайды. Жүзі ішке қарайды

сатындай етіп ұстаңыз.

10. Бетіңіздің бір аймағынан үлдірді алып тастаңыз және оны қалақшаның жайпақ жағымен массаж сызықтары бойымен өңдеңіз (мұрыннан шетке қарай). Гельдің кебуіне жол бермес үшін және оның теріге әсерін тоқтатпау үшін бүкіл бетті пленкадан бірден босату ұсынылмайды.




11. Біртіндеп үлдірден босатыңыз және беттің қалған аймақтарын өңдеңіз.
12. Бүкіл бет терісін өңдеген соң келесі кезеңге өтіңіз.


## 2-кезең. Тері саңылауларынан ластануларды кетіру және терінің сілтіленуін бейтараптандыру.

1. Бет терісіндегі дезинкрустаттайтын құралдың қалдықтарын таза, жылы суға малынған мақталы дискімен кетіріңіз.
2. Теріңізге бейтарап тоник немесе тазартылған су жағыңыз (тері

- құрғақ болмауы керек).
3. Металл қалақшадан силиконды қорғаныс қақпағын алыңыз. Қалақшаны антисептикалық өніммен өңдеңіз.
  4. Қуат батырмасын басыңыз. «CLEAN» режимі автоматты түрде қосылады.
  5. «LEVEL» батырмасымен әсер ету қуатының қажетті деңгейін орнатыңыз. Ең төменгі деңгейден бастаған дұрыс.
  6. Аппаратты қолыңыздың саусақтары құрылғының артқы жағындағы электродта орналастындай етіп ұстаңыз.
  7. Аппараттың металл қалақшасын суретте көрсетілгендей теріге  $45^\circ$  бұрышпен қойыңыз.
  8. Бет терісін қалақшаның өткір жағымен массаж сызықтарына қарсы өңдеңіз (перифериядан мұрынға қарай).
  9. Қалақшаны мезгіл-мезгіл кірден тазалаңыз.
  10. Емшара аяқталғаннан кейін

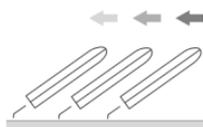

Қалақша жоғары қарайды. Жүзі ішке қарайды

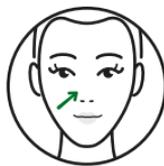

өнімнің қалдықтарын жылы,  
таза сумен шайып кетіріңіз.

## **Емшара кезінде ықтимал сезімдер**

Жеңіл діріл және шаншу. Электродтар аймағында токтардың шамалы сезілуіне жол беріледі. Сезінудің қарқындылығы терінің сезімталдығына және таңдалған қуат деңгейіне байланысты болады. Емшарадан кейін терінің аздап қызаруына жол беріледі.



# Терең нәрлендіру және ылғалдандыру. Ионофорез

## Әрекет ету қағидаты

Теріні терең нәрлендіру және ылғалдандыру емшарасы.

Емшара нақтерінің жоғарғы және орта қабаттарына әсер ететін төмен қуатты гальваникалық ток өткізуге негізделген. Теріс зарядталған электрод импульсінің арқасында күтім өнімдерінің белсенді компоненттері нақтерінің терең қабаттарына жетіп, сарысулар мен кремдердің тиімділігін арттырады.

Осы әсердің арқасында косметикалық препараттар қартаюға қарсы, ылғалдандыратын және нәрлендіретін әсерді қамтамасыз ете отырып, жақсы сіңеді.

*Емшараны жүргізу жиілігі: аптасына 2-3 реттен көп емес.*

*Әр түрлі сезімталдығы бар тері түрлеріне арналған ток қуатының 3 деңгейі.*

*Күтім құралдарының шығыны аз, ал олардың тиімділігі жоғары.*

## Аппарат режимі: «MOIST» (ion –)

Жұмыс кезінде құрылғы корпусының артқы жағындағы электродқа қол тигізу керек.

Аппарат қосылғаннан кейін 5 минуттан соң автоматты түрде өшеді.




## **Емшараны жүргізуге арналған қосымша препараттар:**

- тері типі бойынша белсенді компоненттері бар бет терісіне арналған косметикалық өнімдер (сарысулар, эссенциялар және т. б.);
- ультрадыбыстық емшараға арналған гель.

## **Емшараны жүргізу кезеңдері**

1. Бет терісін мұқият тазалаңыз.
2. Бет терісіне арналған косметикалық өнімді, ал оның үстіне ультрадыбыстық емшараға арналған гельді жағыңыз.
3. Металл қалақшадан силиконды қорғаныс қақпағын алыңыз. Қалақшаны антисептикалық өніммен өңдеңіз.
4. Құрылғының қуат батырмасын басыңыз. Қуат батырмасын ауыстырып қосу арқылы «MOIST» режимін таңдаңыз.
5. «LEVEL» батырмасымен әсер ету қуатының қажетті деңгейін орнатыңыз. Ең төменгі деңгейден бастаған дұрыс.

6. Аппаратты қолыңыздың саусақтары құрылғының артқы жағындағы электродта орналасатындай етіп ұстаңыз.
7. Аппараттың металл қалақшасын жалпақ жағымен теріге қарай қойыңыз.
8. Қалақшаны беттің массаж сызықтары бойымен жылжытыңыз (мұрыннан шетке қарай).
9. Мақталы жастықшамен қалақшадан өнімнің қалдықтарын кетіріңіз.
10. Гель қалдықтарын жылы сумен шайып кетіріңіз.

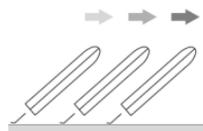

Қалақша жоғары қарайды. Жүзі ішке қарайды



## Емшара кезінде ықтимал сезімдер

Әрең байқалатын шаншу және діріл. Электродтар аймағында токтардың шамалы сезілуіне жол беріледі. Сезінудің қарқындылығы теріңіздің сезімталдығына және таңдалған қуат деңгейіне байланысты болады. Емшарадан кейін терінің аздап қызаруына жол беріледі.



# Ультрадыбыстық массаж. Лифтинг

*Емшараны жүргізу жиілігі: күніне 1 реттен көп емес.*

*Әр түрлі сезімталдығы бар тері түрлеріне арналған ток қуатының 3 деңгейі.*

## Әрекет ету қағидаты

Ультрадыбыстық массаж косметикалық құралдың терінің терең қабаттарына жақсы әсер ету үшін енуін қамтамасыз етеді. Емшара барысында қалпына келтіру басталады, эластин мен коллаген өндірісі ынталандырылады.

## Аппарат режимі: «LIFT»

Жұмыс кезінде құрылғы корпусының артқы жағындағы электродқа қол тигізудің қажеті жоқ.

Аппарат қосылғаннан кейін 5 минуттан соң автоматты түрде өшеді.

## Емшараны жүргізуге арналған қосымша препараттар:


- аппараттық емшараларға арналған жанаспалы гель (мысалы, УД емшараларға арналған гель);
- тері типі бойынша белсенді



компоненттері бар бет терісін күтуге арналған косметикалық құралдар (міндетті емес).

## Емшараны жүргізу кезеңдері

1. Бет терісін мұқият тазалаңыз.
2. Бет терісіне арналған косметикалық өнімді теріге жағыңыз.
3. Металл қалақшадан силиконды қорғаныс қақпағын алыңыз. Қалақшаны антисептикалық өніммен өңдеңіз.
4. Құрылғының қуат батырмасын басыңыз. Қуат батырмасын ауыстырып қосу арқылы «LIFT» режимін таңдаңыз.
5. «LEVEL» батырмасымен әсер ету қуатының қажетті деңгейін орнатыңыз. Ең төменгі деңгейден бастаған дұрыс.
6. Аппараттың металл қалақшасын жалпақ жағымен теріге қарай қойыңыз.
7. Қалақшаны беттің массаж сызықтары бойымен жылжытыңыз (мұрыннан

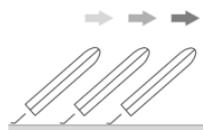

Қалақша жоғары қарайды. Жүзі ішке қарайды



шетке қарай).

8. Мақталы жастықшамен қалақшадан өнімнің қалдықтарын кетіріңіз.
9. Емшара аяқталғаннан кейін өнімнің қалдықтарын жылы, таза сумен шайып кетіріңіз.

### **Емшара кезінде ықтимал сезімдер**

Жеңіл діріл. Сезінудің қарқындылығы теріңіздің сезімталдығына және таңдалған қуат деңгейіне байланысты болады. Емшарадан кейін терінің аздап қызаруына жол беріледі.



# Микротокты лифтинг

## Әрекет ету қағидаты

Микротоктар бет тіндеріне әсер етіп, артық сұйықтықты кетіруге, ісінуді жоюға, тамыр қабырғаларын нығайтуға, қан айналымы мен лимфа ағынын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Микротоктар ультрадыбыстық тербелістермен бірге жасушалардың жұмысын белсендіреді, кремдер мен сарысулардың белсенді компоненттерінің эпидермистің терең қабаттарына енуін жақсартады.

*Емшараны жүргізу жиілігі: аптасына 2-3 реттен көп емес.*

*Әр түрлі сезімталдығы бар тері түрлеріне арналған ток қуатының 3 деңгейі.*

## Аппарат режимі: «LIFT»

Жұмыс кезінде құрылғы корпусының артқы жағындағы электродқа қол тигізу керек.

Аппарат қосылғаннан кейін 5 минуттан соң автоматты түрде өшеді.



## Емшараны жүргізуге арналған қосымша препараттар:

*ReadySkin Care Lifting Gel жанаспалы өткізгіш гельді қолдануды ұсынамыз.*


- аппараттық емшараларға арналған жанаспалы гель (мысалы, УД немесе микротокты емшараларға арналған гель);
- тері типі бойынша белсенді компоненттері бар бет терісін күтуге арналған косметикалық құралдар (міндетті емес).

## Емшараны жүргізу кезеңдері

1. Бет терісін мұқият тазалаңыз.
2. Бет терісіне арналған косметикалық өнімді, ал оның үстіне аппараттық емшараға арналған контактілі гельді жағыңыз. Емшара кезінде күтім өнімдерін қолдану міндетті емес – жай ғана гельді пайдалануға болады.
3. Металл қалақшадан силиконды қорғаныс қақпағын алыңыз. Қалақшаны антисептикалық өніммен өңдеңіз.
4. Құрылғының қуат батырмасын басыңыз. Қуат батырмасын ауыстырып қосу арқылы.

5. «LIFT» режимін таңдаңыз.
6. «LEVEL» батырмасымен әсер ету қуатының қажетті деңгейін орнатыңыз. Ең төменгі деңгейден бастаған дұрыс.
7. Аппаратты қолыңыздың саусақтары құрылғының артқы жағындағы электродта орналасатындай етіп ұстаңыз.

8. Қалақшаның жалпақ жағын беттің массаж сызықтары бойымен жылжытыңыз (мұрыннан периферияға қарай).

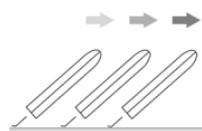

Қалақша жоғары қарайды. Жүзі ішке қарайды

9. Мақталы жастықшамен қалақшадан өнімнің қалдықтарын кетіріңіз.
10. Емшара аяқталғаннан кейін өнімнің қалдықтарын жылы, таза сумен шайып кетіріңіз.

## Емшара кезінде ықтимал сезімдер

Дірілге, сонымен қатар терінің шаншуына және микротоктармен ынталандыру есебінен



бет бұлшықеттерінің аздап тартылуына, сондай-ақ электродтар аймағындағы токтарды шамалы сезінуге жол беріледі. Сезінудің қарқындылығы терінің сезімталдығына және таңдалған қуат деңгейіне байланысты болады. Емшарадан кейін терінің аздап қызаруына жол беріледі.



## Аппаратты тазарту және қызмет көрсету

Әрбір емшараны бастамас бұрын және аяқтағаннан кейін антисептикалық ерітіндіге (спирттің 70% ерітіндісі, хлоргексидин, сутегінің асқын тотығы) малынған жұмсақ майлықтың көмегімен аппараттың металл қалақшасын антисептикалық өңдеуді жүргізу қажет.

Аспаптың корпусын бейтарап жуғыш құралға аздап ылғалданған жұмсақ майлықпен мезгіл-мезгіл сүртіңіз (бұл кезде аспап өшірілуі тиіс).

### ***Назар аударыңыз***

*Антисептикалық өнім аспаптың пластикалық корпусының ішіне енбеуі тиіс. Сұйықтықтың аздаған мөлшері бар майлықтарды қолданыңыз.*

## Тыйым салынады

- Аспапты сұйықтыққа батыруға.
- Аппликаторлар мен корпусы сүрту үшін агрессивті өнімдер мен еріткіштерді қолдануға.
- Қатты түкті немесе абразивті қабаты бар майлықтарды қолдануға.
- Аппаратты қатты механикалық әсерге ұшыратуға.



# Ықтимал ақаулар мен оларды жою тәсілдері

## Ақаулық

## Шешім

Бұйым қосылмайды.

Заряд жоқ. Құрылғыны қуаттаңыз

*Егер ақаулықты өз бетінше шешу мүмкін болмаса, бұйымды сатушыға немесе*

*8 800 755-56-29 телефоны бойынша импорттаушының жедел желісіне немесе e-mail:*

*garotdel@mail.ru жүгіну қажет*

Аспап жұмыс барысында қыздырылады.

Бұл ақаулық болып табылмайды, өйткені аспап жұмыс істеп тұрған кезде жылу бөлінісі пайда болады.

Аппаратты 20 минуттан артық қолданғаннан кейін, аппаратты салқындату үшін кем дегенде 30 минут үзіліс жасау керек.

Құрылғы зарядталғаннан кейін аспап қосылмайды.

Аккумулятор жеткілікті зарядталмаған. Аккумулятордың қызмет ету мерзімі аяқталды.

Емшара кезінде аспап өшеді.

Қауіпсіз пайдалану мақсатында аспапта барлық режімдерде 5 минуттан кейін автоматты түрде өшіру орнатылған.



## Техникалық сипаттамалары

Моделі	Diva
Ультрадыбыс жиілігі	30 кГц
Ультрадыбыстық тербелістердің шығыс қуаты	2,5 Вт дейін
Бейімдегіштің шығыс кернеуі	5 В
Бейімдегіштің кіріс кернеуі	220 В
Бейімдегіштің ток күші, А	1 А
Толық зарядтау уақыты	3 сағ
Аппараттың өлшемдері	158×58×28 мм
АКБ параметрлері	800 мАсағ / 3,7 В




# Жиынтықтамасы



УД-тазартуға арналған  
ReadySkin Diva аппараты



Силиконды  
қорғаныс қақпағы

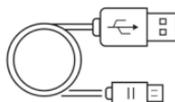


USB Type C кабелі



Аппаратқа  
арналған тұғырық




Пайдалану жөніндегі  
нұсқаулық

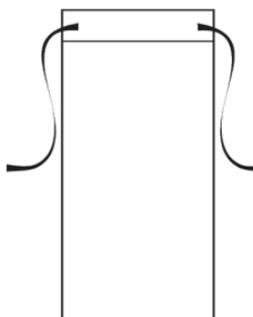

Қап



Майлық

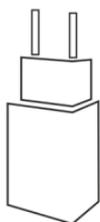

Зарядтау құрылғысы  
(бейімдегіш)

Жиынтығы мен сыртқы көрінісі  
өндірушімен өзгертілуі мүмкін

## Сақтау және сату қағидалары

Бұйым ауа температурасы +5 до +40° С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 65% дейінгі үй-жайда сақталуы тиіс.

Бұйымдар сақталатын бөлмелерде булары немесе газдары коррозия тудыруы мүмкін қышқылдардың, сілтілердің және басқа да химиялық белсенді заттардың буы болмауы тиіс.

Сату жеткізуге жасалған келісім шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

## Тасымалдау қағидалары

Қаптамадағы бұйымдар мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол және авиациялық (герметикталған бөліктерде) көлік түрлерімен оларды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін.

Темір жол арқылы тасымалдау жабық вагондарда, ал ашық вагондарда тасымалдау кезінде контейнерлерде жүзеге асырылуы тиіс.

Қапталған бұйымдары бар тасымалдау ыдысын көлік құралдарына орналастыру және бекіту, оның орнықты орналасуын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде орын ауыстыруға жол бермеуге тиіс.

## Сертификаттау және кепілдік

ReadySkin Diva TP TC 020 / 2011, 004 / 2011 және TP EAЭС 037 / 2016 талаптарына сәйкес келеді.

*ReadySkin Diva бұйымының кепілдік мерзімі тауарды алған күннен бастап 12 айды құрайды.*



ReadySkin

Кепілдік келесі шарттар сақталған жағдайда қолданылады:

- тұтынушыға бұйыммен жиынтықта берілетін құжаттамада баяндалған пайдалану қағидалары мен шарттары бұзылмаған;
- тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған механикалық зақымданулар, біліксіз жөндеу іздері жоқ, бұйымның құралымы немесе сызбасы өзгермеген;
- өрттен, найзағайдан немесе басқа табиғи құбылыстардан, қасақана немесе абайсыз әрекеттерден, абайсызда жұмыс істеуден, жоғары немесе төмен температураның әсерінен, тоттанудан, тотығудан, бұйымның ішіне бөгде нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т. б. түсуінен туындаған зақым немесе ақаулар жоқ.
- бұйымның сериялық нөмірі мен үлгісі бар тұтас таңбалаудың болуы.

Кепілдік міндеттемелері шығыс материалдарына (мысалы, аккумуляторлар), әрлеу және корпус бөлшектеріне, аксессуарларға және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектерге, сондай-ақ бұйымға қоса берілетін құжаттамаға қолданылмайды.

## Өнімді тиісті кәдеге жарату

Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға жатқызылмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге



жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, оны материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй тұтынушылары бұл аспапты экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алу үшін өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органына хабарласуы тиіс.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі тиіс. Бұл өнімді басқа коммерциялық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды.



## Өндіруші

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN)  
CO., LTD

## Дайындаушы- заводтың мекенжайы

Building 11, Hekeng Industrial Zone, Liulian community,  
Pingdi Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, 518117  
China

## Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорт- таушы)

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ, Мекенжайы: Ресей,  
195267, Санкт-Петербург қ., Просвещение  
даңғылы, №86-үй, 1-ғимарат, 12-Н кеңсе.

## Телефон

8 800 775-56-29 Ресей бойынша қоңырау шалу тегін

## Өндірілген күні

2024 ж. 1-тоқсаны.



ReadySkin



[readyskin.su](http://readyskin.su)

**EAC**